

MELAseal® Serie

In Folie versiegelt. Mit Qualität verpackt.

Die MELAG Balken- und
Durchlauf-Siegelgeräte:



Die MELAG Siegelgeräte

Die MELAG Siegelgeräte sichern vor allem eins:
Mehr Zeit für Ihre Patienten.

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Verlassen Sie sich auf innovative Lösungen für die Instrumenten-Aufbereitung Made in Germany. MELAG als starker Partner an Ihrer Seite bietet:



Erfahrung
Spezialisierung
seit 1951



Vertrauen
Über 100.000 zufriedene
MELAsea® Kunden



Qualität
Made in Germany



Innovation
180 spezialisierte
Ingenieure/-innen



Systemlösung
Instrumenten-Aufbereitung
aus einer Hand

Perfekt auf Ihren Praxisbedarf abgestimmt.

Die MELAG Siegelgeräte gewährleisten effiziente Verpackungsprozesse in Praxis und Klinik. Profitieren Sie von unserer Produktvielfalt und wählen Sie das Siegelgerät, das am besten zu Ihnen passt:



MELAsea® 300

Validierbares Durchlauf-Siegelgerät

- ★ **Der Boost für Ihren Workflow:** Durchlaufgeschwindigkeit von bis zu 15 m/min für Siegelprozesse ohne Unterbrechung
- ★ **Magisches Bedienkonzept:** Smart-Touch Display und integrierte Dokumentationsschnittstellen für maximale Benutzerfreundlichkeit und Rechtssicherheit
- ★ **Klein, aber unübersehbar:** MELAsea® 300 packt unfassbare Power in ein unglaublich schlankes und leichtes Design

MELAsea® 200

Validierbares Balken-Siegelgerät

- ✓ **Intuitive Bedienung:** MELAG 4-Tasten-Konzept und LCD-Display
- ✓ **Dokumentation:** Zwei USB-Schnittstellen zur Protokollierung und PC-Anbindung
- ✓ **Rechtssicherheit:** Übertrifft die Anforderungen der EN ISO 11607-2

MELAsea® 100+

Kompaktes Balken-Siegelgerät

- ✓ **Schnelligkeit:** Kurze Aufheiz- und Siegelzeiten
- ✓ **Wirtschaftlichkeit:** Wartungsfreiheit spart Kosten im Praxisbetrieb
- ✓ **Sicherheit:** Kontrolle der Siegelzeit und Siegeltemperatur

Kundenstimmen



„Die gesamte Instrumenten-Aufbereitung durch MELAG abzudecken, bedeutet für uns, mit dem Gefühl von höchster Sicherheit unseren Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten.“

Praxis Maryam Taleh & Team, Hamburg



„Die MELAG-Systemlösung bringt uns große Zeitersparnis und maximale Sicherheit für Patienten und Team.“

Praxis Frank Bachmann, Göttingen



„Mit MELAG haben wir einen starken und zuverlässigen Partner für höchste Hygienestandards und perfekten Schutz in unserer Praxis.“

Praxis GesichtsPunkt, Mainz

MELAsea® 300

Maximale Effizienz auf minimalem Raum.

Einfach magisch. Magisch einfach. MELAsea 300 definiert den Verpackungsprozess neu: Das kompakte MELAG Durchlaufsiegelgerät mit großem Smart-Touch Display passt nicht nur in jede Aufbereitungszeile, sondern auch zu jedem Instrumenten-Aufkommen: Denn mit Hilfe des automatischen Folieneinzugs verpacken Sie besonders viele Instrumente in kürzester Zeit – und das ohne Unterbrechungen.

Und so einfach geht's: Folien einlegen, fertig! Mit smarten Funktionen und einer überragenden Performance wird so der Verpackungsprozess magisch einfach – das spart Zeit und garantiert absolute Sicherheit. Denn alle wichtigen Siegel-Parameter und Routine-Prüfungen werden mit integrierten USB- und Netzwerkschnittstellen dokumentiert.

Bis zu 50 % Platzersparnis*

MELAsea® 300


Herkömmliche Durchlauf-Siegelgeräte

Abgestimmtes Zubehör

Das vielfältige Zubehör bietet maximale Flexibilität: Gestalten Sie mit Arbeitstisch, Rollenhalter und Dokumentationsmedium den Verpackungsprozess nach Ihren Vorstellungen. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über unsere individuellen Zubehör-Lösungen.



+ Arbeitstisch Standard und Comfort

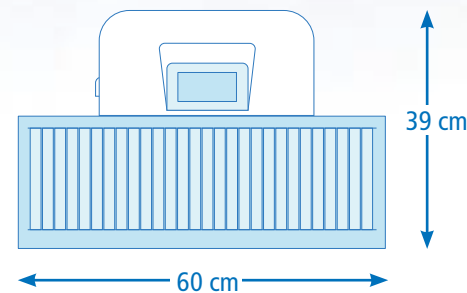

Die Produkt-Highlights:

- ✓ Geringe Aufheizzeit von 100 Sek. und hohe Durchlaufgeschwindigkeit von bis zu 15 m/min
- ✓ Intuitives Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display
- ✓ Integrierte USB- und Netzwerk-Schnittstellen
- ✓ Einrichtungsassistent zur kostengünstigen Selbstaufstellung durch das Praxis-Team
- ✓ Segmentierte Siegelnaht mit 12 mm Breite zum komfortablen Öffnen der Verpackungen
- ✓ Smarte Erinnerungsfunktion für Seal Check und Siegelnahtfestigkeitstest
- ✓ Power Save für Top-Energieeffizienz zwischen den Siegelvorgängen



Entdecken Sie die Produkt-Highlights vom MELAsea® 300 unter www.melag.com/produkte/siegelgeraete/melaseal300

MELAseal® 200






Einzigartig in Innovation und Funktion.

MELAseal® 200 ist das kompakteste validierbare Siegelgerät seiner Klasse. Das Balken-Siegelgerät überzeugt mit sehr kleiner Aufstellfläche und hervorragendem Bedienkonzept. Bereits nach 90 Sekunden Aufheizzeit ist das Siegelgerät einsatzbereit. Anschließend können Sie die Klarsicht-Sterilisierverpackung nacheinander ohne Unterbrechung versiegeln. Die Zeit pro Siegelung beträgt lediglich drei Sekunden.

Für maximale Sicherheit überwacht MELAseal® 200 die Prozessparameter Temperatur, Anpressdruck und Zeit der Siegelvorgänge. Siegelprotokolle werden schnell und rechtssicher über die USB-Schnittstellen auf ein Speichermedium übertragen.

Perfektion bis ins Detail

Mit den **vielfältigen Rollenhaltern** wird das Siegelgerät ideal auf Ihren Aufbereitungsraum abgestimmt. Sie wünschen noch mehr Komfort? Der Rollenhalter Deluxe setzt neue Maßstäbe: Durch das integrierte Handrad haben Sie volle Kontrolle über den Einzug der Folienrolle. Das zeitaufwendige Einfädeln und Nachschieben der Folie entfällt.

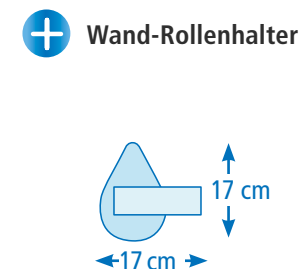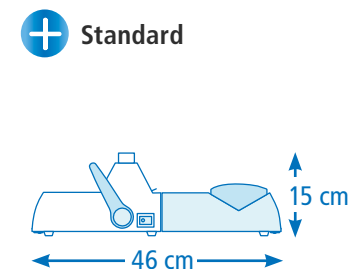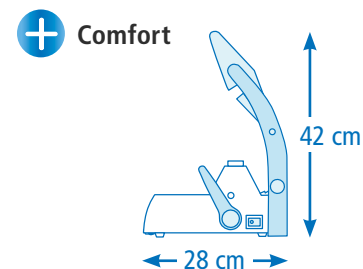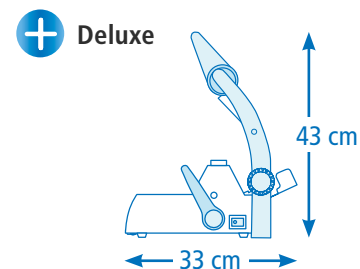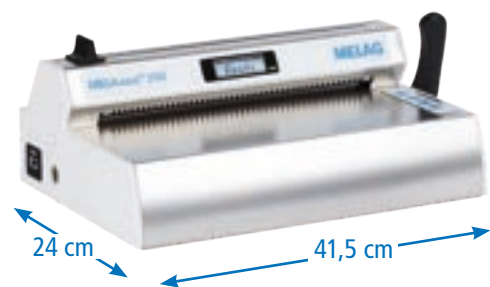

Die Produkt-Highlights:

- ✓ Zwei integrierte USB-Schnittstellen zur Protokollierung und PC-Anbindung (inkl. MELAG 8 GB USB-Stick)
- ✓ Intuitives MELAG 4-Tasten-Konzept mit Display und LED-Statusanzeige für **höchsten Bedienkomfort**
- ✓ **Platzsparend** durch kompaktes Gerätedesign mit integrierter Abschneide-Vorrichtung
- ✓ Eco- und Standby-Funktion für einen noch **sparsameren Betrieb**
- ✓ Seal check Funktion und integrierte Benutzerverwaltung gewährleisten **höchste Sicherheit**
- ✓ **Rechtssicherheit** durch Erfüllung der EN ISO 11607-2



So sparen Sie Kosten: Mit unseren Video-Tutorials führen Sie die Inbetriebnahme und Erst-Validierung eigenständig durch.

MELAseal® 100+

Einzigartig in Preis und Leistung.

Das bewährte Konzept des MELAseal® 100+ ist eine zuverlässige Lösung für Ihren Verpackungsprozess.






Das Siegelgerät vereint Leistungsfähigkeit mit Funktionalität. Nach einer Aufheizzeit von vier Minuten können Sie die Klarsicht-Sterilisierverpackungen ohne Pausen versiegeln. Die integrierte Elektronik überwacht Siegeltemperatur und Siegelzeit. Das akustische und optische Signal unterstützt Sie bei der anschließenden Beurteilung der Siegelnähte. Durch das stufenlos einstellbare Thermostat wird der flexible Einsatz von unterschiedlichen Verpackungen sichergestellt.

Mit einer Siegelnahtbreite von 10 mm geht MELAseal® 100+ deutlich über die von der Europa-Norm EN 868-5 geforderte Mindestbreite von 6 mm hinaus und gewährleistet somit höchste Sicherheit.



Vielseitige Rollenhalter

Ergonomisch geformte Rollenhalter unterstützen ein müheloses Nachführen der Klarsicht-Sterilisierverpackung. Mit der im Siegelgerät integrierten Abschnide-Vorrichtung werden die Folien-Verpackungen individuell auf Ihre Erfordernisse und auf die Größe der zu verpackenden Instrumente angepasst.

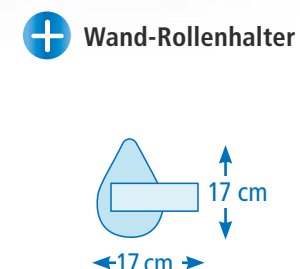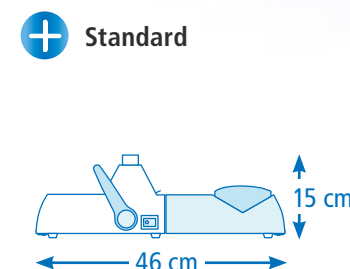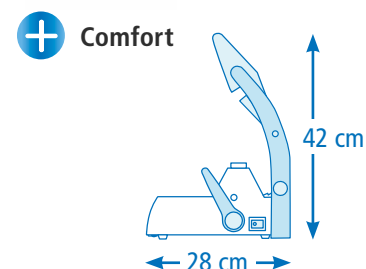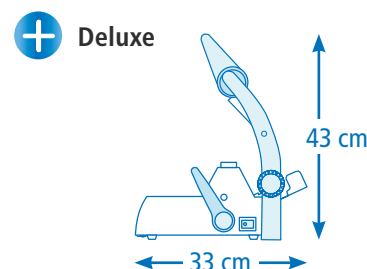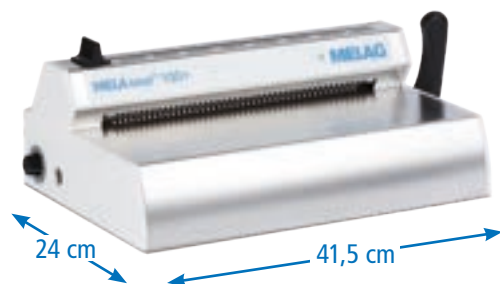

Die Produkt-Highlights:

- ✓ Kurze Aufheiz- und Siegelzeiten garantieren schnelle Siegelprozesse
- ✓ Kompakte Geräte-Abmessung benötigt wenig Platz auf der Arbeitszeile
- ✓ Akustische und optische Überwachungsfunktion der Siegelzeit und Siegeltemperatur
- ✓ Einfache Bedienung: Der Handgriff ist rechts oder links einsetzbar
- ✓ Wartungsfreiheit spart Kosten im Praxisbetrieb



Entdecken Sie die Produkt-Highlights im MELAseal® 100+ Produktvideo.

MELAfo[®]

Zusammenspiel auf höchstem Niveau.

MELAfo[®] ist perfekt auf alle MELAG Siegelgeräte abgestimmt: Die Klarsicht-Sterilisierverpackung wird mit der voreingestellten Temperatur von 180 Grad zuverlässig und schnell versiegelt.

MELAfo[®] erfüllt höchste Ansprüche an die Sterilgutlagerung. Die Kombination aus Folien- und Papierseite ist reißfest, knitterarm und besonders keimdicht. Der Behandlungsindikator auf der Folie zeigt zuverlässig, ob das verpackte Instrument bereits im Autoklav sterilisiert wurde.

Arzt- und Zahnarztpraxen schätzen die hervorragende Peelfähigkeit von MELAfo[®]. Die auf der Folie angezeigte Peel-Richtung garantiert ein bequemes und sauberes Öffnen ohne Freisetzung von Fasern oder Partikeln.



Zubehör

Rollenhalter für die MELAsea[®]-Serie.

- 

+ Rollenhalter Deluxe
setzt neue Maßstäbe in Ergonomie und Bedienung des MELAsea[®] 100+ und MELAsea[®] 200.
- 

+ Rollenhalter Comfort
bewahrt die Rollen platzsparend oberhalb des MELAsea[®] 100+ und MELAsea[®] 200 auf.
- 

+ Rollenhalter Standard
nimmt die Rollen hinter MELAsea[®] 100+ und MELAsea[®] 200 auf.
- 

+ Wand-Rollenhalter
mit großer Nutzbreite von 42 cm und integriertem Schneidemesser, zur Montage an der Wand oder mit Standfuß zur Benutzung auf der Arbeitsplatte.
- 

+ Arbeitstisch Standard
dient der Unterstützung im Verpackungsprozess und verbessert die Ergonomie des MELAsea[®] 300.
- 

+ Arbeitstisch Comfort
mit leichtlaufenden Rollen für den schnellen Transport von schweren Einzelinstrumenten und Containern.

MELAfo[®] Produkt-Highlights:

- ✓ Perfekt abgestimmt auf alle MELAG Siegelgeräte
- ✓ Rollen und Beutel in vielfältigen Größen
- ✓ Normkonform nach EN 868-5
- ✓ Sterilisationsindikator und Pfeile für die Peel-Richtung integriert
- ✓ Keimdicht, knitterarm und leicht zu öffnen



Erfahren Sie mehr über den Verpackungsprozess in unserem Video-Tutorial.

Vielfältig wie Ihr Bedarf: Die MELAfo[®] Artikel im Überblick.

Rollen	MELAfo [®] 502	MELAfo [®] 752	MELAfo [®] 1002	MELAfo [®] 1502	MELAfo [®] 2002	MELAfo [®] 2502
Breite x Länge	5 cm x 200 m	7,5 cm x 200 m	10 cm x 200 m	15 cm x 200 m	20 cm x 200 m	25 cm x 200 m
Artikelnr.	00502	00752	01002	01502	02002	02502
Beutel	MELAfo [®] 501	MELAfo [®] 751	MELAfo [®] 1001	Beutel mit Seitenfalte MELAfo [®] 2051		
Breite x Länge, Stückzahl	5 cm x 25 cm, 1000 Stk.	7,5 cm x 25 cm, 1000 Stk.	10 cm x 25 cm, 1000 Stk.	20 cm x 50 cm, 100 Stk.		
Artikelnr.	00501	00751	01001	02051		

Dokumentation der Siegelprozesse.

- 

+ MELAtrace[®]
zur professionellen Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung des gesamten Aufbereitungsprozesses. Kompatibel mit MELAsea[®] 200 und MELAsea[®] 300.
- 

+ USB Stick
ist speziell geprüft und abgestimmt auf MELAsea[®] 300 und MELAsea[®] 200 zur Dokumentation der Siegelprotokolle.
- 

+ Routine-Prüfungen
mit Seal Check, Ink Test und Siegelnaht-Festigkeitsprüfung sorgen für eine zuverlässige Kontrolle der Siegelnaht in Ihrer Praxis.

Routinemäßige Prüfungen eines Siegelgeräts

Maximale Sicherheit. Minimale Kosten.

Mit den MELAG Prüfverfahren erfolgt die geforderte Kontrolle von Siegelgeräten schnell und kostengünstig. Die abgestimmten Lösungen weisen präzise die Qualität und Reproduzierbarkeit der Siegelnähte nach. Erhalten Sie einen Überblick über die arbeitstäglich, monatlich und jährlich durchzuführenden Prüfungen:



Peel-Test




Führen Sie bitte **täglich** vor Arbeitsbeginn eine Probesiegelung durch. Die Siegelnäht muss gleichmäßig und vollständig ausgeprägt sein.

Die Siegelnäht wird durch den **Peel-Test** manuell geprüft. Sterilisieren Sie hierfür die versiegelte Verpackung, entnehmen Sie diese aus dem Autoklav und ziehen Sie die Siegelnähte langsam entlang der Peel-Richtung auseinander. Die Folie muss sich nahezu rückstandsfrei von der Papierseite lösen.



MELAcontrol Seal Check

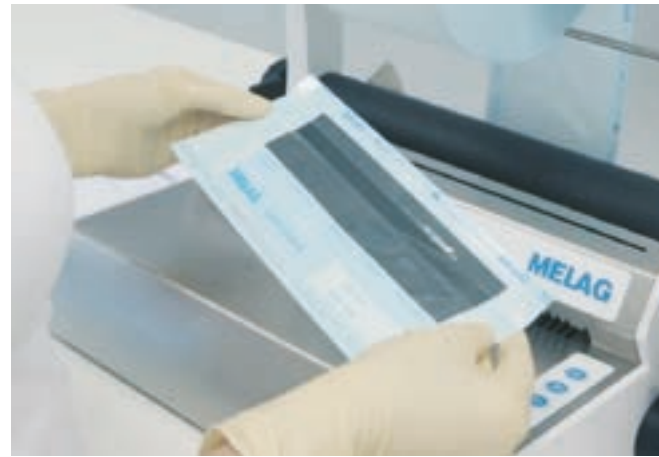

Der **täglich** durchzuführende **MELAcontrol Seal Check** verifiziert die Qualität der Siegelnäht nach DIN EN ISO 11607-2.

Legen Sie einen Teststreifen des **MELAcontrol Seal Checks** in die Folienverpackung. Durch die Siegelung auf dem Indikatorpapier wird die Kontrolle der Siegelnäht erleichtert. Der Seal Check ist erfolgreich, wenn die gesamte Siegelnäht eine gleichmäßige Verfärbung und scharfe Konturen aufweist. Ein fehlerhaftes Verschmelzen der Folienschicht oder ein unzureichender Anpressdruck werden schnell und einfach sichtbar.




MELAcontrol Ink Test



Der Tintentest **MELAcontrol Ink Test** ist ein zuverlässiges Prüfmittel zur **wöchentlichen** Kontrolle der Siegelnähte auf Dichtigkeit gemäß DIN EN ISO 11607-1 und ASTM F1929-12.

Die für den Test benötigte Tinte befindet sich in einem praktischen Einweg-Beutel. Der **MELAcontrol Ink Test** wird in einer Klarsicht-Sterilisierverpackung versiegelt. Danach wird die Tinte aus dem in der Verpackung befindlichen Beutel herausgedrückt. Mit der jetzt an den Siegelnähten befindlichen Tinte lassen sich an allen vier Seiten der Verpackung die Nähte präzise prüfen. Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen oder Kanäle in den Siegelnähten werden schnell sichtbar.

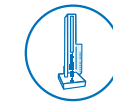

Siegelnähtfestigkeitstest



Als Routinekontrolle und zur Validierung von Verpackungsprozessen mit MELAG Siegelgeräten empfehlen Hygieneexperten die **jährliche** Überprüfung der Siegelnähte auf Zugfestigkeit.

Der **Siegelnähtfestigkeitstest** ist ein genormtes Prüfverfahren zur Leistungsbeurteilung Ihres MELAG Siegelgerätes, nach DIN EN 868-5, Anhang D. Der Test wird von MELAG für garantiert valide Ergebnisse mit einer hochpräzisen Spezial-Prüfmaschine durchgeführt.



Erfahren Sie mehr über die **routinemäßigen Prüfungen** eines Siegelgeräts im Video-Tutorial.



Erfahren Sie mehr über den **Siegelnähtfestigkeitstest** eines Siegelgeräts im Video-Tutorial.



Die MELAG Systemlösung

Für Ihre Sicherheit: Alles aus einer Hand.

Die MELAG Siegelgeräte sind ein wichtiger Bestandteil der RKI-konformen Instrumenten-Aufbereitung. Durch das perfekte Zusammenspiel mit den MELAG Autoklaven und Thermodesinfektoren erreichen Sie noch effizientere Arbeitsabläufe und höchsten Schutz für Patienten und Team.

Profitieren Sie von den Vorteilen der MELAG Systemlösung mit Produkten des führenden Herstellers für die Praxis-Hygiene:



Persönlich
Ein zentraler Ansprechpartner
bei Rückfragen



Effizient
Kostenoptimierung durch
Synchronisierung des Service



Prozessoptimiert
Workflow und Bedienung
aufeinander abgestimmt

Möchten Sie Ihren Hygiene-Workflow noch stärker optimieren? Dann steigern Sie die Effizienz und Qualität des Verpackungsprozesses in Ihrer Praxis mit MELAstore®. Die MELAG Waschrays und Sterilisiercontainer bieten durch Standardisierung eine sehr zeitsparende Verpackung von Instrumentensets und reduzieren gleichzeitig die Materialkosten sowie den Praxisabfall.



Prozess der Instrumenten- Aufbereitung:



✓ Reinigung und Desinfektion mit **MELAtherm® 10**



✓ Verpackung mit **MELAseal®** und **MELAstore®**



✓ Sterilisation mit **MELAG Autoklaven**



✓ Dokumentation und Freigabe mit **MELAtrace®**



✓ Kennzeichnung mit **MELAprint® 60**

Technische Daten

Zahlen und Fakten auf einen Blick.



	MELaseal® 300	MELaseal® 200	MELaseal® 100+
Gerätetyp	Durchlauf-Siegelgerät	Balken-Siegelgerät	Balken-Siegelgerät
Validierbarkeit	ja	ja	nein
Dokumentations-Schnittstelle	2x USB-Anschluss, 1x Ethernet	2x USB-Anschluss	nein
Geräteabmessungen (B x T x H)	36 x 16 x 17,5 cm	41,5 x 24 x 15 cm	41,5 x 24 x 15 cm
Gewicht	5,6 kg	5,4 kg	5,4 kg
Stromanschluss	230-240 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	650 Watt	300 Watt	300 Watt
Aufheizzeit	100 Sek.	90 Sek.	200 Sek.
Siegelzeit / Geschwindigkeit	5-15 m/min	ca. 3 Sek.	ca. 4 Sek.
Temperaturbereich	100 - 215 °C	100 - 210 °C	140 - 210 °C
Siegelnahtbreite	12 mm	10 mm	10 mm
Siegelnahtlänge	unbegrenzt	max. 275 mm	max. 275 mm
Integrierter Folienschneider	nein	ja	ja
Artikelnr.	ME10300	ME10120	ME10211

Systemlösungen, Innovation und Qualität

MELAG ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 1951 auf Produkte für die Praxishygiene konzentriert. Wir produzieren mit über 500 Mitarbeitern/-innen ausschließlich in Deutschland auf ca. 25.000 m² und sind Weltmarktführer im Bereich der Instrumenten-Aufbereitung.



Rev.4-225/0981-04.25-DE-ME



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation elektronisch in unserem Downloadcenter bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene