

Retraktionslösungen

3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste



Schnell und einfach –
eine ganz neue
Retraktionserfahrung

NEU!

Für Polyether und A-Silikon
Abformmaterialien sowie die
digitale Abformung!



3M ESPE

Retraktion leicht gemacht - dank der neuen Retraktionspaste aus der Kapsel



3M™ ESPE™ ist seit über 45 Jahren im Bereich der Abformung richtungsweisend. Ob nun mit der Erfindung von Impregum™ Polyether Abformmaterial oder der neuesten digitalen "3D in Motion" - Technologie - auf 3M ESPE als kompetenten Partner können Sie sich verlassen.

Die innovative Retraktionspaste setzt jetzt einen weiteren Meilenstein: die einfache und effektive gingivale Retraktion. Aufgrund der feinen Kapselspitze kann die adstringierende Retraktionspaste einfach genau dort appliziert werden, wo sie hingehört – direkt tief in den Sulkus.

Indikationen

3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste ist zur vorübergehenden Retraktion der marginalen Gingiva und der Trockenlegung des Sulkus bei gesundem Parodont bestimmt. Zum Beispiel bei der:

- Abformung mit Abformmaterial oder der digitalen Abformung
- Situationsabformung
- Erstellung von Klasse II und V Füllungen

Die adstringierende Retraktionspaste darf nicht bei Patienten mit erkranktem Parodont, offenen Furkationen bzw. freiliegendem Knochen angewendet werden.



Produkteigenschaften und Vorteile

Allgemeine Vorteile:

- Ermöglicht einen sauberen und trockenen Sulkus sowie lang anhaltende Hämostase
- Der Sulkus wird effektiv geöffnet

Im Vergleich zu Fäden:

- Einfacher und zeitsparender Retraktionsprozess: bis zu 50% schneller
- Geringeres Blutungsrisiko nach der Entfernung
- Gewebeschonend und somit angenehmer für den Patienten

Im Vergleich zu Wettbewerbspasten:

- Einfachere Anwendung im Sulkus und besserer interproximaler Zugang durch die feine Kapselspitze
- Hygienischere Applikation durch die Verwendung von Einwegkapseln
- Anwendung mit handelsüblichen Composite-Dispensern



In-Vivo-Applikation von 3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste.

Wesentliche Ergebnisse von Feldstudien

In den Jahren 2010 und 2011 haben 227 Zahnärzte weltweit die Retraktionspaste getestet und beurteilt.* 3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste erfüllt die Bedürfnisse der Zahnärzte im Hinblick auf die relevanten Attribute:

- 86%** der Zahnärzte waren generell mit dem Produkt zufrieden oder sehr zufrieden
- 74%** der Zahnärzte waren mit der Gingivaretraktion/Sulkusöffnung zufrieden oder sehr zufrieden
- 93%** der Zahnärzte waren mit der Hämostase zufrieden oder sehr zufrieden
- 84%** der Zahnärzte würden 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste ihren Kollegen empfehlen

„An dem neuen Retraktionsprodukt von 3M ESPE haben mir am besten die einfache Anwendung, das Unit-Dose-System, das Applikationssystem und die Effizienz gefallen.“

Dr. Nicola, Italien



Kein spezieller Dispenser erforderlich:
3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste kann mit handelsüblichen Composite-Dispensern appliziert werden.

Auch für die digitale Abformung optimal geeignet

3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste wurde auch für die speziellen Bedürfnisse der digitalen Abformung entwickelt. In einer Studie mit Anwendern des digitalen Abformungssystems Lava™ C.O.S. in Westeuropa (n=13), wurde die Eignung von 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste für die Retraction vor der digitalen Abformung nachgewiesen.*

- 92%** gaben an, dass 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste ein sehr geeignetes Produkt für die Gingivaretraktion ist
- 100%** gaben an, dass 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste sehr gute hämostatische Eigenschaften hat
- 85%** gaben an, dass 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste gut in den Sulkus eingebracht werden kann
- 77%** gaben an, dass 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste den Retraktionsprozess effizienter macht
- 92%** würden 3M ESPE Adstringierende Retraktionspaste ihren Kollegen empfehlen

*Daten auf Anfrage bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite

“Einfaches und effektives Präparat für die gingivale Retraction vor Abformungen oder Restaurationen. Besser als alle anderen Pastensysteme, die ich in der Vergangenheit ausprobiert habe.“

Dr. Anderson, UK

Anwendung von 3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste

Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sauberen und trockenen Arbeitsbereich

1



Die Retraktionskapsel in einen handelsüblichen Composite-Dispenser einlegen und den festen Sitz der Retraktionskapsel prüfen. Ziehen Sie dafür die Kapsel im Dispenser etwas nach vorne bis sie einrastet.

Anschließend eine kleine Menge Paste ausbringen und verwerfen.

2



Die Kapselspitze in den Sulkus einführen. Die Retraction des Gewebes erfolgt mechanisch

3



Die Kapselspitze im Sulkus langsam und gleichmäßig um den Zahn herum führen, dabei die Paste ausdrücken und den Sulkus mit so viel Retraktionspaste füllen, dass ein Überschuss heraus quillt.

4



OPTIONAL: ANWENDUNG MIT FÄDEN

Sollte es die klinische Situation erfordern, kann die Retraktionspaste zur weiteren Sulkusöffnung mit einem Faden kombiniert werden.



5



Die adstringierende Retraktionspaste mindestens 2 Minuten im Sulkus einwirken lassen.

6



Die adstringierende Retraktionspaste nach der Einwirkzeit mit einem Luft-Wasser-Gemisch und mit Hilfe einer Absaugung vollständig entfernen.



Einzelheiten zur klinischen Anwendung werden in unserem Video dargestellt.



3M™ ESPE™


Adstringierende Retraktionspaste

**Leichte Einführung
in den Sulkus und
einfache Öffnung
des Sulkus**




Der Orientierungsring entspricht in Größe und Form dem einer Paro-Sonde. Er dient zur präziseren und einfacheren intraoralen Handhabung.

**Einfaches Ausbringen der
hochviskösen Paste**

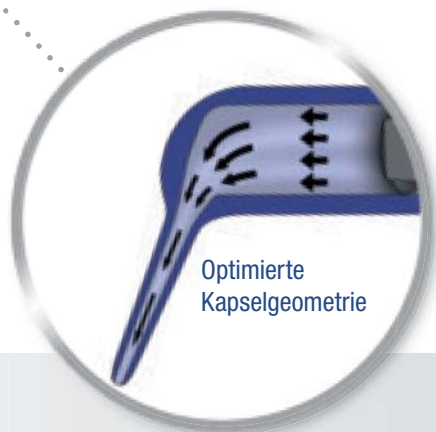

**Hygienische und
saubere Einwegkapsel**

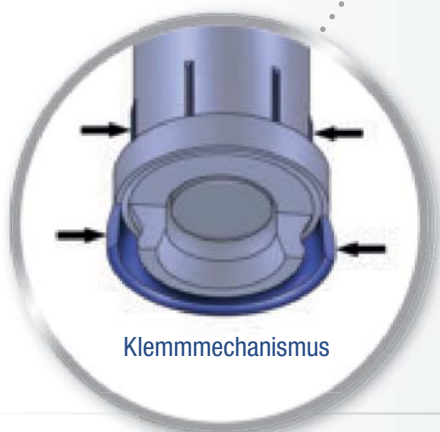

**Sichere Fixierung in handelsüblichen
Composite-Dispensern**

*“Die einfache Handhabung gefällt mir
an der Adstringierenden Retraktionspaste am meisten.”*

Dr. Niesel, Deutschland

Bestellinformation

Art. - Nr.	Produktinformation
56944	3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste Refill Pack – 25 Kapseln
56945	3M™ ESPE™ Adstringierende Retraktionspaste Value Pack – 100 Kapseln



www.3MESPE.de/Retraktion

3M ESPE

3M Deutschland GmbH
Standort Seefeld
3M ESPE · ESPE Platz
82229 Seefeld · Germany
Freecall: 0800 - 2753773
Freefax: 0800 - 3293773
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) AG
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Brunner Feldstraße 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

3M, ESPE, Impregum und Lava sind Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle anderen Marken gehören anderen Unternehmen.
© 3M 2012. Alle Rechte vorbehalten.
70210001254/01 (06.2012)