

NEU

Multilink® Hybrid Abutment

Der Befestigungsspezialist für Abutment Solutions

Natürliche
Ästhetik von
Grund auf




ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Multilink® Hybrid Abutment

Der Befestigungsspezialist für Abutment Solutions

Multilink® Hybrid Abutment ist ein selbsthärtendes Befestigungscomposite. Es eignet sich für die definitive, extraorale Verklebung von Keramikstrukturen auf Basen zur Herstellung von Hybrid-Abutments oder Hybrid-Abutment-Kronen.


Multilink® Hybrid Abutment stellt in Kombination mit dem Universal-Primer Monobond Plus einen ausgezeichneten und stabilen Verbund zwischen Keramikstrukturen aus Lithium-Disilikat (IPS e.max Abutment Solutions) oder Zirkoniumoxid und der Titanbasis her.

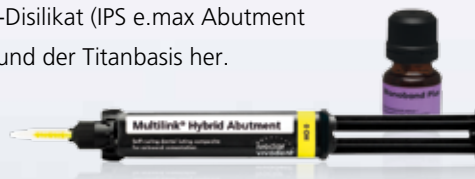

Neben der bisher verwendeten Opazitätsstufe MO 0 steht Multilink Hybrid Abutment in der hochopaken Farbe HO 0 zur Verfügung. Die Farbe sorgt selbst bei herausfordernden Fällen für eine optimale Ästhetik, wie zum Beispiel bei einer auf Titanbasis befestigten Hybrid-Abutment-Krone aus IPS e.max LT.

Dank der praktischen Automix-Spritze lässt sich Multilink Hybrid Abutment schnell auf die Keramikstruktur und die Titanbasis applizieren. Die Lagerung des Befestigungscomposites ist bei Raumtemperatur möglich.

Scherhaftung von Keramik auf Titan mit Multilink Hybrid Abutment nach 24 Stunden [in MPa]

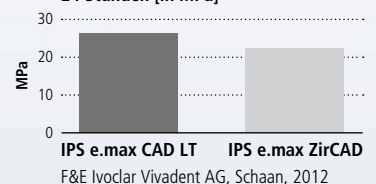

F&E Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012



Hybrid-Abutment-Krone verklebt mit Multilink Hybrid Abutment HO 0 (1) und einem Befestigungsmaterial normaler Opazität (2)



Applikation von Multilink Hybrid Abutment auf die Titanbasis

Lieferformen

IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit 638959AN

Multilink Hybrid Abutment-Spritze HO 0, 1 x 9 g
Mischkanülen 15 x
Virtual Extra Light Body Fast Set, 1 x 50 ml
Mischkanülen 48 x
Intra Oral Tips 100 x
Monobond Plus 1 x 5 g
Liquid Strip 1 x 2,5 g
div. Zubehör

Multilink Hybrid Abutment Refill

Automix-Spritze, 1 x 9 g (in der gewählten Farbe)
Mischkanülen 15 x
647182AN HO 0
647183AN MO 0

Monobond Plus Refill 626221AN

Flasche, 1 x 5 g



Dies ist ein Produkt aus unserer Produktkategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus diesem Bereich sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
passion vision innovation