



KATALOG FÜR
**KIEFER-
ORTHOPÄDISCHE
PRODUKTE** NR. 2

Unser **M+W** Kundenservice – wir kümmern uns um Sie.

Ihr Kundenservice kontakt@mw dental.de

0 60 42 / 88 00 88

Mo., Di., Do. 7.30 – 17.30 Uhr
Mi. 7.30 – 17.00 Uhr
Fr. 7.30 – 16.00 Uhr

Wir rufen Sie auch gerne zurück.



Michl
unser neuestes Teammitglied



Silke Schlögel
Leiterin Vertriebsinnendienst



Larissa Appel



Simone Behrens



Anja Bindernagel



Nathalie Brown



Laura Crapanzano



Dominique Haala



Sandra Heising



Susanne Heusohn



Mona Handy



Michaela Rullmann-Kehm



Anja Müller-Eschenbrenner



Katharina Rech



Verena Reich



Mona Schreiner



Anne Weinthäter

**Einen Artikel
nicht gefunden?
Wir helfen
Ihnen gerne.**



Susanne Eckardt
(Sonderbestellungen)

Unsere Kontaktdaten für Sie im Überblick:

Bestell- und
Service-Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**
Zahlungsfragen: **0 60 42 / 88 00 55**
Bestellfax: **0 60 42 / 88 00 80**
Freefax: **00 800 / 88 00 80 01**
(gültig für Deutschland und Österreich)
Internet: **www.mwdental.de**
E-Mail: **email@mwdental.de**

Paketanschrift: **M+W Dental
Müller & Weygandt GmbH
Reichardsweide 40
D-63654 Büdingen**
Briefanschrift: **M+W Dental
Müller & Weygandt GmbH
Postfach 1440
D-63652 Büdingen**

Für Zahlungsfragen **buchhaltung@mwdental.de**

0 60 42 / 88 00 55

Mo. - Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr



Sandra Layda



Silke Laubhold



Katja von Hof



Miriam Jakob

Ihre Produktberaterinnen für den Praxisbedarf **praxis@mwdental.de • kfo@mwdental.de**



Natalie Bauer
Zahnmedizinische
Fachangestellte



Ursula Naumann
Medizin-
Produktberaterin



Isabell Schäfer
Zahnmedizinische
Fachassistentin



Doreen Hösch
Medizin-
Produktberaterin

Ihre Produktberater/in für den Laborbedarf **labor@mwdental.de**



Bianka Horn
Zahntechnikerin



Boris Strach
Zahntechniker



Tim Zimmermann
Zahntechniker

Unsere attraktiven Rabatte – Ihr Sparvorteil.

Bei Bestellungen per Fax, Telefon oder Post

Staffelrabatt

ab €	250,-*	
ab €	500,-*	2%
ab €	1.000,-*	4%
ab €	1.500,-*	5%
ab €	2.000,-*	6%
ab €	3.000,-*	8%

Bei Online-Bestellungen über www.mwdental.de

Staffelrabatt + Onlinerabatt**

	2%	Gesamtrabatt
2% + 2%	= 4%	Gesamtrabatt
4% + 2%	= 6%	Gesamtrabatt
5% + 2%	= 7%	Gesamtrabatt
6% + 2%	= 8%	Gesamtrabatt
8% + 2%	= 10%	Gesamtrabatt

* Nettoauftragswert pro Bestellung per Fax, Telefon oder Post

** 2% Onlinerabatt ab € 250,- Nettoauftragswert über www.mwdental.de

Unabhängig von den Rabatten erhalten Sie bei monatlicher Sammelrechnung in Verbindung mit Erteilung eines Bankeinzuges **immer 1% Rabatt.**

Bis zu 11% Sofortrabatt!***

*** Maximaler Rabatt von 11% bei Bestellung über www.mwdental.de mit einem Nettobestellwert ab € 3.000,- zuzüglich 1% bei Bankeinzug.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

0 60 42 / 88 00 88 oder
www.mwdental.de/konditionen

Vereinfachen Sie Ihren Bestellprozess
noch heute mit der **M+W Bestell-App!**

NEU

heja+



Die Vorteile für Sie im Überblick:

- Blitzschnell M+W QR-Codes scannen und direkt per App nachbestellen
- Übersicht des Warenkorbes per Mail zusenden
- Exklusive Rabatte in der App
- Auch mit Eingabe der M+W Artikelnummer bestellen
- Gewohnt schnelle Lieferung. Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert!
- Aktuell verfügbar in Deutschland

Scannen und bestellen:

In der neuen M+W App finden Sie alle Produkte und Verbrauchsmaterialien – schnell, einfach und unkompliziert. Mehr Überblick. Weniger Papier.

Vereinfachen Sie Ihren Bestellprozess noch heute!



**Jetzt App
downloaden
und einfach
bestellen.**

Mehr Informationen zur Bestell-App unter:

www.mwdental.de/bestellapp 0 60 42 / 88 00 88

Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um Ihre kostenlosen QR-Codes von Artikeln oder auch Produktgruppen anzufordern:

WePass™ Clear 3B®
JASMIN SL BRACKETS (TELEDENTA)


- Passiv-System
- optimale Klappe für leichtes Öffnen & Schließen
- exzellentes Kanten-Design für verbesserten Tragekomfort
- unsichtbares, klares Erscheinungsbild
- spezielles Basis-Design ermöglicht bessere Retention & leichtes Debonding
- verstärktes Basis-Design reduziert Kleberückstände am Zahn

Fall à 20 Brackets (5-5, OK+UK):

Jasmin SL Brackets	Art.-Nr. 180 065	€ 168,00
--------------------	------------------	----------

Identifikationssystem

● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	5 4 3 2 1
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

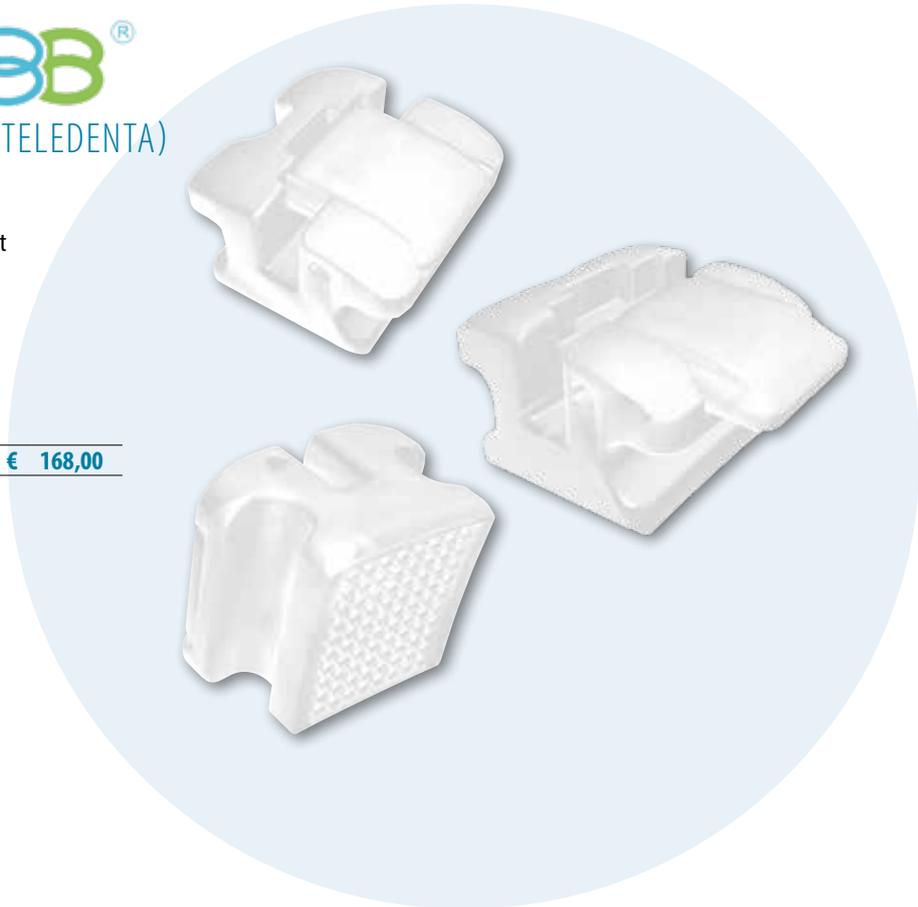

JASMIN BRACKETS (TELEDENTA)


- hohe Qualität
- aus Keramik
- ästhetische zahnfarbene Wirkung
- hohe Präzision

Fall à 20 Brackets (5-5, OK+UK) oder 6 Brackets (3-3, OK):

Roth 0.018, 3 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 045	€ 57,75
Roth 0.018, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 046	€ 57,75
Roth 0.018 (OK 3-3), 3 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 047	€ 17,35
Roth 0.022, 3 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 048	€ 57,75
Roth 0.022, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 049	€ 57,75
Roth 0.022 (OK 3-3), 3 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 050	€ 17,35
MBT 0.018, 3 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 051	€ 57,75
MBT 0.022, 3 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 052	€ 57,75

Identifikationssystem

● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	5 4 3 2 1
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

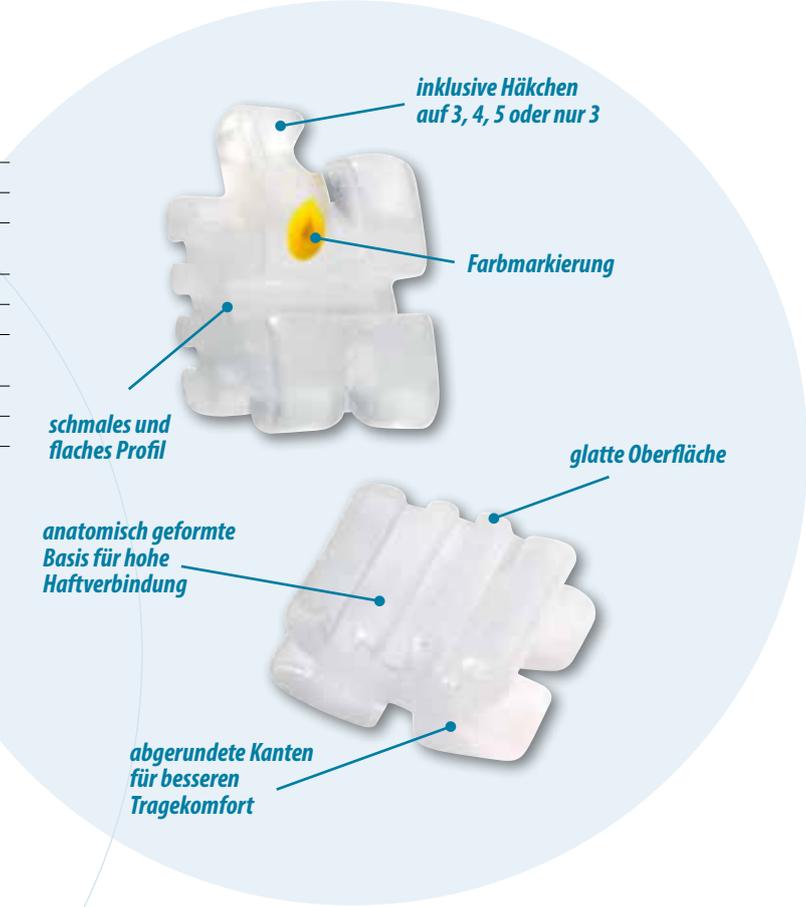

WePass™ 3B® SL BRACKETS (TELEDENTA)

- Passiv-System
- reduziert die Bogen-Frktion
- nach dem Öffnen bleibt die Klappe in Position, was den Bogenwechsel sehr vereinfacht
- glatte Oberfläche
- Farbmarkierung zur einfachen Identifizierung
- Mesh-Basis für hohe Haftverbindung
- inklusive Instrument

Fall à 28 Brackets (7-7, OK+UK):

Roth 0.022, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 055	€ 84,00
MBT 0.022, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 056	€ 84,00
MBT 0.018, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 280 307	€ 84,00

Identifikationssystem									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

GEBRAUCHSANWEISUNG



SCHRITT 1
mit der flachen Spitze
des Instruments
rechts/links drehen



SCHRITT 2
Clip ist geöffnet



SCHRITT 3
Bogen platzieren
und den Clip mit
dem Finger schließen



SCHRITT 4
Clip ist geschlossen



SILVERSTAR BRACKETS (TELEDENTA)



- hohe Qualität
- geringe Reibung
- glatte Oberfläche
- hohe Präzision

Auch einzeln
erhältlich!

Fall à 20 Brackets (5-5, OK+UK):

Roth 0.018, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 000	€ 12,59
Roth 0.022, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 001	€ 12,59
MBT 0.018, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 002	€ 12,59
MBT 0.022, 345 mit Häkchen	Art.-Nr. 180 003	€ 12,59

Identifikationssystem									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

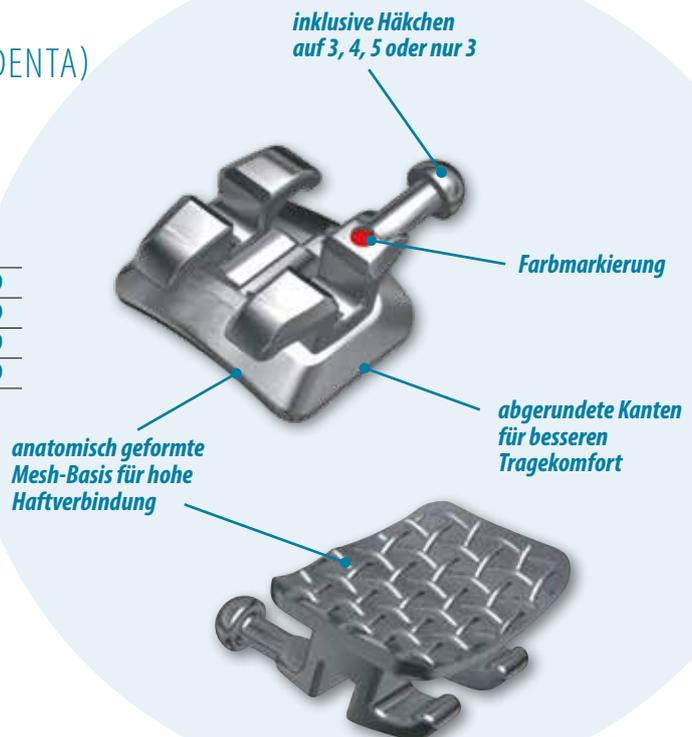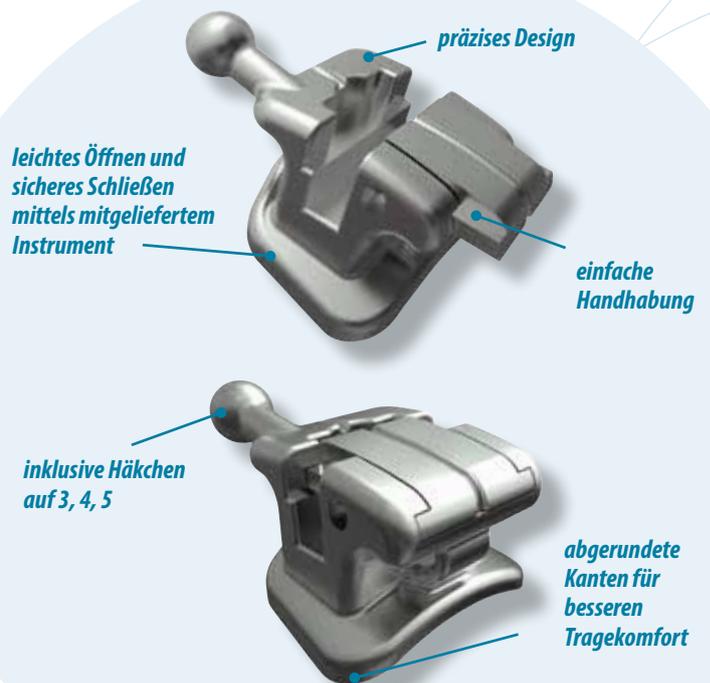

TRUMPET BRACKETS (TELEDENTA)

Preisgünstiges Mini Bracket, in Laserschweißtechnik angebrachte Netzbasis, um höchste Verbundfestigkeit zwischen Bracket und Basis zu gewährleisten. Bracket-Körper in MIM Technik hergestellt, Mittellinien-Markierung für optimale Platzierung am Zahn.


Fall à 20 Brackets (5-5, OK+UK):

MBT 0.018 Mesh base	Art.-Nr. 280 310	€ 11,99
MBT 0.022 Mesh base	Art.-Nr. 280 311	€ 11,99
Roth 0.018 Mesh base	Art.-Nr. 280 308	€ 11,99
Roth 0.022 Mesh base	Art.-Nr. 280 309	€ 11,99

Identifikationssystem

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Trumpet Brackets sind verfügbar als STL File für Digitale Bracketplatzierung.

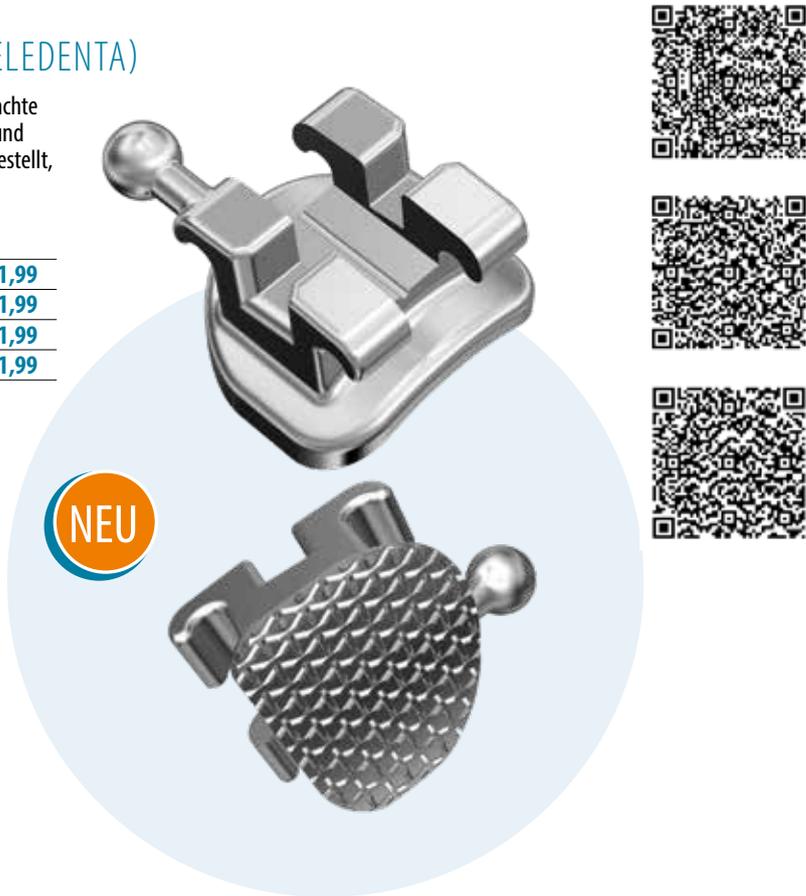

TRUMPET MONOBLOCKS BRACKETS (TELEDENTA)


Minibracket – bietet mit seinem flachen Profil und glattem Design besseren Patientenkomfort. Ein-Stück-Konstruktion in MIM Technik hergestellt. Mittellinien-Markierung für optimale Platzierung am Zahn, Farbmarkierung zur eindeutigen Identifikation an den Flügeln. Mechanische Retentionen garantieren eine optimale Haftverbindung.

Fall à 20 Brackets (5-5, OK+UK):

MBT 22	Art.-Nr. 280 546	€ 16,99
(Prava) MBT 18	Art.-Nr. 280 525	€ 16,99
(Prava) R 18	Art.-Nr. 280 483	€ 16,99
(Prava) R 22	Art.-Nr. 280 504	€ 16,99

Identifikationssystem

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

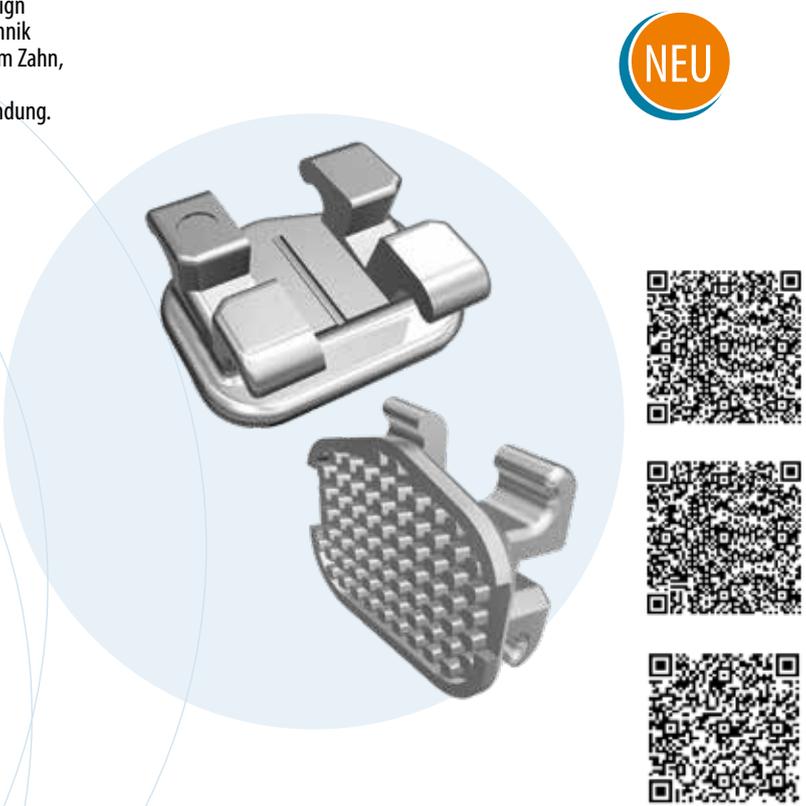

MOLAR TUBES (TELEDENTA)

- glatte, abgerundete Oberfläche trichterförmige Öffnung zum einfachen Einsetzen der Bögen
- permanente Markierung
- mesio-distale Setzhilfe
- gute Rotationskontrolle

0.018	0.022	Zahn	Torque	Ang.
Roth, 1 Molar				
180 010	180 018	16	-14	10
180 012	180 020	26	-14	10
180 014	180 022	36	-30	4
180 016	180 024	46	-30	4
Roth, 2 Molar				
180 011	180 019	17	-14	10
180 013	180 021	27	-14	10
180 015	180 023	37	-30	4
180 017	180 025	47	-30	4
MBT, 1 Molar				
180 026	180 034	16	-14	10
180 028	180 036	26	-14	10
180 030	180 038	36	-20	0
180 032	180 040	46	-20	0
MBT, 2 Molar				
180 027	180 035	17	-14	10
180 029	180 037	27	-14	10
180 031	180 039	37	-10	0
180 033	180 041	47	-10	0

Packung à 10 Stück € 20,90

TOP
SELLER



KNÖPFCHEN (TELEDENTA)

- runde Basis

Packung à 10 Stück:

Lingualknöpfchen	Art.-Nr. 180 075	€ 9,89
Lingual-Doppelhäkchen	Art.-Nr. 180 076	€ 9,89
Lingualknöpfchen mit Schlaufe	Art.-Nr. 180 080	€ 16,70



Lingualknöpfchen



Lingual-Doppelhäkchen



Lingualknöpfchen mit Schlaufe




KNÖPFCHEN MIT ÖSE (TELEDENTA)

- sehr gute Mesh-Basis für hohe Klebekraft
- super Qualität

Packung à 10 Stück:

Knöpfchen mit Öse	Art.-Nr. 180 079	€ 16,70
-------------------	------------------	---------

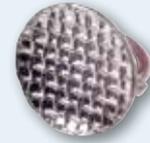

KERAMIK-KNÖPFCHEN (TELEDENTA)

- sehr gute Mesh-Basis für hohe Klebekraft
- super Qualität

Packung à 10 Stück:

Keramik-Knöpfchen	Art.-Nr. 180 081	€ 27,20
-------------------	------------------	---------



MULTIKNÖPFCHEN MIT RÖHRCHEN (TELEDENTA)

- runde oder vierkant Basis (für Bögen von 0.012 - 0.018)
- aus Kunststoff

Packung à 10 Stück:

runde Basis	Art.-Nr. 180 082	€ 16,70
vierkant Basis	Art.-Nr. 180 083	€ 16,70



KNÖPFCHEN MIT KETTE (TELEDENTA)

- runde Basis (silber- oder goldfarben)

Packung à 2 Stück:

silberfarben, runde Basis	Art.-Nr. 180 084	€ 10,40
feingliedrig, silberfarben	Art.-Nr. 180 085	€ 10,40
goldfarben, runde Basis	Art.-Nr. 180 086	€ 10,40
feingliedrig, goldfarben	Art.-Nr. 180 087	€ 10,40




BÄNDER-SETS (TELEDENTA)



- 3-Fach Tube für 1. Molaren OK (konvertierbar)
- 2-Fach Tube für 1. Molaren UK (konvertierbar)
- 1-Fach Tube für 2. Molaren
- abgerundete Kanten für maximalen Patientenkomfort
- idealer Härtegrad für einfache Formung
- anatomische Form und sehr gute Passgenauigkeit
- permanente Lasermarkierung für die Größenidentifikation

Auch einzeln erhältlich!

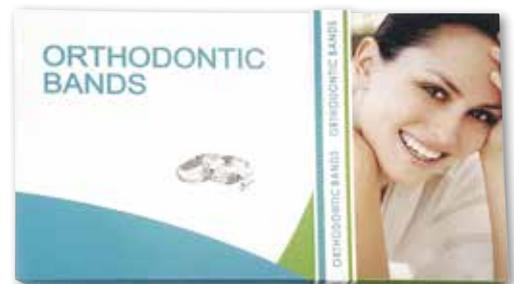

Bändervergleichstabelle bzw. Inhalt der einzelnen Sets finden Sie auf den Seiten 50-51.



Roth 0.022	Einsteiger-Set 1 (40 Bänder)	Einsteiger-Set 2 (75 Bänder)	Profi-Set 2 (150 Bänder)
UR/16	180 420	180 421	180 422
UR/17	180 444	180 445	180 446
UL/26	180 468	180 469	180 470
UL/27	180 492	180 493	180 494
LL/36	180 516	180 517	180 518
LL/37	180 540	180 541	180 542
LR/46	180 564	180 565	180 566
LR/47	180 588	180 589	180 590
je Set	€ 109,75	€ 195,85	€ 373,30



Roth 0.018	Einsteiger-Set 1 (40 Bänder)	Einsteiger-Set 2 (75 Bänder)	Profi-Set 2 (150 Bänder)
UR/16	180 612	180 613	180 614
UR/17	180 636	180 637	180 638
UL/26	180 660	180 661	180 662
UL/27	180 684	180 685	180 686
LL/36	180 708	180 709	180 710
LL/37	180 732	180 733	180 734
LR/46	180 756	180 757	180 758
LR/47	180 780	180 781	180 782
je Set	€ 109,75	€ 195,85	€ 373,30




MBT 0.022	Einsteiger-Set 1 (40 Bänder)	Einsteiger-Set 2 (75 Bänder)	Profi-Set 2 (150 Bänder)
UR/16	180 804	180 805	180 806
UR/17	180 828	180 829	180 830
UL/26	180 852	180 853	180 854
UL/27	180 876	180 877	180 878
LL/36	180 900	180 901	180 902
LL/37	180 924	180 925	180 926
LR/46	180 948	180 949	180 950
LR/47	180 972	180 973	180 974
je Set	€ 109,75	€ 195,85	€ 373,30



MBT 0.018	Einsteiger-Set 1 (40 Bänder)	Einsteiger-Set 2 (75 Bänder)	Profi-Set 2 (150 Bänder)
UR/16	180 996	180 997	180 998
UR/17	280 020	280 021	280 022
UL/26	280 044	280 045	280 046
UL/27	280 068	280 069	280 070
LL/36	280 092	280 093	280 094
LL/37	280 116	280 117	280 118
LR/46	280 140	280 141	280 142
LR/47	280 164	280 165	280 166
je Set	€ 109,75	€ 195,85	€ 373,30

NITI BÖGEN (TELEDENTA) EURO-FORM

- hohe Qualität
- Nickel-Titan Legierung
- Lasermarkierung zur einfachen Identifikation
- sterilisierbar (Autoclav)

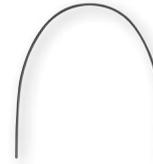


Art.-Nr.	rund
180 130	UK 0.012
180 131	OK 0.012
180 132	UK 0.014
180 133	OK 0.014
180 134	UK 0.016
180 135	OK 0.016
180 136	UK 0.018
180 137	OK 0.018
180 138	UK 0.020
180 139	OK 0.020
Packung à 10 Stück	€ 3,10

Art.-Nr.	vierkant
180 140	UK 0.016 x 0.016
180 141	OK 0.016 x 0.016
180 142	UK 0.016 x 0.022
180 143	OK 0.016 x 0.022
180 144	UK 0.017 x 0.025
180 145	OK 0.017 x 0.025
180 146	UK 0.018 x 0.025
180 147	OK 0.018 x 0.025
180 148	UK 0.019 x 0.025
180 149	OK 0.019 x 0.025
180 150	UK 0.021 x 0.025
180 151	OK 0.021 x 0.025
Packung à 10 Stück	€ 4,69



EDELSTAHL BÖGEN (TELEDENTA) EURO-FORM

- hohe Qualität
- Lasermarkierung zur einfachen Identifikation
- sterilisierbar (Autoclav)

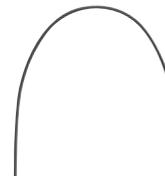


Art.-Nr.	rund
180 155	UK 0.012
180 156	OK 0.012
180 157	UK 0.014
180 158	OK 0.014
180 159	UK 0.016
180 160	OK 0.016
180 161	UK 0.018
180 162	OK 0.018
180 163	UK 0.020
180 164	OK 0.020
Packung à 10 Stück	€ 1,59

Art.-Nr.	vierkant
180 165	UK 0.016 x 0.016
180 166	OK 0.016 x 0.016
180 167	UK 0.016 x 0.022
180 168	OK 0.016 x 0.022
180 169	UK 0.017 x 0.022
180 170	OK 0.017 x 0.022
180 171	UK 0.017 x 0.025
180 172	OK 0.017 x 0.025
180 173	UK 0.018 x 0.022
180 174	OK 0.018 x 0.022
180 175	UK 0.018 x 0.025
180 176	OK 0.018 x 0.025
180 177	UK 0.019 x 0.025
180 178	OK 0.019 x 0.025
180 179	UK 0.021 x 0.025
180 180	OK 0.021 x 0.025
Packung à 10 Stück	€ 2,09



EDELSTAHL-STANGENDRAHT (TELEDENTA)

Hohe Geradlinigkeit und Festigkeit.

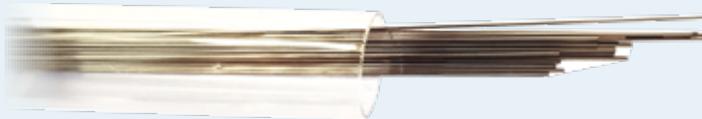


Art.-Nr.	rund
280 312	0.014
280 313	0.016
280 314	0.018
Packung à 25 Stück	€ 18,80

Art.-Nr.	vierkant
280 315	0.016 x 0.022
280 316	0.017 x 0.025
280 317	0.018 x 0.025
280 318	0.019 x 0.025
280 319	0.021 x 0.025
280 320	0.021 x 0.028
Packung à 10 Stück	€ 12,60

TMA / BETA-TITANIUM BÖGEN (TELEDENTA)

- hohe Qualität
- Titan-Molybdän Legierung
- Markierung zur einfachen Identifikation
- TMA Bögen lassen sich biegen wie Stahlbögen und haben eine Elastizität wie Nickel-Titan Bögen
- sterilisierbar (Autoclav)

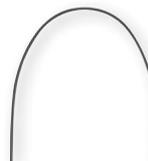

Art.-Nr.	rund
180 185	UK 0.016
180 186	OK 0.016
180 187	UK 0.018
180 188	OK 0.018
180 189	UK 0.020
180 190	OK 0.020
Packung à 10 Stück	€ 30,35

Art.-Nr.	vierkant
180 195	UK 0.016 x 0.016
180 196	OK 0.016 x 0.016
180 197	UK 0.016 x 0.022
180 198	OK 0.016 x 0.022
180 199	UK 0.017 x 0.025
180 200	OK 0.017 x 0.025
180 201	UK 0.019 x 0.025
180 202	OK 0.019 x 0.025
Packung à 10 Stück	€ 33,90



REVERSE CURVE NITI BÖGEN (TELEDENTA)

- hohe Qualität
- Nickel-Titan Legierung
- bei Bissöffnung und Bisschließung
- bei Nivellierung der Speéschen Kurve
- Markierung zur einfachen Identifikation
- sterilisierbar (Autoclav)




Art.-Nr.	rund
180 205	UK 0.016
180 206	OK 0.016
180 207	UK 0.018
180 208	OK 0.018
180 209	UK 0.020
180 210	OK 0.020
Packung à 10 Stück	€ 9,45

Art.-Nr.	vierkant
180 211	UK 0.016 x 0.016
180 212	OK 0.016 x 0.016
180 213	UK 0.016 x 0.022
180 214	OK 0.016 x 0.022
180 215	UK 0.017 x 0.025
180 216	OK 0.017 x 0.025
180 217	UK 0.019 x 0.025
180 218	OK 0.019 x 0.025
Packung à 10 Stück	€ 14,69

WEISSE NITI BÖGEN (TELEDENTA)

EURO-FORM

- hohe Qualität
- weiße Beschichtung

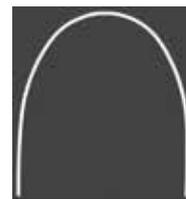


Art.-Nr.	rund
180 225	UK 0.012
180 226	OK 0.012
180 227	UK 0.014
180 228	OK 0.014
180 229	UK 0.016
180 230	OK 0.016
180 231	UK 0.018
180 232	OK 0.018
180 233	UK 0.020
180 234	OK 0.020
Packung à 1 Stück	€ 3,05

Art.-Nr.	vierkant
180 235	UK 0.016 x 0.016
180 236	OK 0.016 x 0.016
180 237	UK 0.016 x 0.022
180 238	OK 0.016 x 0.022
180 239	UK 0.017 x 0.025
180 240	OK 0.017 x 0.025
180 241	UK 0.019 x 0.025
180 242	OK 0.019 x 0.025
Packung à 1 Stück	€ 3,15

WEISSE EDELSTAHL BÖGEN (TELEDENTA)

EURO-FORM

- hohe Qualität
- weiße Beschichtung

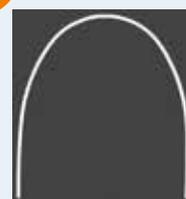

Art.-Nr.	rund
180 245	UK 0.012
180 246	OK 0.012
180 247	UK 0.014
180 248	OK 0.014
180 249	UK 0.016
180 250	OK 0.016
180 251	UK 0.018
180 252	OK 0.018
180 253	UK 0.020
180 254	OK 0.020
Packung à 1 Stück	€ 2,59

Art.-Nr.	vierkant
180 255	UK 0.016 x 0.016
180 256	OK 0.016 x 0.016
180 257	UK 0.016 x 0.022
180 258	OK 0.016 x 0.022
180 259	UK 0.017 x 0.025
180 260	OK 0.017 x 0.025
180 261	UK 0.019 x 0.025
180 262	OK 0.019 x 0.025
Packung à 1 Stück	€ 2,99

LIGATUREN (TELEDENTA)

Packung à 1.000 Stück:

Drahtligaturen 0.010", kurz	Art.-Nr. 180 265	€ 26,15
Drahtligaturen 0.010", lang	Art.-Nr. 180 266	€ 18,80

Packung à 100 Stück:

Kobayashi Ligaturen, kurz	Art.-Nr. 180 267	€ 20,90
Kobayashi Ligaturen, lang	Art.-Nr. 180 268	€ 14,60



NITI ZUGFEDERN, GESCHLOSSEN (TELEDENTA)

- zwei verschiedene Größen in zwei verschiedenen Ausführungen
- größte Zugkraft: 100 g
- innen Ø: 0,76 mm, außen Ø: 1,26 mm



Packung à 10 Stück:


1 kleine & 1 große Öse, Länge 6 mm	Art.-Nr. 180 090	€ 13,15
2 kleine Ösen, Länge 6 mm	Art.-Nr. 180 091	€ 13,15
1 kleine & 1 große Öse, Länge 9 mm	Art.-Nr. 180 092	€ 13,15
2 kleine Ösen, Länge 9 mm	Art.-Nr. 180 093	€ 13,15

NITI DRUCKFEDERN, OFFEN (TELEDENTA)

- zwei verschiedene Größen:
 - 0.010", größte Zugkraft: 100 g,
innen Ø: 0,76 mm, außen Ø: 1,26 mm
 - 0.012", größte Zugkraft: 150 g,
innen Ø: 0,76 mm, außen Ø: 1,38 mm
- Länge 17,80 cm

Packung à 2 Stück:

NiTi Druckfeder 0.010"	Art.-Nr. 180 101	€ 13,15
NiTi Druckfeder 0.012"	Art.-Nr. 180 102	€ 13,15

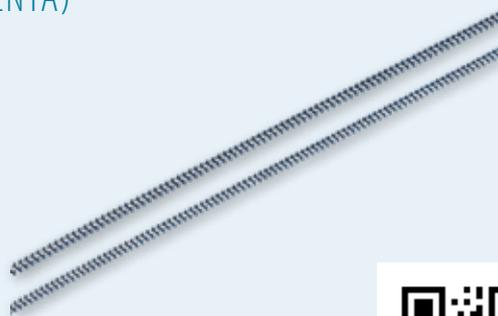


HUCKEPACKFEDER (TELEDENTA)

Aufklembares Druckfederelement, welches sicher und einfach eingesetzt wird. In der Nivellierungsphase ist häufig bereits ein Druck auf die engstehenden Zähne erforderlich. Trotz Brackets kann die Huckepackfeder in Sekunden ohne Entnahme des Behandlungsbogens montiert werden. Drücken Sie einfach die Haken zusammen und der Job ist erledigt. Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von Brackets im Engstandbereich. Indikationen für F1: Umgehung eines Frontzahnbrackets, F2: Umgehung von 2 Frontzahnbrackets, B1: Umgehung eines Seitenzahnbrackets, B2: Umgehung von 2 Seitenzahnbrackets, U3: Universal, Platzgewinn bei Frontzahnengstand, Lückenöffnung im Seitenzahnbereich, Ausrotation von Zähnen, Aufrichtung lingual gekippter UK-Eckzähne (CC), Mesialisieren von Seitenzähnen, CC: Aufrichtung lingual gekippter UK-Eckzähne (CC) = Eckzahn-Eckzahn-Distanz.



Art.-Nr.	Einzelbox	Packung à 5 Stück
280 331	B1, orange	€ 50,75
280 333	B2, blau	€ 54,95
280 335	CC, schwarz	€ 54,95
280 330	F1, transparent	€ 50,75
280 332	F2, rot	€ 50,75
280 334	U3, grün	€ 54,95
280 337	Sortiment (5 St.je Gr.)	€ 233,95
280 336	Starterset (1 St.je Gr.)	€ 60,45

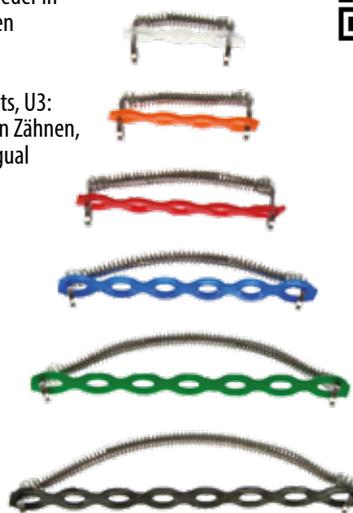

MINI STOPS (TELEDENTA)

- können direkt auf dem Bogen fixiert werden
- einfach zu bedienen

Packung à 10 Stück:

0.015"	Art.-Nr. 180 094	€	4,75
0.019"	Art.-Nr. 180 095	€	4,75



KLEMMHÄKCHEN MIT BALL-HOOK (TELEDENTA)

- können direkt auf dem Bogen fixiert werden
- einfach zu bedienen
- offen
- kurz: L 1,6 mm
- lang: L 2,0 mm



Packung à 10 Stück:

kurz	Art.-Nr. 180 096	€	10,40
lang	Art.-Nr. 180 097	€	10,40



STOPS (TELEDENTA)

- für Bögen bis 0.021 x 0.025

Packung à 10 Stück:

Stops	Art.-Nr. 180 098	€	4,10
-------	------------------	---	------



STOPS MIT HOOK (TELEDENTA)

- universal
- für Bögen bis 0.021 x 0.025
- lang gebogen

Packung à 10 Stück:

rechts	Art.-Nr. 180 099	€	8,30
links	Art.-Nr. 180 100	€	8,30



LINGUAL-RETAIER (TELEDENTA)

Universal, Länge 5.5 cm

Packung à 10 Stück:

1,2 mm	Art.-Nr. 280 322	€	3,15
2.0 mm	Art.-Nr. 280 323	€	3,15



ELASTISCHE KETTEN (TELEDENTA)

- dauerhafte Elastizität
- leichtes Einhängen
- 1,2 mm zwischen den Ringen (kurzer Steg)
- 3,8 mm Ringmittelpunktabstand
- 1,8 mm zwischen den Ringen (langer Steg)
- 4,0 mm Ringmittelpunktabstand
- 4,5 m pro Spule

latexfrei

Farbe	ohne Steg	kurzer Steg	langer Steg
transparent	180 316	180 319	180 323
silber	180 315	180 317	180 321
blau	–	180 320	180 324
pink	–	180 318	180 322
1 Stück	€ 10,39	€ 10,39	€ 10,39



ELASTISCHE LIGATUREN (TELEDENTA)

- viele verschiedene Farben
- dauerhafte Elastizität
- außen: Ø 2,8 mm, innen: Ø 1,3 mm
- 26 Ligaturen je Stick

latexfrei

40 Sticks (1.040 Stück) je Packung:

Mix	Art.-Nr. 180 325	€ 10,39
rot	Art.-Nr. 180 326	€ 10,39
neon-orange	Art.-Nr. 180 327	€ 10,39
silber	Art.-Nr. 180 328	€ 10,39
pink	Art.-Nr. 180 329	€ 10,39
neon-lila	Art.-Nr. 180 330	€ 10,39
lila	Art.-Nr. 180 331	€ 10,39
neon-grün	Art.-Nr. 180 332	€ 10,39
schwarz	Art.-Nr. 180 333	€ 10,39
metallic blau	Art.-Nr. 180 334	€ 10,39
blau	Art.-Nr. 180 335	€ 10,39
weiß	Art.-Nr. 180 336	€ 10,39
gelb	Art.-Nr. 180 337	€ 10,39
transparent	Art.-Nr. 180 338	€ 10,39
türkis	Art.-Nr. 180 339	€ 10,39
flieder	Art.-Nr. 180 340	€ 10,39
metallic bordeaux	Art.-Nr. 180 341	€ 10,39
metallic gras-grün	Art.-Nr. 180 342	€ 10,39
perlmutter	Art.-Nr. 180 343	€ 10,39
baby blau*	Art.-Nr. 280 327	€ 10,39
baby pink*	Art.-Nr. 280 325	€ 10,39
grün*	Art.-Nr. 280 326	€ 10,39
himbeer*	Art.-Nr. 280 324	€ 10,39
gold*	Art.-Nr. 280 351	€ 10,39



*NEUE
FARBEN



O-RINGE / INTRAORAL (TELEDENTA)

latexfrei

- dauerhafte Elastizität
- leichte Identifizierung

	leicht 2.5 OZ, 71 g	medium 3.5 OZ, 99 g	stark 4.5 OZ, 128 g	sehr stark 6.5 OZ, 184 g
Eichhörnchen 1/8", 3,2 mm	180 350	180 355	180 360	180 365
Hase 3/16", 4,6 mm	180 351	180 356	180 361	180 366
Fuchs 1/4", 6,4 mm	180 352	180 357	180 362	180 367
Pinguin 5/16", 8 mm	180 353	180 358	180 363	180 368
Affe 3/8", 9,5 mm	180 354	180 359	180 364	180 369
10 Tüten à 100 Stück je Tüte	€ 5,95	€ 5,95	5,95	€ 5,95



EINHÄNGEHILFE (TELEDENTA)

- leuchtet in der Dunkelheit

Packung à 100 Stück:

Einhängehilfen	Art.-Nr. 180 313	€ 13,65
----------------	------------------	---------



SCHUTZSCHLAUCH (TELEDENTA)

Optimale schnelle Hilfe bei empfindlicher Schleimhaut,
transparent. 1 Spule = 3 m.

Packung à 1 Stück:

0.018, transparent	Art.-Nr. 280 328	€ 7,25
0.027, transparent	Art.-Nr. 280 329	€ 7,25

NEU




SEPARIERGUMMIS (TELEDENTA)

- dauerhafte Elastizität
- 70 Ligaturen pro Stick

Packung à 15 Sticks (1.050 Stück):

Separiergummis	Art.-Nr. 180 370	€ 15,75
----------------	------------------	---------

latexfrei

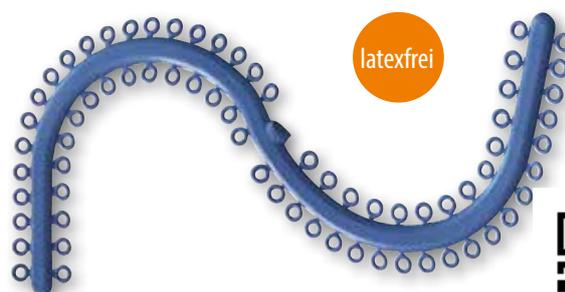

GESICHTSMASKE (TELEDENTA)



- für Klasse III Patienten
- ergonomisch geformt
- 3-fach einstellbar
- Stirnteil und Kinnkappe sind mit weichen Schaumstoffeinlagen gepolstert, daher hoher Tragekomfort



Inhalt:

- Gesichtsmask
- je 2 Ersatzpolster für Stirn und Kinn inklusive
- 2 Ersatzschrauben
- Innensechskantschlüssel zum Einstellen

Standard, blau	Art.-Nr. 180 110	€ 28,25
Standard, rot	Art.-Nr. 180 111	€ 28,25
klein, blau	Art.-Nr. 180 112	€ 28,25
klein, rot	Art.-Nr. 180 113	€ 28,25

KOPFKAPPE, BLAU (TELEDENTA)

- mit weichen Seitenpolstern

klein	Art.-Nr. 180 114	€ 9,92
medium	Art.-Nr. 180 115	€ 9,92
groß	Art.-Nr. 180 116	€ 9,92




Ihr rundum **Plus**

Ihre rundum Plus-Vorteile im Überblick unter:
www.mwdental.de/rundum-plus
www.mwdental.at/rundum-plus

MW Beratungsservice 	MW Exklusivmarken 	MW Sortiment 	MW Repair & Care 	MW Rabatt- und Bonussystem
MW Materialwirtschaft 	Abrufaufträge 	MW Hausmarken 	News & Wissen 	Sonderbestellungen
MW Workshops 	MW CAD/CAM Fertigung 	Dentale Abfallentsorgung 	MW Designstudio 	MW WebShop

STANDARD GESICHTSBOGEN (TELEDENTA)

Standard Gesichtsbogen Art.-Nr. 180 120 € 7,30

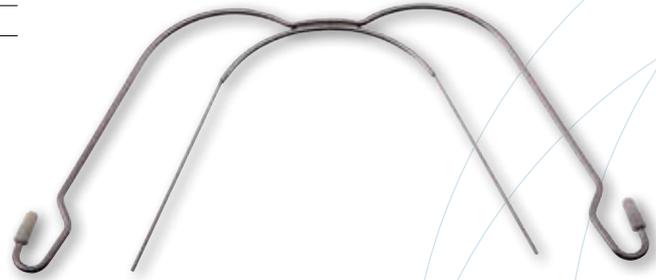

SICHERHEITSMODUL (TELEDENTA)

Packung à 2 Stück:

leichte Zugkraft (450 g)	Art.-Nr. 180 121	€ 3,89
mittlere Zugkraft (600 g)	Art.-Nr. 180 122	€ 3,89
starke Zugkraft (750 g)	Art.-Nr. 180 123	€ 3,89



NACKENBAND, GEPOLSTERT (TELEDENTA)

Nackenband, gepolstert Art.-Nr. 180 124 € 5,25



AQUASPLINT CLASSIC (TELEDENTA)

Made in Germany

... ist eine selbstjustierende individualisierbare CMD Aufbiss-Schiene, die Ihnen eine einfache Diagnose & effektive Therapie des Kiefergelenkes/ CMD ermöglicht.

- schnelle Schmerzlinderung/Muskelentspannung
- ohne Abdruck, Registrierung oder Einschleifen
- passgenau durch individuelle Unterfütterung
- ermöglicht dem Unterkiefer sich selbst zu balancieren
- kann während der KFO-Behandlung eingesetzt werden

Ausführlichere Informationen zu AquaSplint classic können Sie gern bei uns kostenlos anfordern.

Die durchschnittliche Haltbarkeit beträgt 4 Wochen bei einer Tragedauer von 8 h nachts und 2 h tagsüber. Durch starken Bruxismus bzw. scharfe Zahnkanten kann die Zeitspanne verkürzt sein.

Inhalt:

AquaSplint classic Schiene, Aufbewahrungsdose für Patienten, Bonding, Silikonunterfütterungsmaterial + Kanüle und Gebrauchsanweisung

1 Kit	Art.-Nr. 180 290	€ 46,00
3 Kits	Art.-Nr. 180 291	€ 127,05
5 Kits	Art.-Nr. 180 293	€ 207,35



Individualisierbare selbstjustierende Schiene



Kieferorthopädische Behandlung



AQUASPLINT MINI (TELEDENTA)

... ist eine mit Wasser gefüllte selbstjustierende Aufbiss-Schiene, die sofort ohne Vorbereitungen oder Laborarbeiten das CMD Syndrom und seine typischen Beschwerden wie Kiefergelenkschmerzen, Migräne, HWS Läsionen etc. therapieren kann.

AquaSplint mini ist um ca. 40 % dünner als die bisherige bekannte klassische AquaSplint Schiene, da Sattel und Unterfütterung entfallen. AquaSplint mini hat im Gegensatz zum AquaSplint classic einen integrierten Metallbogen, wodurch er individuell angepasst werden kann.

Er kann aufgrund seiner flachen Höhe auch bei CMD Patienten mit offenem Biss eingesetzt werden.

Inhalt:

AquaSplint mini Schiene, Aufbewahrungsdose und Gebrauchsanweisung

1 Kit	Art.-Nr. 180 297	€ 21,40
5 Kits	Art.-Nr. 180 298	€ 99,87
10 Kits	Art.-Nr. 180 299	€ 183,54




AQUASPLINT KONZEPT DVD (TELEDENTA)

Die DVD bietet eine optimale Ergänzung zum gleichnamigen Kurs, zur Patientenberatung und Schulung von Mitarbeitern und Physiotherapeuten.

Inhalt:

- schnelle Initialdiagnostik von CMD mit Hilfe der manuellen Funktionsdiagnostik
- vereinfachte Differentialdiagnostik von CMD mit Hilfe des AquaSplint classic
- Einsatz und Management von AquaSplint
- manuelle/krankengymnastische begleitende Therapie
- okklusale Rehabilitation nach der AquaSplint Therapie

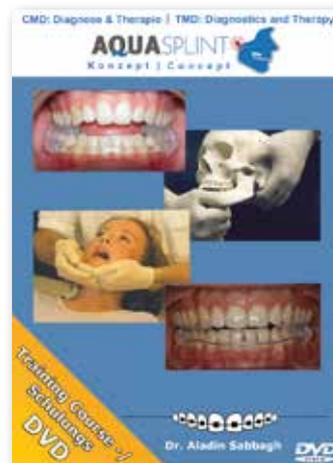

DVDs können nur aus technischen Gründen umgetauscht werden.

1 DVD	Art.-Nr. 180 296	€ 83,90
-------	-------------------------	----------------

AQUASPLINT DISPENSER (TELEDENTA)

Mit Hilfe des Dispensers lässt sich das Silikonunterfütterungsmaterial mit geringem Kraftaufwand auf den AquaSplint classic auftragen.

Ihre Vorteile gegenüber der einfachen Spritze:

- Zeitersparnis bei einfacher Handhabung
- konstante Druckwirkung
- wiederverwendbar



Dispenser	Art.-Nr. 180 294	€ 52,40
-----------	-------------------------	----------------

AUFBEWAHRUNGSDOSE (TELEDENTA)

• für die optimale Aufbewahrung und Transport von AquaSplint



Aufbewahrungsdose	Art.-Nr. 180 295	€ 0,95
-------------------	-------------------------	---------------

SILIKONUNTERFÜTTERUNGSSPRITZE (TELEDENTA)

Ersatzspritze & Kanüle	Art.-Nr. 180 292	€ 10,40
------------------------	-------------------------	----------------



DENTA BONDING (TELEDENTA)

- lichthärtender Kleber (Paste)
- optimal für Metall- und Keramikbrackets

Inhalt:

3 Spritzen à 3,5 g (10,5 g), 1 Primer Flasche 8 ml, 1 Spritze Ätzel 2,5 ml, 1 Gebrauchsanweisung, 40 Pinsel, 3 Spatel

1 Set	Art.-Nr. 180 385	€ 94,40
-------	-------------------------	----------------



PRIMER FLASCHE (TELEDENTA)

1 Flasche, 8 ml	Art.-Nr. 180 386	€ 29,30
2 Flaschen, je 8 ml	Art.-Nr. 180 389	€ 57,65



ÄTZGEL (TELEDENTA)

- optimal für Metall- und Keramikbrackets
- blaue Farbe
- auf Phosphorsäure-Basis (37% Phosphorsäure)
- 2 Kanülen

1 Spritze à 5 ml	Art.-Nr. 180 388	€ 7,89
------------------	-------------------------	---------------



KLEBER-SPRITZE (TELEDENTA)

- optimal für Metall- und Keramikbrackets
- lichthärtend
- Einkomponenten-Kleber
- Paste

1 Spritze, 3,5 g	Art.-Nr. 180 387	€ 23,00
3 Spritzen, je 3,5 g	Art.-Nr. 180 390	€ 62,90



BAND ZEMENT „BLUE“ SET (TELEDENTA)

- lichthärtender Band-Kleber (Paste)

1 Set	Art.-Nr. 180 391	€ 72,45
1 Spritze, 5 g	Art.-Nr. 180 392	€ 37,70



FUJI ORTHO (GC)

Chemischhärtender, kunststoffverstärkter orthodontischer Glas-Ionomer-Zement für die Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Keramik-Brackets. Die Vorteile: zeitsparend, da ohne Säure-Ätztechnik, gute Haftung bei relativer Feuchtigkeit, Fluoridabgabe, Entfernung ohne Verletzung des Schmelzes. Wird eine höhere Haftkraft gewünscht, kann zusätzlich Fuji Ortho Conditioner aufgetragen werden.

Fuji Ortho Nachfüllpackung: Pulver, 40 g	Art.-Nr. 398 113	€ 114,95
Fuji Ortho Nachfüllpackung: Flüssigkeit, 6,8 ml	Art.-Nr. 398 114	€ 46,30
Fuji Ortho Conditioner Flüssigkeit, 23,8 ml	Art.-Nr. 398 115	€ 33,80
Gel Conditioner, 3 x 1,2 ml Spritze, 25 Brush Tips	Art.-Nr. 798 144	€ 84,90



FUJI ORTHO LC (GC)

Lichthärtender, kunststoffverstärkter orthodontischer Glas-Ionomer-Zement für die Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Keramik-Brackets. Die Vorteile: zeitsparend, da ohne Säure-Ätztechnik, gute Haftung bei relativer Feuchtigkeit, Fluoridabgabe, Entfernung ohne Verletzung des Schmelzes. Wird eine höhere Haftkraft gewünscht, kann zusätzlich Fuji Ortho Conditioner aufgetragen werden. Als Handmischvariante oder im praktischen Paste Pak Automix System für ein optimales Mischergebnis und eine genaue Dosierung.

Fuji Ortho LC Einführungspackung: 15 g Pulver, 6,8 ml Flüssigkeit	Art.-Nr. 398 110	€ 99,80
Fuji Ortho LC Nachfüllpackung: Pulver, 40 g	Art.-Nr. 398 111	€ 116,60
Fuji Ortho LC Nachfüllpackung: Flüssigkeit, 6,8 ml	Art.-Nr. 398 112	€ 46,80
Fuji Ortho LC Paste Pak Automix Nachfüllpackung: 2 x 7,2 ml Paste Pak Spritze	Art.-Nr. 798 146	€ 295,00
Fuji Ortho LC Paste Pak Mischkanülen, 20 Stck.	Art.-Nr. 798 147	€ 51,20
Paste Pak Dispenser (Metall)	Art.-Nr. 398 162	€ 78,40
Fuji Ortho Conditioner Flüssigkeit, 23,8 ml	Art.-Nr. 398 115	€ 33,80
Gel Conditioner, 3 x 1,2 ml Spritze, 25 Brush Tips	Art.-Nr. 798 144	€ 84,90



FUJI ORTHO BAND/- LC PASTE PAK (GC)

Kunststoffverstärkter Glas-Ionomer-Zement zum Befestigen von Bändern, in einer chemisch-härtenden und einer lichthärtenden Variante (LC) erhältlich. Filmstärke 3 µm und hohe Fluoridabgabe, Farbe: blau. Dank der praktischen Darreichungsform in Paste Pak Automix System immer optimales Mischungsverhältnis und genaue Dosierung der Menge möglich.



Fuji Ortho Band Paste Pak Automix Nachfüllpack: 2 x 7,2 ml Spritze, 1 Mixing Pad	Art.-Nr. 798 148	€ 178,00
Fuji Ortho Band LC Paste Pak Automix Nachfüllpack: 2 x 7,2 ml Spritze, 1 Mixing Pad	Art.-Nr. 798 149	€ 178,00
Paste Pak Dispenser (Metall)	Art.-Nr. 398 162	€ 78,40
Fuji Ortho LC Paste Pak Mischkanülen, 20 Stck.	Art.-Nr. 798 147	€ 51,20
Gel Conditioner, 3 x 1,2 ml Spritze, 25 Brush Tips	Art.-Nr. 798 144	€ 84,90



HELIOSIT ORTHODONTIC (IVOCLAR VIVADENT)

Lichthärtendes Einkomponentenmaterial für orthodontische Befestigung.

Normalpackung: 3 Spritzen à 2,5 g	Art.-Nr. 091 164	€ 71,90
-----------------------------------	-------------------------	----------------



BRACKFIX (VOCO)

Der lichthärtende Bracket-Kleber hat den Vorteil, dass er unter UVA-Licht detektierbar wird - also aus Unsichtbarem Sichtbares wird. Grund dafür ist ein fluoreszierender Farbstoff. Überreste des Klebers können sofort erkennbar gemacht werden und der Zahnschmelz wird geschont. Die Viskosität des BrackFix sorgt dafür, dass Brackets präzise gesetzt werden können, nicht verrutschen und die Positionierung halten. BrackFix kann auf zwei unterschiedliche Weisen verarbeitet werden. Entweder mit einem Primer, bei dem vorher geätzt werden muss, oder mit dem Primer Self-Etch. Indiziert ist BrackFix für alle Metall- und Keramikbrackets.

Set 1205: 2 x 4 g Spritzen Adhäsiv, 6 ml Primer, Zubehör	Art.-Nr. 775 145	€ 267,00
Set Nr. 1206: 2 x 4 g Spritzen Adhäsiv, 40 SingleDose Primer SE, Zubehör	Art.-Nr. 175 185	€ 267,00
2 x 4 g Spritzen Adhäsiv	Art.-Nr. 775 146	€ 165,00
6 ml Flasche Primer	Art.-Nr. 775 147	€ 136,30
50 SingleDose Primer SE, Zubehör	Art.-Nr. 775 148	€ 127,00



ORTHOCEM/ ORTHOCEM UV (FGM)

Lichthärtender, selbstadhäsiver Resin Cement zur Befestigung von Brackets aus Metall, Polycarbonat, oder Keramik. Sehr gute Konsistenz, kein verrutschen der Brackets während des Klebevorgangs. Sehr gute Ästhetik durch hohe Transparenz. Die Ausführung Orthocem UV verfügt zusätzlich noch einen UV-Indikator der unter der Polylampe sichtbar wird. Dadurch wird das Behandlungsfeld beim Entfernen der Brackets sichtbar, ein übermäßiger Abtrag von Zahnschubstanz wird so vermieden.



4 g Spritze Orthocem, 2,5 ml Spritze Condac 37 %	Art.-Nr. 041 190	€ 33,80
4 g Spritze Orthocem UV, 2,5 ml Spritze Condac 37 %	Art.-Nr. 041 191	€ 33,80



MICRO-STIX APPLIKATOR (MICROBRUSH)

Biegbarer Applikatorkopf für das Anheben und Platzieren von Veneers, Kronen, Brackets und Inlays. Starke Haftung, die sich durch leichtes Drehen löst.



Micro-Stix Original blau, 64 Stck.	Art.-Nr. 132 585	€ 31,30
------------------------------------	-------------------------	---------



CHEEK RETRACTOR (DIRECTA)

Wangenspreizer aus Polycarbonat-Kunststoff. Problemlos zu platzieren. Autoklavierbar bis 121 °C.

Cheek Retractor für Erwachsene, 2 Stck.

klar	Art.-Nr. 398 640	€ 13,50
rot	Art.-Nr. 398 641	€ 13,50
blau	Art.-Nr. 398 642	€ 13,50

Cheek Retractor für Kinder, 2 Stck.

klar	Art.-Nr. 398 643	€ 13,50
rot	Art.-Nr. 398 644	€ 13,50
blau	Art.-Nr. 398 645	€ 13,50



WANGEN- & LIPPENEXPANDER (TELEDENTA)

- desinfizierbar

Packung à 3 Stück:

klein	Art.-Nr. 180 380	€ 9,35
mittel	Art.-Nr. 180 381	€ 9,35
groß	Art.-Nr. 180 382	€ 9,35



KLEMPPINZETTE FÜR BRACKETS (TELEDENTA)



Klemmpinzette	Art.-Nr. 180 412	€ 12,50
Klemmpinzette (Tweezer Crimping) mit Setzhilfe	Art.-Nr. 280 343	€ 12,50



KLEMPPINZETTE FÜR MOLAR TUBES (TELEDENTA)



Klemmpinzette	Art.-Nr. 180 413	€ 12,50
Klemmpinzette für Molar Tubes (Tweezer Keat Buccal Tubes), mit Setzhilfe	Art.-Nr. 280 344	€ 12,50



BANDSETZER (ASA)



Bandsetzer	Art.-Nr. 143 693	€ 27,30
------------	-------------------------	---------



ZANGENSTÄNDER (TELEDENTA) 3B[®] ORTHO

- modifiziertes Design
- Edelstahlstangen
- hohe Sterilisations-Temperaturen nicht empfohlen
- seitliche Plastik-Platten

Zangenständer	Art.-Nr. 180 395	€ 94,40
---------------	-------------------------	---------



ZANGENSTÄNDER

Praktischer Ständer aus rostfreiem Edelstahl zur Aufnahme von bis zu 10 Zangen. Mit rutschfesten Silikonfüßen.

Zangenständer	Art.-Nr. 300 999	€ 26,50
---------------	-------------------------	---------



ZANGEN (TELEDENTA)

- aus rostfreiem, gehärtetem Edelstahl
- hohe Qualität und Präzision
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis




Light-Wire Zange mit Schneidevorrichtung

- speziell geeignet zum Biegen feiner Bogenschlaufen und Federschleifen
- Bögen mit \varnothing von bis zu 0.030" (0,76 mm)

Art.-Nr. 180 397

€ 104,90



V-Stopp Zange

- zum Biegen eines V-Stopps entlang des Bogens um jegliche Bewegung zu verhindern

Art.-Nr. 180 398

€ 103,95



Bracket-Abnahmezange mit langem Griff

- zum einfachen Entfernen von Brackets im distalen Bereich durch abgewinkelte Funktionsenden
- abgewinkelt

Art.-Nr. 180 400

€ 94,40



Weingart Zange

- zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden

Art.-Nr. 180 401

€ 94,40



Ball-Hook Zange

- für Klemmhäkchen
- Zange zum Zusammendrücken von aufklemmbaren Häkchen („Hooks“)

Art.-Nr. 180 399

€ 94,40



Ball-Hook Zange mit langem Griff

- für Klemmhäkchen
- Zange zum Zusammendrücken von aufklemmbaren Häkchen („Hooks“)

Art.-Nr. 180 409

€ 94,40



Tweed-Bogenbiegezange

- allerneueste Technologie
- um Torque auf vierkant Bögen zu machen
- Dicke der Spitze: 0.050" (1,27 mm)
- sterilisierbar

Art.-Nr. 180 403

€ 94,40



Tweed-Schlaufenbiegezange

- allerneueste Technologie
- um kleine Schlaufen, distal Stops und Omega Schlaufen am Bogen zu machen
- sterilisierbar

Art.-Nr. 180 404

€ 94,40



Schlaufenbiegezange

- um kleine Schlaufen, distal Stops und Omega Schlaufen am Bogen zu machen
- Schlaufen \varnothing : 2.00 / 3.20 / 4.20 mm
- sterilisierbar

Art.-Nr. 180 405

€ 94,40



Nance Stufenbiegezange

- um vertikale Schlaufen von unterschiedlichen Höhen entlang des Bogens machen (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm)
- für Bögen bis zu einem \varnothing von: 0.022" (0,56 mm)
- sterilisierbar

Art.-Nr. 180 406

€ 94,40

AM. Edelingh

K KOHLER MEDIZINTECHNIK **ORTHODONTIE ZANGEN**

KFO Zangensortiment, speziell für die Anwendung bei der Aligner-Technik.
Die Instrumente stammen aus deutscher Präzisionsfertigung und überzeugen durch das stabile Griffdesign mit weicher Silikoneinlage für eine angenehme Haptik.
Die Zangen sind thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Sterilisierbar bei 134°C



EINKERBE ZANGE VERTIKAL

Zange für transparente Korrekturschienen. 14,5 cm

Art.-Nr. 181 940 1 Stck. € 89,00



EINKERBE ZANGE HORIZONTAL

Zange für transparente Korrekturschienen. 14 cm

Art.-Nr. 181 941 1 Stck. € 89,00



STANZ ZANGE „HOLE PUNCH“

Für halbrunde Ausstanzungen am gingivalen Rand, um Platz zu schaffen für geklebte Knöpfchen oder Brackets am Zahn, eine Befestigung von Knöpfchen am Aligner ist daher nicht nötig. 15 cm

Art.-Nr. 181 942 1 Stck. € 89,00



STANZ ZANGE „TEAR DROP“

Zur Einkerbung am gingivalen Rand des Aligners. Die Tiefe der Einkerbung kann angepasst werden und dient dazu, jegliche Art von Gummizügen zu befestigen. 14,5 cm

Art.-Nr. 181 943 1 Stck. € 89,00



TIGER MINI MOLD - AUFBISSFORM (TELEDENTA)

Die Tiger Mini Molds erfüllen viele Anforderungen zugleich. Mit 8,4 mm sind sie lang genug und können falls notwendig einfach gekürzt werden. Halten Sie den Orthohalter in der Okklusionsebene, so sind die Aufbisse immer auch parallel zur Okklusion. Die seitliche Hilfslinie gewährleistet, dass alle weiteren Aufbisse in der selben Höhe stehen.

1 Tiger Mini Molds	Art.-Nr. 180 372	€ 23,10
1 Orthohalter, 2 Tiger Mini Molds	Art.-Nr. 180 371	€ 112,35





ALGICIT DIMENSION ORTHO

Alginate speziell auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt. Höchste Elastizität und Reißfestigkeit für Abformungen über Multiband. Sehr gute Mundentnahme auch bei schwieriger Zahnstellung. Staubfreies und blasenfreies Anmischen, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil. Angenehmer Minzgeschmack. Abbindeart: schnellhärtend. Anmischzeit: 45 Sekunden. Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Minute, 45 Sekunden. Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sekunden. Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün.

Bulkpackung: 20 Beutel à 500 g	Art.-Nr. 400 280	€ 109,50
Beutel, 500 g	Art.-Nr. 400 281	€ 6,10
Messbesteck: je 1 Dosierbecher Alginate, Wasser	Art.-Nr. 400 273	€ 0,95
ALGICIT ADHÄSIV, 15 ml	Art.-Nr. 200 281	€ 7,40



SILGINAT (KETTENBACH)

Mittelfließendes additionsvernetzendes Situationsabformmaterial in Großkartusche, langzeitstabil, alginatähnliche Konsistenz und Reißfestigkeit. Speziell für die Abformung für Gegenkiefer, provisorische Kronen und Brücken, Schienenerstellung, kieferorthopädische Arbeiten, Fallstudienmodelle und andere Situationsabformungen. Sehr gutes Rückstellverhalten: optimale Ergänzung zur Präzisionsabformung. Ausgeprägte Fließfähigkeit: hohe Zeichnungsschärfe und Präzision. Hohe Dimensionsstabilität: Lagerung über Wochen; mehrfach ausgießbar. Niedrige Reißfestigkeit: leichte Mundentnahme, kein Lösen prothetischer Arbeiten. Hohe Thixotropie: kein Abfließen des Materials in den Rachenraum. Problemlos zu desinfizieren, sofort ausgießbar.

Intro Pack: 380 ml Großkartusche, 10 dynamische Mischer, 4 Multi Trays	Art.-Nr. 337 211	€ 52,90
Refill Pack: 2 x 380 ml Großkartusche	Art.-Nr. 337 212	€ 79,50
Dynamische Mischer f. Großkartusche, 45 Stck.	Art.-Nr. 337 204	€ 46,80



ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kantenfest.

20 kg	Art.-Nr. 093 927	€ 43,50
ab 3 Kartons	je Karton	€ 42,00
ab 6 Kartons	je Karton	€ 40,50



ARTIKULATIONS-GIPS NATUR

Dieser Artikulationsgips ist zum Einartikulieren von zahntechnischen Arbeitsmodellen und Fixieren von KFO-Modellen und Unterfütterungen geeignet. Ebenfalls lassen sich Vorwälle und Frässockel mit diesem Gips fertigen.

weiß, 20 kg	Art.-Nr. 093 928	€ 52,50
mint, 20 kg	Art.-Nr. 193 980	€ 52,50
blau, 20 kg	Art.-Nr. 193 981	€ 52,50
terrakotta, 20 kg	Art.-Nr. 193 982	€ 52,50
ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 51,50
ab 6 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 50,50





RIM-LOCK PERFORIERT

- aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff
- Rand- und Innenbördelung (geschweißt)
- für alle Sterilisationsarten geeignet

Satz mit 8 Löffeln: je 1 Löffel in allen Größen OK und UK	Art.-Nr. 022 650	€ 53,90
OK, Gr. S	Art.-Nr. 022 651	€ 9,10
OK, Gr. M	Art.-Nr. 022 652	€ 9,10
OK, Gr. L	Art.-Nr. 022 653	€ 9,10
OK, Gr. XL	Art.-Nr. 022 654	€ 9,10
UK, Gr. S	Art.-Nr. 022 655	€ 9,10
UK, Gr. M	Art.-Nr. 022 656	€ 9,10
UK, Gr. L	Art.-Nr. 022 657	€ 9,10
UK, Gr. XL	Art.-Nr. 022 658	€ 9,10
partiell links	Art.-Nr. 022 680	€ 9,10
partiell rechts	Art.-Nr. 022 681	€ 9,10



ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen. Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch	Art.-Nr. 022 971	€ 3,95
	ab 5 Stck.	€ 3,50
Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch	Art.-Nr. 022 972	€ 4,40
	ab 5 Stck.	€ 3,95



ANRÜHRSPATEL

Nr. 4 Metallspatel RS flexibel mit Holzgriff	Art.-Nr. 022 943	€ 7,50
--	-------------------------	---------------



STAHL-SEPARIERSTREIFEN (ADACO)

Stahl-Separierstreifen mit Edelmetall beschichtet, Körnung 50 µm (mittel), zur Formgebung und Abtragung in den approximalen Bereichen, sterilisierbar, Länge 135 mm.

4 mm breit, einseitig belegt, 12 Stck.	Art.-Nr. 098 893	€ 2,30
6 mm breit, einseitig belegt, 12 Stck.	Art.-Nr. 098 894	€ 2,80
4 mm breit, doppelseitig belegt, 12 Stck.	Art.-Nr. 098 864	€ 4,50
6 mm breit, doppelseitig belegt, 12 Stck.	Art.-Nr. 098 865	€ 5,60



DIAMANTSTREIFEN BREIT (EDENTA)

Die Streifen mit einseitiger Diamantierung gewähren eine gezielte und einfache Gestaltung der Kontaktpunkte und Interdentalflächen. 6 mm breit, 147 mm lang.

DS6: mittel, St. 0,13 mm, 45 µm, 5 Stck.	Art.-Nr. 307 835	€ 32,20
FDS6: fein, St. 0,10 mm, 30 µm, 5 Stck.	Art.-Nr. 307 836	€ 32,20
CDS6: superfein, St. 0,08 mm, 15 µm, 5 Stck.	Art.-Nr. 307 837	€ 32,20



FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyester material. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

grob (blau)/ medium (helllila), 50 Streifen	Art.-Nr. 100 885	€ 7,20
fein (rosa)/ x-fein (weiß), 50 Streifen	Art.-Nr. 100 886	€ 7,20
ab 3 Pckg. einer Ausführung	je Pckg.	€ 6,70



MINIATUR ZAHNREINIGUNGSBÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück. Zur einfachen Unterscheidung in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Packung, 10 Stck.:		
Nylon pink soft	Art.-Nr. 000 861	€ 9,40
Nylon lila medium	Art.-Nr. 000 862	€ 9,40
Nylon blau hart	Art.-Nr. 000 863	€ 9,40
Normalpackung, 12 Stck.:		
Borste natur	Art.-Nr. 000 854	€ 8,95
Nylon weiß	Art.-Nr. 000 855	€ 8,95
Nylon weiß extra soft	Art.-Nr. 000 856	€ 8,95
Großpackung, 100 Stck.:		
Borste natur	Art.-Nr. 000 857	€ 62,90
Nylon weiß	Art.-Nr. 000 858	€ 62,90
Nylon weiß extra soft	Art.-Nr. 000 859	€ 62,90



EVE BRACKETPOLIERER (EVE)

Winkelstück-Polierer für das schonende Entfernen von Klebstoffresten bei Brackets. Gleichzeitig bringen sie die Zähne auf Hochglanz. Durch die besondere Wahl des Schleifmittels (Glaspartikel = härter als Kleber, weicher als Schmelz [nicht abrasiv]) und der Bindung des Schleifmittels wird der Zahnschmelz nicht angegriffen. Drehzahl 5.000 - 7.000 U/Min.

kleine Spitze, BR11, 10 Stück	Art.-Nr. 178 853	€ 10,20
Flamme, BR7, 10 Stück	Art.-Nr. 178 836	€ 16,20
Kelch, BR3, 10 Stück	Art.-Nr. 178 835	€ 16,20



EXA-TECHNIK (EDENTA)

Montierte Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Für Handstücke. Farbe grau = mittlere Körnung, zum Abtragen und Vorpolieren.

Form 0661, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 870	€ 11,30
Form 0662, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 871	€ 11,30
Form 0663, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 872	€ 11,30
Form 0664, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 808	€ 11,30
Form 0665, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 809	€ 11,30
Form 0666, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 828	€ 11,30
Form 0667, grau/mittel, 6 Stck.	Art.-Nr. 007 829	€ 11,30
ab 5 Pckg.		€ 10,90



grün/grob 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677
 grau/mittel 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667
 gelb/fein 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657



EVE TECHNIK POLIERER (EVE)

Grün: zum Abtragen von Prothesenkunststoffen, auch weichbleibender Materialien.
 Grau: zum Glätten von Prothesenkunststoffen.
 Hellgrün: bringt Hochglanz auf den Kunststoff.



Form	H332k	H334k	H336k	H338	H340
grün/grob	Art.-Nr. 278 830	Art.-Nr. 278 831	Art.-Nr. 278 832	Art.-Nr. 278 833	Art.-Nr. 278 842
Form	H332km	H334km	H336km	H338m	H340m
grau/mittel	Art.-Nr. 278 834	Art.-Nr. 278 835	Art.-Nr. 278 836	Art.-Nr. 278 837	Art.-Nr. 278 844
Form	H332kf	H334kf	H336kf	H338f	H340f
hellgrün/fein	Art.-Nr. 278 838	Art.-Nr. 278 839	Art.-Nr. 278 840	Art.-Nr. 278 841	Art.-Nr. 278 846
Pckg. à 10 Stck. €	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
ab 5 Pckg. €	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95

LISKO-S-SCHEIBEN (ERKODENT)

Hervorragend geeignet zum Beschleifen und Polieren von flexiblen Materialien (Unterfüttungen, KFO-Geräte, Positioners, usw.). Mit halboffener Struktur. Kein Schmierer oder Zusetzen durch ständig freiwerdende Schleifpartikel. Die Packung enthält 10 Scheiben Ø 28 mm, 4 Stützscheiben und 1 Mandrell. Für Handstücke.

Lisko-S-Scheiben fein - türkis, 10 Stck.	Art.-Nr. 119 971	€ 24,90
ab 3 Pckg.	je Pckg.	€ 24,40
ab 6 Pckg.	je Pckg.	€ 23,90
Lisko-S-Scheiben fein - türkis, 100 Stck.	Art.-Nr. 119 976	€ 198,00



DIMO (SCHEU)

Stabile und flexible Ausarbeitungsscheiben, mit verlängerter Standzeit und in drei unterschiedlichen Körnungen, inkl. Mandrell. Geeignet zur Bearbeitung und Vorpolitur von Elastomeren, Sandwich-Folien, Sportmundschutz- und KFO-Geräten. DIMO-fein-maroon – zum sauberen Glätten DIMO-mittel-grün – zum weichen Abrunden der Kanten DIMO-grob-braun – zum effektiven Abtragen.

10 DIMO Scheiben, 1 Mandrell: fein - maron	Art.-Nr. 066 906	€ 19,95
10 DIMO Scheiben, 1 Mandrell: mittel - grün	Art.-Nr. 066 907	€ 19,95
10 DIMO Scheiben, 1 Mandrell: grob - braun	Art.-Nr. 066 908	€ 19,95



DIMO PRO UND DIMO PRO SLIM (SCHEU)

Ausarbeitungsscheibe aus einer speziellen Elastomermischung mit feiner Faserstruktur, extrem lange Standzeit, inkl. Mandrell. Max. 10.000 U/Min. für das Be- und Ausarbeiten. Max. 4.000 U/Min. für die feine Hochglanzpolitur. Anwendung DIMO PRO: Zur Ausarbeitung der großflächigen Randbereiche und zur End- und Hochglanzpolitur von Schienen, Positionern, Sportmundschutz- und KFO-Geräten. Sorgt für hochglänzende Ränder und Übergänge bei der Verwendung von hart/weichen Verbundfolien. Anwendung DIMO PRO SLIM: für die Feinausarbeitung von Schienen, insbesondere für die Aussparungen im Bereich der Bänder und Interdentalräume.

DIMO PRO, 10 Scheiben, 1 Mandrell	Art.-Nr. 066 985	€ 34,50
DIMO PRO, 50 Scheiben, 1 Mandrell	Art.-Nr. 066 986	€ 145,80
DIMO PRO SLIM, 10 Scheiben, 1 Mandrell	Art.-Nr. 066 995	€ 31,50
DIMO PRO SLIM, 50 Scheiben, 1 Mandrell	Art.-Nr. 066 996	€ 134,90



BIMSSTEINPULVER (HINRICHS)

Quarzfrees Poliermittel zur Vorpolitur von Kunststoffprothesen, KFO-Apparaturen und Kunststoffarbeiten jeglicher Art. Das unbehandelte Bimssteinpulver ist ein umweltfreundliches Naturprodukt und kann nach Gebrauch problemlos entsorgt werden.

mittlere Mahlung: 5 kg	Art.-Nr. 004 967	€ 19,75
feine Mahlung: 5 kg	Art.-Nr. 004 968	€ 19,75



ERKOFORM-3D+ (ERKODENT)

Das Tiefziehgerät ist im Prinzip ein Erkoform-3d motion ohne Automatik. Eine schlagartige Anformung durch ein bereitgehaltenes großvolumiges Reservevakuum gewährleistet auch dickem Schienenmaterial eine optimale Anformung an das Modell. Der berührungslose Sensor zur Temperaturmessung garantiert immer die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang unabhängig von der Umgebung. Die Mittelwelligkeit der Infrarotheizung ermöglicht nicht nur ein oberflächliches Erwärmen, sondern die Materialien werden auch in der Tiefe erhitzt. Dadurch sind spannungsärmere Schienen das Ergebnis. Das programmgesteuerte Display enthält alle Erkodent Tiefziehmaterialien und führt mittels Kurzprogramm mit hochauflösenden Video-Animationen durch den Tiefzieh- und Arbeitsablauf und meldet die nötigen Arbeitsschritte. Neue Folien sowie veränderte Parameter können als Favoriten im Gerät abgespeichert werden. Erweiterbar mit dem Occluform3 zum Einprägen des Gegenbisses. Technische Daten: Spannung: 230 V, Leistung: 360 W, Masse (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm, Ø Folien: 120 mm, Folienstärke: 0 - 5,5 mm, Max. Vakuum: 0,8 bar, Gewicht: 11,9 kg, Garantie: 2 Jahre



Erkoform-3d+	Art.-Nr. 119 939	€ 1590,00
--------------	------------------	-----------

ERKOFORM-3D MOTION (ERKODENT)

Das Erkoform-3d motion ist ein Tiefziehgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang. Der Einsatzbereich und die technischen Daten entsprechen bis auf ein deutlich verbessertes Touchpanel und Bedienungskonzept denen des Erkoform 3d. Die Automatik beschränkt sich auf den Tiefziehvorgang. Dies erspart den notwendigen Gang zum Gerät. Technische Daten: Spannung: 230 V, Leistung: 380 W, Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm, Gewicht: 13,1 kg, Garantie: 2 Jahre



Erkoform-3d motion	Art.-Nr. 119 938	€ 1950,00
--------------------	------------------	-----------

MINISTAR S (SCHEU)

Das kompakte Druckformgerät ist für alle Tiefziehenanwendungen in Labor und Praxis geeignet. Die erweiterte Version des MINISTAR S rückt mit einer nutzerfreundlichen Folientastatur und einem großen Display nach. Hier werden nun alle Funktionsparameter zur Überwachung angezeigt. Durch die verbauten Scanner-Technologie lassen sich alle wichtigen Folienparameter wie Heizzeit, Temperatur und Abkühlzeit durch Scannen des Folien-Barcodes direkt in das Gerät übertragen. Der thermisch gesteuerte IR-Strahler erreicht die notwendigen Arbeitstemperaturen innerhalb 1 Sekunde nach dem Programmieren der Heizzeit, dadurch kann die Folie sofort beheizt werden. Die thermostatische Regelung des Strahlers sorgt darüber hinaus für absolut gleichbleibende Temperaturen, unabhängig von Raumtemperatur und Netzspannung. Im ergonomischen Granulatbehälter lagert 1 kg Füllgranulat. Die tiefe, umlaufende Rinne dient zur Aufnahme und Rückführung von überschüssigem Granulat. Technische Daten: Maße (B x H x T): 500 x 210 x 400 mm Leistung: 230 V, 750 W Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar Gewicht: 9,0 kg Garantie: 3 Jahre



MINISTAR S	Art.-Nr. 366 951	€ 1550,00
------------	------------------	-----------



FÜLLGRANULAT

Zum Einbetten der Modelle im Tiefziehgerät. Für alle Tiefziehgeräte geeignet (bleihaltig, nicht magnetisch).

1,2 kg	Art.-Nr. 015 942	€ 32,50
ab 3 Pckg.	je Pckg.	€ 31,50



ERKODUR Ø120 (ERKODENT)

Zäh-harte Folie, verbindet sich mit Acrylaten. Für Miniplast-Schienen, Aufbisschienen, mit Unterziehfolie. Die Stärken 4,0 und 5,0 mm eignen sich besonders gut in Kombination mit dem Occlusum-Gerät. Farbe glasklar. Ø 120 mm.

Stärke 0,5 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 05, 20 Stück	Art.-Nr. 219 943	€ 15,30
Stärke 0,5 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 05, 100 Stück	Art.-Nr. 219 944	€ 60,50
Stärke 0,6 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 06, 20 Stück	Art.-Nr. 219 945	€ 18,50
Stärke 0,6 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 06, 100 Stück	Art.-Nr. 219 946	€ 74,60
Stärke 0,8 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 08, 20 Stück	Art.-Nr. 219 947	€ 24,20
Stärke 0,8 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 08, 100 Stück	Art.-Nr. 219 948	€ 95,60
Stärke 1,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 10, 20 Stück	Art.-Nr. 219 949	€ 28,50
Stärke 1,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 10, 100 Stück	Art.-Nr. 219 950	€ 109,50
Stärke 1,5 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 15, 10 Stück	Art.-Nr. 219 951	€ 19,65
Stärke 1,5 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 15, 50 Stück	Art.-Nr. 219 952	€ 75,90
Stärke 2,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 20, 10 Stück	Art.-Nr. 219 953	€ 25,10
Stärke 2,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 20, 50 Stück	Art.-Nr. 219 954	€ 96,90
Stärke 3,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 30, 10 Stück	Art.-Nr. 219 955	€ 35,90
Stärke 3,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 42 30, 50 Stück	Art.-Nr. 219 956	€ 138,70
Stärke 4,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 40, 10 Stück	Art.-Nr. 219 957	€ 45,60
Stärke 5,0 mm, Erkodent Best.-Nr. 52 12 50, 10 Stück	Art.-Nr. 219 958	€ 54,50



ERKOFLEX (ERKODENT)

Gummiartig, weiches Material mit Unterziehfolie. Für Orthodontie, Positioners und Boxerschutz. Zum Dublieren von Modellen, Form wiederholt ausgießbar. Ø 120 mm, transparent. Die Stärken 1 mm bis 2 mm eignen sich besonders gut zur Herstellung von Fluor- und Bleachingsschienen. Shore-Härte 82A.

Stärke 1,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 12 10, 20 Stück	Art.-Nr. 219 982	€ 23,95
Stärke 1,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 42 10, 100 Stück	Art.-Nr. 219 983	€ 92,20
Stärke 1,5 mm Erkodent Best.-Nr. 58 12 15, 10 Stück	Art.-Nr. 219 984	€ 15,40
Stärke 1,5 mm Erkodent Best.-Nr. 58 42 15, 50 Stück	Art.-Nr. 219 985	€ 59,80
Stärke 2,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 12 20, 10 Stück	Art.-Nr. 219 986	€ 21,95
Stärke 2,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 42 20, 50 Stück	Art.-Nr. 219 987	€ 83,50
Stärke 3,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 12 30, 10 Stück	Art.-Nr. 219 988	€ 26,60
Stärke 3,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 42 30, 50 Stück	Art.-Nr. 219 989	€ 105,90
Stärke 4,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 12 40, 10 Stück	Art.-Nr. 219 990	€ 33,50
Stärke 4,0 mm Erkodent Best.-Nr. 58 42 40, 50 Stück	Art.-Nr. 219 991	€ 132,90



ERKOLOC-PRO (ERKODENT)

2-schichtige, hart/weiche Tiefziehfolie für komfortable Aufbiss-, Miniplast- und Knirscherschienen. Mit den Stärken 1,0 - 5,0 mm lassen sich sämtliche Vorgehensweisen verwirklichen, eine adjustierte Oberfläche in der Schiene herzustellen. Der weiche Anteil beträgt stets 0,3 - 1,0 mm, die aufgebrauchte Unterziehfolie dient zur Isolierung Gips gegen Kunststoff. Die Folien werden in luftundurchlässigen Aluminiumbeuteln verpackt, so dass trotz hygroskopischen Eigenschaften dieses Materials auf ein Vortrocknen verzichtet werden kann. Ähnliche Haltbarkeit wie Einschichtplatten. Farbe: klar. Ø 120 mm

Stärke 1,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 51 10, 20 Stck.	Art.-Nr. 319 992	€ 73,50
Stärke 1,3 mm Erkodent Best.-Nr. 59 51 13, 20 Stck.	Art.-Nr. 319 990	€ 79,50
Stärke 1,3 mm Erkodent Best.-Nr. 59 54 13, 100 Stck.	Art.-Nr. 319 991	€ 319,00
Stärke 2,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 51 20, 10 Stück	Art.-Nr. 019 921	€ 36,80
Stärke 2,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 54 20, 50 Stück	Art.-Nr. 319 904	€ 140,50
Stärke 3,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 51 30, 10 Stück	Art.-Nr. 019 923	€ 43,60
Stärke 3,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 54 30, 50 Stück	Art.-Nr. 319 906	€ 168,50
Stärke 4,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 51 40, 10 Stück	Art.-Nr. 019 925	€ 51,90
Stärke 4,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 54 40, 50 Stück	Art.-Nr. 319 921	€ 207,00
Stärke 5,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 51 50, 10 Stück	Art.-Nr. 019 927	€ 61,50



ERKOLOC-PRO BLU, GREEN & PINK (ERKODENT)

Kombinierte hart-weiche Tiefziehfolie. Die Einfärbung der weichen Schicht vermindert Verfärbungen. Zur Herstellung von komfortablen Miniplast- und Aufbisschienen, Silensor-sl Schnarchschiene, komfortablen Retentionsschienen mit korrekativer Wirkung. Die harte Schicht kann mit Autopolymerisat z.B. Resilit-S aufgebaut werden. Ø = 120 mm.

Erkoloc-pro blu, Pckg. à 10 Stck.:		
Stärke 2,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 56 20	Art.-Nr. 319 945	€ 47,50
Stärke 3,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 56 30	Art.-Nr. 319 946	€ 57,60
Stärke 4,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 56 40	Art.-Nr. 319 947	€ 65,40
Stärke 5,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 56 50	Art.-Nr. 319 948	€ 78,70
Erkoloc-pro green, Pckg. à 10 Stck.:		
Stärke 2,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 72 20	Art.-Nr. 319 970	€ 47,50
Stärke 3,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 72 30	Art.-Nr. 319 971	€ 57,60
Stärke 4,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 72 40	Art.-Nr. 319 972	€ 65,40
Stärke 5,0 mm Erkodent Best.-Nr. 59 72 50	Art.-Nr. 319 973	€ 78,70
Erkoloc-pro pink, Pckg. à 10 Stck.:		
Stärke 2,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 59 20	Art.-Nr. 319 988	€ 47,50
Stärke 3,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 59 30	Art.-Nr. 319 993	€ 57,60
Stärke 4,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 59 40	Art.-Nr. 319 994	€ 65,40
Stärke 5,0 mm Ø 120 mm Erkodent Best.-Nr. 59 59 50	Art.-Nr. 319 995	€ 78,70



BIOPLAST (SCHEU-DENTAL)

Weichelastische, gummiähnliche Folien, verbinden sich nicht mit Autopolymerisat. Für Dublier-formen, Mundschutz, Knirscherschienen, Positioner und OSAMU-Retainer. Ø 125 mm, Farbe klar.

Stärke 1 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 998	€ 13,95
Stärke 1 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 999	€ 126,50
Stärke 1,5 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 919	€ 17,50
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 946	€ 159,00
Stärke 2 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 915	€ 21,80
Stärke 2 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 916	€ 189,00
Stärke 3 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 917	€ 25,10
Stärke 3 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 918	€ 219,00



COPYPLAST (SCHEU-DENTAL)

Zähelastische Folien, verbinden sich nicht mit Autopolymerisat. Für Dublierformen, Bracket-Trans-fermasken, Gießmasken für provisorische Kronen, Brücken, Bleich-, Ätzmasken und Gusskäppchen. Ø 125 mm, Farbe natur.

Stärke 0,5 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 925	€ 7,90
Stärke 0,5 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 926	€ 69,80
Stärke 1 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 927	€ 9,50
Stärke 1 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 928	€ 84,50
Stärke 1,5 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 166 982	€ 10,80
Stärke 1,5 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 983	€ 93,40

ISOFOLAN (SCHEU-DENTAL)

Folie mit optimaler Isolierwirkung für Gips/Kunststoff in der Tiefziehetechnik, auch als Platzhalter-folie in der Schienentechnik bei allen hartelastischen Platten einsetzbar, verbindet sich nicht mit Acrylat. Ø 125 mm.

Stärke 0,1 mm, 100 Stück	Art.-Nr. 166 965	€ 23,95
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 23,40

DURAN (SCHEU-DENTAL)

Hartelastische, transparente Folien, die sich mit Autopolymerisat verbinden. Kein Vortrocknen notwendig. Bei Verwendung von lichterhärtendem Kunststoff ist eine Vorbehandlung mit Primer erforderlich. Anwendung: Miniplast-, Aufbiss- und CMD-Schienen, Interims- sowie Fluoridierungs-schienen, Bohr-/Röntgensablonen, Schnarchtherapiegeräte, invisible Retainer, provisorische Kronen und Brücken. Ø 125 mm.

Stärke 0,4 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 466 970	€ 10,70
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 984	€ 11,85
Stärke 0,5 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 990	€ 104,50
Stärke 0,625 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 989	€ 13,50
Stärke 0,625 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 973	€ 115,90
Stärke 0,75 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 985	€ 13,95
Stärke 0,75 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 991	€ 125,00
Stärke 1 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 986	€ 14,90
Stärke 1 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 992	€ 132,50
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 987	€ 16,95
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 993	€ 155,00
Stärke 2 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 988	€ 20,50
Stärke 2 mm, 100 Stck.	Art.-Nr. 166 994	€ 182,50
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	Art.-Nr. 166 974	€ 24,70

DURAN+ (SCHEU-DENTAL)

Mit DURAN+ wird die Produktgruppe von DURAN um eine Tiefziehfolie mit aufgebrachtener Isolierfolie ergänzt. Der Tiefziehvorgang verringert sich um einen Schritt, da vorab keine separate Isolierfolie mehr tiefgezogen werden muss. Das hartelastische, transparente Material verbindet sich gut mit Autopolymerisat und eignet sich für Miniplast- und Aufbiss-schienen, Bohr-/Röntgensablonen, Schnarchtherapiegeräte, Interims- und Fluoridschienen sowie Invisible Retainer. Ø 125 mm.

Stärke 0,4 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.466 980	€ 11,30
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.366 970	€ 13,20
Stärke 0,625 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.366 971	€ 14,80
Stärke 0,75 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.366 972	€ 15,75
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.366 973	€ 16,95
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.366 974	€ 19,30
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	Art.-Nr.366 975	€ 23,40
Stärke 0,625 mm, 100 Stck.	Art.-Nr.139 122	€ 110,50
Stärke 0,75 mm, 100 Stck.	Art.-Nr.135 338	€ 119,50
Stärke 1,0 mm, 100 Stck.	Art.-Nr.135 433	€ 125,90
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	Art.-Nr.127 578	€ 156,70
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	Art.-Nr.129 343	€ 185,90



DURASOFT pd (SCHEU-DENTAL)

Unzerbrechliche, abrasionsfeste, transparente Verbundfolie mit einer harten und einer weichen Folienseite. Die harte Seite verbindet sich mit Autopolymerisat. Die Folien sind zum sofortigen Gebrauch bereits vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt. Anwendung: Miniplast-, Knirscher- und Aufbiss-Schienen Ø 125 mm

Stärke 1,2 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 466 936	€ 36,80
Stärke 1,8 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 466 937	€ 49,40
Stärke 2,5 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 466 938	€ 56,50
Stärke 3,0 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 466 939	€ 58,20
Stärke 4,0 mm, 10 Stück	Art.-Nr. 466 940	€ 68,10



BRUX CHECKER (SCHEU-DENTAL)

BRUX CHECKER ist eine einseitig farblich beschichtete Analyse- und Therapieplanungsfolie, die zusammen mit Prof. Sadao Sato vom Kanagawa Institut in Japan entwickelt wurde. Besonders eignet sich die BRUX CHECKER Folie als Hilfsmittel für die Diagnose und Behandlungsplanung in der CMD-Therapie, aber auch zum Einstellen der Okklusion bei prothetischen Versorgungen. Die Folie wird über ein Patientenmodell tiefgezogen und vom Patienten für eine Nacht getragen. Durch Abrieb der Farb-Beschichtung werden okklusale Interferenzen wie zum Beispiel Bruxismus registriert. Die Auswertung der Knirschmuster lässt Rückschlüsse auf mögliche Ursachen der Störung zu und hilft bei der Auswahl geeigneter Therapien. BRUX CHECKER ist das ideale Analyse-, Planungsinstrument für die High End Schienentherapie und auch zur Kontrolle prothetischer Versorgungen geeignet. Stärke 0,1 mm.

Ø 120 mm, Pckg. à 10 Stck.: red	Art.-Nr. 166 936	€ 41,50
Ø 125 mm, Pckg. à 10 Stck.: red	Art.-Nr. 166 922	€ 41,50




SILENSOR-SL (ERKODENT)

Schützt komfortabel und wirkungsvoll vor Schnarchgeräuschen. Während des Schlafs lässt die muskuläre Straffung des Gewebes im Bereich des Halses nach. Dies verengt den Rachenraum, die Luftmenge muss mit höherer Geschwindigkeit angesaugt werden und weiche Gewebeteile werden zu geräuschvollem Flattern (Schnarchen) angeregt. Der Silensor-sl erweitert den Rachenraum, somit nimmt die Geschwindigkeit der eingeatmeten Luft ab und damit das geräuschbildende Flattern. Mit dem Silensor-sl sind Kieferbewegungen möglich, das Zurücksinken des Unterkiefers jedoch nicht. Diese Funktion macht den Silensor-sl zu einem komfortablen und zugleich wirkungsvollen Schnarchschutz.

Silensor-sl Set:

2 Erkodur 2,0 mm, 2 Erkoloc-pro 3,0 mm, 1 Erkolen 1,0 mm, 2 Teile-Karten, 1 Erkogum, 1 Ausblockwachs, ca. 10 ml Erkoskin, 1 Boardmarker, 1 HSS-Bohrer 1,4 mm, 2 Erkoboxen, 2 Pflegeanleitungen, 10 Patientenflyer:		
Ø 120 mm	Art.-Nr. 319 930	€ 53,20
Ø 125 mm	Art.-Nr. 319 931	€ 53,20
Teilekarte, 1 Stck.	Art.-Nr. 319 932	€ 17,95
Teilekarte, 10 Stck.	Art.-Nr. 319 933	€ 140,50
Protrusionslehre, 5 Stck.	Art.-Nr. 319 934	€ 23,95

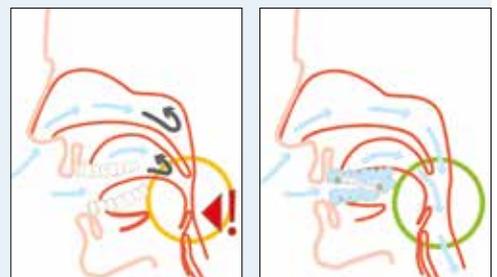

ORTHODONTIC KIT (TELEDENTA)

- praktisches Zahnpflegeset für Spangenträger
ideal auf Reisen und für zu Hause
- alles in einer Tasche
- Visitenkartenfach ideal als Werbeträger nutzbar
- empfohlener Verkaufspreis (EVP): ca. € 8,- (ohne Gewähr)

Inhalt:

- 1 V-Trim Zahnbürste mit Interdentalbürste
- 2 V-Trim Reisezahnbürste
- 3 Zahnseide
- 4 Mundspiegel
- 5 Fädelhilfe für Zahnseide
- 6 Interdentalbürste in der Box
- 7 Schutzwachs
- 8 2-Minuten Sanduhr



1 Kit	Art.-Nr. 180 284	€ 5,25
Box mit 12 Kits	Art.-Nr. 180 285	€ 56,60
Karton mit 144 Kits	Art.-Nr. 180 286	€ 527,69



ORTHO BOX

- Maße: B 80 x L 80 x H 43 mm

weiß	Art.-Nr. 198 015	€ 1,60
pink	Art.-Nr. 198 016	€ 1,60
blau	Art.-Nr. 198 017	€ 1,60
rot	Art.-Nr. 198 018	€ 1,60
neongelb-grün	Art.-Nr. 198 096	€ 1,60
grün	Art.-Nr. 198 097	€ 1,60
ab 10 Stück einer Farbe	je Stück	€ 1,50
ab 20 Stück einer Farbe	je Stück	€ 1,40
Band für Ortho Box:		
rot	Art.-Nr. 759 030	€ 1,00
apfelgrün	Art.-Nr. 759 031	€ 1,00
royalblau	Art.-Nr. 759 032	€ 1,00
schwarz	Art.-Nr. 759 033	€ 1,00
weiss	Art.-Nr. 759 034	€ 1,00
ab 10 Stück einer Farbe	je Stück	€ 0,85
ab 20 Stück einer Farbe	je Stück	€ 0,79



ORTHODONTIC WACHS (TELEDENTA)

- formbar

1 Box à 5 Stangen Wachs:

Standard	Art.-Nr. 180 270	€ 0,59
Orange	Art.-Nr. 180 271	€ 0,59
Apfel	Art.-Nr. 180 272	€ 0,59
Minze	Art.-Nr. 180 273	€ 0,59
Erdbeer	Art.-Nr. 180 274	€ 0,59
Banane	Art.-Nr. 180 275	€ 0,59
Ananas	Art.-Nr. 180 276	€ 0,59

50 Boxen à 5 Stangen Wachs:

Standard	Art.-Nr. 180 277	€ 23,05
Orange	Art.-Nr. 180 278	€ 23,05
Apfel	Art.-Nr. 180 279	€ 23,05
Minze	Art.-Nr. 180 280	€ 23,05
Erdbeer	Art.-Nr. 180 281	€ 23,05
Banane	Art.-Nr. 180 282	€ 23,05
Ananas	Art.-Nr. 180 283	€ 23,05

silikon-
frei





ZAHNSPANGENBOX

Stoßsichere Plastikbox. Maße: B 7,8 x L 7,3 x H 3 cm.



weiß	Art.-Nr. 998 015	€	1,05
pink	Art.-Nr. 998 016	€	1,05
blau	Art.-Nr. 998 017	€	1,05
grün	Art.-Nr. 998 018	€	1,05
neongelb-grün	Art.-Nr. 998 019	€	1,05
ab 10 Stück einer Farbe	je Stück	€	0,95
ab 20 Stück einer Farbe	je Stück	€	0,85



CURAPROX »SENSITIVE« SINGLE & SULCULAR (CURADEN)



Einbüschelbürste mit abgerundeten Borsten zum Reinigen und Pflegen der Zahnfleisch-Säume und schwer zugänglicher Bereiche bei Implantaten, den hinteren Molaren sowie bei Brackets und Geschieben.

Curaprox CS 1006: 6 mm lang	Art.-Nr. 498 895	€	3,95
Curaprox CS 1009: 9 mm lang	Art.-Nr. 498 896	€	3,95
ab 12 Stck. einer Länge	je Stck.	€	3,50



Curaprox sensitive CS 1006



Curaprox sensitive CS 1009

miradent I-PROX P SULCUSBÜRSTE (HAGER & WERKEN)

Spitzbürste zur effizienten Reinigung von Zahnfleischsaum und Sulkustaschen durch konisch zulaufendes Borstenbüschel. Ideal zur Reinigung von kieferorthopädischen Apparaturen, Implantaten und Interdentalräumen. Mit 14 cm langem Fingerformgriff mit zwei Aufsteckwinkeln (60° und 120°). Der Bürstenkopf ist austauschbar. Im Halterende lassen sich 3 Reservebürsten unterbringen.

Set:			
1 Halter transparent-blau, 4 Bürsten	Art.-Nr. 122 850	€	3,35
1 Halter transparent-pink, 4 Bürsten	Art.-Nr. 122 851	€	3,35
Ersatzbürsten:			
weiß (weich), 4 Stck.	Art.-Nr. 122 897	€	2,25



miradent CAREBRUSH ORTHO (HAGER & WERKEN)

Zahnbürste für Spangenträger. Mit V-Form Borstensystem zur Reinigung fester Apparaturen. Die längeren äußeren Borsten und die härteren inneren Borsten reinigen im Wechsel den empfindlichen Zahnfleischsaum und die Zahnoberfläche. Durch den ergonomischen Anti-Rutsch-Griff liegt die Bürste sehr gut in der Hand.

miradent Carebrush ortho	Art.-Nr. 222 862	€	2,40
--------------------------	-------------------------	---	-------------



GUM TECHNIQUE PRO ZAHNBÜRSTEN (SUNSTAR)

Patentierter Quad-Grip-Griff für einen optimalen Reinigungswinkel (45°). Extra mikrofeine Borstenenden (0,01 mm) für gründliche und schonende Plaqueentfernung unter dem Zahnfleischrand. Spitz zulaufende, zylindrische sowie schräggehende Borsten für eine klinisch geprüfte bessere Reinigungsleistung. Ideal für Patienten mit Gingivitis/Parodontitis zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen im Mund. In vier verschiedenen Farben lieferbar, jedoch keine Sortierung möglich.


Nr. 525, kompakt weich	Art.-Nr. 187 808	€	1,90
Nr. 528, kompakt medium	Art.-Nr. 187 809	€	1,90
ab 12 Stck. einer Form	je Stck.	€	1,70



IMPLANT-/ORTHODONTIEBÜRSTE (TePe)

Schmäler, zweireihiger Bürstenkopf mit weichen abgerundeten Borsten. Die Bürstenkonstruktion erlaubt eine effektive Plaquebekämpfung, beispielsweise entlang der Distanzhülsen, bei Implantaten oder unter Brackets.

Implantat-/Orthodontiebürste	Art.-Nr. 398 851	€	2,10
ab 5 Stck.	je Stck.	€	1,90

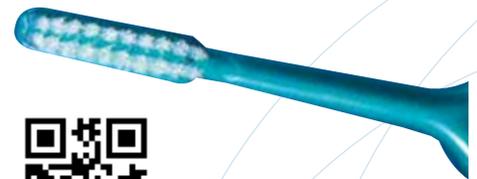

COMPACT TUFT (EINBÜSCHELBÜRSTE) (TePe)

Einbüschelbürste mit kleinem, rundem, kompaktem Bürstenkopf. Neben der Ergänzung der normalen Zahnreinigung ist die Einbüschelbürste in den Bereichen der Reinigung des Sulcusrandes, bei Patienten mit festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen, Kronen, Brücken, Implantaten, Teleskopen, schwer erreichbaren Zahnflächen sowie für die Fissurenreinigung geeignet. In verschiedenen Farben lieferbar, ab Hersteller jedoch keine Sortierung der Farbe möglich.

Compact Tuft (Einbüschelbürste)	Art.-Nr. 398 850	€	2,55
ab 5 Stck.	je Stck.	€	2,35



ONDROHEXIDIN ZAHNCREME (ONE DROP ONLY)

Zur täglichen Anwendung mit 0,06 % Chlorhexidindigluconat, 0,05 % Cetylpyridiniumchlorid und Fluorid (1.450 ppm), geeignet für empfindliches und gereiztes Zahnfleisch. Zur Pflege kieferorthopädischer Apparaturen und in der Erhaltungsphase nach Parodontalbehandlungen. Ohne anionische Tenside, Plaquebildung wird effektiv vorgebeugt, frischer Anis-Minz Geschmack.

Tube, 75ml	Art.-Nr. 459 872	€	2,69
------------	------------------	---	------



GUM ORTHO ZAHNGEL (SUNSTAR)

Speziell entwickelt, um zur Lösung der Mundpflege-Herausforderungen bei kieferorthopädischer Behandlung beizutragen: nur 1.490 ppm Fluorid aus Natriumfluorid. Mit 0,05 % CPC für eine antibakterielle Wirkung und um Plaque-Ansammlung zu verhindern. Natürliche reizmindernde Inhaltsstoffe (Bisabolol, Ingwerextrakt, Aloe vera, Vitamin E) zur Beruhigung des Zahnfleisches. Sanftes Minzaroma für einen angenehm frischen Geschmack.

Tube, 75ml	Art.-Nr. 187 865	€	2,89
------------	------------------	---	------



GUM ORTHO MUNDSPÜLUNG (SUNSTAR)

Speziell entwickelt um zur Lösung der Mundpflege-Herausforderungen bei kieferorthopädischer Behandlung beizutragen: nur 400 ppm Fluorid aus Natriumfluorid und Olafur. Mit 0,05 % CPC für eine antibakterielle Wirkung und um Plaque-Ansammlung zu verhindern. Natürliche reizmindernde Inhaltsstoffe (Bisabolol, Ingwerextrakt, Aloe vera, Vitamin E) zur Beruhigung des Zahnfleisches. Sanftes Minzaroma für einen angenehm frischen Geschmack.

Flasche, 300ml	Art.-Nr. 187 866	€	3,10
----------------	------------------	---	------



CETRON (SCHEU-DENTAL)

KFO-Apparaturen, Schienen, Schnarchschutz und Prothesen werden aus hochwertigen Autopoly-merisaten oder Thermoplasten hergestellt und aus hygienischen und ästhetischen Gründen aufwändig poliert. Trotzdem kann es im Laufe der Tragezeit durch den Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten sowie durch das individuelle Mundmilieu zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen kommen. Mit CETRON erhalten Sie bzw. die Patienten ein optimales Reinigungsmittel, das diese prothetischen Arbeiten dauerhaft reinigt und pflegt und für langen Tragekomfort sorgt. Es werden sowohl Kunststoff als auch Metallanteile gereinigt, von Ablagerungen befreit und aufgefrischt. CETRON ist in 15 g Portionsbeuteln erhältlich, deren Inhalt in Wasser aufgelöst wird (Ansatz ist 3-4 Tage verwendbar). Nach 30 Minuten Einwirkzeit wird die Versorgung mit Wasser abgespült. Mit dem zusätzlich erhältlichen Pflegespray kann die Oberfläche der zu behandelnden Produkte geglättet, gepflegt und zusätzlich mit einem attraktiven Lemon-Geschmack versehen werden.

Pflegeset:			
1 Reinigungsdose, 5 Portionsbeutel à 15 g	Art.-Nr. 066 984	€	16,95
5 Portionsbeutel à 15 g	Art.-Nr. 066 987	€	7,95
25 Portionsbeutel à 15 g	Art.-Nr. 066 992	€	30,40
Pflegespray mit 75 ml	Art.-Nr. 066 990	€	15,95
ab 5 Flaschen	je Fl.	€	15,50



MAXIFRESH (DREVE-DENTA-MID)

Die MaxiFresh Reinigungstablette dient der äußeren Pflege und Reinigung von dentalen Zahnschienen und Sportmundschützern. Durch eine tägliche Reinigung wird die Lebensdauer der hochwertigen Zahnschiene erhöht und eine einwandfreie Hygiene und Funktion gewährleistet. Vorteile: Einfache und professionelle Reinigung für zu Hause. Verringert die Möglichkeit von Verfärbungen. Im Gegensatz zu herkömmlicher Zahncreme beinhaltet MaxiFresh keine Schleifstoffe und reinigt somit materialschonend.

Set: Reinigungstabletten, 24 Stck., 1 Reinigungsdose	Art.-Nr. 115 925	€	12,40
Refill Set: Reinigungstabletten, 24 Stck.	Art.-Nr. 115 926	€	8,50



PFLEGEBOX

Autoklavierbarer Behälter mit Deckel und Siebeinsatz zur Aufbewahrung oder Desinfektion von Prothesen oder KFO-Apparaturen. Autoklavierbar bis 121 °C. Eignet sich zur Weitergabe an Patienten bei hochwertiger Prothetik.

blau	Art.-Nr. 198 020	€	3,45
weiß	Art.-Nr. 198 021	€	3,45
pink	Art.-Nr. 198 022	€	3,45
ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	€	3,25
ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck.	€	3,05
ab 30 Stck. einer Farbe	je Stck.	€	2,85



PROTECTO CaF2 NANO (BONADENT)

Schutzlack zur schonenden Versiegelung von Zähnen mit remineralisierungsfreundlichen, fluoridhaltigen Füllstoffen zur zusätzlichen Säureresistenz und Stärkung des Zahnes - ohne Anätzen. • zur Bracket-Umfeldversiegelung • schützt die Zähne nach dem Bleaching länger vor neuen Verfärbungen • Dentinschutz bei überempfindlichen Zahnhälsen • einfache Anwendung: Zähne säubern, trocken legen, Protecto applizieren, 1 Minute trocknen lassen - fertig • Schutz für ca. 1 Jahr

4 ml Flasche Protecto CaF2 Nano, 4 Mischpaletten,
20 Microbrushes

Art.-Nr. 098 362 € 72,50



CLINPRO XT VARNISH (3M)

Transparenter, kunststoffmodifizierter Glas-Ionomer-Versiegelungslack. Unmittelbar nach der Behandlung entsteht eine Schutzschicht und somit eine sofortige, bis zu 6 Monaten andauernde Schmerzlinderung bei Hypersensitivitätspatienten. Fluorid, Kalzium und Phosphat wird freigesetzt und durch eine Anwendung von fluoridhaltiger Zahncreme jedes Mal wieder „aufgeladen“. In-vitro Studien zeigen, dass Clinpro XT Varnish eine Karies Präventionsschicht unter und neben der Schutzschicht bildet. Kann Dentin-Durchlässigkeit bis zu 88 % reduzieren. Indikationen: Schutzlack für keilförmige Defekte, Oberflächen- und Fissurenchutz bei durchbrechenden Molaren, Schutzlack zur Behandlung von dentalen Überempfindlichkeiten, Schutzlack zur Vermeidung von Demineralisierung bei festsitzenden kieferorthopädischen Brackets.

1 Clicker 10 g, Anmischblock

Art.-Nr. 020 303 € 121,50



DURAPHAT (CP GABA)

5%iger Fluoridlack (22.600 ppm) zur Intensiv-Fluoridierung mit Applikationskontrolle und optimaler Ästhetik - nach dem Auftragen fast unsichtbar. Schnelle und lang anhaltende Desensibilisierung, hoher Kariesschutz und einfache Anwendung ohne Nachtrocknen. Mit 6-Monatswirkung. Angenehmer Himbeergeschmack. Arzneimittel sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.

Tube, 10 ml

Art.-Nr. 080 321 € 27,95

Ampullen, 5 x 1,6 ml

Art.-Nr. 080 322 € 27,95

Single Dose, 50 x 0,4 ml

Art.-Nr. 080 316 € 75,40



CERVITEC F (IVOCLAR VIVADENT)

Schutzlack für einen schnellen Mehrfachschutz der Zähne. Der liquide Schutzlack fließt gut in komplexe Oberflächenstrukturen ein und eignet sich daher für die Behandlung von offenen Dentintubuli, freiliegenden Wurzeloberflächen, durchbrechenden Zähnen, Fissuren, Approximallflächen und für die Versiegelung der Flächen rund um Brackets, Bänder und Kronenränder. Die innovative Wirkstoffkombination aus Fluorid, Chlorhexidin und CPC erlaubt eine Fluoridierung und gezielte Keimkontrolle in einem Schritt. Die hohe Feuchtigkeitstoleranz erleichtert das Applizieren.

Starter Kit Tube: 4 g Dosiertube, 2 x 4 VivaBrush G

Art.-Nr. 091 343 € 41,50

Refill Tube: 7 g Dosiertube, 50 VivaBrush G

Art.-Nr. 091 340 € 115,50

Refill Tube: 2 x 7 g Dosiertuben, 2 x 50 VivaBrush G

Art.-Nr. 091 341 € 167,50

Refill Single Dose: 20 x 0,26 g Single Dose, 50 VivaBrush G

Art.-Nr. 091 342 € 115,50

VivaBrush G Applikatoren, 50 Stck.

Art.-Nr. 091 138 € 13,75



ERGORET CC KFO (REITEL)



Dieser Arbeitsplatz ist für kieferorthopädische Arbeiten in der KFO-Praxis und im Praxislabor geeignet. Über ein großflächiges Siebgitter sowie der integrierten Absaugung im hinteren Teil des Gerätes werden giftige Kunststoffdämpfe oder Ausdünstungen von Polymeren gezielt abtransportiert. Eine Anbindung an die Zentralabsaugung mit vorangeschaltetem Aktivkohlefilter ist empfehlenswert. Der Absaugauffangtrichter ist mit einer weiteren externen Absaugung gekoppelt, die am Arbeitsplatz anfallende Methylmethacrylatdämpfe absaugt. Die Absaugungen können getrennt voneinander vorne an der Bedienfront geschaltet werden. Die ergonomische Konzipierung ermöglicht langfristiges und ermüdungsfreies Arbeiten. Zur Handauflage ist die Buchenarbeitsplatte seitlich abgeschrägt. Der Innenraum bietet viel Platz zum Arbeiten und zur Ablage von Materialien und Werkzeugen. Unter einem nach oben schwenkbaren Glasdeckel befindet sich eine Edelstahl-Ablageschale und ein Auffangbehälter für den Grobschmutz. Die rutschfeste Gummiauflage bietet guten Halt und das integrierte Sieb verhindert ein versehentliches Einsaugen von Materialien. Zusätzlich verfügt dieser Arbeitsplatz über eine Handstückvorbereitung, mehrere Steckdosen sowie zwei geräumige Schubladen mit Softeinzug. Die LED-Beleuchtungsleiste und die schwenkbare Arbeitslupe ermöglicht eine vielseitige Nutzung. Für das rückschonende Arbeiten im Sitzen oder Stehen ist eine Alternative mit verstellbarer Höhe zwischen 88 cm und 1,18 m erhältlich. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V 50/60 Hz Leistung: 120 Watt Maße (H x B x T): 670 x 910 x 860 mm (Auftisch) Gewicht: 60 kg (Auftisch) + 30 kg (Vario-Hubtisch) Lupe: 4 Dioptrien Gehäuse: Edelstahl, Holz Garantie: 2 Jahre



ERGORET CC KFO	Art.-Nr. 064 958	€ 3875
VARIO-Hubtisch m. Höhenverstellung	Art.-Nr. 064 958	€ 1998
Aktivkohlefilter für ERGORET CC KFO	Art.-Nr. 064 914	€ 72,50

KFO-SOCKELGERÄT (DR. HINZ)

Seit über 20 Jahren bewährt. Erlaubt jetzt die Verwendung von zwei Sockelschalen-Größen, um auch die Abformungen der Kiefer von Erwachsenen in der Paradontologie und Kieferorthopädie dreidimensional orientiert zu sockeln.

Sockelgerät	Art.-Nr. 598 902	€ 105,90
-------------	------------------	----------



KFO-SOCKELSCHALEN (DR. HINZ)

Zur sicheren 3-dimensionalen Fixierung von Kiefermodellen. Mit neuem Verbindungsmechanismus, jetzt mit marktüblichen Sockelgeräten anwendbar. Farbe: weiß.

normal, 1 Paar	Art.-Nr. 598 901	€ 1,50
ab 10 Paar	je Paar	€ 1,40
ab 100 Paar	je Paar	€ 1,30
groß, 1 Paar	Art.-Nr. 598 900	€ 1,70
ab 20 Paar	je Paar	€ 1,60
Verbindungsstege einzeln, 200 Stück	Art.-Nr. 698 937	€ 12,40



SPLIT-FIXATOR (SCHEU)

Der FKO-Split-Fixator ist ein stabiler Okklusionhalter mit konischen Armen. Durch Herausnehmen der Zentrierschrauben können die Modelle ohne Beschädigung vom Fixator gelöst und jederzeit in die exakt gleiche Position zurückgesetzt werden. Die präzise Schwalbenschwanzführung verhindert Verdrehen der Fixatorarme.

Split-Fixator	Art.-Nr. 066 960	€ 84,90
ab 3 Stck.	je Stck.	€ 83,90





DENTA-O-RESIN

Autopolymerisat zur Herstellung von kieferorthopädischen Geräten. Das Material ist universell für die Sprüh-, Streu- und Anteigtechnik einsetzbar. Die optimal abgestimmte Pulver- / Flüssigkeits-Kombination gewährleistet eine unkomplizierte Anwendung. Die Farbkonzentrate können individuell der Flüssigkeit beigemischt werden.

Pulver, 500 g	Art.-Nr. 500 980	€ 32,90
Pulver, 1 kg	Art.-Nr. 500 981	€ 45,50
Flüssigkeit, 500 ml	Art.-Nr. 500 982	€ 22,80
Farbkonzentrat rot, 10 ml	Art.-Nr. 500 983	€ 22,80
Farbkonzentrat blau, 10 ml	Art.-Nr. 500 984	€ 22,80
Farbkonzentrat gelb, 10 ml	Art.-Nr. 500 985	€ 22,80
Farbkonzentrat grün, 10 ml	Art.-Nr. 500 986	€ 22,80



VERTEX ORTHOPLAST (VERTEX-DENTAL)

- Spezialkunststoff für die Kieferorthopädie (auch für Spray-on-Technik)
- optimale Werkstoffeigenschaften
- hohe mechanische Werte
- Farbe: Pulver klar, Flüssigkeit rosa-transparent und klar

Pulver, 500 g	Art.-Nr. 014 926	€ 34,40
Pulver, 1 kg	Art.-Nr. 014 928	€ 61,60
Pulver, 4 kg	Art.-Nr. 014 930	€ 167,90
Flüssigkeit, klar, 250 ml	Art.-Nr. 014 960	€ 19,50
Flüssigkeit, klar, 500 ml	Art.-Nr. 014 961	€ 34,50
Flüssigkeit, klar, 5 l	Art.-Nr. 014 963	€ 198,00
Flüssigkeit, rosa, 250 ml	Art.-Nr. 014 927	€ 19,50
Flüssigkeit, rosa, 500 ml	Art.-Nr. 014 929	€ 34,50



STEADY-RESIN (SCHEU)

Kaltpolymerisat für die Kieferorthopädie, erhältlich in 3 Ausführungen: S = Sprühtechnik, mit hoher Standfestigkeit und optimaler Benetzbarkeit. M = Modellertechnik, mit hoher Verarbeitungsbreite und sehr guter Modellierfähigkeit. VARIO = mit verlängerter Verarbeitungszeit, universell für Streu- und Modellertechnik. Monomer M+S, für alle Varianten Polymer verwendbar.

Pulver S, 1 kg	Art.-Nr. 266 901	€ 46,20
Pulver M, 1 kg	Art.-Nr. 266 903	€ 46,20
Pulver VARIO, 1 kg	Art.-Nr. 266 992	€ 46,20
Flüssigkeit M+S klar, 500 ml	Art.-Nr. 266 905	€ 25,70
Flüssigkeit M+S rosa, 500 ml	Art.-Nr. 266 907	€ 25,70



STEADY-RESIN FARBMONOMER (SCHEU)

Gebrauchsfertige farbige STEADY-RESIN Monomere. Zur Verwendung mit STEADY-RESIN S, -M und -VARIO sowie DURASPLINT Polymer.

blau, 250 ml	Art.-Nr. 366 924	€ 24,30
gelb, 250 ml	Art.-Nr. 366 925	€ 24,30
rot, 250 ml	Art.-Nr. 366 926	€ 24,30
schwarz, 250 ml	Art.-Nr. 366 927	€ 24,30
grün, 250 ml	Art.-Nr. 366 928	€ 24,30
violett, 250 ml	Art.-Nr. 366 929	€ 24,30



STEADY-RESIN NEONMONOMER (SCHEU)

Gebrauchsfertige farbige Neonmonomere zur Verwendung mit STEADY-RESIN S, -M und -VARIO sowie DURASPLINT Polymer. Für schlierenfreie und transluzente Ergebnisse.

neonpink, 100 ml	Art.-Nr. 366 930	€ 13,20
neonrot, 100 ml	Art.-Nr. 366 931	€ 13,20
neongelb, 100 ml	Art.-Nr. 366 932	€ 13,20
neongrün, 100 ml	Art.-Nr. 366 933	€ 13,20
neonblau, 100 ml	Art.-Nr. 366 934	€ 13,20
neonorange, 100 ml	Art.-Nr. 366 935	€ 13,20



GLIMMER (SCHEU)

Zum Mischen mit STEADY-RESIN Polymer.

blau, 50g	Art.-Nr. 266 910	€ 25,95
grün, 50g	Art.-Nr. 266 912	€ 25,95
silber, 50g	Art.-Nr. 266 913	€ 25,95



KFO-SPRÜHFLASCHEN (SCHEU)

- für die Spray-On-Technik
- optimale Dosierung wird durch Perforieren der Spitze mittels Nadel erreicht
- Fassungsvermögen 100 ml

Sprühflasche für Polymer und Monomer ab 10 Flaschen	Art.-Nr. 266 935	je Flasche € 2,70
Metall Sprühdüse für Monomer, 5 Stück	Art.-Nr. 266 937	€ 19,50
Metall Sprühdüsen für Polymer, 5 Stück	Art.-Nr. 266 939	€ 21,80



FUNNY WORLD (APS)

APS Funny World sind Comic- oder Sternzeichen-Motive, die in Orthodontie-Kunststoffe eingearbeitet werden. Bereits im Wartezimmer kann das Kind sein Lieblingsmotiv aussuchen und die positive Beziehung zu der eigenen Zahnregulierung aufbauen.

Kennenlern-Set mit 20 verschiedenen Comic-Motiven	Art.-Nr. 498 925	€ 7,60
Set Nr. 3 mit 20 verschiedenen Motiven (insgesamt 400 Stück)	Art.-Nr. 498 926	€ 76,50
Sternzeichen-Set mit 12 Motiven (insgesamt 60 Stück)	Art.-Nr. 498 927	€ 16,50



Comic-Motiv	Ente	Hai	Drache	Krokodil	Rabe	Wespe	Schnecke	Kuh
Art.-Nr.	011 901	011 902	011 903	011 904	011 905	011 906	011 907	011 908
1 Packung à 20 Teile	€ 7,60							



Comic-Motiv	Eule	Fußballer rot	Graphitti	Herz	Clown	2 Zähne	Skater	Fußballer blau
Art.-Nr.	011 909	011 911	011 912	011 913	011 914	011 915	011 916	011 917
1 Packung à 20 Teile	€ 7,60							




Comic-Motiv	Formel 1	Surfer	Delphin
Art.-Nr.	011 918	011 919	011 920
1 Packung à 20 Teile	€ 7,60	€ 7,60	€ 7,60



SPECIALSCHRAUBEN (LEWA-DENTAL)

- Mehrsektorenschraube: Kombinierte Transversal- und Protrusionsschraube nach Bertoni, für 2 oder 3 unabhängig einstellbare Sektoren, mit Wachsabdichtung
- Fächerdehnschraube: Einteilig oder zweiteilig zur asymmetrischen Dehnung des Oberkiefers
- Vorschubdoppelplatte: Kieferdehnschraube zur Behandlung von Angle Klasse II Anomalien und gleichzeitiger transversaler Dehnung

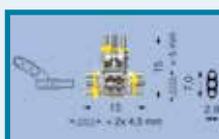

	Mehrsektorenschrauben gerade: 3016/2	Mehrsektorenschrauben abgewinkelt: 4015/3	Mehrsektorenschrauben abgewinkelt: 4016/2	Fächerdehnschrauben einteilig: 1018/FA
Art.-Nr.	090 973	090 974	090 975	090 976
1 Stück	€ 13,60	€ 14,75	€ 14,75	€ 7,50




	Fächerdehnschrauben zweiteilig: 1019/FA	Vorschubdoppelplatten: 4050/VDP
Art.-Nr.	090 977	090 978
1 Stück	€ 6,95	€ 24,50



MICRO-SERIE (LEWA-DENTAL)

- Dehnschraube: Doppelt geführte Dehnschrauben für den allgemeinen Einsatz
- Sektorenschraube: Skelettierte Sektorenschrauben zum Einsatz als Distal-Schraube oder für Einzelzahnbewegungen
- Zugschraube: Zum Schließen von Zahnlücken

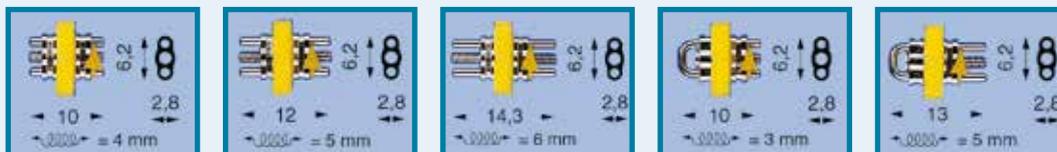

	Dehnschrauben: 3005/7	Dehnschrauben: 3005/12	Dehnschrauben: 3005/14	Sektorenschrauben: 3009/KG	Sektorenschrauben: 3009/G
Art.-Nr.	090 940	090 941	090 942	090 943	090 944
1 Stück	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,10
ab 50 Stück, je Stück	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80




	Sektorenschrauben: 3009/S	Zugschrauben: 3040/ZG
Art.-Nr.	090 945	090 946
1 Stück	€ 2,10	€ 2,70
ab 50 Stück, je Stück	€ 2,00	€ 2,60
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,90	€ 2,50
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,80	€ 2,40



EDELSTAHL-SERIE (LEWA-DENTAL)

- Micro-Dehnschraube: Für Ober- und Unterkiefer
- Maxi-Dehnschraube: Stabile Dehnschraube für den Oberkiefer, mit Retentionsführung und großem Dehnbereich
- Maximum-Dehnschraube: Besonders stabile Dehnschraube für den universellen Gebrauch




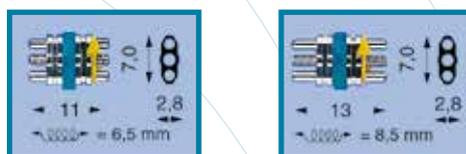


	Micro-Dehnschrauben: 4005/11	Micro-Dehnschrauben: 4005/13
Art.-Nr.	090 960	090 961
1 Stück	€ 2,10	€ 2,10
ab 50 Stück, je Stück	€ 2,00	€ 2,00
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,90	€ 1,90
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,80	€ 1,80





MEDIUM-SERIE (LEWA-DENTAL)

- Dehnschraube: Doppelt geführte Dehnschrauben für den allgemeinen Einsatz
- Sektorenschraube: Skelettierte Sektorenschrauben zum Einsatz als Distal-Schraube oder für Einzelzahnbewegungen
- Zugschraube: Zum Schließen von Zahnlücken

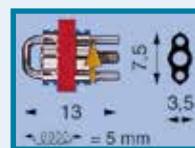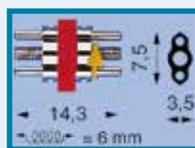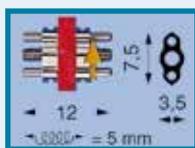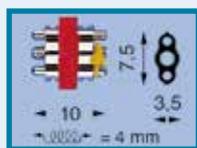

	Dehnschrauben: 1005/7	Dehnschrauben: 1005/12	Dehnschrauben: 1005/14	Sektorenschrauben: 1009/G
Art.-Nr.	090 949	090 950	090 951	090 947
1 Stück	€ 2,05	€ 2,05	€ 2,05	€ 2,05
ab 50 Stück, je Stück	€ 1,95	€ 1,95	€ 1,95	€ 1,95
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,85	€ 1,85	€ 1,85	€ 1,85
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,75



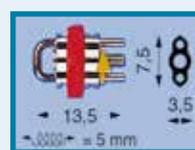
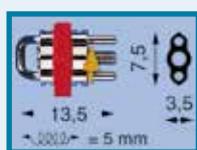


	Sektorenschrauben: 1009/S	Sektorenschrauben: 1009/S0	Zugschrauben: 1040/ZG
Art.-Nr.	090 948	090 969	090 970
1 Stück	€ 2,05	€ 1,85	€ 2,35
ab 50 Stück, je Stück	€ 1,95	€ 1,75	€ 2,25
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,85	€ 1,65	€ 2,15
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,75	€ 1,55	€ 2,05







STANDARD-SERIE (LEWA-DENTAL)

- Dehnschraube: Skelettierte Dehnschrauben für den Ober- und Unterkiefer mit Retentionsbohrung, Gehäuse aus Neusilber, Führungsstiften und Edelstahl Gewindespindel
- Bogenförmige Dehnschraube: Für Engstehende, schmale Oberkiefer mit Gehäuse aus Neusilber, Führungsstiften und Edelstahl Gewindespindel.

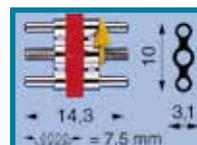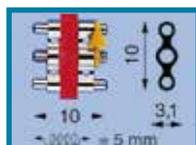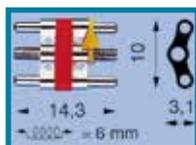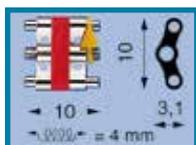

	Dehnschrauben bogenförmig: 1001/N10	Dehnschrauben bogenförmig: 1001/A14	Dehnschrauben OK: 1006/A10	Dehnschrauben OK: 1006/A14
Art.-Nr.	090 952	090 953	090 954	090 954
1 Stück	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,95	€ 1,95
ab 50 Stück, je Stück	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,85	€ 1,85
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,75	€ 1,75
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,70	€ 1,70	€ 1,65	€ 1,65

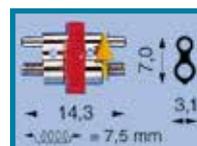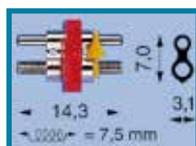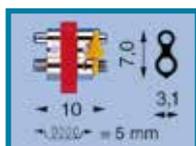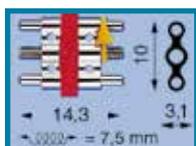

	Dehnschrauben OK: 1006/C14	Dehnschrauben UK: 1006/B10	Dehnschrauben UK: 1006/B14	Dehnschrauben UK: 1006/D14
Art.-Nr.	090 956	090 957	090 959	090 958
1 Stück	€ 1,95	€ 1,95	€ 1,95	€ 1,95
ab 50 Stück, je Stück	€ 1,85	€ 1,85	€ 1,85	€ 1,85
ab 100 Stück, je Stück	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,75	€ 1,75
ab 500 Stück, je Stück	€ 1,65	€ 1,65	€ 1,65	€ 1,65

CHROMIUM-SPULENDRAHT (SCHEU)

- Klammerdrähte hellglänzend, diamantgezogen aus hochwertigem, mundbeständigem Edelstahl
- Festigkeit: federhart = 1.800–2.000 N/mm², hart = 1400–1600 N/mm²

federhart:

0,5 mm Ø, Länge 50 m	Art.-Nr. 066 962	€ 16,95
0,6 mm Ø, Länge 40 m	Art.-Nr. 066 963	€ 16,95
0,7 mm Ø, Länge 30 m	Art.-Nr. 066 964	€ 16,95
0,8 mm Ø, Länge 20 m	Art.-Nr. 066 965	€ 16,95
0,9 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 066 966	€ 16,95
1,0 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 066 967	€ 16,95
1,1 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 066 968	€ 16,95
1,2 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 066 969	€ 16,95

hart:

0,7 mm Ø, Länge 30 m	Art.-Nr. 066 971	€ 16,95
0,8 mm Ø, Länge 20 m	Art.-Nr. 066 972	€ 16,95
0,9 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 066 973	€ 16,95



MENZANIUM-SPULENDRAHT (SCHEU)

- nickelfreier Edelstahl draht, daher ideal für nickelsensibilisierte Patienten
- Legierungsbestandteile: 18 % Chrom, 18 % Mangan, 2 % Molybdän, 1 % Stickstoff.
- Festigkeit: federhart = 1.800–2.000 N/mm², hart = 1.400–1.600 N/mm²

federhart:

0,7 mm Ø, Länge 30 m	Art.-Nr. 166 957	€ 21,40
0,8 mm Ø, Länge 20 m	Art.-Nr. 166 958	€ 21,40
0,9 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 166 959	€ 21,40
1,0 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 166 960	€ 21,40
1,2 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 166 961	€ 21,40

hart:

0,7 mm Ø, Länge 30 m	Art.-Nr. 166 950	€ 21,40
0,8 mm Ø, Länge 20 m	Art.-Nr. 166 951	€ 21,40
0,9 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 166 952	€ 21,40
1,0 mm Ø, Länge 10 m	Art.-Nr. 166 953	€ 21,40



ÖSENKLAMMER (SCHEU)


100 Stück:

Stärke 0,7 mm	Art.-Nr. 066 977	€ 30,80
Stärke 0,8 mm	Art.-Nr. 066 979	€ 30,80



Übersicht der Bänder-Set Varianten

Im Folgenden sind die enthaltenen Stückzahlen je Set aufgelistet
(nur 1 Quadrant je Set):

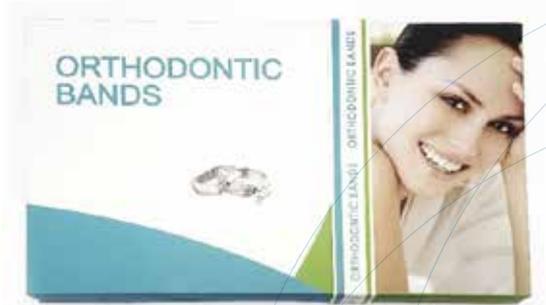

Bänder Sets						
TeleDenta Größe	Einsteiger-Set 1 Introduction Kit 1		Einsteiger-Set 2 Introduction Kit 2		Profi-Set Professional Kit	
	1. Molar	2. Molar	1. Molar	2. Molar	1. Molar	2. Molar
28				2		4
28.5				2		4
29				2		4
29.5				2		4
30				2		4
30.5				2		4
31			2	2	3	5
31.5		2	2	3	3	5
32		2	2	3	4	6
32.5		2	2	3	5	6
33	2	2	3	3	6	7
33.5	2	3	3	4	7	8
34	2	3	4	4	8	8
34.5	3	4	4	4	9	9
35	3	4	5	4	10	9
35.5	4	4	5	4	11	8
36	4	3	5	4	11	8
36.5	4	3	5	4	11	7
37	4	2	5	3	10	7
37.5	3	2	5	3	10	6
38	3	2	4	3	9	5
38.5	2	1	4	2	7	5
39	2	1	3	2	6	4
39.5	1		2	2	5	4
40	1		2	2	3	3
40.5			1	2	3	3
41			1	2	3	3
41.5			1		1	
42			1		1	
42.5			1		1	
43			1		1	
43.5			1		1	
44			1		1	
44.5						
Gesamt	40 Stück		75 Stück		150 Stück	

M+W Kundennummer:

Grid for customer number

bestellt von (Name/Vorname):

Text box for name

Beruf/Praxis

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

Grid for address

PLZ

Ort

Telefon

Telefax (falls Faxangebote erwünscht)*

Unterschrift

E-Mail (falls Newsletter erwünscht)

BESTELLSCHEIN FÜR BÄNDER (EINZEL)



Lieferung:

Delivery date selection: schnellstmöglich am [] [] [] []

Fax-Seite:

Fax page selection: [] [] von [] [] Seiten insgesamt

Bitte die gewünschte Technik ankreuzen:

Selection boxes for Roth 0.018, Roth 0.022, MBT 0.018, MBT 0.022

- weitere Bändergrößen auf Nachfrage bestellbar
alle Bänder auch auf Wunsch mit Palatinalschloss (ohne Aufpreis!)

Table for 1. Molar (OK / Upper) with columns for Größe, Rechts UR, Links UL and rows for sizes 30-40

Table for 1. Molar (UK / Lower) with columns for Größe, Rechts LR, Links LL and rows for sizes 30-40

Table for 2. Molar (OK / Upper) with columns for Größe, Rechts UR, Links UL and rows for sizes 30-40

Table for 2. Molar (UK / Lower) with columns for Größe, Rechts LR, Links LL and rows for sizes 30-40

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.

An M+W faxen oder per Post an: M+W Dental, Postfach 14 40, D-63652 Büdingen

Freefax an: 00 800 / 88 00 80 01

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden. Gültig für Deutschland und Österreich.

* Faxwerbung abbestellen unter: Freefax 00 800 / 88 00 80 01

Unsere Bestell-Hotline: 0 60 42 / 88 00 88 In Österreich: 0800 / 50 08 09



M+W Kundennummer:

bestellt von (Name/Vorname):

Beruf/Praxis

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort


Telefon

Telefax (falls Faxangebote erwünscht)*

Unterschrift

E-Mail (falls Newsletter erwünscht)

BESTELLSCHEIN FÜR BÄNDER (EINZELN)

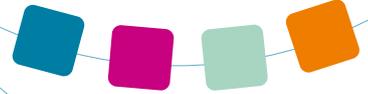

Lieferung:

 schnellstmöglich am

Fax-Seite:

 von Seiten insgesamt

Bitte die gewünschte Technik ankreuzen:

 Roth 0.018 Roth 0.022 MBT 0.018 MBT 0.022

- weitere Bändergrößen auf Nachfrage bestellbar
- alle Bänder auch auf Wunsch mit Palatinalschloss (ohne Aufpreis!)

1. Molar (OK / Upper)		
Größe	Rechts UR	Links UL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

1. Molar (UK / Lower)		
Größe	Rechts LR	Links LL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

2. Molar (OK / Upper)		
Größe	Rechts UR	Links UL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

2. Molar (UK / Lower)		
Größe	Rechts LR	Links LL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.

An M+W faxen oder per Post an: M+W Dental, Postfach 14 40, D-63652 Büdingen
M+W Dental Austria, Albert-Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien

Freefax an: 00 800 / 88 00 80 01

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden. Gültig für Deutschland und Österreich.

* Faxwerbung abbestellen unter: Freefax 00 800 / 88 00 80 01

Unsere Bestell-Hotline: 0 60 42 / 88 00 88 In Österreich: 0800 / 50 08 09

M+W Dental
wir kümmern uns

M+W ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend »Kunde«). Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Zahn- und Kieferärzte, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, Kieferorthopäden, Zahntechniker und ähnliche gewerbliche Dienstleister (Fachkreise). Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (S 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung – auch für künftige Verträge mit demselben Kunden –, ohne dass wir in jedem Einzelfall auf sie verweisen.
- Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, auch ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Das gilt auch, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden das Vertragsangebot vorbehaltlos angenommen haben.
- Individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Beweis des Inhalts der Individualvereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung Voraussetzung.
- Erklärungen, die der Kunde nach Vertragsschluss uns gegenüber abzugeben hat (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Rücktrittserklärung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- Soweit in diesen AGB nicht unmittelbar geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Angebot, Bestellung, Abtretungsverbot

- Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
- Die Bestellung des Kunden ist ein verbindliches Angebot. Mit der Bestellung sichert der Kunde zu, die Ware ausschließlich im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit zu nutzen. Wir können sein Angebot innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen. Die Annahme kann entweder durch Zusenden einer Auftragsbestätigung oder durch Leistung erfolgen.
- Bestellt der Kunde elektronisch, informieren wir ihn per E-Mail automatisch über den Eingang seiner Bestellung. In der automatischen E-Mail ist die Bestellung nochmals aufgeführt. Sie ist nicht die Annahme des Angebots.
- Bei versehentlich falschen Angaben zum Produkt oder zum Preis behalten wir uns vor, den Vertrag anzufechten.
- Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abtreten und nur, soweit unsere Interessen durch die Abtretung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

3. Lieferzeit, Rücktrittsrecht, Lieferverzug

- Können wir eine verbindliche Lieferfrist aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten, informieren wir den Kunden unverzüglich über die voraussichtliche neue Lieferfrist. Sollte die Ware auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar sein, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wurde die Ware bereits bezahlt, erstatten wir den Kaufpreis. Nichtverfügbarkeit der Leistung ist insbesondere gegeben, wenn – wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und selbst nicht rechtzeitig beliefert werden; – eine für die Verbringung der Kaufsache in das Zollinland erforderliche Einfuhrgenehmigung nicht oder nicht rechtzeitig erteilt wird.

Zu unseren Gunsten bestehende gesetzliche Vorschriften über Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die Rückabwicklung des Vertrags bei Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.

4. Lieferverzug setzt eine schriftliche Mahnung des Kunden voraus.

5. Lieferung, Annahmeverzug

- Lieferung erfolgt ab Lager. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Büdingen.
- Auslaufmodelle sind nur lieferbar, solange der Vorrat reicht.
- Wir versenden die Ware an einen vom Kunden bestimmten Ort (Versendungskauf). Mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder Verlusts und der zufälligen Verschlechterung der Ware (Beförderungsgefahr) auf den Kunden über. Wir bestimmen die Versandart (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung). Auf Wunsch des Kunden und gegen Erstattung der Mehrkosten führen wir auch besondere Versandarten (z. B. Eiltransport) oder Teillieferungen durch.
- Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn – eine Teillieferung für den Kunden nach dem vertraglichen Bestimmungszweck verwendbar ist und – die Lieferung der restlichen Ware sichergestellt ist und – dem Kunden durch die Teillieferung kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
- Lieferungen ins Ausland (außer Österreich) sind ab einem Netto-Gesamtwarenpreis in Höhe von EUR 250,00 möglich.
- Lieferungen und der Versand von Katalogen in Nicht-EU-Länder sind nicht möglich.
- Verschreibungspflichtige Arzneimittel liefern wir aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben (S 47 Arzneimittelgesetz) nur gegen Vorlage einer schriftlichen Originalbestellung. Diese muss neben Menge und Bezeichnung des Präparates das Datum, den Stempel des Kunden und dessen Unterschrift enthalten.
- Verzögert sich unsere Leistung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen (z. B. Annahmeverzug), sind wir berechtigt, Ersatz des uns hieraus entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.

6. Preise, Zahlungsbedingungen, Leistungsverweigerungsrecht

- Es gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise. Mit Erscheinen eines neuen Kataloges, Online-Blätterkataloges, digitalen Datenträgers oder neuer Angebote auf unserer Webseite werden die Angebote in sämtlichen vorangegangenen Katalogen, Online-Blätterkatalogen, Mailings, Preislisten und auf der Webseite ungültig. Bei eventuellem Preiserhöhung während der Kataloglaufzeit ist der Kunde an seine Bestellung nicht gebunden. Bei Verträgen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als vier Monaten sind wir berechtigt, die Preise entsprechend der in dieser Zeit eingetretenen Kostensteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5%, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag zu kündigen.
- Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer, keine Verpackungs- und keine Transport-/Versandkosten. Sie gelten ab Lager.
- Bei Bestellungen ab einem Netto-Gesamtwarenpreis von EUR 150,00 gelten die Preise einschließlich Verpackung und Transport-/Versandkosten innerhalb Deutschlands. Sonderzustellungen (z. B. Früh-, Spät- oder Samstagslieferung) werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Lieferungen ins Ausland werden die vom Kunden zu zahlenden Frachtkosten gesondert bestimmt. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.
- Es gibt keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen unter einem Netto-Gesamtwarenpreis von EUR 40,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von EUR 4,90.
- Wir gewähren bis zum Erscheinen des neuen Kataloges oder bis auf Widerruf Rabatte in Abhängigkeit von dem Netto-Gesamtwarenpreis pro Bestellung entsprechend der im aktuell gültigen Katalog abgebildeten Rabattstafel.
- Die Rechnung liegt der Lieferung bei. Die Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Rechnungsbetrag auf einem unserer Konten gutgeschrieben wurde. Verzugs tritt 10 Tage nach Rechnungsstellung ein. Während des Verzugs sind wir berechtigt, den Kaufpreis mit dem jeweils gesetzlichen Verzugszins zu verzinsen. Wir behalten uns vor, weitergehenden Verzugschaden geltend zu machen.
- Wir sind auch dann zur Verweigerung der Leistung nach § 321 BGB berechtigt, wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden schon vor Vertragsschluss wesentlich verschlechtert und wir dies trotz sorgfältiger Prüfung erst nach Vertragsschluss erkennen.
- Der Kunde ist nur berechtigt, Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen, soweit sein Anspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der Lieferung bleibt 6.6 unberührt.

6. Produktbeschaffenheit, Mängelrechte des Kunden

- Aufgrund technischer Gegebenheiten können Produktabbildungen in Katalogen oder sonstigen Unterlagen (auch in elektronischer Form) geringfügig vom Produkt abweichen.
- Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen. Offensichtliche Mängel können nur binnen sieben Tagen nach Erhalt der Ware, sonstige Mängel binnen sieben Tagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich gerügt werden (Ausschlussfrist). Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
- Lag im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Mangel vor, können wir die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) vornehmen.
- Der Kunde hat uns die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir Erstattung der hieraus entstandenen Kosten verlangen.

- Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat sie sich über eine angemessene Zeit hinaus verzögert oder kann sie nach den gesetzlichen Vorschriften verweigert werden, ist Kaufpreisminderung oder bei einem nicht unerheblichen Mangel Rücktritt vom Kaufvertrag möglich.
- Für gebrauchte Erzeugnisse übernehmen wir keine Gewähr. Für recycelte qualitätsgesicherte Erzeugnisse, die aus Gründen des Umweltschutzes wieder in den Materialkreislauf zurückfließen und fabrikneuen Erzeugnissen gleichstehen, übernehmen wir Gewähr wie für fabrikneue Erzeugnisse.
- Weitergehende Gewährleistungen, die über die in dieser Ziffer 6 hinausgehen, übernehmen wir nicht. Insbesondere übernehmen wir keine Garantien und keine Haftung für öffentliche Äußerungen Dritter.
- Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz und auf Ersatz von Aufwendungen bestehen ausschließlich nach Maßgabe von Ziffer 7.

7. Sonstige Haftung

- Auf Schadensersatz haften wir bei Vorsatz – gleich aus welchem Rechtsgrund.
- Bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen und bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung das Erreichen des mit Abschluss des Vertrages verfolgten Zwecks erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
- Die Haftungsbeschränkung nach 7.2 gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Des Weiteren gilt sie nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben oder der Kunde Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz hat.
- Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht zu einem Mangel geführt hat, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
- Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Verjährung

- Ansprüche des Kunden wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren ein Jahr nach Eingang der Ware beim Kunden. Soweit unsere Lieferanten uns eine längere Gewährleistungsfrist einräumen, verlängert sich die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden entsprechend.
- Für Ansprüche nach Ziffer 7 und dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Rückgaberecht

- Der Kunde kann von uns gelieferte Verbrauchsmaterialien unter Angabe des Rückgabegrundes innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Die Frist beginnt ab Eingang der Ware beim Kunden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder der Eingang der Mitteilung bei uns. Der Kunde trägt die Kosten der Rücksendung, es sei denn, wir haben eine andere als die bestellte Ware oder eine mangelhafte Ware geliefert. Er ist verpflichtet, die Ware im Päckchen oder Paket zurückzusenden und eine Kopie des ausgefüllten Retourenscheins beizulegen. Dieser steht im Servicebereich unter www.mwdental.de bzw. www.mwdental.at zum Download zur Verfügung.
- Wir nehmen ausschließlich unbenutzte und ungeöffnete Waren in Originalverpackung, die keine Gebrauchsspuren aufweisen und nicht beschriftet und/oder beklebt sind, zurück.
- Bei Rückgabe erteilen wir dem Kunden eine Gutschrift in Höhe des gezahlten Kaufpreises der zurückgegebenen Ware.
- Reduzierte Waren oder auf Kundenwunsch beschaffte Waren sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Waren, auf die Preisnachlässe (z. B. bei großen Mengen) gewährt wurden. Außerdem sind pharmazeutische Präparate aufgrund gesetzlicher Vorgaben vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

10. Software

- Stellen wir mit unseren Erzeugnissen Software zur Verfügung, räumen wir dem Kunden sowie dem vom Kunden autorisierten Betreiber hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, diese Software auf den Erzeugnissen, mit denen sie geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der Produktbeschreibung genannten Zwecke zu benutzen.
- Software und die dazugehörige Dokumentation dürfen nicht an Dritte – ausgenommen an vom Kunden autorisierte Betreiber – weitergegeben werden. Der Kunde darf Programme nicht kopieren, zurückentwickeln oder zum Kopiersetzen und keine Programmteile herauslösen.
- Das Nutzungsentgelt für die mit unseren Erzeugnissen zur Verfügung gestellte Software ist, soweit nicht anders vereinbart, im Kaufpreis enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den Kunden gelieferten Erzeugnissen durch Software erfolgt gegen Berechnung.
- Wenn der Kunde selbst oder in seinem Auftrag Dritte Servicearbeiten an den Erzeugnissen durchführen, bedarf es zuvor des Abschlusses eines Lizenzvertrages gegen Entgelt.

11. Eigentum, Eigentumsvorbehalt

- An Katalogen und sonstigen Produktbeschreibungen auch in elektronischer Form stehen uns die ausschließlichen Urheberrechte zu. Der Nachdruck unserer Kataloge, auch auszugsweise, ist ebenso wie eine Verlinkung mit unserem Internetangebot und eine sonstige Nutzung des Internetangebots für eigene Zwecke, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zulässig.
- Bis zur vollständigen Erfüllung unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus einem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung bleiben wir Eigentümer der Ware.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszugeben und die Abtretung etwaiger Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Nach Rücknahme der Ware sind wir zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden, abzüglich angemessener Verwertungskosten, angerechnet.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

- Diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlich zuständig für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten sind die für Bindungen zuständigen Gerichte. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

Stand April 2014

M+W BESTELLUNGEN AUS ÖSTERREICH:

Bei Bestellungen aus Österreich beachten Sie bitte zusätzlich folgende Punkte:

Sortiment

Einige Artikel aus dem M+W Katalog sind nicht aus Deutschland lieferbar. Erkundigen Sie sich bitte bei unseren Produktberatern.

Zahlung

Zahlungen bitte auf nachstehendes Konto. Bitte unbedingt den der Rechnung beiliegenden Zahlschein verwenden.

Dadurch wird die Überweisung für Sie gebührenfrei abgewickelt: Salzburger Sparkasse, IBAN: AT54204040000033423,

SWIFT/BIC: SBGSAZ23

Rückgabe

Rücksendung mit dem ausgefüllten Retourenschein – als Download im Servicebereich unter www.mwdental.at erhältlich – bitte ausreichend frankiert an:

M+W Dental Austria, Albert-Schweizer-Gasse 6, A-1140 Wien

Wenn Sie falsch bestellte Ware zurückgeben wollen und eine Neulieferung wünschen, schicken Sie bitte die Waren – wie links unten beschrieben – zur Gutschrift ein und geben Ihre Bestellung schriftlich oder telefonisch bei uns auf (nicht ins Paket legen).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht von Österreich unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Ausschließlich zuständig für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten sind die für Wien zuständigen Gerichte. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

M+W BEI RÜCKGABE/UMTAUSCH ZU BEACHTEN:

Sollte Ihnen ein geliefertes M+W Produkt nicht zusagen – kein Problem. Machen Sie einfach von Ihrem Rückgabe-/Umtauschrecht Gebrauch. Damit alles reibungslos klappt, bitten wir Sie, die hier angegebenen Hinweise zu beachten. Vielen Dank!

- Innerhalb von 14 Tagen Rückgabe oder Umtausch
- Retourenschein (Download im Servicebereich unter www.mwdental.de bzw. www.mwdental.at) ausfüllen und beilegen
- Ausreichend frankieren
- Immer den genauen Grund angeben, um zeitraubende Rückfragen zu vermeiden
- Nur originalverpackte, ungeöffnete und nicht von Ihnen beschriftete Ware
- Auch kleine Artikel bitte nur im Päckchen oder Paket zurücksenden (Briefumschläge können aufreißen!)

GARANTIEFRISTEN SEIT DEM 1. JANUAR 2002

Europäische Richtlinie für Verbrauchsgüter

Im Jahr 1999 hatten sich das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat in der sog. Verbrauchsgüterrichtlinie auf eine europäeinheitliche Mindestgarantiefrist von 2 Jahren ab dem 01.01.2002 geeinigt.

Was ist ein Verbrauchsgüterkauf?

Ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn eine Privatperson ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. D.h., erwirbt ein Zahnarzt Waren für den persönlichen Gebrauch, handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf. Er handelt als Nichtkaufmann. Garantiefrist für Verbrauchsgüter: 2 Jahre

Wann handelt es sich um einen gewerblichen Kauf?

Ein gewerblicher Kauf liegt vor, wenn ein Kaufmann ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der nicht den privaten Zwecken zugerechnet werden kann. D.h., erwirbt ein Zahnarzt Waren für seine Praxis, gilt dies nicht als Verbrauchsgüterkauf, sondern als gewerblicher Kauf. Er handelt als Kaufmann. Garantiefrist für gewerblichen Kauf: 1 Jahr

Verschiedene Hersteller bieten bereits eine Garantie über der gesetzlichen Anforderung von 1 Jahr.

Hinweise hierzu finden Sie bei den entsprechenden Geräten.

PS: Leuchtmittel, Akkus und Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

1980



2020

QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

Die bewährte **M+W** Qualität jetzt im neuen Design.

- zuverlässige Produkte,
auf die viele tausend Kunden
Tag für Tag vertrauen
- jahrzehntelange Produkterfahrung
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016



Das komplette Sortiment finden Sie unter:

www.mwdental.de/select



© 2017 KAVO Dental GmbH

KaVo OP 3D™ mit ORTHOceph™ Plus-Design Innovation in der cephalometrischen Bildgebung

Das duale Röhrenkopf-Design des KaVo OP 3D™ ermöglicht nicht nur einfache und schnelle Arbeitsabläufe bei maximaler Zuverlässigkeit, sondern bietet auch optimale Geometrien für das Panorama- und Fernröntgen. In Kombination mit modernster Sensortechnologie erzielt dies einen hohen Durchsatz und optimale Bildparameter für klinisch exzellente Ergebnisse bei minimaler Strahlenbelastung des Patienten.

Erfahren Sie mehr über die „KaVo Röntgeninnovationen“:
www.kavo.com
oder www.mwdental.de/kavo-röntgen-und-diagnostik

Für weitere Informationen
wenden Sie sich an unseren
technischen Leiter.



Sascha Adamczyk
0170 / 7920008
Sascha.adamczyk@mwdental.de