



BESTDEALS

Geräte & Instrumente gültig bis zum 27.09.2024



Seite 9

20 SONICflex Spitzen
(nach Wahl)
+
SONICflex LUX 2003
oder
SONICflex quick 2008

€1.399,-*

KAVO
Dental Excellence



BIS ZU 20% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!

M+W select SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
 Garantie: Lampe 24 Monate /
 Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku
- 1 Ladekabel
- 1 Lichtleiter 8 mm
- 1 Blendschutzschild
- 1 Wandhalter aus Kunststoff

| | |
|-----------|----------------------|
| weiß | 200 000 |
| orange | 200 001 |
| lichtgrün | 200 002 |
| blau | 200 003 |
| lila | 200 004 |
| rosa | 200 005 |
| grau | 200 006 |
| je Stck. | € 185,00 € 149,00 |



149,-

M+W select SUPERLITE HOCHLEISTUNGS-LED-LAMPE

Die kabellose Hochleistungs-LED-Lampe eignet sich hervorragend für die professionelle und zeitsparende Aushärtung aller Füllungswerkstoffe innerhalb von 3 Sekunden. Für eine optimale Aushärtung in einem sehr breiten Wellenlängenbereich von 410 – 490 nm sorgen 3 Breitband-LEDs. Somit ist diese Lampe für alle marktüblichen Lichthärtenden Materialien hervorragend einsetzbar. Sie haben dabei die Wahl zwischen 2 Aushärtungsmodi. Deren Auswahl ist erkennbar an einem farbigen Ring am Handstück.

1. Ramp – der Softstart Modus: hier steigt die Leistung in den ersten 3 Sekunden an und erreicht danach eine Leistung von 1.500 mW/cm². Sie können wählen zwischen 10 Sekunden oder 20 Sekunden Aushärtungszeit. In diesem Modus leuchtet der Indikationsring am Handstück grün.

2. Hyper – der Full-Power Modus: eine maximale Intensität von 3.500 mW/cm² wird in Impulsen erreicht. Erkennbar auch am rot leuchtenden Indikationsring. Sie können wählen zwischen 1 x 3 Sekunden oder 12 x 3 Sekunden Aushärtungszeit. Damit ist die Polymerisationslampe auch zum Befestigen von Brackets hervorragend geeignet.

Technische Daten:

Batterie: starke Li-Ionen Batterie für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit
 Kopfgröße (H x Ø): 14 x 16 mm
 Handstück (L): 215 mm
 Gewicht: 215 g
 Garantie: 24 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladeadapter
- 50 Einweghüllen
- 1 Handstückhalter
- Gebrauchsanleitung

| | |
|----------|----------------------|
| schwarz | 200 089 |
| weiß | 200 090 |
| je Stck. | € 599,00 € 499,00 |



NEU

499,-

M+W select SUPERLITE POWER PEN

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku
- 1 Ladekabel
- 1 Lichtleiter 8 mm
- 1 Blendschutzschild
- 1 Handteilhalter (Kunststoff)

| | |
|----------|----------------------|
| silber | 200 025 |
| weiß | 200 026 |
| schwarz | 200 027 |
| je Stck. | € 229,00 € 189,00 |



Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
 Durchmesser Handstück: max. 25 mm
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate



189,-

M+W select SUPERLITE 1300

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: max. 1.300 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
 Gewicht: Ladegerät: 560 g,
 Handstück: 245 g
 (inkl. Akku und Lichtleiter)
 Länge Handstück:
 196 mm (inklusive Lichtleiter)
 Maße Ladestation (L x B x H):
 180 x 130 x 66 mm
 Akku: Li-Ion 2200 mAh,
 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Lichtleiter
- 1 Schutzschild

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| 100 045 | 1 Stck. | € 345,00 € 279,00 |
|---------|---------|----------------------|

| | | | |
|----------------------|---------|---------|--------------------|
| Bleaching Lightguide | 100 046 | 1 Stck. | € 59,50 € 46,50 |
|----------------------|---------|---------|--------------------|

4 verschiedene Modi



279,-

ALT GEGEN NEU

AKTION GÜLTIG
AB 01.09.2024

VALO™ LED-Polymerisationsleuchten

Technische Daten:

Länge:
VALO™ Cordless: 20,3 cm
VALO™ Grand Cordless: 20,3 cm
VALO™ X: 22,6 cm
Gewicht:
VALO™ Cordless:
150 g (ohne Batterien)
VALO™ Grand Cordless:
150 g (ohne Batterien)
VALO™ X: 108 g (ohne Batterien)

Leuchtenkopf: H 11,4 mm, B 13,3 mm
VALO™ X: 14,5 mm, 15,5 mm
Ø Linse:
VALO™ Cordless: 9,8 mm
VALO™ Grand Cordless: 11,7 mm
VALO™ X: 12,5 mm
Wellenlängen-Spektrum: 380 – 515 nm
Garantie: 5 Jahre



ab **699,-***

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



VALO™ Cordless

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation inkl. Netzteil,
4 aufladbare Batterien, 1 Handstückhalter,
15 Cordless Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):
Schwarz

076 010 | 1 Kit | € 1.320,00

€ 999,00

mit Rückkaufaktion € 699,00*



€ 300,-
GUTSCHRIFT

vom Sonderpreis
bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

VALO™ Grand Cordless

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte,
4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät,
1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstückhalter,
15 Hygieneschutzhüllen, 1 VALO Grand Light Shield):
Schwarz

141 592 | 1 Kit | € 1.559,00

€ 1.099,00

Red Rock
343 584 | 1 Kit | € 1.559,00

€ 1.099,00

Midnight
343 583 | 1 Kit | € 1.559,00

€ 1.099,00

Sapphire
643 405 | 1 Kit | € 1.559,00

€ 1.099,00

mit Rückkaufaktion € 799,00*



€ 300,-
GUTSCHRIFT

vom Sonderpreis
bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

VALO™ X

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt
- 12,5 mm große Linse deckt jeden Zahn ab
- 12 LEDs
- Einfacher Wechsel zwischen zwei Polymerisations- und Diagnosemodi mit einer Handbewegung oder per Tastendruck
- Flaches, ergonomisches Design; wird nicht warm
- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung
- 5 Zubehörlinsen im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Herstellergarantie

Kit:

1 VALO™ X Polymerisationsleuchte, 1 Batterieladegerät mit 2 aufladbaren Batterien, 5 zusätzliche Linsen, 1 Netzgerät für Batterieladegerät oder Kabeladapter, 1 Kabeladapter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield

076 020 | 1 Kit | € 1.899,00

€ 1.399,00

mit Rückkaufaktion € 1.199,00*



€ 200,-
GUTSCHRIFT

vom Sonderpreis
bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

1.199,-*

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

SmartLite® Pro®

Technische Daten:
 Lichtleistung von ~1250 mw/cm²
 Wellenlängenbereich Cure Aufsatz: 450 – 480 nm
 (Intensitätsmaximum bei ca. 465 nm)
 Handstück mit Akku: 120 Gramm

Einführungspackung:

- 1 Handstück
 - 1 Cure Tip
 - 1 Illumination Tip
 - 2 Akkus
 - 1 Ladestation mit integriertem Radiometer
 - 3 Lichtschutzhüllen
 - Netzteil mit USB-Ladekabel
 - 100 Schutzhüllen
 - Gebrauchsanweisung
 - Aushärtungsübersicht
- 188 088** | 1 Stck. | € 1.599,00
 € 1.249,00

mit Rückkaufaktion € 1.099,00*

- Verlässliche Resultate
- Flaches Design
- Modulares Konzept
- Moderne Optik

Einführungspackung EndoActivator:

- 1 SmartLite® Pro® Handstück
 - 1 EndoActivator Aufsatz
 - 2 Akkus
 - 1 Ladestation
 - 1 Zubehör-Box (Netzstecker, Adapter, USB-Kabel)
 - Technikkarte
 - 100 Schutzhüllen,
 - je 25 EndoActivator Tips small, medium, medium long
- 288 090** | 1 Stck. | € 1.160,00
 € 945,00

Nachfüllpackung EndoActivator:

- 1 EndoActivator Aufsatz
 - 100 Schutzhüllen
 - je 25 Tips small, medium, medium long
 - Technikkarte
- 288 091** | 1 Stck. | € 454,00
 € 359,00

**€ 150,-
 GUTSCHRIFT**
 beim Kauf eines Endo-Resto Kits oder einer Einführungspackung oder einer Basispackung und bei Rückgabe Ihres Altgerätes



SmartLite® Pro® Endo-Resto Kit

- Enthält alle drei Aufsätze**
- 1 Einführungspackung SmartLite® Pro®
 - 1 Nachfüllpackung SmartLite® Pro®
- EndoActivator bestehend aus:
 1 EndoActivator Aufsatz, 1 Technikkarte,
 100 Schutzhüllen, je 25 SmartLite® Pro®
 EndoActivator Tips small, medium und large
- 188 098** | 1 Stck. | € 1.799,00
 € 1.429,00
 mit Rückkaufaktion € 1.279,00*



Gegenüber einem Kauf der Einzelkomponenten ist im SmartLite® Pro® Endo-Resto Kit der neue Endoaktivator Aufsatz um 50% reduziert!

1.099,-* Dentsply Sirona

1.279,-* * bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

Gutta-Smart™

-21%

Gutta-Smart™ Kit:

- 1 Flow-Handstück
 - 1 Pack-Handstück
 - 1 Basisstation
 - je 1 Gutta-Smart™ Conform Fit Gutttapercha Kartuschen 20G, 23G (je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
 - 3 Elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß)
 - 1 Gutta-Smart™ Flow-Heizelement
 - 1 Kanülenbiegewerkzeug
 - 1 Netzwerkadapter
 - 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
 - 2 Verschlusskappen
- 988 650** | 1 Pckg. | € 2.390,00
 € 1.879,00

1.879,-



Dentsply Sirona | VDW MAILLEFER

Thermaprep® 2 Ofen

Kompatibel mit den Obturatoren folgender Systeme:
 GuttaCore, Thermafil, ProTaper, WaveOne, GT Serie X
 Garantie: 12 Monate

188 650
 1 Stck. | € 483,00
 € 399,00

399,-



Ofen zur einfachen und sicheren Erwärmung von Thermafil® und GuttaCore® Obturatoren.

- Dreidimensionale Erwärmung
- Leuchtanzeigen und akustische Warnsignale
- Langsam hochfahrende Obturatorhalter
- Reinigungsprogramm

Dentsply Sirona | VDW MAILLEFER

Bluephase® G4

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladegerät
- 1 Netzkabel
- 1 Akku
- 1 Handstückablage
- 1 Lichtleiter 10 mm

191 000 | 1 Stck. | € 1.265,00
€ 949,00

mit Rückkaufaktion € 799,00*

Bluephase® G4 + Radiometer

191 001 | 1 Stck. | € 1.440,00
€ 1.089,00

mit Rückkaufaktion € 939,00*

Technische Daten:

Lichtleistung: bis zu 1.200 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 385 – 515 nm
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku



€ 150,-
GUTSCHRIFT

vom Sonderpreis
bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

Lichtintensität
1.200 mW/cm²

ab 799,-*

* bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

ivoclar

Bluephase® PowerCure

Bluephase® PowerCure

091 098 | 1 Pckg. | € 1.645,00
€ 1.199,00

mit Rückkaufaktion € 949,00*

Bluephase® PowerCure Kit gemischt:

- 1 Bluephase® PowerCure
- 20 x 0,2 g Tetric® PowerFill Cavifils IVA
- 2 g Tetric® PowerFlow Spritze IVA
- 2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen

219 152 | 1 Pckg. | € 1.645,00
€ 1.199,00

mit Rückkaufaktion € 949,00*

€ 250,-
GUTSCHRIFT

vom Sonderpreis
bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

Lichtintensität
3.000 mW/cm²



949,-*

* bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

ivoclar

Starlight pro

Lieferumfang:

- Handstück inkl. Akku
- 8 mm Lichtleiter 45°
- Blendschutz
- Ladegerät
- Netzteil

042 050 | 1 Stck. | € 605,00
€ 429,00

Technische Daten:

Leistungsdichte: 1400 mW/cm² (gemessen mit Cure Rite)
Dominante Wellenlänge: 440 – 465 nm
Maße (L x B x H) Ladestation: 96 x 120 x 58 mm
Handstück (L x Ø): 190 x max. 23 mm
Gewicht: Ladestation 555 g,
Handstück 105 g
Netzteil (Ladestation): 100 – 230 V(AC), 50/60 Hz, 15 VA
Netzteil (Handstück): Wiederaufladbarer
Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V / 2000 mAh
Lichtquelle: Hochleistungs-LED mit Optik
Lichtleiter: Ø 8 mm, 45°

Lichtintensität
1.400 mW/cm²



-29%

429,-



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

3M™ Elipar™ DeepCure

Technische Daten (Handteil):

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung 3,7V
nutzbarer Lichtwellenlängenbereich: 430 – 480 nm
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm): 1.470 mW/cm²
(unabhängig vom Ladezustand des Akkus)
Lichtaustrittsfläche: 60 – 65 mm² (optisch aktiv)
Maße: Ø 28 mm, L 270 mm
Gewicht inkl. Lichtleiter: 250 g (Version S) bzw. 180 g (Version L)
Garantie: 2 Jahre

3M™ Elipar™ DeepCure-S (Edelstahlvariante)

Lieferumfang:

- Kabelloses Handstück
- Ladestation (230 V)
- Lithium-Ionen-Akku
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild

020 062 | 1 Stck. | € 1.530,00
€ 979,00

3M™ Elipar™ DeepCure-L (Kunststoffvariante)

Lieferumfang:

- Handstück (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku)
- Universalnetzteil mit 5 Adaptern
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild
- 3 Durchhärtescheiben

020 063 | 1 Stck. | € 815,00
€ 515,00

-36%



3M™ Elipar™ DeepCure-L

ab 515,-

Radii-Cal CX LED

LED-Polymerisationslampe mit einer Lichtleistung von 1.200 mW/cm². Kollimierter Lichtstrahl für tiefere, verlässlichere Aushärtung. Das ergonomische Design minimiert die Ermüdung und maximiert den Komfort des Anwenders. Das Handstück wiegt lediglich 144 g. Softstart-Modus, integriertes Radiometer, lange Akkulaufzeit: 1.200 x 10 Sekunden, die Polymerisationslampe arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 440 – 480 nm, 2 Jahre Garantie.

Lieferumfang:

- 1 Radii-Cal CX LED-Polymerisationslampe
- 1 Ladestation
- 1 Netzteil
- 3 Ersatz-Linsenkappen
- Zubehör

459 023 | 1 Kit | € 605,00
€ 449,00



449,-



D-Light® Pro

Technische Daten:
Wellenlänge: 400 – 480 nm
Lichtintensität: 700 mW/cm²
und 1.400 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre

-40%

Lieferumfang:

- Handstückhülle und Elektromodul
- Lichtleiter 8 mm
- 2 Akkus
- Ladestation
- Netzteil
- EU-UK-Adapter
- Fester Augenschutz
- Weicher Augenschutz (3 Stck.)

047 002 | 1 Kit | € 1.350,00
€ 799,00



LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge und integriertem Erkennungsmodus

799,-



Demi™ Plus

Die Demi™ Plus ist eine LED-Polymerisationslampe (lichtemittierende Diode), die auf unseren Vorgängermodellen aufbaut und auch weiterhin die gleichen bestehenden Merkmale bietet, die der Demi-Polymerisationslampe einen solchen kommerziellen Erfolg beschert haben. Dank der PLS-Technologie wechselt die Demi periodisch von einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 1.100 mW/cm² zu einer Höchstleistung von 1.330 mW/cm². Dies ermöglicht der Demi™ Plus eine Aushärtungszeit von nur 5 Sekunden für A3 oder hellere Farbtöne. Das einzigartige Wärmesteuerungssystem von Demetron garantiert eine Kühle, durchgehend hohe Leistungsabgabe ohne Überhitzungsgefahr der Pulpa.

Technische Daten:
Lichtleistung: 1.100 – 1.330 mW/cm²
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

Lieferumfang:

- 1 Handteil
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Netzteil
- 1 Turbo Lichtleiter 8 mm
- 1 Schutzschild

036 040 | 1 Pckg. | € 1.390,00
€ 989,00

-28%



Dental-Polymerisationslampe

989,-



Mini L.E.D. Polymerisationslampen

Technische Daten:
Wellenlänge: 420-480 nm
Lichtleistung:
Mini L.E.D. bis zu 1.250 mW/cm² / 3 Programme,
Mini L.E.D. Active bis zu 1.492 mW/cm²,
Mini L.E.D. SuperCharged bis zu 2.000 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre auf das Handstück,
1 Jahr auf die Ladestation und das Zubehör,
6 Monate auf die Akkus

Mini L.E.D.

798 050 | 1 Stck. | € 1.049,00
€ 699,00

Mini L.E.D. Active

798 042 | 1 Stck. | € 699,00
€ 449,00

Mini L.E.D. SuperCharged

798 068 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 899,00

Lieferumfang:

- 1 Ladestation mit Netzstecker
- 1 Handstück
- 1 Lichtleiter
- 1 Blendschutz

Mini L.E.D. SuperCharged



Mini L.E.D.



Mini L.E.D. Active



ab 449,-



M+W select KAPSELMISCHER

- Zeit im Sekundenschritt wählbar
- 10 Speicherplätze
- 4.200 U/Min.
- 2 Jahre Garantie

200 020 | 1 Stck. | € 299,00
€ 249,00



249,-

SILAMAT® S6

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 17 x 24 x 23 cm
Garantie: 3 Jahre

091 011 | 1 Stck. | € 715,00
€ 535,00



535,-

ivoclar

-25%

3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät

-30%

Technische Daten:
Mischfrequenz: 2.850 Schwingungen/Min.
Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM
Maße (H x B x T): 21 x 18 x 25 cm
Gewicht: 4 kg

020 015 | 1 Stck. | € 930,00
€ 645,00

- Bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus
- Um bis zu 30% verkürzte Mischzeiten (im Vergleich zu 3M™ CapMix™)



645,-

3M™ CapMix™ Universalmischgerät

-33%

Technische Daten:
Mischfrequenz:
4.300 Schwingungen/Min.
Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm
Garantie: 2 Jahre

020 005 | 1 Stck. | € 625,00
€ 415,00

- Für alle Kapselprodukte von 3M™ geeignet
- Schnellverschluss zum einfachen Einlegen und Entnehmen der Kapsel
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten von (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf



415,-

Silver Mix Kapselanmischer

- Inhalt:
- Silver Mix Kapselanmischer
 - 2 Netzkabel

813 780 | 1 Pckg. | € 349,00
€ 219,00



219,-

-37%

GC

Beim Kauf von 3 Instrumenten nach Wahl (Prime Line, Eco Line, Pulverstrahlgerät) erhalten Sie

15% RABATT!

M+W select ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Glasabstichleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht

200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung, mit Licht

200 051 | 1 Stck. | € 449,00

LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht

200 052 | 1 Stck. | € 449,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht

200 053 | 1 Stck. | € 279,00



LE15L € 595,- € 505,75*

LE11L € 449,- € 381,65*

LE21L € 449,- € 381,65*

LE01L € 279,- € 237,15*

ab **237,15***

M+W select PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle
350.000 U/min
Lautstärke: max. 55 dB
Licht: 40.000 Lux
Leistung: 25 Watt
4-fach Spray, Keramikgugellager und Hartmetallspritzanlange
Gewicht: 69 g
Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
Thermodesinfizierbar und autoklavierbar
Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21KL für Multiflex Kupplung
200 040 | 1 Stck. | € 695,00

HP21SL für Sirona Kupplung
200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21WL für W&H Kupplung
200 043 | 1 Stck. | € 695,00

HP21NL für NSK Kupplung
200 041 | 1 Stck. | € 695,00



HP21KL

HP21SL

HP21WL

HP21NL

ab **590,75***

M+W select ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche
320.000 U/min
Lautstärke: max. 62 dB
Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab
Leistung: 24 Watt
4-fach Spray, Keramikgugellager
Gewicht: 63 g
Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21KL für Multiflex Kupplung
200 045 | 1 Stck. | € 449,00

HE21SL für Sirona Kupplung
200 047 | 1 Stck. | € 449,00

HE21WL für W&H Kupplung
200 048 | 1 Stck. | € 449,00

HE21NL für NSK Kupplung
200 046 | 1 Stck. | € 449,00



HE21KL

HE21SL

HE21WL

HE21NL

381,65*

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

GLEICH PASSENDE KUPPLUNG MIT BESTELLEN

Pulverstrahlgerät:

KaVo Anschluss
200 074 | 1 Stck. | € 595,00

Sirona Anschluss
200 075 | 1 Stck. | € 595,00

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



ab **505,75***

* Sonderpreise ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine, Pulverstrahlgerät gemischt)

M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

KaVo QC6016KW 6-Loch, mit Wasserregulierung
200 061
1 Stck. | € 199,00



QC6016KW

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung
200 062
1 Stck. | € 199,00



QC6016SW

NICHT MIT 15% RABATT AKTION KOMBINIERBAR.

199,-



20 SONICflex Spitzen
+ (nach Wahl)
SONICflex LUX 2003
oder
SONICflex quick 2008

€1.399,-*

* Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



SONICflex LUX 2003 LX
ohne Einsätze, mit Drehmomentschlüssel
182 011 | 1 Pckg. | € 1.820,00

SONICflex quick 2008 L
für KaVo Kupplung,
ohne Einsätze, mit Drehmomentschlüssel
182 040 | 1 Pckg. | € 1.820,00

SONICflex quick 2008 LS
für Sirona Kupplung,
ohne Einsätze, mit Drehmomentschlüssel
182 041 | 1 Pckg. | € 1.820,00

HIER KOMMEN
SIE ZUR AKTION:



VORTEILSPAKET

Beim Kauf von einem SONICflex quick Set
oder SONICflex LUX 2003 L Set sind **5 weitere
SONICflex-Spitzen im Preis enthalten.**

Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Bestellung das Aktionskennwort „SONICflex-Aktion“
sowie die Artikelnummern der 5 gewünschten SONICflex-Spitzen an.

SONICflex quick Set 2008 L

Sonicflex quick 2008 L für KaVo Kupplung,
1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze 5A, 6A, 7A
513 192 | 1 Pckg. | ~~€ 1.730,00~~
€ 1.399,00

Sonicflex quick 2008 LS für Sirona Kupplung,
1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze 5A, 6A, 7A
133 514 | 1 Pckg. | ~~€ 1.730,00~~
€ 1.399,00



1.399,-

SONICflex LUX Set 2003 L

Sonicflex Lux 2003 L
1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze 5, 6, 7
613 843 | 1 Pckg. | ~~€ 1.730,00~~
€ 1.399,00



1.399,-

4+1 INSTRUMENTENPAKET

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes – bestehend aus 5 Instrumenten nach Wahl (MASTER-, EXPERT-, Chirurgie-Instrumente, SONICflex, PROPHYflex 4, RONDOflex plus), ist das günstigste im Gesamtpreis enthalten.

Köpfe zahlen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument. Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Instrumenten- Aktion“ an. DUO-Pack nicht in der Aktion enthalten.

MASTERmatic Serie

Garantie 24 Monate.

Schnellaufwinkelstück M25L rot,
1:5, FG-Schaft

182 070 | 1 Stck. | € 2.024,00
€ 1.049,00

Unterteil M20L blau, 1:1

182 071 | 1 Stck. | € 895,00
€ 489,00

Unterteil M07L grün, 2,7:1

182 072 | 1 Stck. | € 985,00
€ 579,00

Unterteil M29L grün, 7,4:1

182 073 | 1 Stck. | € 1.220,00
€ 665,00

Handstück M10L blau, 1:1

182 074 | 1 Stck. | € 1.275,00
€ 729,00



Intra Endo Kopf L3

gelber Punkt, 1:1, für Endo-Handinstrumente,
Griffdurchmesser 3,5-4 mm, 90°-Drehbewegung,
Druckknopfspannung

082 042 | 1 Stck. | € 415,00
€ 259,00

Intra Endo Kopf L53

gelber Punkt, mit Druckknopfspannung, für Wurzelkanal-
instrumente, Winkelstückschaft, 90°-Drehbewegung

082 043 | 1 Stck. | € 415,00
€ 259,00

Intra EVA Kopf L61 G

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, für frei drehbare Feilen
(Cavishape, Bevelshape, Proxoshape, Rootshape)

082 045 | 1 Stck. | € 549,00
€ 349,00

Intra EVA Kopf L61 R

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, 36 Rasterstellungen
zum Arretieren der Feileneinsätze

082 046 | 1 Stck. | € 645,00
€ 409,00

Intra Kopf L67

grüner Punkt, 2:1

082 041 | 1 Stck. | € 469,00
€ 265,00

Intra Kopf L68

blauer Punkt, 1:1

082 040 | 1 Stck. | € 469,00
€ 265,00



ab 259,-

ab 489,-

MASTERtorque™

Garantie 24 Monate.

Turbinenwinkelstück M9000L

182 899
1 Stck. | € 1.765,00
€ 985,00



985,-

Beim Kauf eines Duo Packs, bestehend aus zwei gleichen Instrumenten, sparen Sie € 150,- gegenüber des Einzelkaufs.

EXPERTmatic mit Licht

Duo Pack:

EXPERTmatic E25 L rot, 1:5,
FG-Schaft, 2 Stck.

282 866 | 1 Pckg. | € 2.830,00
€ 1.374,00

Duo Pack:

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 867 | 1 Pckg. | € 2.030,00
€ 980,00

Duo Pack:

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 868 | 1 Pckg. | € 2.280,00
€ 1.164,00

ab 980,-



KAVO

Dental Excellence



EXPERTmatic ohne Licht

Duo Pack:

EXPERTmatic E10 C blau,
1:1 Handstück, 2 Stck.

282 872 | 1 Pckg. | € 1.220,00
€ 608,00

608,-



4+1 INSTRUMENTENPAKET

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes – bestehend aus 5 Instrumenten nach Wahl (MASTER-, EXPERT-, Chirurgie-Instrumente, SONICflex, PROPHYflex 4, RONDOflex plus), ist das günstigste im Gesamtpreis enthalten.

Köpfe zahlen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument. Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Instrumenten- Aktion“ an. DUO-Pack nicht in der Aktion enthalten.

EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 24 Monate.

E25 C rot, 1:5, FG-Schaft

282 848 | 1 Stck. | € 1.195,00
€ 668,00

E20 C blau, 1:1, WST-Schaft

282 849 | 1 Stck. | € 820,00
€ 468,00

E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft

282 850 | 1 Stck. | € 935,00
€ 523,00

E10 C blau, 1:1 Handstück

282 851 | 1 Stck. | € 685,00
€ 379,00



ab **379,-**

EXPERTmatic mit Licht

Garantie 24 Monate.

E25 L rot, 1:5, FG-Schaft

282 845 | 1 Stck. | € 1.490,00
€ 762,00

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft

282 846 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 565,00

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft

282 847 | 1 Stck. | € 1.215,00
€ 657,00



ab **565,-**

EXPERTtorque E680 L

Garantie: 24 Monate.

EXPERTtorque E680 L

282 841 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 729,00



729,-

Beim Kauf eines Duo Packs, bestehend aus zwei gleichen Instrumenten, sparen Sie € 150,- gegenüber des Einzelkaufs.

EXPERTtorque E680 L

Duo Pack:

EXPERTtorque E680L, 2 Stck.

282 865 | 1 Pckg. | € 2.548,00
€ 1.308,00



KAVO

Dental Excellence

1.308,-

MASTERtorque

Duo Pack:

M9000L, 2 Stck.

282 869 | 1 Pckg. | € 3.380,00
€ 1.820,00



1.820,-

MASTERmatic

Duo Pack:

Schnellaufwinkelstück M25L rot, 1:5, FG-Schaft, 2 Stck.

282 870 | 1 Pckg. | € 3.898,00
€ 1.948,00



1.948,-



4+1

GÜLTIG AB 01.09.2024

Beim Kauf von 5 NSK Instrumenten nach Wahl verringert sich der Gesamtpreis um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.

Bis zu **-47%**

(Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht, Ti-Max Z Turbinen, Ti-Max Airscaler mit Licht, S-Max M Lichtturbinen und S-Max M Hand- und Winkelstücke). Auslieferung der Instrumenten-Aktionen erfolgt direkt durch Firma NSK. Bitte geben Sie bei Bestellung „NSK 4+1“ an.

Ti-Max Z Turbinen

NEU

Garantie 24 Monate.

Z890KL Mini-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplung

898 813 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 990,00

Z890SL Mini-Kopf:

für Sirona Kupplung

898 814 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 990,00

Z890WL Mini-Kopf:

für W+H Roto Quick Kupplung

898 815 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 990,00

Z990KL Standard-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplung

898 810 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 990,00

Z990SL Standard-Kopf:

für Sirona Kupplung

898 811 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 990,00

Z990WL Standard-Kopf:

für W+H Roto Quick Kupplung

898 812 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 990,00



990,-

NSK

Airscaler Ti-Max S970 mit Licht

Garantie: 12 Monate.

Ti-Max Airscaler für KaVo

MULTIflex Kupplung S970KL:

1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)

159 085 | 1 Set | € 1.075,00
€ 729,00

Ti-Max Airscaler für Sirona

Schnellkupplung S970SL:

1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)

159 086 | 1 Set | € 1.075,00
€ 729,00



729,-

Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 24 Monate.

Winkelstück Ti-Max X95L:

4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft

917 825 | 1 Stck. | € 925,00
€ 699,00

Winkelstück Ti-Max X25L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung

917 826 | 1 Stck. | € 689,00
€ 542,00

Winkelstück Ti-Max X15L:

1-fach Spray, 4:1 Untersezung

917 827 | 1 Stck. | € 759,00
€ 609,00

Handstück Ti-Max X65L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung

598 844 | 1 Stck. | € 745,00
€ 599,00



ab 542,-

S-Max M Hand- und Winkelstücke

Garantie 24 Monate.

Winkelstück S-Max M95L
mit Licht rot, 4-fach Spray,
1:5 Übersetzung, Keramik-
kugellager, FG-Schaft

698 890 | 1 Stck. | € 739,00
€ 565,00

Winkelstück S-Max M25L
mit Licht blau, 1-fach Spray,
1:1 Übertragung

698 891 | 1 Stck. | € 549,00
€ 428,00

Winkelstück S-Max M15L
mit Licht grün, 1-fach Spray,
4:1 Übersetzung

698 892 | 1 Stck. | € 649,00
€ 509,00

Handstück S-Max M65
ohne Licht blau, 1-fach-Spray,
1:1 Übertragung

698 893 | 1 Stck. | € 399,00
€ 315,00

ab **315,-**



Ti-Max X205L Luftmotor

- Garantie 24 Monate
- 32.000 LUX
- 360°-Drehgelenk mit Licht
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp
- max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%

Ti-Max X205L mit Licht
134 782 | 1 Stck. | € 840,00
€ 529,00

529,-

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.



Typ ISO mit
interner
Wasserzufuhr

Varios 970

Technische Daten:

Maximale Leistung: 11 W
Abmessungen (B x T x H): 160 x 60 x 80 mm
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml
+ Festwasseranschluss
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

Sparpaket P5-A:
Varios 970 Lux Komplettsset
+ 2. Varios LED Handstück
143 480 | 1 Stck. | € 2.780,00
€ 1.849,00

Sparpaket P5-B:
Varios 970 Komplettsset
+ 2. Varios Handstück ohne Licht
443 834 | 1 Stck. | € 2.450,00
€ 1.649,00

Ultraschallgerät mit
der iPiezo-Technologie

ab **1.649,-**

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK

S-Max M Lichtturbinen

Garantie 24 Monate.

Direktanschluss an KaVo Kupplung:

S-Max M800KL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
759 015 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

S-Max M900KL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
759 016 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

Direktanschluss an Sirona Kupplung:

S-Max M800SL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
759 017 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

S-Max M900 SL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
759 018 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

482,-



NSK

Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie 12 Monate.

Ti-Max X-DSG20L 20:1:
mit Doppeldichtsystem, mit Licht
898 077 | 1 Set | € 1.069,00
€ 769,00

Ti-Max X-DSG20 20:1:
mit Doppeldichtsystem, ohne Licht
898 078 | 1 Set | € 849,00
€ 615,00

ab **615,-**

Ti-Max X-SG20L 20:1:
mit Licht
898 079 | 1 Set | € 999,00
€ 699,00

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.



-33%

- iPiezo-Steuerlektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie



GÜLTIG AB 01.09.2024



CLEAN & CLEAR

Nicht nur sauber, sondern rein.

Profitieren Sie zusätzlich beim Kauf von mind. 4 Hand-/Winkelstücken von **einem gratis CLEAN & CLEAR Workshop zur Pflege Ihrer Übertragungsinstrumente.**

**WEITERE INFOS UNTER:
MWDENTAL.DE/WH-CLEAN-CLEAR**



Synea Fusion Aktionspakete*

* Auslieferung erfolgt direkt durch Firma W&H. nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

-50%

Gegenüber UVP

2 Stück ab
650,-

Aktionspaket 1
2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99 LT
759 065 | 1 Paket | **€ 2.040,00**
€ 1.290,00



Aktionspaket 2
2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56 LT
759 066 | 1 Paket | **€ 1.418,00**
€ 894,00



Aktionspaket 3
2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66 LT
759 067 | 1 Paket | **€ 1.670,00**
€ 1.060,00



Aktionspaket 4
2 x Synea Fusion Handstück HG-43 A
759 068 | 1 Paket | **€ 1.030,00**
€ 650,00



Aktionspaket 5
2 x Synea Fusion Turbine TG-98 L
759 069 | 1 Paket | **€ 1.598,00**
€ 1.012,00



Aktionspaket 6
2 x Synea Fusion Turbine TG-98 LM
759 070 | 1 Paket | **€ 1.598,00**
€ 1.012,00



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:

Garantie
Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise
Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 27.09.2024.

Rabatt
Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten
Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung
Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



Mindestbestellwert
Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung
Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht
Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort
Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges
© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WK-99 LT rot:
1:5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,5 mm, FG-Schaft
459 065 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.049,00

Schnelllauf-Winkelstück WK-93 LT rot:
1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft
459 066 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.049,00

Winkelstück WK-56 LT blau:
1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 067 | 1 Stck. | € 910,00
€ 715,00

Untersetzung-Winkelstück WK-66 LT grün:
2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 068 | 1 Stck. | € 998,00
€ 779,00

Untersetzung-Winkelstück WK-86 LT grün:
8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 069 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 849,00

Handstück HK-43 LT blau:
1:1, 1fach-Spray, Drehspannung mit Verriegelung
459 070 | 1 Stck. | € 879,00
€ 699,00



ab 715,-

Synea Fusion Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WG-99 LT rot:
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, mit Licht
359 085 | 1 Stck. | € 1.020,00
€ 789,00

Winkelstück WG-56 LT blau:
1:1 Übertragung, WST-Schaft, mit Licht
359 086 | 1 Stck. | € 709,00
€ 549,00

Winkelstück WG-66 LT grün:
2:1 Reduzierung, WST-Schaft, mit Licht
359 087 | 1 Stck. | € 835,00
€ 649,00

Schnelllauf-Winkelstück WG-99 A rot:
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, ohne Licht
359 088 | 1 Stck. | € 769,00
€ 599,00

Handstück HG-43 A blau:
1:1 Übertragung, ohne Licht
359 089 | 1 Stck. | € 515,00
€ 399,00

ab 399,-



Synea Fusion Turbinen

TG-97 L:
Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht LED+, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-012631
359 080 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

TG-98 L:
Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht LED+, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-028880
359 081 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

TG-97 LM:
Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-002910
359 082 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

TG-98 LM:
Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-007442
359 083 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

615,-



Synea Vision Turbinen

TK-97 L:
Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030
459 062 | 1 Stck. | € 1.295,00
€ 1.009,00

TK-98 L:
Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939
459 063 | 1 Stck. | € 1.295,00
€ 1.009,00

TK-97 LM:
Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475
459 060 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 850,00

TK-98 LM:
Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151
459 061 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 850,00



ab 850,-

Synea Power Edition **NEU**

Die Synea Power Edition mit einer 1:4 Übersetzung wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen, wie beispielsweise die Entfernung von kariösem Material, Kavitäten, Füllungen, Kronen und Brücken konzipiert. Diese Schnellläuferwinkelstücke mit einzigartigem schwarzem Druckknopf sind besonders robust und langlebig. Sie haben eine sehr hohe Schneidleistung für eine bessere Abtragsleistung. Das neue Spannsystem hat eine 20% ige höhere Spannkraft. Mit der Synea 900-Serie hat W&H drei besonders leistungsstarke Schnellläufer, die für die härtesten Materialien geeignet sind. Das Monoblock-Design sorgt für eine bessere Hygiene. Die HeatBlocker Technologie hält den Druckknopf kühl. Vision mit Licht WK-900 LT einer besonders robusten ScratchBlocker Beschichtung. Garantie: 36 Monate, Fusion mit Licht WG-900 LT, Garantie: 24 Monate, Fusion ohne Licht WG-900 A, Garantie: 24 Monate.

Synea Power Winkelstück Vision
mit Licht WK-900 LT
459 082 | 1 Stck. | € 1.769,00
€ 1.110,00

Synea Power Winkelstück Fusion
mit Licht WG-900 LT
459 083 | 1 Stck. | € 1.339,00
€ 840,00

Synea Power Winkelstück Fusion
ohne Licht WG-900 A
459 084 | 1 Stck. | € 1.049,00
€ 675,00



ab **675,-**

Proxeo Ultra

Set Q-Link:

- Steuergerät mit Kühlmitteltank
 - Fußsteuerung C-NW
 - Handstück Q-Link PB-5 LQ
 - Spitzensortiment (1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ)
 - Spitzenwechsler
- 759 002 | 1 Stck. | € 2.699,00
€ 2.376,00



2.376,-

Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

Aktionspaket:

- Antriebshandstück
- Kabellose Fußsteuerung
- Handstückablage
- Ladegerät mit Adapter
- Winkelstückaufsatz LatchShort (PL-66 W)
- +100 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 013 | 1 Pckg. | € 1.595,00
€ 1.199,00

AKTION
Inklusive 1 Packung
Prophy-Kelche
weich (apfelgrün)
im Wert von € 59,-



- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren



1.199,-

Proxeo Twist LatchShort

Aktionspaket:

- 1 Prophylaxe Winkelstück WP-66 W, 4:1
- +100 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 009 | 1 Paket | € 574,00
€ 399,00

AKTION
Inklusive 1 Packung
Prophy-Kelche
weich (apfelgrün)
im Wert von € 59,-

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



399,-



AUSLIEFERUNG ERFOLGT
DIREKT DURCH FIRMA W&H



PROPHYflex™ 4

PROPHY Box

- 1 PROPHYflex™ 4 (Multiflex-Anschluss)
- 80 Sticks PROPHYpearls neutral
- 80 Sticks PROPHYpearls Selection

Wave

282 015 | 1 Pckg. | € 1.375,00
€ 999,00

Lime

282 016 | 1 Pckg. | € 1.375,00
€ 999,00

Flamingo

282 017 | 1 Pckg. | € 1.375,00
€ 999,00



999,-

KAVO
Dental Excellence

AKTION*

Beim Kauf eines PROPHYflex™ 4 Perio Kits sind 4 Flaschen PROPHYflex™ Perio Powder à 100 g im Wert von € 99,80 im Preis enthalten.

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Die KaVo Kerr PROPHY Box vereint die KaVo Prophylaxe-Lösung mit den passenden Kerr Materialien in einem Paket – für effiziente Prophylaxe



Perio Kit:

- 3 perio tip
 - 1 Adapter perio tip
 - 1 Schlüssel (zum Aufschrauben des perio tips)
 - 1 Düsennadel
 - 2 Pulverbehälter
 - 2 Gummiverschlüsse subgingival (pink)
 - 20 g PROPHYflex™ Perio Pulver
- 282 011 | 1 Pckg. | € 350,00
€ 289,00



Air-N-GO® easy Airpolisher

Technische Daten:

Spül- und Luftdurchflussmenge:
15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.)
max. Luftdruck 3–4 bar
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:

- 1 Air-N-GO® easy Handstück
- 1 Adapter, 1 Supra Düse 120°
- 1 Pulverflasche CLASSIC neutral, 250 g
- 1 Air-N-GO® easy Kit (Silikonfett, 3 Pinsel für Silikonfett, Ersatzdichtungen, Spritze und Kanüle, 2 Reinigungsadnellen)

F10102 mit W+H Adapter

138 533
1 Stck. | € 1.349,00
€ 999,00

F10100 mit KaVo Multiflex Adapter

559 080
1 Stck. | € 1.349,00
€ 999,00

F10101 mit Sirona Adapter

559 081
1 Stck. | € 1.349,00
€ 999,00

999,-



acteon

DENTO-PREP™

DENTO-PREP™

inkl. Schnellkupplung und Schlauch
(Bitte zusätzlich entsprechenden Connector mit bestellen)

398 090 | 1 Stck. | € 255,00
€ 199,00



Mikro-Pulverstrahlgerät

199,-

RONVIG
Dental Mfg. A/S

Airsonic® Mini Sandblaster

-26%

- Zum Aufrauen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

Airsonic® Mini Sandblaster Set:

- Sandblaster, 60° Düse
 - 20 g Aluminiumoxid (50 µm)
- 022 028 | 1 Set | € 309,00
€ 229,00



Handliches Sandstrahlgerät

229,-

HÄGER
WERKEN

Perio-Mate

-32%

Lieferumfang:

- Perio-Mate Gerät (Pulverkammer und Handstück)
- 40 Stck. sterile Einweg-Düsenstippen
- 100 g Flasche Perio-Mate Powder
- 1 Reinigungsset
- 1 Fläschchen Öl
- 1 Ersatz-Pulverkammerdeckel



für KaVo Multiflex Kupplung
459 050 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 729,00

für Sirona Schnellkupplung
459 051 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 729,00

für W&H RotoQuick Kupplung
459 052 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 729,00

729,-

NSK

Prophy-Mate neo

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang:

- Handstück mit 60°- und 80°-Düsen
- Reinigungsbürste
- Draht und Düsendrähle
- 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver
- Pulverbehälterdeckel
- Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse



für KaVo MULTIFlex Kupplung
598 053 | 1 Stck. | € 919,00
€ 629,00

für Sirona Schnellkupplung
598 054 | 1 Stck. | € 919,00
€ 629,00

für W&H Kupplung
917 020 | 1 Stck. | € 919,00
€ 629,00

629,-

NSK

Newtron® P5XS

Garantie: 2 Jahre.

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung – für die verschiedensten klinischen Anwendungen

Extra Handstück für extra hohe Hygiene

- Ergonomische Form in jeder Griffposition, mit flexiblem Schlauch
- Innenseite aus Titan, dadurch extrem korrosionsfest
- B.LED: Sichtbarmachung von Plaque und hervorragende Ausleuchtung der Mundhöhle
- Der Kopf des Handstücks ist austausch- und autoklavierbar
- 6 Hochleistungs-LEDs
- Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und hochwertigen Stahlspitzen
- Schnelle und sichere Identifikation
- Präzise und schmerzfreie Beseitigung des Zahnsteins

**ÜBER
-31%**

Newtron® P5XS:

- Mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring)
- 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.
- Autoklavierbarer Universalschlüssel
- 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3
- 300 ml Flüssigkeitsbehälter
- Fest angeschlossener Fußschalter
- Zubehör für die Inbetriebnahme

698 058 | 1 Stck. | € 2.750,00
€ 1.899,00

Handstück Newtron® Slim B.LED
weißer LED-Lichtring
243 665 | 1 Stck. | € 850,00
€ 529,00



1.899,- **acteon**

MyLunos® Set Supra

Lieferumfang:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Pulverbehälter in Blau mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean (180 g)
- O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung

mit KaVo Anschluss
013 005 | 1 Stck. | € 1.575,00
€ 1.299,00

mit Sirona Anschluss
013 006 | 1 Stck. | € 1.575,00
€ 1.299,00

mit NSK Anschluss
013 007 | 1 Stck. | € 1.575,00
€ 1.299,00



Zur sanften, effektiven Entfernung von supragingivalen Verfärbungen

1.299,- **DÜRR DENTAL**

AIR-FLOW® Handy 2+

799,-

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang

- AIR-FLOW® Handy 2+ mit 120° Düse
- Verschlusskappe
- Wartungsset
- 300 g AIR-FLOW®

Sirona anthrazit

698 898 | 1 Stck. | € 959,00
€ 799,00



AIR-FLOW® Handy 3.0

999,-

Lieferumfang:

- 1 AIR-FLOW® Handy 3.0
- 1 Sprayhandstück AIR-FLOW® 120°
- 300 g Flasche AIR-FLOW® Pulver CLASSIC
- 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW® Easy Fill 3.0
- 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW® Easy Clean
- 1 Wartungsset

KaVo

559 000 | 1 Stck. | € 1.199,00
€ 999,00

Sirona

559 001 | 1 Stck. | € 1.199,00
€ 999,00



AIR-FLOW® Station

Die kompakte Prophylaxe-Station. Alle Kabel und Schläuche finden in der Station Platz. Kompatibel mit AIR-FLOW Prophylaxis Master und AIR-FLOW ONE.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 33,0 x 81,0 x 36,0 cm
Gewicht: 8 kg
Benötigt Anschluss an Wasser, Luft und Stromversorgung
Herstellergarantie: 1 Jahr

Lieferumfang

- 1 Wagen
- 1 Kabelhülle
- 1 Installationskit

141 721 | 1 Stck. | € 1.138,00

1.138,-



AIR-FLOW® Station+

Die kompakte All-in-One-Prophylaxestation in einem futuristischen Design. Das direkt in den Wagen integrierte, unabhängige Wasserversorgungssystem verbessert die Ergonomie, ohne dass ein externer Wasseranschluss erforderlich ist.

Lieferumfang

- Wagen
- 800 ml Wasserflasche
- Luftfilter-Kartusche
- Kabelführung (1,6 m)
- Installationskit

243 652 | 1 Stck. | € 1.089,00

1.089,-



AIR-FLOW® Prophylaxis Master

Das Gerät verfügt über AIRFLOW® und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar. Das Gerät zeichnet sich durch seine einzigartige Ergonomie, hohe Präzision, einfachste Wartung und Kompatibilität aus. Das AIRFLOW® MAX Handstück reinigt und poliert in einem Schritt. Das PERIOFLOW Handstück ist in Verbindung mit dem PERIOFLOW und PLUS Pulver für die subgingivale Entfernung von Biofilm geeignet. Mit dem PIEZON Handstück entfernt man effektiv Zahnstein im supra- und subgingivalen Bereich.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 26,0 x 24,5 x 29,0 cm
Gewicht: 2,8 kg
Luftversorgung: trocken, ölfrei, 4,5 – 7 bar
Wasserversorgung: 2 – 5 bar
Herstellergarantie: 2 Jahre

Lieferumfang

- Gerät
- 1 AIRFLOW® MAX Handstück
- 1 PLUS Pulverkammer
- 1 CLASSIC Pulverkammer
- 3 x 400 g AIRFLOW® PLUS Pulver
- 2 x 300 g AIRFLOW® CLASSIC Lemon Pulver
- 1 ClasenUno Spiegelkanülen
- 1 PERIOFLOW Handstück
- 10 PERIOFLOW Düsen
- 1 Düsenentferner
- 1 PIEZON LED Handstück
- 3 PIEZON PS Instrument
- 1 PIEZON PI Starter Kit
- 4 PIEZON Lichtleiter
- 1 PIEZON 800 ml Flasche
- 1 PIEZON PS Instrument Training Tool
- 1 NIGHT CLEANER Flasche
- 1 NIGHT CLEANER Nachfüllung 800 ml
- 2 Clip + Clean
- 1 EasyClean
- je 2 Wasser- und Luftfilter
- 1 Wartungsset
- 1 BIOFILM Discloner
- 1 kabelloser Fußschalter

141 720 | 1 Stck. | € 9.166,00

9.166,-



AIR-FLOW® One Premium with Bluetooth

Pulverstrahlgerät für die Anwendung im Rahmen der zahnärztlichen Prophylaxe. Das Gerät wurde für eine intensive professionelle Anwendung entwickelt. Das Gerät enthält ein AIRFLOW® MAX Handstück zum Reinigen und Polieren in einem Schritt, sowie ein PERIOFLOW Handstück das in Verbindung mit dem PERIOFLOW und PLUS Pulver für die subgingivale Entfernung von Biofilm geeignet ist. Es verfügt über ein Heizsystem mit einstellbarer Wassertemperatur und hat eine lange Lebensdauer durch Pulverleitungen aus chirurgischem Edelstahl.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 21,0 x 24,5 x 29,0 cm
Gewicht: 2,6 kg
Luftversorgung: trocken, ölfrei, 4,5 – 7 bar
Wasserversorgung: 2 – 5 bar
Herstellergarantie: 1 Jahr

Lieferumfang

- Gerät
- 1 AIRFLOW® MAX Handstück
- 1 PLUS Pulverkammer
- 1 CLASSIC Pulverkammer
- 3 x 400 g AIRFLOW® PLUS Pulver
- 2 x 300 g AIRFLOW® CLASSIC Lemon Pulver
- 1 ClasenUno Spiegelkanülen
- 1 PERIOFLOW Handstück
- 20 Düsen
- 1 Düsenentferner
- 1 NIGHT CLEANER Flasche
- 1 NIGHT CLEANER Nachfüllung 800 ml
- 2 Clip + Clean
- 1 EasyClean
- je 2 Wasser- und Luftfilter
- 1 Wartungsset
- 1 BIOFILM Discloner
- 1 kabelloser Fußschalter

343 369 | 1 Stck. | € 7.209,00

7.209,-



EMS⁺

iPex II

Komplettset:

- 1 Steuergerät
 - 1 Messkabel
 - 3 Feilclip
 - 3 Lippenhaken
 - 3 Mangan-trockenbatterien AAA
- 259 049 | 1 Set | € 899,00
€ 569,00

-36%

Technische Daten:
Stromversorgung: 1.5V AAA-Batterien (LR03 oder R03)
Dauerbetrieb: ca. 60 Stunden
Maße (B x T x H): 60 x 60 x 86,5 mm
Gewicht: 76 g (Steuergerät ohne Batterie)
Garantie: 12 Monate



569,-

NSK

CanalPro Jeni

Komplett-Set:

- Steuergerät
 - Motor mit Apex Messkontakt
 - Winkelstück 1:1
 - Bluetooth Fußschalter
 - Netzteil
 - Apexkabel-Set
 - Haltebügel Apexkabel
- 079 020 | 1 Pckg. | € 3.395,00
€ 2.209,00

-34%

AKTION

Beim Kauf von einem CanalPro™ Jeni Komplett-Set sind 5 Packungen HyFlex EDM Niti /Glidepath Feilen oder HyFlex EDM Shaping Max Curve Feilen im Preis enthalten.

Bitte geben Sie bei ihrer Bestellung das Aktionskennwort „Feilenaktion“ sowie die Bestellnummern der gewünschten Feilen an.



Digitales Assistenz-System zur Kanalaufbereitung

2.209,- **COLTENE**

Dual Pex

Lieferumfang:

- Dual Pex Apex Locator
 - 2 Lippenclips
 - 1 Tester
 - 2 Feilclips
 - 1 Messkabel
 - 1 Netzteil mit Adapter
- 150 006 | 1 Pckg. | € 425,00
€ 333,00

- Robustes und kompaktes Design, gut lesbares 3,5" LCD-Farbdisplay
- Präzise Lokalisierung der Feilenposition selbst in trockenen oder feuchten Wurzelkanälen
- Visuelle und akustische Signale in Echtzeit
- Einstellbare apikale Begrenzung (Bezugspunkt)
- Übertragung der Feilenposition auf das Display von Dual Move

Elektronischer Apex-Locator



333,-

Dual Move

Lieferumfang:

- 1 Handstück
 - 1 Winkelstück
 - 1 Handstückhalterung
 - 1 Datenübertragungskabel
 - 1 Ladegerät
 - 1 Sprühkopf
 - 1 Silikonmuffe
- 150 005 | 1 Pckg. | € 840,00
€ 635,00

- Vorbeugung eines Instrumentenbruchs
- 6 programmierbare Speicherplätze mit Einstellung der Geschwindigkeit, der Rotationsrichtung und des maximalen Drehmoments
- Für alle NiTi-Feilen geeignet
- Zwei Bewegungsmodi: kontinuierliche Rotation oder reziproke Bewegungsrichtung
- Einfache Handhabung, optimale Anpassung an Rechts- und Linkshänder
- Modular, im autonomen Betrieb oder in Kombination mit Dual Pex

Kabelloser Endo-Motor

COLTENE
MicroMega



635,-

VÖLLIG UNVERBINDLICHER UND KOSTENLOSER TEST
ÜBER DEN COLTENE AUßENDIENST VORAB MÖGLICH!

Apex Connect Apex-Lokator **NEU**

Elektronischer Apex-Lokator „Apex Connect“ mit Echtzeit-Ansichten der Arbeitslänge über ein Vollfarbdisplay. Intelligente Licht- und Tonanzeigen warnen, wenn man näher an den Apex kommt. Automatische Selbstkalibrierung. Kann mit dem elements Connect Endomotor verbunden werden.

Apex Connect Kit:

- 1 Hauptgehäuse
- 1 Sondenkabel
- 5 Lippenhaken
- je 1 Feilenhalter-Adapter
- Feilenhalter A+B
- Netzteil
- Ladekabel

036 055

1 Pckg. | € 999,00
€ 799,00



-40%
gegenüber Einzelkauf

Apex Connect Kit
+
elements™ Connect Kit
036 057 | 1 Pckg. | € 2.998,00
€ 1.789,00

elements™ Connect Endodontiegerät **NEU**

Tragbarer kabelloser Endomotor mit zwei herausnehmbaren und wiederaufladbaren Batterien für den Dauerbetrieb. 14 Speicherplätze: 9 Plätze sind voreingestellt und 5 Plätze sind individuell anpassbar. Adaptive, reziproke und rotierende Bewegungen, sodass das Gerät für alle führenden Shaping-Marken auf dem Markt verwendet werden kann. Bei Verwendung mit Apex Connect bietet die Lichtanzeige des Handstücks Echtzeit-Feedback, während der Formgebung.

Cordless Motor Kit -EU:

- 1 Motor Handstück
- 2 Akku
- 1 Winkelstück
- 1 Ladestation
- 1 Netzteil
- 1 Ladekabel

036 056 | 1 Pckg. | € 1.999,00
€ 1.699,00



799,-

Kerr™

1.699,-

DIAGNOcam™

Lieferumfang:

- DIAGNOcam™ Vision Full HD (Kabellänge 2,5 m) zur Stand Alone Verwendung am Laptop oder Computer
- 1 Tip Vision Full HD
- 1 Fluoreszenzhaube Vision Full HD
- 1 Tischablage Vision Full HD
- 100 Einwegschutzhüllen Vision full HD

643 048 | 1 Pckg. | € 5.499,00
€ 4.444,00



4.444,-

KAVO
Dental Excellence

Cavitron® Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron®-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119)
- Bis 134 °C autoklavierbar
- Herstellergarantie: 2 Jahre

Cavitron® Select SPS mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron® Powerline 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

088 085 | 1 Stck. | € 3.790,00
€ 3.089,00



Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- & subgingivale Belagterfernung

3.089,-

HÄGER
WERKEN

X-Smart® Pro+ Endo-Motor mit integriertem Apex Locator **NEU**

-25%

**€ 400,-
GUTSCHRIFT**

vom Sonderpreis
bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

188 039 | 1 Pckg. | ~~€ 2.830,00~~
€ 2.149,00
mit Rückkaufaktion € 1.749,00*

- Dynamic Accuracy® Technology – integrierter Echtzeit Apex Locator
- Safety first! – abnehmbare/ autoklavierbare Handstückhülle
- Easy to use – 7" Touch-Screen, portabel & leicht verstaubar
- Rundum Sorglos – 3 Jahre Garantie & aktualisierbare Software



ab **1.749,-***

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

DIE MOTOREN KITS SIND DER EXZELLENTEN BEGLEITER FÜR EINEN EFFIZIENTEN ENDODONTISCHEN WORKFLOW

X-Smart® Pro+ WaveOne Gold Kit
288 086 | 1 Pckg. | ~~€ 2.900,00~~
€ 2.199,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - WaveOne Gold Treatment Solution Kit
 - 4 x WaveOne® Gold Sequenzblister
 - Ein-Patienten-Sequenz à 3 Feilen
 - 6 x WaveOne® Gold Glider-Feile, 25 mm
 - 6 x WaveOne® Gold Small-Feile, 25 mm
 - 6 x WaveOne® Gold Primary-Feile, 25 mm
 - 6 x WaveOne® Gold Medium-Feile, 25 mm
 - 3 x WaveOne® Gold Large-Feile, 25 mm
 - 1 x WaveOne® Gold Papierspitzen Primary (180 Stck.)
 - 1 x WaveOne® Gold Conform Fit® Guttapercha Sortiment (60 Stck.)
 - 10 x Dentsply Sirona Spülkanüle
 - AH Plus Jet® Starter Kit
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15 g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra Oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanlage
 - 1 x Organisationsablage

X-Smart® Pro+ ProTaper Ultimate Kit
288 087 | 1 Pckg. | ~~€ 2.900,00~~
€ 2.199,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - ProTaper Ultimate™ Treatment Solution Kit
 - 4 x ProTaper Ultimate™ (Slider, Shaper, F1, F2, F3), 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ SX Feile, 19 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ Slider Feile, 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ Shaper Feile, 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ F1 Feile, 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ F2 Feile, 25 mm
 - 1 x ProTaper Ultimate™ Papierspitzen Sortiment (180 Stck.)
 - 1 x ProTaper Ultimate™ Conform Fit® Sortiment (60 Stck.)
 - 10 x Dentsply Sirona Spülkanüle
 - AH Plus Jet® Starter Kit
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15 g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra Oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanlage
 - 1 x Organisationsablage

X-Smart® Pro+ TruNatomy Kit
288 088 | 1 Pckg. | ~~€ 2.900,00~~
€ 2.199,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - TruNatomy® Treatment Solution Kit
 - 4 x TruNatomy® Sequenzblister (Orifice Modifier, Glider, Prime), 25 mm
 - 6 x TruNatomy® Orifice-Modifier-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy® Glider-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy® Small-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy® Prime-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy® Medium-Feile, 25 mm
 - 1 x TruNatomy® Papierspitzen Sortiment (180 Stck.)
 - 1 x TruNatomy® Conform Fit® Guttapercha Sortiment (60 Stck.)
 - 10 x Dentsply Sirona Spülkanüle
 - AH Plus Jet® Starter Kit
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15 g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra Oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanlage
 - 1 x Organisationsablage

X-Smart® Pro+ RECIPROC blue Kit
288 089 | 1 Pckg. | ~~€ 2.900,00~~
€ 2.199,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro Endo Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - 24 RECIPROC blue Instrumente, 25 mm (12 x R25, 6x R40, 6 x R50)
 - 180 x RECIPROC blue Papierspitzen, sortiert, steril (90 x R25, 60 x R40, 30 x R50)
 - 60 RECIPROC blue Guttapercha-Stifte, sortiert, steril (36 x R25, 12 x R40, 12 x R50)
 - 1 Endo Übungszahn, trepaniert
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15 g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanlage
 - 1 x Organisationsablage



S.P.E.C. 3 LED Polymerisationslampe

LED Hochleistungspolymerisationslampe mit 3 Modi. Der Standardmodus mit einer Lichtleistung von ca. 1.600 mW/cm² ist ideal für die meisten Composite Aushärtungen. 3K Modus mit einer Lichtleistung bis zu 3.500 mW/cm² für eine besonders schnelle Aushärtung (2 mm in einer Sekunde). Der Ortho Modus härtet die Klammern des gesamten Zahnbogens in 3 Sekunden Intervallen pro Klammer aus. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku schafft ca. 300 Lichthärtungen in 10 Sekunden. Herstellergarantie: 24 Monate.

Lieferumfang:

- 1 S.P.E.C. 3 LED Handstück
- 1 Lichtleiter Turbo-Tip 8 mm
- 2 Lichtschilder
- 1 Ladestation
- 100 Schutzhüllen
- 1 Netzteil Typ C
- 1 Augenschutzschild

443 548 | 1 Stck. | € 1.099,00
€ 719,00



-34%

Lichtintensität
3.500 mW/cm²

719,-

COLTENE

HYDRIM® C61 WD G4 Aktionspaket

Kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät für bis zu 6 große Kassetten. Es können bis zu 120 Instrumente in 60 Minuten vollständig aufbereitet werden. Die validierten Zyklen garantieren ein optimales Reinigungs- und Desinfektionsergebnis. Kurze Trocknungszeit durch die Aktivluft-trocknungstechnologie. Die G4 Technologie ermöglicht eine verlässliche Freigabe der Beladung und kann sich mit Ihren smarten Geräten oder Computer verbinden, wodurch Sie einen einfachen Zugriff auf Zyklusdaten, Instandhaltungsinformationen und Serviceprotokolle haben. Auf Wunsch ist auch ein Fernzugriff durch einen spezialisierten Techniker möglich.

Aktionspaket:

- HYDRIM® C61 WD G4
- 1 LCS Handpiece System
- 1 Centre Support
- 2 Kit 2000 Basket, J
- 1 Lower Trolley
- 1 Vertical Basket
- 4 Adapter Intra
- 3 Adapter Multi, Bar
- 1 Scaler Tip
- 1 HIP Cleaning Solution


643 555 | 1 Stck. | € 8.899,00
€ 6.899,00

Technische Daten:

Maße des Gerätes (B x H x T):
598 x 520 x 526 mm
Tiefe bei geöffneter Tür: 829 mm
Gewicht: 44 kg
Garantie: 2 Jahre



-22%

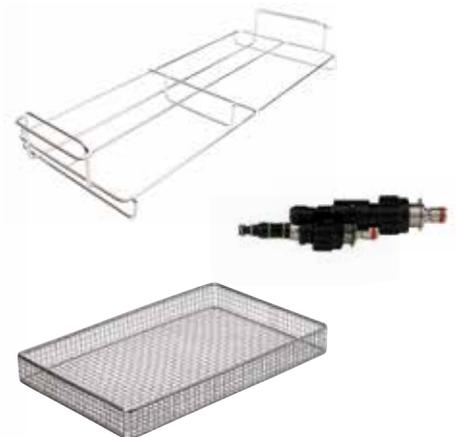

**INKLUSIVE
INSTALLATIONSPAUSCHALE
(ANFAHRT & EINWEISUNG)
IM WERT VON € 550,-**

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

6.899,- SciCan



EyeSpecial C-V **NEU**

Die fünfte Generation der jetzt noch kompakteren, leichten Kamera ist mit einer Wi-Fi-Funktion ausgestattet, mit der Sie Daten direkt auf dem Computer speichern können. Auch die Videofunktion wurde erweitert und regelt die Schärfe der Aufnahme jetzt mit einem kontinuierlichen Autofokus. Konzentrieren Sie sich auf Motiv und Auslösen – alles andere nimmt Ihnen die Kamera ab.

Highlights der neuen SHOFU EyeSpecial C-V sind:
Schnelle, intuitive Menüführung, Brillantes Display, neun Aufnahmemodi, Videofunktion, Wi-Fi-Funktion für Bildübertragung, Automatische Blitzsteuerung, Optionaler Polfilter zum Aufstecken, QR-Code Funktionen.

EyeSpecial C-V
172 004 | 1 Stck. | ~~€ 2.950,00~~
€ 2.499,00

EyeSpecial C-V Koffer
172 005 | 1 Stck. | ~~€ 210,00~~
€ 185,00

Lieferumfang:

- Kamera EyeSpecial C-V
- Makro-Linse (49 mm) von Kenko
- Objektivdeckel, Handriemen
- 16 GB SDHC-Speicherkarte
- SHOFU-Graukarte
- Benutzerhandbuch, Quick Reference (Kurzbedienungsanleitung), wichtige Sicherheitshinweise



Die Dentalkamera – jetzt mit Wi-Fi

2.499,-



DIGITEST® 3

- Mikroprozessor erzeugt sanfte, gepulste Wellenform
- Erzeugt Reaktion unterhalb der Schmerzschwelle des Patienten
- Sondeneinsätze sind autoklavierbar
- Garantie 12 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
 - je 1 Sondeneinsatz standard lang, standard kurz, labial, lingual
 - 1 Lippenklemme
- 559 089 | 1 Pckg. | ~~€ 589,00~~
€ 499,00



499,- parkell®

Turbo SENSOR™

Lieferumfang:

- Turbo SENSOR Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
 - 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
 - 10 Wasserfilter
- 559 026 | 1 Stck. | ~~€ 1.129,00~~
€ 999,00

Transportables Ultraschallreinigungsgesetz für die sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung

999,-




Edelstahl Inserts für 30 kHz-Geräte:
Universal (1.)

659 074 | 1 Stck. | ~~€ 167,00~~
€ 149,00

Perio (2.)
659 075 | 1 Stck. | ~~€ 176,00~~
€ 159,00

gebogen rechts (3.)
659 076 | 1 Stck. | ~~€ 204,00~~
€ 179,00

gebogen links (4.)
659 077 | 1 Stck. | ~~€ 204,00~~
€ 179,00

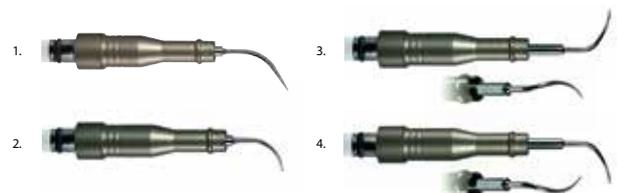

ab 149,-

parkell®

QUATTROcare PLUS

Technische Daten:
Garantie: 12 Monate
Gewicht: 10 kg
Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm
Druckluftanschluss: 4 – 6 bar
Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
- 1 Quattrocare Plus Spraydose
- Druckluftanschluss
- Zubehör

134 694
1 Stck. | € 2.595,00
€ 1.715,00



AKTION

Beim Kauf eines QUATTROcare PLUS sind 6 Flaschen QUATTROcare PLUS Spray im Wert von € 221,40 im Preis enthalten*.

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen



1.715,-

KAVO
Dental Excellence

hf-Surg®

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte – die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten:
2,2 MHz, max. 50 W
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm
Gewicht: 1,6 kg
Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos durch den Hersteller.



- Gerät inkl. Fußschalter
 - autoklavierbarem Handstück
 - Elektrodensatz (4 Stck.: Nr. 1, 2, 13, 15)
 - Neutralelektrode
 - Netzkabel und Medizinproduktebuch
- 022 012 | 1 Stck. | € 1.320,00
€ 1.049,00

1.049,-

HÄGER WERKEN

Surgic Pro Optic

Technische Daten:
Drehmoment: bis zu 80 Ncm
Breites Drehzahlspektrum: 200 – 40.000 U/Min.
LED-Beleuchtung: 32.000 Lux
Gewicht: 280 g
Länge: 81,9 mm
Garantie: 12 Monate

Komplettsset mit Licht:

- 1 Steuergerät mit AHC
- 1 Mikromotor SGL70M
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L mit Licht (20:1 / 80 Ncm)
- 1 Fußschalter
- 5 Kühlmittelschläuche
- und weiteres Zubehör

159 021 | 1 Set | € 3.850,00
€ 2.749,00

Sparpaket S2-A:

- Komplettsset mit Licht
+ Winkelstück X-SG20L (20:1) mit Licht
+ Chirurgie-Handstück X-SG65L mit Licht
- 143 680 | 1 Set | € 5.572,00
€ 3.449,00



ab 2.749,-

NSK

BIS ZU
-38%

iCare C2

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 28 x 35 x 24 cm
Garantie: 12 Monate

Komplettsset:

- iCare C2 Pflegegerät
- Adapter für Spannzangenreinigung
- Stromkabel
- HP Kopffilter
- Öl-Sprühschutz
- Ölfilter-Set
- 1 l Pflegeöl
- Einfüllstutzen für Pflegeöl
- Luftschlauch

559 010
1 Set | € 1.975,00
€ 1.349,00

für 2 Hand-/Winkelstücke + 2 Turbinen



1.349,-

NSK

Dynamix speed 2

Dynamisches Anmischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x L):
330 x 190 x 380 mm
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:
• 1 Dynamix speed 2 Mischgerät 230 V
• 1 Netzkabel mit Schuko-Stecker
042 012 | 1 Stck. | € 1.419,00
€ 1.049,00



-26%

1.049,-



3M™ Pentamix™ 3

Automatisches Mischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x L):
28 x 2,5 x 28,3 cm
Garantie: 2 Jahre

020 045
1 Stck. | € 1.260,00
€ 825,00



-34%

825,-

3M™ Pentamix™ Lite

Automatisches Mischgerät

Technische Daten:
Gewicht: 6,7 kg
Garantie: 2 Jahre

020 008
1 Stck. | € 685,00
€ 449,00



-34%

449,-

MIGMA 200 Universal-Mischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm
Gewicht: 17 kg
Herstellergarantie: 1 Jahr

Farbe:
Gehäuse – signalweiß
Abdeckung – weißaluminium

Tischmodell inkl. 2 Mischbecher
groß mit Deckel, 1 Spatel
198 004 | 1 Stck. | € 1.798,00
€ 1.449,00



1.449,-

Algimix

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 60 W

Algimix Gerät mit Becher und Spatel
022 024 | 1 Stck. | € 635,00
€ 499,00



Alginat-
Anmischgerät

499,-



MELaseal 100+

Technische Daten:
 Abmessungen B x H x T (mit Griff):
 Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,
 Gerät mit Rollenhalter
 Standard 41,5 x 15 x 46 cm
 Netzanschluss: 230 Volt - 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 300 W

MELaseal 100+
 298 793 | 1 Stck. | € 945,00
 € 799,00

Rollenhalter Standard 117
 298 794 | 1 Stck. | € 97,00
 € 79,00

Rollenhalter Komfort 10111,
 verbesserte Ausführung,
 jetzt mit 2 Abstandsscheiben
 398 796 | 1 Stck. | € 152,00
 € 119,00

Rollenhalter Deluxe
 359 084 | 1 Stck. | € 394,00
 € 315,00

799,-

MELAG

competence in hygiene

BIS ZU
-21%



MELaseal 200

Technische Daten:
 Schnittstellen: 1x USB Stick,
 1x USB PC Schnittstelle
 Siegelnahtbreite: 10 mm
 Siegelnahtlänge: 275 mm
 Siegelzeit: ca. 3 Sekunden
 Temperaturbereich: 100 - 210 °C
 Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden
 Stromanschluss: 230 V / 50/60 Hz
 Leistungsaufnahmen
 (in Aufheizphase): 300 Watt

MELaseal 200, validierbar
 132 594 | 1 Stck. | € 1.550,00
 € 1.279,00

Rollenhalter Standard 117
 298 794 | 1 Stck. | € 97,00
 € 79,00

Rollenhalter Komfort 10111,
 verbesserte Ausführung,
 jetzt mit 2 Abstandsscheiben
 398 796 | 1 Stck. | € 152,00
 € 119,00

Rollenhalter Deluxe
 359 084 | 1 Stck. | € 394,00
 € 315,00

Validierbar

MELaseal Pro

Technische Daten:
 Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm
 Gewicht 11,4 kg
 Schnittstelle: 1x RS 232
 Siegelnahtbreite: 14 mm
 Transportgeschwindigkeit: 8 m/min
 Siegelrand anpassbar: 10 - 35 mm
 Temperaturbereich: 100 - 199 °C
 Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden
 Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz
 Leistungsaufnahme
 (in Aufheizphase): 365 Watt

MELaseal Pro, validierbar
 259 095 | 1 Stck. | € 2.729,00
 € 2.199,00

Arbeitsstisch Komfort
 259 096 | 1 Stck. | € 689,00
 € 549,00

Arbeitsstisch Standard
 259 097 | 1 Stck. | € 289,00
 € 229,00

Rollenhalter
 259 098 | 1 Stck. | € 569,00
 € 449,00

Validierbar



Rollenhalter
Standard



Rollenhalter
Komfort



Rollenhalter
Deluxe



Arbeitsstisch
Komfort



Arbeitsstisch
Standard

1.279,-

2.199,-

Euroseal Valida

Technische Daten:
 Maße (B x H x T): 500 x 315 x 485 mm (standard),
 500 x 420 x 485 mm (mit ausgezogenem Rollenhalter),
 500 x 200 x 485 mm (ohne Rollenhalter)
 Gewicht: 8 kg
 Stromversorgung: 200 – 240 V; 50/60 Hz
 Leistung: 150 W
 Maße Siegelnaht: 12 x 310 mm
 Siegeltemperatur einstellbar zwischen 170 – 200 °C

343 401 | 1 Stck. | € ~~1.275,00~~
 € 998,00



Integrierte Dokumentation und Freigabe

Das vernetzte Siegelgerät für die validierte Sterilgutverpackung

998,-

Euroseal Infinity

Technische Daten:
 Maße (L x H x B): 44,5 x 19,8 x 38,5 cm
 Garantie: 2 Jahre

075 745 | 1 Stck. | € ~~589,00~~
 € 499,00



499,-

Euroseal

Technische Daten:
 Stromaufnahme: 100 Watt
 Abmessungen (B x T x H): 44 x 47 x 33 cm,
 mit ausgefahrenem Rollenhalter: 43 cm
 Gewicht: 7,1 kg
 Lieferung ohne Folien
 Garantie: 2 Jahre

inkl. Rollenhalter
 075 712 | 1 Stck. | € ~~665,00~~
 € 535,00



535,-

Aquadist

Technische Daten:
 Gewicht: 3,5 kg
 Maße (Ø x H): 23 x 36 cm
 Garantie: 2 Jahre

-21%

Lieferumfang:

- Aquadist
- Kanister, Fassungsvermögen 4 l
- 6 Aktivkohlefilter
- 250 g Reinigungspulver

075 070 | 1 Stck. | € ~~315,00~~
 € 249,00

Aktivkohlefilter, 12 Beutel
 075 071 | 1 Pckg. | € ~~25,90~~
 € 19,90

Reinigungspulver, 500 g Dose
 075 072 | 1 Pckg. | € ~~23,70~~
 € 19,00



249,-

Einfach destilliertes Wasser herstellen

Eurosonic 3D

-26%

Technische Daten:
 Maße: 260 x 220 x 156 mm
 Leistungsaufnahme: 280 Watt
 Garantie: 2 Jahre

075 000
 1 Stck. | € ~~579,00~~
 € 425,00



425,-

Eurosonic 4D

-34%

Technische Daten:
 Maße: 335 x 260 x 205 mm
 Leistungsaufnahme: 240 Watt
 Garantie: 2 Jahre

140 095
 1 Stck. | € ~~839,00~~
 € 554,00



554,-

Euronda®

Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

Technische Daten:
 Siegelnahtbreite: 8 mm
 Siegelnahtlänge: max. 250 mm
 Maße (B x T x H): 420 x 300 x 220 mm
 Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
 Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns)
 Gewicht: ca. 8 kg
 Farbe: Gerät weiß,
 Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl
 Garantie: 1 Jahr

hawo hd 260 MS-8 ohne Ablagetisch
 059 770 | 1 Stck. | € 530,00
 € 449,00

Ablagetisch 260 T, B 36 x T 23 cm
 059 776 | 1 Stck. | € 41,00
 € 33,20



449,- hawo

Kompaktsiegelgerät ValiPak Touch

Technische Daten:
 Netzanschluss und Frequenz: 230 V, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 100 Watt
 Stand-by Funktion
 Maße (B x T x H): 420 x 360 x 220 mm
 Gewicht: 6,6 kg
 Siegelnahtlänge: max. 250 mm
 Siegelnahtbreite: 10 mm
 Siegeltemperatur:
 190 °C fix eingestellt bei hd 380, von 100 – 200 °C einstellbar
 bei hd 480 Stückzähler, PC-Schnittstelle -hd 480 zusätzlich über
 USB- und Netzwerkschnittstelle (WLAN und Bluetooth adaptiv)
 Gewährleistung des Herstellers: 2 Jahre

hd 480 WSI-V ValiPak Touch
 159 088 | 1 Stck. | € 1.690,00
 € 1.439,00



1.439,- hawo

SYMPRO

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50/60 Hz
 Leistung: 35 W
 Drehzahl: 1.700 U/Min.
 Gewicht: 2 kg

- Gerät
 - Pinzette
 - Reinigungsbecher mit Deckel für Gerät
 - Reinigungsbecher mit Deckel für Nachreinigung
 - Haltemagnet
 - Reinigungsnadeln
 - Leitfaden für hygienische Aufbereitung
- 861 920 | 1 Pckg. | € 1.030,00
 € 799,00

-22%



799,-



SONIRET SWEEP NEU

Das Ultraschallgerät mit SWEEP-Technik (Frequenzautomatik) ermöglicht, ein besonders homogenes und gleichmäßiges Ultraschallfeld im gesamten Beckenvolumen zu erzeugen. Die ständig wechselnden Frequenzen vermeiden Schäden an empfindlichen Reinigungsobjekten und sorgen für eine sehr effektive und materialschonende Reinigung. Die Reinigungsleistung wird nach Bedarf durch Einschalten der leistungsstarken integrierten Heizung intensiviert. Der hochwertige Edelstahlbehälter und das Gehäuse sind resistent gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen und ermöglichen den Einsatz verschiedenster Reinigungschemikalien. Der zum Gerät gehörende Edelstahldeckel verhindert das Ausgasen der Flüssigkeiten. Ob verschiedenste Metalllegierungen, Kunststoffe oder Keramiken – dass SONIRET SWEEP sorgt für eine effektive und schonende Reinigung.

SONIRET SWEEP
 264 912 | 1 Stck. | € 735,00
 € 579,00

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V
 Aufnahmeleistung: 200 W
 Frequenz: 39,5 – 40,5 KHz
 Inhalt: 3 l
 Maße (H x B x T):
 Gerät 210 x 280 x 190 mm,
 Becken: 100 x 240 x 140 mm
 Gehäuse: Edelstahl
 Gewicht: 4,5 kg
 Temperatur: 20 – 80 °C
 Garantie: 2 Jahre

Ultraschallgerät
 mit Frequenzautomatik



579,-



Ultraschallgeräte

BIS ZU
-27%

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel:

GS 2
045 954 | 1 Stck. | € 272,50
€ 199,00

GS 3
045 960 | 1 Stck. | € 325,00
€ 239,00

GS 4
045 957 | 1 Stck. | € 375,00
€ 279,00



| Technische Daten: | GS2 | GS3 | GS4 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Inhalt: | 2 l | 3 l | 4 l |
| Arbeitsfrequenz: | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz |
| Schallgeber: | 2 Schallgeber | 3 Schallgeber | 4 Breitband Schallgeber |
| Leistungsaufnahme: | 250 W | 420 W | 460 W |
| Heizleistung: | 150 W | 300 W | 300 W |
| Wannenabmessung (L x B x H): | 230 x 150 x 80 mm | 238 x 138 x 100 mm | 300 x 150 x 100 mm |
| Außenabmessung (L x B x H): | 260 x 150 x 205 mm | 265 x 160 x 235 mm | 330 x 150 x 100 mm |
| Garantie: | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |

ab **199,-**

qteck[®]
GmbH

BioSonic UC 150

Bewährte Funktionen & Vorteile:

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere Beladungsoptionen
- Handschuhfreundliches Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

Lieferumfang:

- 1 x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Kassettenkorb
- 1 x Abflussschlauch
- 1 x Muster Reinigungslösung
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Anleitung Schnellstart
- 1 x Dichtung für Einbauversion
- 1 x Einbauschablone

243 277 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.115,00

Ultraschall-Reinigungssystem

COLTENE
1.115,-



SONOREX

SONOREX DIGITEC

| Technische Daten: | DT 255 H | DT 102 H |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Maße Schwingwanne (L x B x T): | 300 x 150 x 150 mm | 240 x 140 x 100 mm |
| Inhalt: | 5,5 l | 3,0 l |
| Schwingsystem: | 2 PZT-Großflächen-Schwingsysteme | 3 PZT-Großflächen-Schwingsysteme |
| Ultraschall-Spitzenleistung: | 640 W | 480 W |
| HF-Leistung: | 160 W | 120 W |
| Frequenz: | 35 kHz | 35 kHz |
| Heizung: | 280 W | 140 W |
| Außenmaße (L x B x H): | 325 x 175 x 295 mm | 260 x 160 x 250 mm |
| Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre Langzeitgarantie |

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 923 | 1 Stck. | € 1.290,00
€ 999,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 924 | 1 Stck. | € 1.190,00
€ 869,00



SONOREX SUPER RK 31

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung: 160 W
HF-Leistung: 40 W
Breitstrahl-Schwingsystem
0,9 l-Schwingwanne, innen (L x B x H):
190 x 85 x 60 mm
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt
Außenmaße (L x B x H):
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

SONOREX SUPER RK 31
092 904 | 1 Stck. | € 319,00
€ 255,00



SONOREX SUPER RK 102 H

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung: 480 W
HF-Leistung: 120 W
Heizleistung: 140 W
mit Heizung 30 – 80 °C,
regelbar durch Thermostat
Kugelhahn- und Ablaufschlauch
und Zeitgeber (1 – 15 Min.)
Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm
Garantie: 3 Jahre

RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 901 | 1 Stck. | € 1.029,00
€ 789,00



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

ab **255,-**

SciCan STATIM® 6000B G4+ Vakuum Autoklav

- Kleines Gerät, große Leistung
- Praktische Optionen für automatische Befüllung und Entleerung
- Programmierbar – arbeitet gemäß Plan
- Intelligente Funktionen für automatisierte Abläufe
- Konnektivität und Datenprotokollierung mit der G4+ -Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.

3.150,-



STATIM® B G4+
459 059 | 1 Stck. | € 5.349,00
€ 3.150,00

STATIM® 2000 G4 Kassetten-Autoklav

- Eine komplette Lösung: kurze Zykluszeiten und schnelle Trocknung durch die spezielle STATIM Dri-Tec Trocknungstechnologie
- Innovatives Design, mit einer Kassette als komplett entnehmbarer Sterilisationskammer, ermöglicht schnelles Aufheizen und Abkühlen
- Konform mit EN 13060 & bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können
- Konnektivität und Datenprotokollierung durch die G4 -Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.

2.750,-



-41%

STATIM® 2000 G4
459 058 | 1 Stck. | € 4.649,00
€ 2.750,00

Kurze Zykluszeiten,
schonend, zuverlässig
und smart

STATMATIC™ smart

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm
Gewicht: 7,3 kg
Nennspannung: 100 – 230V
Nennfrequenz: 20/60 Hz
Nennleistung: max. 45VA
Schutzklasse: 1
Umgebungstemperatur: 5.35 °C
Schallpegel: 60 (65) dB (A)
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %
Luftdruck: 4,5 – 6 bar
Luftverbrauch: 40 NI/min
Druckluftqualität:
Restölgehalt max. 0,1 mg/m³
Reststaubgehalt max. 1 µm, max. 0,1 mg/m³
Restwassergehalt max. 0,1 g/m³ at -40 °C

Einweisung und/oder Probeaufstellung durch Firma SciCan.

BIS ZU -26%

Typ 2:
2 feste, motorisierte INTRmatic Adapter,
1 Station für einen Turbinenadapter
459 088 | 1 Stck. | € 3.479,00
€ 2.599,00

Typ 3:
3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter
459 089 | 1 Stck. | € 3.649,00
€ 2.699,00

BRAVO™ G4 Kammerautoklav

Instrumente werden innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Der 17-l und 22-l Autoklav kann mit 3 Kassetten oder 5 Trays und der 28-l mit 4 Kassetten oder 6 Trays beladen werden.

Technische Daten:
Maße: 60 x 48 x 45 cm
Erforderliche Abstände: 2 x 2 x 7 cm
PRV-Wert: 2,4 bar
Elektrische Nennwerte: 220 – 240 V ~ 50 Hz,
10A, 220 – 240 V ~ 60 Hz, 10A
Nennleistung: 2300 W
Gewicht (ohne Wasser): 17-l – 51 kg, 22-l – 52 kg, 28-l – 53 kg
Max. Wasserverbrauch: 17-l – 600 ml/Zyklus, 22-l – 750 ml/
Zyklus, 28-l – 950 ml/Zyklus

Die Auslieferung erfolgt direkt durch den Hersteller.
Die Einweisung durch SciCan ist im Preis enthalten.

17-l
759 090 | 1 Stck. | € 5.449,00
€ 3.250,00
22-l
759 091 | 1 Stck. | € 6.049,00
€ 3.550,00
28-l
759 092 | 1 Stck. | € 6.849,00
€ 4.100,00

- SICHER**
Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.
- LEISTUNGSSTARK**
Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.
- WIRTSCHAFTLICH**
Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler und Kosten reduziert werden können.
- NUTZERFREUNDLICH**
Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC™ smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht eine einfache Bedienung.
- PLATZSPAREND**
Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC™ smart wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät aufbewahrt werden.
- FLEXIBEL**
Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege der Spannzange.

- Intelligente und effiziente Funktionen**
Effiziente Zyklus-Zeiten: Instrumente werden innerhalb von nur 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Die Funktion "verzögerter Start" ermöglicht die zeitliche Programmierung der Zyklen. Eine nützliche Funktion, z.B. für Testzyklen.
- Verschiedene Befülloptionen**
Mehrere Optionen zum Befüllen und Entleeren, u. a. manuelles Befüllen von oben und vorne, sowie automatisches Befüllen und Entleeren durch die Anschlüsse auf der Rückseite.
- Flexibles Design**
Mit 17-l, 22-l oder 28-l Kammergröße bietet der BRAVO G4 genügend Kapazität, um den Anforderungen von Praxen jeder Größe gerecht zu werden.
- G4 - Technologie**
Bietet eine verlässliche Freigabe der Beladung am Gerät, automatische Dokumentation und Datenspeicherung. Übermittelt und ermöglicht Zugriff auf Zyklistaten und Wartungsinformationen.
- EN 13060 - konform**
Bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können.



ab **2.599,-**

SciCan

ab **3.250,-**

One-Step Intro Kit

Thermoplastisches Wurzelfüllsystem mit erhitzter Alpha-Guttapercha auf Kunststoffträgern. Einfache und schnelle Anwendung. Durch den universellen Taper .03 für alle Aufbereitungstechniken geeignet. Die Längenmarkierung und Handhabung wird mit der One-Step Pinzette wesentlich erleichtert. Die Größenauswahl erfolgt mittels der One-Step Size Verifier.

One-Step Intro Kit:

- One-Step Heizgerät
- 20 Obturatoren sortiert
(4 x ISO 20, 5 x 25, 4 x 30,
3 x 35, 2 x 40, 1 x 50, 1 x 60)
- je 6 Verifier ISO 20 – 30, ISO 35 – 60
- je 1 Pinzette 100°, 135°

498 629 | 1 Pckg. | € 342,00
€ 199,00

-42%

One-Step –
zur einfachen,
perfekten und
günstigen
Wurzelfüllung



199,-

Medicom

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



The Wand STA **NEU** Computerassistierte Lokalanästhesie

Die DPS Technologie überwacht und kontrolliert sowohl den Druck als auch die Perfusion des Anästhetikums. Farbige LED-Anzeige und akustische Signale dienen der Kontrolle zur exakten Nadelpositionierung. Für sämtliche Anästhesiearten. Sofort wirkende und zielsichere Anästhesie, zeitlich einstellbar. Mikronadelsystem für optimierte Taktilität. Kein Taubheitsgefühl an den Lippen oder im Gesicht.

The Wand STA Gerät inkl. Fußschalter,
Netzkabel, je 3 Einmal-Handstücke
grün, braun, blau
022 045 | 1 Pckg. | € 2.999,00
€ 2.469,00

Bericht zum Gerät:



2.469,-

**HÄGER
WERKEN**

Ultimate XL

Compact Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact, Handstückablage
und Fußanlasser

299 991 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Compact Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact und Handstückablage

299 998 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Compact Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact und Handstückablage

299 999 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Compact Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact, Handstückablage und
Fußanlasser

443 652 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Motor-Handstück Compact UMXLC

299 988 | 1 Set | € 735,00
€ 499,00

Torque Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque, Handstückablage
und Fußanlasser

299 989 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Torque Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque und Handstückablage

299 986 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Torque Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque und Handstückablage

299 985 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Torque Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque,
Handstückablage und Fußanlasser

299 984 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Motor-Handstück Torque UMXLT

299 987 | 1 Set | € 779,00
€ 519,00

| Technische Daten: | Torque Version | Compact Version |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Drehzahl: | 1.000 – 50.000 U/min | 1.000 – 50.000 U/min |
| Max. Drehmoment: | 8,7 Ncm | 6,0 Ncm |
| Handstück: | 151 cm x Ø 29 mm | 144 cm x Ø 27 mm |
| Gewicht Handstück: | 219 g | 181 g |
| Kabellänge: | 2 m | 2 m |
| Garantie: | 1 Jahr | 1 Jahr |

BIS ZU
-36%

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Torque Fußsteuergerät

Leistungsstark,
präzise und
komfortabel

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE UNTER MWDENTAL.DE

ab **899,-**

NSK

Etagenwagen

- Mit 3 Ablageflächen in großzügigen Abständen zum Abstellen von Kleingeräten aller Art
 - Mit Steckdose
 - Aus verzinktem Metall, pulverlackbeschichtet
 - Mit seitlichen Griffen und Kunststoffrollen
 - Gesamtmaß 46 x 36 x 79 cm
 - Ablagefläche 38 x 28 cm
- Lieferzeiten möglich!

Farbe

Weiß 859 005

Silbergrau 859 006

Blau 859 007

1 Stck. € 259,00

€ 199,00



Neue Farben

199,-

Hinweis: Bitte beachten Sie folgende abweichende Rücknahmebedingungen: Rücksendungen sind nur nach Absprache in Originalverpackung, frei Haus und in einwandfreiem Zustand möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für diese Produkte ggf. Rücknahmekosten in Höhe von 10 % in Abzug bringen müssen.



INTELLIGENT INVESTIEREN. SICHER FINANZIEREN.

PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG:

Investitions-
und Wartungs-
kosten zu
Top-Konditionen
sicher im Griff.

Statten Sie Ihre
Praxis oder Labor
mit den neuesten
technischen
Geräten aus.

Gewährleisten
Sie so eine
optimale Versorgung
Ihrer Patienten
und Kunden!

LEASING

- Zahlen Sie nur für die Nutzung, nicht für das Eigentum
- Planungssicherheit und Liquidität für andere Investitionen
- Reduziert als Betriebsausgabe den zu versteuernden Gewinn
- Flexibilität in der Vertragsgestaltung, Verlängerungsoptionen und Vermeidung von Objektrisiken auf Wunsch
- Bilanzneutralität, Verkürzung des Anlagevermögens

Voll- und Teilamortisation / Kündbar / Operate / Mietvertrag

- Reine Nutzung, kein Eigentumsübergang
- Risiko der Vermarktung liegt bei TARGO Leasing GmbH
- Kalkulation auf Basis eines offenen Restwertes
- Mietausgaben sind operative Ausgaben
- Finanz-Kennzahlen bleiben unberührt
- Laufzeit beträgt zumindest 40 % bis zu 90 % der AfA-Dauer (Leasingerlass)

Optionen am Laufzeit-Ende:

- Kauf des Leasingobjektes zum Marktwert
- Vertragsverlängerung
- Rückgabe des Objektes

MIETKAUF

- Bietet Ihnen eine größere Planungssicherheit
- Fixe und transparente Kalkulationsbasis bis zum endgültigen Erwerb

INVESTITIONSKREDIT

- Investitionsgüter als Eigentum nutzen
- Solide Kalkulationsbasis für Ihre Planung ohne Zinsrisiken
- Kein Verzicht aus Abschreibungen und Ausschöpfung zusätzlicher Subventionsmöglichkeiten

- Feste Vertragslaufzeit
- Mietkäufer ist wirtschaftlicher Eigentümer des Objektes
- Objekt wird bilanziert
- AfA und Zinsen werden steuerlich geltend gemacht
- Voller Eigentumsübergang mit letzter Rate
- Lange Nutzungszeiten

Optionen während der Laufzeit:

- Sondertilgung
- Vorzeitige Ablösung
- Anzahlung
- Höhere Abschlusszahlung

Was können wir für Sie tun? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht:

Telefon: 0 60 42 / 88 00 88 • E-Mail: Leasing@mw dental.de

A-dec® 300 Radius

Höchste Zuverlässigkeit
zum günstigen Preis!

- Höchste Zuverlässigkeit**
5 Jahre Garantie
- Intelligente Ergonomie**
Unübertroffene Zugänglichkeit für Sie bei maximalen Komfort für Ihre Patienten. Wechseln Sie ganz einfach, in Sekunden, zwischen Links- und Rechtsbetrieb
- Hydraulischer Patientenstuhl**
Belastung bis zu 1 Tonne getestet
10 Jahre Garantie auf Hubzylinder
- LED Leuchte**
Optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
- Perfekte Hygiene**
Maximale Sicherheit durch Bottle System
- Polsterfarben frei nach A-dec® Polstermuster auswählbar**
- Ideal für Rechts- und Linkshänder Behandler*innen**



ab € **377,-***
monatliche Leasingrate

Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

* Laufzeit 60 Monate – jeweils 10% Anzahlung und Restwert – alle Werte netto.
 Die Kalkulationen verstehen sich freibleibend und basieren auf den aktuellen Verhältnissen am Geld- und Kapitalmarkt
 Vertragsabschluss versteht sich vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung durch TARCO.

Sie sind interessiert an A-dec® Behandlungseinheiten?
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.



Die A-dec® Polsterfarben im Überblick:

für A-dec® 300 Radius (Dauphine)



für A-dec® 300B Radius (Ultraleather®)



* Ultraleather Pro features Ultrafabric's Ink & Stain Resistant solution which repels stubborn stains, while inherent EPA-registered antimicrobial technology inhibits the growth of bacteria and other surface pathogens.
 ** Color inspired by Pantone's Color of the Year 2023, Viva Magenta — 18-1750 and used with the permission of Pantone LLC — Exclusive for A-dec in the dental market.

M+W Dental
a+dec 500B Radius Behandlungseinheit

A-dec® 500B Radius

Eine Legende neu definiert!
 Die beste A-dec Einheit, die es je gab!

- Erfüllung höchster Ansprüche
- Extreme Stabilität und Zuverlässigkeit
- Moderne Technik und intelligente Einfachheit
- Eleganz und Langlebigkeit
- Geeignet für Patienten bis zu einem Gewicht von 227 kg
- Polsterfarbe frei nach A-dec® Polstermuster auswählbar uvm.
- **Ideal für Rechts- und Linkshänder Behandler*innen**



ab € **535,-***
monatliche Leasingrate

Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

* Laufzeit 60 Monate – jeweils 10% Anzahlung und Restwert – alle Werte netto.
 Die Kalkulationen verstehen sich freibleibend und basieren auf den aktuellen Verhältnissen am Geld- und Kapitalmarkt
 Vertragsabschluss versteht sich vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung durch TARCO.

Sie sind interessiert an A-dec® Behandlungseinheiten?
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefontaster von Ihnen entfernt.



ÜBERZEUGENDE
 QUALITÄT –
 GÜNSTIGER PREIS!



NEU

80 Tücher
6,20

M+W select WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wiederverschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Gropa, 6 x 80 Tücher
 100 718 | 1 Pckg. | € 46,50
 € 37,20

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Careclave

Starterpaket:

- Careclave 618 (inklusive Care Oil Zubehör-Kit, Anschlussset, Schläuche)
- Carebox blue (inkl. 8 Blindadapter, Halterung Seite)
- 8 Carebox HWS-Adapter nach Wahl*
- 1 Halterung E plus
- 6 Tablett 00280
- 2 Tablett schmal 01320
- 1 MELAcontrol

759 095 | 1 Pckg. | € 13.999,00
€ 12.499,00

* Bezüglich der Auswahl der Adapter für die Carebox werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

zzgl. Kosten für Lieferung und Einweisung.



Die einzigartige 4-in-1 Lösung vereint den gesamten Prozess der Instrumentenaufbereitung in nur einem Gerät

12.499,-

Vacuklav 31B+

Austauschpaket:

- 1 x Vacuklav 31 B+
- 1 x Halterung A Plus (kurz)
- 5 x Tablett (29 x 19 cm)
- 1 x MELAflash CF-Card-Printer

759 075 | 1 Pckg. | € 6.799,00
€ 5.999,00

zzgl. Kosten für Lieferung und Einweisung.



5.999,-

Vacuklav 40B+ Evolution

Austauschpaket:

- 1 x Vacuklav 40 B+ Evolution
- 1 x Festwasseranschluss
- 1 x Halterung E Plus (kurz) mit 6 Standard-Tablets (29 x 19 cm)
- 2 x Tablets (schmal, 27 x 11 cm)
- 1 x MELAflash CF-Card

759 073 | 1 Pckg. | € 8.499,00
€ 7.999,00

zzgl. Kosten für Lieferung und Einweisung.

SOLANGE VORRAT REICHT.



7.999,- AUSSTELLUNGSSTÜCK!

MELAG
competence in hygiene

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select RÜTLER

| Technische Daten: | Rüttler 100 W | Rüttler 150 W |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Spannung: | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Leistung: | 100 W | 150 W |
| Strom: | 1,5 A | 2,5 A |
| Maße (B x H x T): | 140 x 140 x 115 mm | 210 x 140 x 115 mm |
| Gewicht: | 5 kg | 10 kg |
| Garantie: | 1 Jahr | 1 Jahr |

BIS ZU
-21%

Rüttler 100 W
094 950 | 1 Stck. | ~~€ 285,00~~
€ 229,00

Rüttler 150 W
094 951 | 1 Stck. | ~~€ 315,00~~
€ 249,00



ab **229,-**

M+W select INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachs-
messern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

| Technische Daten: |
|------------------------------------|
| Spannung: 230 V |
| Leistung: 100 W |
| Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm |
| Gewicht: 550 g |
| Garantie: 1 Jahr |

-17%

Induktionsheizgerät
300 905 | 1 Stck. | ~~€ 239,00~~
€ 199,00



ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

199,-

M+W select K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten
Laboralltag. Durch das ergonomisch geformte
Handstück, wird das Gewicht gut verteilt,
was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

| Technische Daten: |
|--|
| Spannung: 230 V / 60 Hz |
| Leistung: 230 W |
| Drehmoment: 16 Ncm |
| Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min |
| Maße Steuergerät (L x B x H): 263 x 96 x 230 mm |
| Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm |
| Gewicht Steuergerät: 2,6 kg |
| Gewicht Handstück: 0,36 kg |
| Garantie: 1 Jahr |

-18%



Lieferumfang:

- Steuereinheit (Knie)
- Handstück mit Kabel
- Fußschalter
- Handstückablage

094 952 | 1 Stck. | ~~€ 999,00~~
€ 819,00

819,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select EASY-FIRE

Der kleinste und platzsparendste Keramikbrennofen für Zahnärzte und Dentallabore. Mit dem EASY-FIRE lassen sich ganz schnell und unkompliziert Keramikarbeiten farblich charakterisieren oder glasieren. Durch die grazile und leichte Bauweise ist das Gerät ebenfalls bestens dafür geeignet, um direkt vor Ort schnelle Farb-/Korrekturbrände vorzunehmen. Es wird keine Vakuumpumpe benötigt. Leichte und intuitive Bedienung mittels Drehknopf, 9 Programmspeicherplätze, Aufheizrate und Endtemperatur frei einstellbar.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50-60 Hz
 Leistung: 800 W
 Temperatur: max 1.100°C
 Heizrate: 25°C/min
 Maße Gerät (L x B x H): 205 x 155 x 220 mm
 Maße Brenngutträger (L x B): 55 x 55 mm
 Gewicht: 3,6 kg
 Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang:

- Keramikbrennofen
- Netzstecker
- Brenngutträger

245 930 | 1 Stck. | € 1.590,00
 € 999,00

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

999,-

-37%



M+W select POLYLUX LED

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichterhärtender Wachse, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

- 17 LED im Wellenbereich 365 – 405 nm
- Softstart
- Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden
- Erweiterbarer Polymerisationsraum

Technische Daten:
 Spannung: 240 V
 Leistung: 14 W
 Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm
 Lichtraum (Standard) (H x B x T):
 120 x 100 x 50 mm
 Wellenbereich: 365 – 405 nm
 Garantie: 1 Jahr

-19%

Lieferumfang:

- LED-Licht härtegerät inkl. Netzteil
 - Polymerisationsraumerweiterung
- 115 980 | 1 Stck. | € 195,00
 € 159,00



159,-

M+W select POLY-PRO

Kleines und robustes Druckpolymerisationsgerät zur Kalt- und Heißpolymerisation dentaler Kunststoffe. Stufenlose Temperaturregelung 55°C – 120°C.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50 Hz
 Leistung: 200 W
 Druck: max. 3,5 Bar
 Volumen Behälter: 1,05 l
 Maße Gerät (H x B x T): 250 x 160 x 220 mm
 Maße Topf (Ø x H): 126 x 100 mm
 Gewicht: 4 kg
 Garantie: 1 Jahr

-18%

Druckpolymerisationsgerät
 245 920 | 1 Stck. | € 998,00
 € 819,00



819,-


TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select SANDBLASTER

Technische Daten:
Spannung: 220 – 230 V
Leistung LED: 10 W
Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm
Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm,
Ø-innen 32 mm, L = 40 mm
Arbeitsdruck: 1 – 7 bar
Strahltank Füllmenge: ca. 700 g
Gewicht: 13 kg
Garantie: 1 Jahr

Sandstrahlgerät
700 940 | 1 Stck. | € 699,00
€ 569,00

-19%

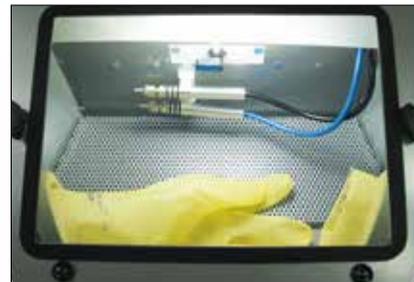

569,-

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select VAPORBOY

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.100 W
Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm
Gewicht: 9 kg
Druck: 0 – 4 bar
Tankvolumen: 3,5 l
Garantie: 2 Jahre

Abdampfgerät
000 994 | 1 Stck. | € 999,00
€ 799,00

-20%



799,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

SILENT compact

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz
 Leistung: 490 W
 Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm
 Saugleistung (max.): 2.500 l/min
 Geräuschpegel: 55 dB (A)
 Füllvolumen Staubschublade: ca. 2,6 l
 Garantie: 3 Jahre

inkl. 2 m Saugschlauch
 und 2 Endmuffen
661 928 | 1 Stck. | ~~€ 1.380,00~~
€ 969,00

969,-

Einzelplatz-
 absaugung



Twister

Technische Daten:
 Netzspannung: 240 V / 50 - 60 Hz
 Drehzahl: 100 - 450 U/min
 Vakuum max.: -890 mbar, -12,9 psi
 Förderleistung max.: 16 l/min
 Maße Wandgerät (B x H x T): 152 x 285 x 235 mm
 Maße mit Standfuß (B x H x T): 230 x 640 x 295 mm
 Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)
 Garantie: 3 Jahre

Vakuumanmischgerät
561 914 | 1 Stck. | ~~€ 1.490,00~~
€ 1.049,00

1.049,-



Basic classic

Technische Daten:
 Arbeitsdruck: 1 - 6 bar, 14,5 - 87 psi
 Anschlussdruck max.: 6 - 8 bar, 87 - 116 psi
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
 Leistung Lampe: 16 W
 Strahlkammervolumen: 14 l
 Maße (B x H x T): 355 x 270 x 415 mm
 Gewicht unbefüllt: 6,5 kg

Gerät mit 2 Tanks:
 1 x 25 - 70 µm,
 1 x 70 - 250 µm
561 937
 1 Stck. | ~~€ 1.250,00~~
€ 949,00

949,-

Feinstrahlgerät



Basic eco

Technische Daten:
 Arbeitsdruck: 1 - 6 bar, 14,5 - 87 psi
 Anschlussdruck max.: 6 - 8 bar, 87 - 116 psi
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
 Leistung Lampe: 9 W
 Strahlkammervolumen: 10 l
 Maße (B x H x T): 350 x 275 x 400 mm
 Gewicht unbefüllt, 2 Tanks: 5,5 kg
 Garantie: 3 Jahre

Gerät mit 2 Tanks:
 1 x 25 - 70 µm,
 1 x 70 - 250 µm
661 962
 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~
€ 749,00

749,-

Feinstrahlgerät



Gipstrimmer MT3

Technische Daten:
 Netzanschluss: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.300 W
 Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm
 Drehzahl: 2.880 - 3.400 U/min
 Gewicht ohne Trimmerscheibe: 13,2 kg
 Garantie: 3 Jahre

MT3 mit Klettfix-Scheibe
561 926 | 1 Stck. | ~~€ 950,00~~
€ 669,00

MT 3 mit teildiamantierter
 Marathon Trimmerscheibe
561 927 | 1 Stck. | ~~€ 1.690,00~~
€ 1.199,00

ab 669,-



VITA OFENPAKET-ANGEBOTE*

* nur gültig bei gleichzeitigem Kauf von Ofen, Pumpe und Bedienteil

VITA VACUMAT 6000 M/MP

VITA VACUMAT 6000 M:
Premium Brennofen für alle dental-keramischen Brände.

- anthrazit (1.)
189 901 | 1 Stck. | € 3.380,00
€ 2.499,00
- karminrot (2.)
289 916 | 1 Stck. | € 3.460,00
€ 2.939,00
- himmelblau (3.)
289 917 | 1 Stck. | € 3.460,00
€ 2.939,00
- tiefschwarz (4.)
289 918 | 1 Stck. | € 3.460,00
€ 2.939,00
- türkisblau (5.)
289 919 | 1 Stck. | € 3.460,00
€ 2.939,00
- verkehrsweiß (6.)
289 920 | 1 Stck. | € 3.460,00
€ 2.939,00

Vakuumpumpe
189 908 | 1 Stck. | € 1.005,00
€ 699,00

Vakuumpumpe II, Rocker
189 925 | 1 Stck. | € 698,00
€ 499,00


Lieferung durch Firma VITA.

VITA VACUMAT 6000 MP:
Kombipressofen für alle auf dem Markt vorhandenen keramischen Materialien, kann als Press- und Brennofen eingesetzt werden.

anthrazit (1.)
189 903 | 1 Stck. | € 4.980,00
€ 3.799,00



Vakuumpumpe

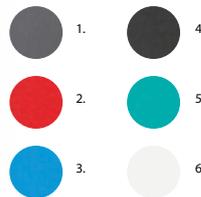

Vakuumpumpe II, Rocker

BIS ZU
-30%

ab **2.499,-**

VITA Easyshade® LITE

Gerät für die digitale Farbbestimmung am natürlichen Zahn. Es ergänzt das VITA-Easyshade®-Portfolio und zeichnet sich durch seine hohe Präzision sowie seine geringe Komplexität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 105 x 85 x 205 mm
Gewicht: ca. 385 g
Temperaturbereich für Anwendung: 15 – 40°C
Anwendungsbereich:
Nur für Innenräume freigegeben
Garantie: 2 Jahre

- 1 VITA Easyshade® LITE Handstück (inkl. 2 AA- Batterien LR6)
 - 1 VITA Easyshade® LITE Kalibrierladestation
- 189 936 | 1 Stck. | € 614,00
€ 499,00



499,-

VITA Easyshade® V

- 1 VITA Easyshade® V Ladestation
 - 1 VITA Easyshade® V Handstück (inkl. 2 x NiMH Akku)
 - 1 Netzteilanschlusskabel
 - 1 Schutzkappe (2 x 18 Stck.)
 - 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo)
 - 1 USB-Bluetooth-Modul
- 189 941 | 1 Stck. | € 1.335,00
€ 999,00

Die 5. Generation des VITA Easyshade® bietet ein OLED-Farbtouchdisplay und ermöglicht die Anbindung an die Smartphone App VITA mobileAssist zur Kommunikation der Farbangaben zwischen Praxis und Labor. Außerdem ist die Anbindung an die Dokumentations- und Kommunikationssoftware VITA Assist möglich.



999,-

VITA experience

PERFECT MATCH
VITA 100

vPad comfort / excellence

vPad comfort
189 999 | 1 Stck. | € 1.685,00
€ 1.269,00

vPad excellence
189 990 | 1 Stck. | € 2.295,00
€ 1.739,00

BIS ZU
-25%



ab **1.269,-**

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Erkoform-3d+

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 360 W
 Maße (H x B x T):
 315 x 350 x 370 mm
 Ø Folien: 120 mm
 Folienstärke: 0 – 5,5 mm
 Max. Vakuum: 0,8 bar
 Gewicht: 11,9 kg
 Garantie: 2 Jahre



-25%

Tiefziehgerät
 119 939
 1 Stck. | € 1.990,00
 € 1.499,00

1.499,-



Erkoform-3d motion

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 380 W
 Maße (H x B x T):
 315 x 350 x 370 mm
 Gewicht: 13,1 kg
 Garantie: 2 Jahre



-20%

Tiefziehgerät
 119 938
 1 Stck. | € 2.350,00
 € 1.885,00

1.885,-



Occluform-3

Okkludator
 119 935
 1 Stck. | € 590,00
 € 415,00



-30%

415,-



VACURET-Anrührgeräte

VACURET EASY* inkl. 400 ml Becher
 164 913 | 1 Stck. | € 1.430,00
 € 1.069,00

VACURET CLASSIC* inkl. 400 ml Becher
 164 912 | 1 Stck. | € 1.695,00
 € 1.269,00

* Wandgerät mit integrierter Vakuumpumpe,
 Stativ optional erhältlich

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
 Aufnahmeleistung: 480 W
 Druckluftanschluss: 6 bar
 Maße (H x B x T): 285 x 155 x 290 mm
 Gewicht: ca. 8 kg
 Garantie: 2 Jahre



BIS ZU -25%



ab 1.069,-

SUPERSTEAM

Dampfstrahler inkl. Dampf-
 Heißwasser- und Druckluft-Funktion
 064 932 | 1 Stck. | € 2.750,00
 € 2.059,00

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 2.200 W
 Gewicht: 14 kg
 Maße (H x B x T): 420 x 300 x 350 mm
 Temperatur: 160 °C
 Druck: 6 bar
 Tankvolumen: 5 l
 Garantie: 2 Jahre




2.059,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

CeramageUP Set

8 Color Set:

- 2 ml Universal Opaque Pre-Opaque
- je 2 ml Universal Opaque Opaker A10, A20, A30, A3.50, A40, B20, C20, PO
- je 5 g Halsmasse AC1, AC2, BC1, CC1
- je 5 g Dentin A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
- je 5 g Opaque-Dentin ODA1, ODA2, ODA3, ODA

173 901 | 1 Set | € 1.795,00
€ 1.599,00

AKTION

Beim Kauf von
1 CeramageUP
8 Color Set ist
1 Sublite V Gerät
im Preis enthalten.

Ceramage Set

Standard Set:

- 2 ml Pre-Opaque
- je 2 ml Opaque A10, A20, A30, A3.50, A40, B20, B30, C30, MO, BGO
- je 4,6 g Cervical AC1, AC2, BC1, CC1
- je 4,6 g Opaque Dentin ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB2, ODB3, ODC3
- je 4,6 g Dentin/Body A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C3B
- je 4,6 g Incisal S8, S9, 60
- je 4,6 g Translucent T, HVT, LVT, T-Glass
- je 2 ml Flowable Composite Resin F-59, F-A3B, F-root AB
- 6 ml Ceramage Modelling Liquid
- 7 ml CERAMAGE Spacer
- 10 ml Ceramage Oxy-Barrier
- Pinsel UNI BRUSH No. 4 (1 Griff / 10 Pinselspitzen)
- 10 Anmischschale
- Anmischblock
- 1 Lichtschutzkappe

070 916 | 1 Set | € 1.399,00
€ 1.249,00

AKTION

Beim Kauf von
1 Ceramage
Standard Set ist
1 Sublite V Gerät
im Preis enthalten.

1.599,-



1.249,-



Sublite V

- Zwei Belichtungsprogramme (5 und 20 Sek.)
- Lichtschutz horizontal und vertikal justierbar
- Maße (H x B x T): 252 x 112 x 210 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Sublite V Gerät kpl. mit Lampen
172 930 | 1 Stck. | € 785,00
€ 699,00

AKTION

Beim Kauf von
1 Sublite V Gerät
ist 1 CRB Sortiment
im Preis enthalten.

Solidilite LED

172 931 | 1 Stck. | € 2.875,00
€ 2.599,00

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 400 x 315 x 400 mm
Gewicht: 10 kg
Spannung: 250 V
Innenraumgröße Polymerisations-
kammer (H x B x T): 110 x 160 x 150 mm
Garantie: 1 Jahr

AKTION

Beim Kauf von
1 Solidilite LED Gerät
ist 1 Sublite V Gerät
im Preis enthalten.

699,-



2.599,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Asiga Ultra 3D-Drucker **NEU**

Der Asiga Ultra revolutioniert die 3D-Drucktechnologie durch seine fortschrittliche 4K DLP- Imaging Technologie, vergrößerter Bauplatte und gleichzeitig einer präziseren Pixelgröße von nur 50 µm, die eine hohe Detailgenauigkeit und Oberflächenqualität ermöglicht. Ausgerüstet mit der neuesten Generation von DLP Beamern im Wellenlängenbereich von 385 nm, passt er sich nahtlos an eine Vielzahl von Anwendungen an und unterstützt durch eine umfassende Materialkompatibilität. Die wohl intuitivste Bedienoberfläche, ergänzt durch Funktionen wie berührungslose Haubenbetätigung, innovativer Infrarotheizung und schnellen Materialwechsel, machen ihn ideal für jedes Einsatzgebiet. Neben zukunftsweisender Automatisierungs- & Monitoringmöglichkeiten bietet das Gerät ebenfalls einen Workflow ohne jegliches Kalibrieren. Mit seiner kompakten Größe von 340 x 440 x 555 mm und einem Gewicht von 30,5 kg vereint der Asiga Ultra Raumeffizienz mit der Leistungskraft eines Industrieeräts.

Technische Daten:
Spannung: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung: 600 W
Maße (B x T x H): 340 x 440 x 555 mm
Bauraum (X x Y x Z): 192 x 108 x 145 mm
Systemkonforme Datenformate:
STL, SLC, STM
Bildtechnologie: 4K DLP-Imaging mit SPS™-Technologie
Pixelgröße: 50 µm
Lichtquelle: UV-LED Beamer
Wellenlänge: 385 nm
Gewicht: 30,5 kg

Systemvoraussetzungen:
Prozessor: 2,4 GHz
Speicher: 4 GB
Grafik: 256 MB (mindestens OpenGL 2.0)
Maus: zu bevorzugen
Netzwerk: Unterstützt WiFi, WirelessDirect und Ethernet
Freier Festplattenspeicher: 1 GB

566 954
1 Stck. | € 14.999,00
€ 13.499,00



Asiga Max 2 3D-Drucker **NEU**

Der Asiga Max 2, entwickelt für die Dental-, Audiologie- und Fertigungsindustrie, kombiniert fortschrittliche DLP-Imaging-Technologie mit einer Pixelgröße von 62 µm für detailreiche Drucke hoher Qualität. Er gewährt Zugang zu über 500 Materialien und zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung, 60-Sekunden-Kalibrierung und schnellen Materialwechsel aus. Als Komplettsystem inklusive der Asiga Composer Software mit lebenslangen Updates, WiFi, Wireless Direct und Ethernet-Anbindung, bietet der MAX 2 alles für den sofortigen Einsatz in jedem Labor.

Technische Daten:
Spannung: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung: 500 W
Maße (B x T x H): 260 x 385 x 370 mm
Bauraum (X x Y x Z): 119 x 67 x 76 mm
Systemkonforme Datenformate:
STL, SLC, STM
Bildtechnologie: 4K DLP-Imaging mit SPS™-Technologie
Pixelgröße: 62 µm
Lichtquelle: UV-LED Beamer
Wellenlänge: 385 nm
Gewicht: 19 kg

Systemvoraussetzungen:
Prozessor: 2,4 GHz
Speicher: 4 GB
Grafik: 256 MB (mindestens OpenGL 2.0)
Maus: zu bevorzugen
Netzwerk: Unterstützt WiFi, WirelessDirect und Ethernet
Freier Festplattenspeicher: 1 GB

566 955
1 Stck. | € 9.990,00
€ 8.989,00



Einführungsangebot!

13.499,-

LIEFERUNG ERFOLGT
DURCH DEN HERSTELLER

Einführungsangebot!

8.989,-

LIEFERUNG ERFOLGT
DURCH DEN HERSTELLER



+ Ultraschneller Strahler
+ Inklusive Scanner
+ Verlängerte Garantie auf 4 Jahre
+ 10 Jahre Ersatzteilgarantie



BIOSTAR VII

Technische Daten:
Maße (B x H x T):
450 x 230 x 260 mm
Leistung: 230 V / 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 6,0 bar
Gewicht: 14 kg
Garantie: 3 Jahre

Druckformgerät
366 999
1 Stck. | € 4.350,00
€ 3.199,00



MINISTAR S

Technische Daten:
Maße (B x H x T):
500 x 210 x 400 mm
Leistung: 230 V, 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar
Gewicht: 9,0 kg
Garantie: 3 Jahre

Druckformgerät
366 951
1 Stck. | € 2.295,00
€ 1.899,00

WICHTIG: DAS ALTGERÄT KANN BEI DER KOSTENLOSEN EINWEISUNG VOR ORT DEM SCHEU-MITARBEITER MITGEGEBEN WERDEN.



€ 300,- GUTSCHRIFT + € 200,- MATERIALPAKET*

Beim Kauf von 1 BIOSTAR VII / 1 MINISTAR S und gleichzeitiger Einsendung eines alten Tiefziehgeräts (egal welches Fabrikat)

Bis zu 22% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

Programat P310 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brennguträger Kit 2, Temperatur-Kontrollset 2, USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick

452 910 | 1 Stck. | ~~€ 5.049,00~~
€ 3.999,00

Vakuumpumpe VP3 easy
751 969 | 1 Stck. | ~~€ 870,00~~
€ 749,00



3.999,-



Programat P510 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brennguträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit

452 911 | 1 Stck. | ~~€ 6.790,00~~
€ 5.449,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | ~~€ 1.350,00~~
€ 1.049,00



5.449,-



Programat P710 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brennguträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit, A-D-Farbschlüssel, DSA-Holder Kit.

452 912 | 1 Stck. | ~~€ 8.750,00~~
€ 6.999,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | ~~€ 1.350,00~~
€ 1.049,00



6.999,-



Programat S2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.600°C
Garantie: 2 Jahre

Programat S2, Programat Temperatur Kalibration Set Starter Kit, Sintertisch, Programat Dosto-Tray, Sintertischgabel, Garantiekarte, Kurz-Bedienungsanleitung, Ethernet Kabel, USB Stick, Netzkabel, div. Zubehör und Informationsmaterial

443 953 | 1 Stck. | ~~€ 14.999,00~~
€ 12.165,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | ~~€ 1.350,00~~
€ 1.049,00



12.165,-



Bis zu 22% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

Programat EP3010 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel

452 913 | 1 Stck. | € 10.179,00
€ 8.149,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.049,00



8.149,-

Programat EP5010 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel, Programat-WLAN Kit

452 914 | 1 Stck. | € 13.450,00
€ 10.749,00



10.749,-

Programat CS6

Technische Daten:
Netzanschluss:
110 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 1.650 W
Maße (H x L x B): 450 x 494 x 415 mm
(mit Brenngut-Ablageplatte)
Brenntemperatur max.: 1.560 °C
Gewicht: 28,5 kg
Garantie: 2 Jahre

Programat CS6, Netzkabel, Vakuumschlauch, IPS Speed Tray, Pinzette, Temperaturkontrollset Starter Kit, Netzwerkkabel, Kurz-Bedienungsanleitung, Programat WLAN-Kit, A-D Farbschlüssel, DSA Holder Kit, div. Zubehör

452 921 | 1 Stck. | € 14.150,00
€ 11.999,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.049,00



11.999,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Stereo-Zoom Mikroskop

- Stereokopf hat einen 45° Schrägenblick
- Vergrößerungs-Zoom: 6,7- bis 45-facher Vergrößerung
- Die Pupillendistanz ist zwischen 54 und 75 mm frei einstellbar
- Zoom Ratio 1,6,7
- Das Objektiv hat einen 0,67 – 4,5 fachen Zoom
- Weitfeld-Okulare mit 10-fach / 22 mm Dioptrienausgleich
- 105 mm Arbeitsabstand
- Die Auf-/Durchlichtleuchten aus LED sind stufenlos regulierbar
- 230 V, 50/60 Hz
- Garantie: 2 Jahre

998 914
1 Stck. | € 1.190,00
€ 999,00



999,-

elumentis LED

Die Arbeitsplatzleuchte elumentis LED besticht durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex R₉₂ für originalgetreue, kontrastreiche Farbwiedergabe. Sie bietet zudem eine homogene, blendfreie Ausleuchtung und verfügt über einen sanften Schattenwurf durch eine Multi-Layer-Streuscheibe. Die Leuchte ist einstellbar in drei verschiedene Farbtemperaturen und in fünf Beleuchtungsstärken. So ist der Wechsel zwischen Tageslichtweiß (6.400 K), aktivierendes Neutralweiß (4.800 K) und einem behaglichen Warmweiß (2.700 K) möglich. Einmal eingestellte Beleuchtungsstärken bleiben beim Ausschalten und Umschalten der Farb-temperaturen gespeichert. Zusätzlich kann als indirekte Beleuchtung das verbaute Ambient-Light im Leuchtenkopf zugeschaltet werden. Die große Höhe der Lampe von 53 cm macht eine Platzierung hinter Monitoren bis 27 Zoll möglich. Der Leuchtenkopf ist 90° schwenkbar und jeweils seitlich zu 45° kippbar.

Technische Daten:
Leistungsaufnahme: max. 10 W
Maße (H x B x T): 530 x 130 x 300 mm
Farbtemperatur: Warmweiß (2.700 K),
Neutralweiß (4.800 K), Tageslichtweiß (6.400 K)
Max. Nutzlichtstrom: Warmweiß (220 lm),
Neutralweiß (1.000 lm), Tageslichtweiß (640 lm)
Energieeffizienz: Warmweiß (D),
Neutralweiß (E), Tageslichtweiß (D)
LED-Lebensdauer: >25.000 h
Kabellänge: 2.500 mm
Gewicht: 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

Arbeitsplatzleuchte
798 955
1 Stck. | € 199,00
€ 159,00



159,- **ESCHENBACH**

Easy Waxer / duo

-20%

Easy Waxer
260 901 | 1 Stck. | € 163,00
€ 139,00

Easy Waxer duo
inkl. 2 Handstücken, 2 Handstückklemmen
und den Modellierspitzen PKT 1 und 2
260 902 | 1 Stck. | € 249,00
€ 199,00



ab 139,-



YETI Modellierspitzen

-20%

PKT 1 fein (1.)
060 961 | 1 Stck. | € 24,90
€ 19,90

PKT 2 dick (2.)
060 962 | 1 Stck. | € 26,90
€ 21,50

Messerform (3.)
060 963 | 1 Stck. | € 27,90
€ 22,30

Korkenzieher dick (4.)
060 964 | 1 Stck. | € 24,90
€ 19,90

Hollenback horizontal (5.)
060 966 | 1 Stck. | € 24,90
€ 19,90



ab 19,90



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

IP ABS 3 Absaugbox

Absaugbox mit Einschaltautomatik
 998 970 | 1 Stck. | € 699,00
 € 599,00

- Universelle und kompakte Absaugung mit Einschaltautomatik
- Leistungsstark mit stufenloser Leistungsregelung
- Vliesbeutel Klasse M mit Doppelfiltersystem
- Präzise Schalteinstellung für Geräte mit geringem Stromverbrauch

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 – 230 V / 50 Hz
 Leistung: 1.200 W
 Geräuschpegel: ca. 59 – 68 dba
 Staubklasse: M
 Maße (L x B x H): 395 x 295 x 400 mm
 Gewicht: 15 kg
 Garantie: 1 Jahr



599,-

IP Small Box

Box 1
 997 985 | 1 Stck. | € 250,00
 € 199,00

Technische Daten:
 Maße (B x T x H): 310 x 420 x 290 mm
 Gewicht: 2 kg



199,-

GC Labolight DUO

147 936 | 1 Stck. | € 3.120,00
 € 1.999,00

1 Gerät – 2 Modi!

LED-Lichthärtegerät für die indirekte Compositetechnik. Multifunktionales Gerät mit neuester LED-Technologie, automatisiertem Drehsystem, schlankem und ergonomischem Design. Zwischenhärten (Intervallmodus), enthärten (Vollmodus). Das Gerät deckt einen Wellenlängenbereich von 380 bis 510 nm mit folgenden Spektralbereichsspitzen von 465 bis 485 nm (12 blaue LEDs) und 390 bis 400 nm (drei violette LEDs) ab.



-36%



1.999,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Abdampfbox **NEU**

Kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen, bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

- Schnelle Dampfabsaugung durch kräftigen Lüfter mit Nachlaufregelung
- Lüftersteuerung zwischen Dauerbetrieb und Automatikbetrieb wählbar
- Lüfter-Automatikbetrieb wählbar über Fußpedal- bzw. Handsensor-Steuerung
- Auffangschale kann mittels seitlichem Kugelhahn entleert werden

Technische Daten:
 Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
 Stromaufnahme: 0,8 A
 Leistung: 140 W
 Maße max. (B x H x T): 421 x 476 x 549 mm
 Maße Gehäuse (B x H x T): 393 x 476 x 515 mm
 Maße Arbeitsöffnung (B x H x T): 285 x 235 mm
 Gewicht: 26,5 kg
 Schutzklasse: IP 44

Lieferumfang:

• Gerät inkl. 2 m Abflussschlauch
 295 900 | 1 Stck. | € 1.980,00
 € 1.549,00

1.549,-



WASSERMANN
 Hamburg · Germany

Gipstrimmer HSS-88

Technische Daten:
 Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
 Leistung: 1.000 W/4,6 A
 Drehzahl: 3.000 U/Min.
 Maße (B x T x H): 330 x 410 x 335 mm
 Gewicht: 19,8 kg
 Garantie: 1 Jahr

mit Korundscheibe
 095 912 | 1 Stck. | € 2.180,00
 € 1.499,00

mit Volldiamantscheibe
 095 919 | 1 Stck. | € 3.550,00
 € 2.529,00



ab 1.499,-

Wasi Steam Compact

Technische Daten:
 Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
 Stromaufnahme: 5,5 A (Si 6,3 A mt)
 Leistung: 1.270 W
 Maße max. (B x H x T):
 345 x 360 x 390 mm
 Maße Gehäuse (B x H x T):
 300 x 353 x 310 mm
 Gewicht: 19 kg
 Arbeitsdruck:
 max. 6 bar (stand by 5 bar)
 Dampftemperatur:
 max. 164°C bei 6 bar
 Kesselinhalt: 3,3 l
 Garantie: 1 Jahr



Lieferumfang:
 Wasi Steam Compact mit Wasserzulaufschlauch grau 1,3 m, Abflussschlauch 1,5 m, Schlauchschelle Ø 12-20 x 9.

Edelstahl
 096 002
 1 Stck. | € 3.390,00
 € 2.379,00

Edelstahl weiß
 096 003
 1 Stck. | € 3.390,00
 € 2.379,00

2.379,-

Röntengeräte von DEXIS

Dexis OP 3D Pan 2D digitales Panorama-Röntengerät inkl. Fernröntgeneinrichtung mit CMOS-Technologie



~~€ 49.000,-~~
€ 24.500,-*
zzgl. MwSt.



~~€ 4.400,-~~
€ 2.200,-*
zzgl. MwSt.

-50%

* Zuzüglich 2D Prüfkörper-Kit.
Zuzüglich evtl. anfallender Kosten für die Installation und Anbindung der KaVo Software und Hardware an Ihre bestehende Praxis-EDV (muss im Detail noch besprochen werden).
Zuzüglich Kosten für die Röntgen-Erstabnahme, die Sachverständigenprüfung (durch den TÜV) sowie die Genehmigung durch das Amt für Arbeitsschutz.

- Fernröntgeneinrichtung links mit zweiter Röntgenröhre
- nur 1 Sensor, jedoch kein Wechseln des Sensors erforderlich
- Leistung: 60 – 95 KV / 2 – 14 mA
- Steuerung nur über Laptop/ PC möglich
- mit Fast-Scan-Funktion für 2D Panoramaaufnahmen in nur 9 Sek.
- über die Orthofocus-Funktion wird automatisch die beste Bildschicht angezeigt

- Mit Quickcompose schnelle Bildkontrolle sofort nach der Aufnahme

- 2D Aufnahmeprogramme:**
- Standard Panorama
 - Panoramaprogramm für Kinder
 - segmentierte Panoramaaufnahme
 - Laterale Kiefergelenksaufnahmen
 - Bissflügelaufnahmen

- Gerät ist komplett bleifrei
- inkl. Starter Kit
Positionierung/Hygiene
- Software 2D:
 - DTX Studio Clinic
 - 2D intraoral und extraoral Bildaufnahme und Diagnostik
 - 10 Nutzer oder Arbeitsplatz
 - 3D nachrüstbar
 - 2 Jahre Garantie

Orthopantomograph OP 3D
082 400 | 1 Stck. | ~~€ 49.000,00~~
€ 24.500,00

Scan eXam One Scanner
082 403 | 1 Stck. | ~~€ 4.400,00~~
€ 2.200,00

SOLANGE VORRAT REICHT.

Für weitere Informationen zum Thema Röntgen und zum technischen Service wenden Sie sich an:

Tel. 0 151 / 70 669 393

Die Nettosonderpreise in diesem Katalog sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Standard- und auch Sonder-Rabatte mit ein.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de