



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.



WET WIPES

Seite 65



# PRAXIS

# BIS ZU 20% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!

## M+W select SUPERLITE COLOR PEN

**Technische Daten:**  
 Ø Lichtleiter: 8 mm  
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm  
 Gewicht Handstück: 100 g  
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)  
 Garantie: Lampe 24 Monate /  
 Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück mit eingebautem Akku
  - 1 Ladekabel
  - 1 Lichtleiter 8 mm
  - 1 Blendschutzschild
  - 1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß	200 000
orange	200 001
lichtgrün	200 002
blau	200 003
lila	200 004
rosa	200 005
grau	200 006
je Stck.	€ 185,00 € 149,00*

\* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

149,-\*



## M+W select SUPERLITE HOCHLEISTUNGS-LED-LAMPE

Die kabellose Hochleistungs-LED-Lampe eignet sich hervorragend für die professionelle und zeitsparende Aushärtung aller Füllungswerkstoffe innerhalb von 3 Sekunden. Für eine optimale Aushärtung in einem sehr breiten Wellenlängenbereich von 410 – 490 nm sorgen 3 Breitband-LEDs. Somit ist diese Lampe für alle marktüblichen lichterhärtenden Materialien hervorragend einsetzbar. Sie haben dabei die Wahl zwischen 2 Aushärtungsmodi. Deren Auswahl ist erkennbar an einem farbigen Ring am Handstück.

**1. Ramp – der Softstart Modus:** hier steigt die Leistung in den ersten 3 Sekunden an und erreicht danach eine Leistung von 1.500 mW/cm<sup>2</sup>. Sie können wählen zwischen 10 Sekunden oder 20 Sekunden Aushärtungszeit. In diesem Modus leuchtet der Indikationsring am Handstück grün.

**2. Hyper – der Full-Power Modus:** eine maximale Intensität von 3.500 mW/cm<sup>2</sup> wird in Impulsen erreicht. Erkennbar auch am rot leuchtenden Indikationsring. Sie können wählen zwischen 1 x 3 Sekunden oder 12 x 3 Sekunden Aushärtungszeit. Damit ist die Polymerisationslampe auch zum Befestigen von Brackets hervorragend geeignet.

**Technische Daten:**  
 Batterie: starke Li-Ionen Batterie für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit  
 Kopfgröße (H x Ø): 14 x 16 mm  
 Handstück (L): 215 mm  
 Gewicht: 215 g  
 Garantie: 24 Monate

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück
  - 1 Ladeadapter
  - 50 Einweghüllen
  - 1 Handstückhalter
  - ausführliche Gebrauchsanleitung

schwarz	200 089
weiß	200 090
je Stck.	€ 599,00 € 499,00*

\* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

NEU

499,-\*



## M+W select SUPERLITE POWER PEN

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück mit eingebautem Akku
  - 1 Ladekabel
  - 1 Lichtleiter 8 mm
  - 1 Blendschutzschild
  - 1 Handteilhalter (Kunststoff)

silber	200 025
weiß	200 026
schwarz	200 027
je Stck.	€ 229,00 € 189,00*

\* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



**Technische Daten:**  
 Ø Lichtleiter: 8 mm  
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm  
 Gewicht Handstück: 100 g  
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm  
 Durchmesser Handstück: max. 25 mm  
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)  
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

189,-\*



## M+W select SUPERLITE 1300

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück
  - 1 Ladestation
  - 1 Akku
  - 1 Lichtleiter
  - 1 Schutzschild

100 045 | 1 Stck. | € 345,00  
€ 279,00\*

Bleaching Lightguide  
 100 046 | 1 Stck. | € 59,50  
€ 46,50\*

\* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

**Technische Daten:**  
 Ø Lichtleiter: 8 mm  
 Lichtintensität: max. 1.300 mW  
 Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm  
 Gewicht: Ladegerät 560 g,  
 Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)  
 Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)  
 Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm  
 Akku: Li-Ion 2200 mAh,  
 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)  
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate



279,-\*

4 verschiedene Modi



**M+W**Dental®

Einfach **vielseitig**

**M+W select PERMAPLAST LH ONE**

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

**Indikation:**  
Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I – V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

Spritze, 4 g  
100 147 | 1 Pckg. | € 30,90  
€ 26,20

Spritze, 4 g, opak  
100 149 | 1 Pckg. | € 30,90  
€ 26,20

ab 5 Pckgn. einer Sorte | je Pckg. | € 29,90  
€ 25,40

Cavifils, 20 x 0,3 g  
100 148 | 1 Pckg. | € 54,90  
€ 46,60

ab **25,40**

BIS ZU **-18%**



**Ein Farbton für alle Zahnfarben**  
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

Optimale Farbanpassung durch ultrafeine reflektierende Glasfüllstoffe

**M+W select PERMAPLAST LH ONE VISCOUS FLOW**

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllerteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar.

**Indikationen:**  
Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalbkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblocken von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

Spritze, 2 g  
100 158 | 1 Pckg. | € 23,50  
€ 21,90  
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 22,50  
€ 20,90  
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 21,50  
€ 19,90

ab **19,90**



**Ein Farbton für alle Zahnfarben**  
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

Optimal reflektierender Kavitätsuntergrund

**M+W select PERMAPLAST BUILD UP**

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

5 ml Automix Spritze A2,  
5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips  
000 107 | 1 Pckg. | € 43,50  
€ 36,90



**36,90**

**M+W select PERMAPLAST BULK**

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik.

Spritze, 2 g,  
10 Applikationskanülen:  
hell  
100 114 | 1 Pckg. | € 25,90  
€ 23,90  
medium  
100 128 | 1 Pckg. | € 25,90  
€ 23,90  
ab 3 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 24,90  
€ 22,90  
ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 23,90  
€ 21,90

Cavifils, 20 x 0,3 g:  
hell  
100 113 | 1 Pckg. | € 79,90  
€ 75,90  
medium  
100 129 | 1 Pckg. | € 79,90  
€ 75,90



Schnelle Verarbeitung bis 4 mm Schichtstärke

ab **21,90**



## PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I – V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 – 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	200 120	A2	200 126
A3	200 121	A3	200 127
A3,5	200 122	je Pckg.	€ 56,20 € 47,90
C3	200 125		
je Pckg.	€ 30,50 € 27,50		
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 29,50 € 26,50		



Microhybrid-Composite mit Keramikfüller

ab **26,<sup>50</sup>**



## PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I – V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraubspritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	000 171	100 130
A3	000 170	100 131
A3,5	000 174	100 132
B1	000 175	–
B3	000 172	–
C3	000 173	–
1 Pckg.	€ 22,60 € 20,90	€ 46,50 € 43,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 21,90 € 19,90	€ 45,50 € 42,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,90 € 18,90	€ 44,50 € 41,50

ab **18,<sup>90</sup>**

BIS ZU **-16%**



Feinpartikel-Hybridcomposite mit hoher Festigkeit



## PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universal-Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	100 121
A3	100 122
A3,5	100 123
1 Pckg.	€ 53,50 € 49,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 51,90 € 46,90

Farbe	Schraubspritze, 4 g
A2	100 115
A3	100 116
A3,5	100 117
B2	100 118
B3	100 119
C3	100 120
1 Pckg.	€ 28,90 € 25,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 27,90 € 24,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 26,90 € 23,90

ab **23,<sup>90</sup>**

BIS ZU **-17%**



Hochglanzpolierbares Universal-Composite



## PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllanteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108
1 Pckg.	€ 21,50 € 19,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,50 € 18,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 19,50 € 17,90

ab **17,<sup>90</sup>**

BIS ZU **-17%**



Mit hervorragender Fließeigenschaft



## PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllanteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 165
A2	100 166
A3	100 167
B3	100 168
1 Pckg.	€ 24,50 € 22,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 23,50 € 21,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 22,50 € 20,50

ab **20,<sup>50</sup>**



Hochviskos & fließfähig

**M+W select PERMAPLAST LH BIO NEU**

Lichthärtendes Microhybrid Komposite ohne BisGMA (BPA), ohne TEGDMA, ohne HEMA. Für Füllungen mit einer Schichtstärke bis zu 2 mm im Front- und Seitenzahnbereich. Lässt sich leicht und bequem verarbeiten. Perfekte Polierbarkeit. Ausgezeichnete Röntgenopazität. Hohe Biege- und Druckfestigkeit.

**Indikation:** Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen in Kavitäten der Klassen I – V, Inlays, Onlays, Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung bei Molaren und Prämolaren, Kernaufbau, Schienung lockerer Zähne.

Spritze, 4 g A3  
 200 133 | 1 Pckg. | € 28,90  
 € 24,50



Ohne BisGMA (BPA)  
 Ohne TEGDMA  
 Ohne HEMA

**24,50**

**M+W select PERMABOND UNIVERSAL**

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle licht-härtenden Compositematerialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühl-schranklagerung erforderlich.

5 ml  
 000 186  
 1 Fl. | € 60,90  
 € 51,70



Mit Self-Etch und Selectiv-Etch-Technik

**51,70**

**M+W select PERMABOND**

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.

5 ml  
 000 185 | 1 Fl. | € 36,50  
 € 33,50  
 ab 3 Fl. | je Fl. | € 35,50  
 € 30,50



Mit Total-Etch-Technik

ab **30,50**

**M+W select PERMABOND SE**

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml  
 000 181 | 1 Fl. | € 55,90  
 € 50,90  
 ab 3 Fl. | je Fl. | € 54,90  
 € 47,50



Mit Self-Etch-Technik

ab **47,50**

**M+W select BIG-ETCH**

50 ml Vorratsspritze,  
 10 Applikationsspritzen,  
 50 Applikationskanülen  
 100 100 | 1 Pckg. | € 61,50  
 € 55,90  
 ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 59,90  
 € 50,90

50 ml Vorratsspritze,  
 1 Adapter  
 100 138 | 1 Pckg. | € 41,50  
 € 34,90

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

ab **34,90**  
**BIS ZU -17%**



**M+W select APPLI-ETCH**

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,  
 25 Applikationskanülen  
 100 101 | 1 Pckg. | € 34,90  
 € 30,90  
 ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 32,90  
 € 28,90

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

ab **28,90**  
**BIS ZU -17%**



BIS ZU  
**-16%**  
ab **6,<sup>20</sup>**



Einzelpritze

**M+W select** **ÄTZGEL**

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

- 2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)  
000 178 | 1 Pckg. | **€ 7,40**  
**€ 6,80**
- ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 7,10**  
**€ 6,50**
- ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€ 6,80**  
**€ 6,20**

**M+W select** **GLASFILL APLICAP**

M+W Select Glasfill Aplicap ist ein Glasionomer-Füllungs-zement aus transluzentem Aluminiumoxid-Silikatglas, das eine hervorragende Ästhetik bietet, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Geeignet für Füllungen der Klasse III und V, nicht lasttragende Füllungen der Klasse I und II, Milchzahnfüllungen, Stumpfaufbauten sowie Versiegelung von Grübchen und Fissuren. Röntgenopak.

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>Farbe</b> | <b>50 Stck.</b>                   |
| A2           | 400 102                           |
| A3           | 400 103                           |
| je Pckg.     | <b>€ 104,50</b><br><b>€ 99,20</b> |



**99,<sup>20</sup>**

**M+W select** **APPLICAP AKTIVATOR / APPLIER** **NEU**

Für Aplicap Kapseln. Langlebig und beständig gegen jede Art von Material. Autoklavierbar. Mechanische Teile aus rostfreiem Stahl. Nicht für Maxicap geeignet.

- Applicap-Aktivator  
500 110 | 1 Stck. | **€ 51,90**  
**€ 49,30**
- Applicap-Applier  
500 111 | 1 Stck. | **€ 51,90**  
**€ 49,30**



**49,<sup>30</sup>**

**M+W select** **NORMALLOY KAPSELN**

Kapselamalgam, n.g. 2. aus 70% Spänen und 30% Kugeln.  
**Zusammensetzung:**  
69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink.  
Dose mit 50 Kapseln.

- Gr. 1 gelb/weiß:**  
400 mg Pu, 435 mg Hg  
000 127 | 1 Pckg. | **€ 51,90**  
**€ 49,30**

- Gr. 2 gelb/grau:**  
600 mg Pu, 653 mg Hg  
000 128 | 1 Pckg. | **€ 66,90**  
**€ 63,50**

- Gr. 3 gelb/schwarz:**  
800 mg Pu, 865 mg Hg  
000 129 | 1 Pckg. | **€ 86,90**  
**€ 82,50**



ab **49,<sup>30</sup>**



**M+W select** **PROVISO**

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungs-zement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavitätenwand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor.

- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Härte</b>  | <b>Glas, 40 g</b>                |
| weiß (mittel) | 100 160                          |
| rot (hart)    | 100 161                          |
| grau (weich)  | 100 162                          |
| je Pckg.      | <b>€ 10,80</b><br><b>€ 10,20</b> |

**10,<sup>20</sup>**

## M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyester-Material. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid-Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

Körnung	50 Streifen
grob (blau)/ medium (helllila)	100 885
fein (rosa)/ x-fein (weiß)	100 886
1 Pckg.	€ 7,95
	€ 7,20
ab 3 Pckgn. einer Ausführung, je Pckg.	€ 7,60
	€ 6,70

ab **6,70**




Einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln belegt

## M+W select BIO UNIVERSAL TIPS

Biegbare BIO Mikro Applikatoren mit Weizenstroh, beflocht zum Applizieren von Flüssigkeit und Gelen. Länge ca. 10 cm. Umweltfreundlich verpackt in Karton.

Stärke	100 Stck.
regular	100 103
fine	100 104
je Pckg.	€ 6,50
	€ 6,00

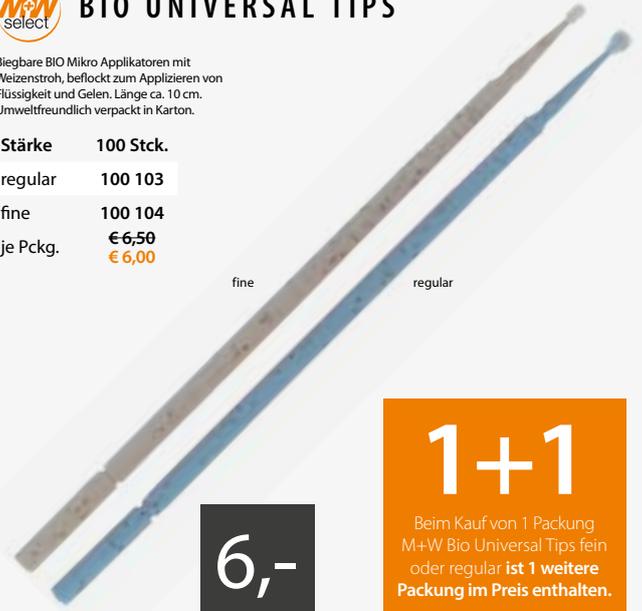

**6,-**

**1+1**  
Beim Kauf von 1 Packung M+W Bio Universal Tips fein oder regular ist 1 weitere Packung im Preis enthalten.

## M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

20G, gebogen, schwarz, 11 mm lang, 100 Stck.

098 103	1 Pckg.	€ 28,80
		€ 26,50
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 27,80
		€ 25,50
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 26,80
		€ 24,50

gebogen, 45°, blau-transparent, 10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.

100 102	1 Pckg.	€ 10,80
		€ 9,90
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 10,30
		€ 9,50
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,95
		€ 9,20

gerade/transparent, 0,4 x 18 mm, 100 Stck.

000 189	1 Pckg.	€ 11,95
		€ 10,95
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 11,50
		€ 10,50
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 10,95
		€ 9,95

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.



20G, gebogen      gebogen, 45°      gerade/transparent

BIS ZU **-17%** ab **9,20**

Für alle marktüblichen Kapseln

**16,10**



## M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.


400 110 | 1 Pckg. | € 18,90  
€ 16,10

## M+W select HOLZKEILE

**NEU**

Anatomisch geformte Holzkeile für die optimale Gestaltung der Füllung.

Größe / Farbe	100 Stck.
S / orange	500 115
M / weiß	500 116
L / blau	500 117
je Pckg.	€ 7,90
	€ 6,70

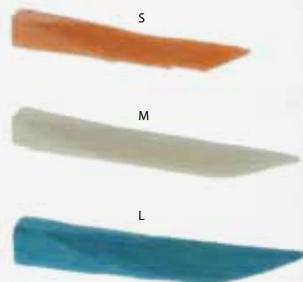

**6,70** **-15%**



## M+W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	859 115	859 119
102	859 116	859 120
103	859 117	859 121
113	859 118	859 122
1 Pckg.	€ 2,60 € 2,30	€ 2,60 € 2,30
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 2,40 € 2,10	€ 2,40 € 2,10

ab **2,<sup>10</sup>**

BIS ZU  
**-19%**



Rostfrei



Form 101



Form 102



Form 103



Form 113

## M+W select POLYSTRIP

**NEU**

Breite	15 m im Spender
6 mm	100 196
8 mm	100 197
10 mm	100 198
je Rolle	€ 6,90 € 5,90

Transparentes Polyesterband in einer praktischen Kartonschachtel mit gezackter Klinge für lichthärtende Applikationen. 0,050 mm dick.



## M+W select MATRIZENSPANNER UNIVERSAL

Aus rostfreiem Stahl.

Universal  
600 100 | 1 Stck. | € 13,50  
€ 12,80



**12,<sup>80</sup>**

## M+W select MATRIZENBAND

Für Bandmatrizenspanner.  
Rostfrei, 0,03 mm stark.

Breite	10 m im Spender
5 mm*	100 170
6 mm*	100 171
7 mm	100 172
je Rolle	€ 15,50 € 13,10

\* auch geeignet für SuperMat



**13,<sup>10</sup>**

**-15%**

0,03 mm stark




**M+W select UNIVERSAL TIPS**

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.

Farbe	100 Stck.
weiß (x-fine)	500 517
gelb (fine)	500 516
blau (regular)	500 515
je Pckg.	€ 5,90 € 5,00

**-15%** **5,-**

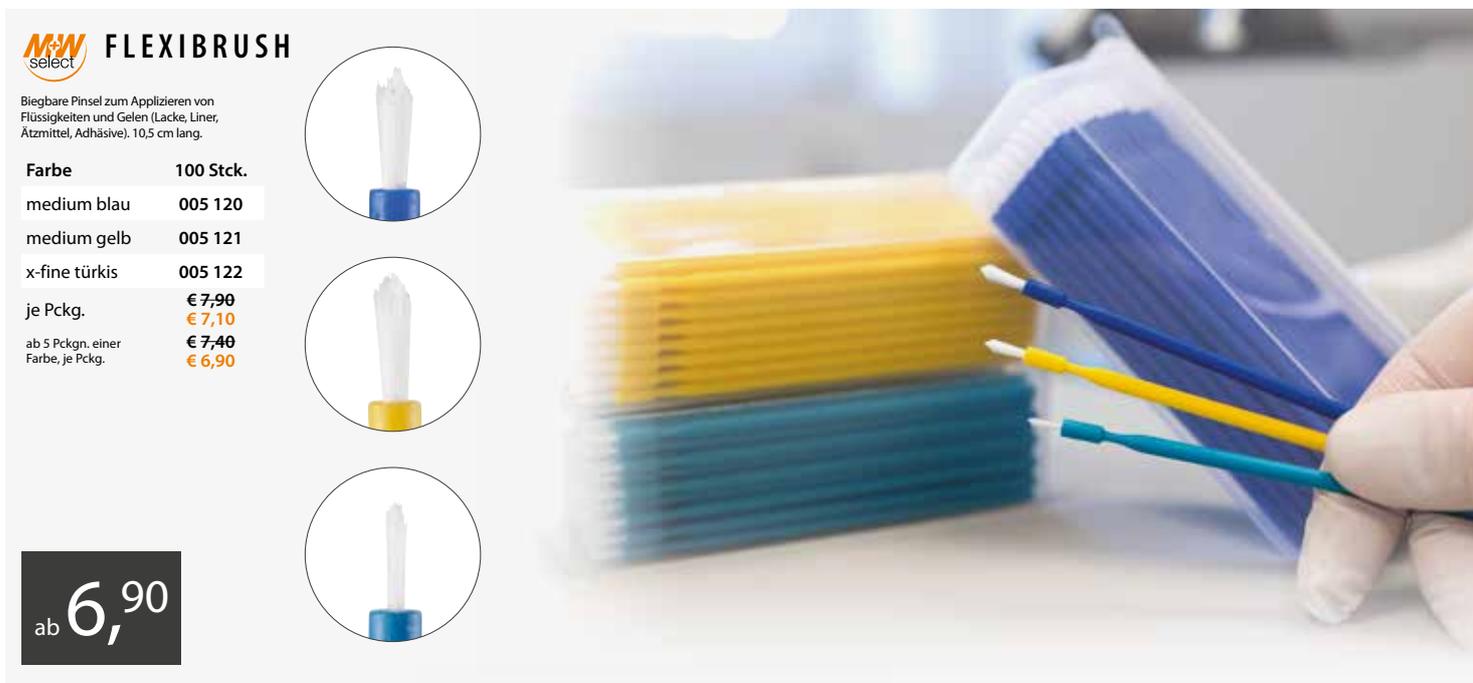

**M+W select FLEXIBRUSH**

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.

Farbe	100 Stck.
medium blau	005 120
medium gelb	005 121
x-fine türkis	005 122
je Pckg.	€ 7,90 € 7,10
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 7,40 € 6,90

**ab 6,90**



**M+W select PINSELEINSÄTZE / -HALTER**

Pinselhalter, 3 Stck.  
200 165 | 1 Pckg. | € 3,20

Pinseleinsätze, 50 Stck.:  
rot  
098 110 | 1 Pckg. | € 5,90  
€ 5,30

weiß  
098 111 | 1 Pckg. | € 5,90  
€ 5,30  
ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 5,60  
€ 5,00

**ab 5,-**

**BIS ZU -15%**



## M+W select MICROTIPS

Miniatur-Applikationsspitzen (beflockt), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Farbe	100 Stck.
rot	098 114
grün	098 115
gelb	098 116
blau	098 117
je Pckg.	€ 5,80 € 5,30
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,50 € 4,90

### Set:

4 x 100 MicroTIPS in den Farben rot, grün, gelb, blau und 2 MicroTip-Halter  
**098 118** | 1 Pckg. | € 24,90  
 € 23,60

### Halterset:

je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot  
**098 119** | 1 Pckg. | € 2,90  
 € 2,50

BIS ZU  
**-16%** ab **4,90**

## M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginit, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

### Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.  
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.  
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.  
 Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

### Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.  
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.  
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.  
 Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

### Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.  
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.  
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.  
 Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

### Algicit Dimension Ortho:

Alginit auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt  
 Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek.  
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.  
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.  
 Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

### Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension  
**400 270** | 1 Pckg. | € 179,00  
 € 158,00

Algicit Dimension quick  
**400 274** | 1 Pckg. | € 179,00  
 € 158,00

Algicit Dimension color  
**400 276** | 1 Pckg. | € 179,00  
 € 158,00

ab 2 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 169,00  
 € 149,00

Algicit Dimension Ortho  
**400 280** | 1 Pckg. | € 154,00  
 € 146,30

### Beutel, 500 g:

Algicit Dimension  
**400 271** | 1 Pckg. | € 10,90  
 € 9,30

Algicit Dimension quick  
**400 275** | 1 Pckg. | € 10,90  
 € 9,30

Algicit Dimension color  
**400 277** | 1 Pckg. | € 10,90  
 € 9,30

Algicit Dimension Ortho  
**400 281** | 1 Pckg. | € 8,90  
 € 8,40

ab **8,40**

BIS ZU  
**-17%**



## M+W select ALGICIT ADHÄSIV

Haftvermittler für Alginate.

15 ml  
**200 281** | 1 Fl. | € 8,70  
 € 7,50

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

### Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

### Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 27.09.2024.

### Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

### Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

### Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



### Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

### Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

### Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein belegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

### Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsart ist Büdingen.

### Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

## M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

25 g Basis-Paste,  
25 g Katalysator-Paste  
200 145 | 1 Pckg. | € 15,95  
€ 13,95  
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 15,45  
€ 13,45



ab **13,45**

BIS ZU  
**-16%**



ab **70,60**

## M+W select PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschrumpfung, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmier-schicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

Farbe	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau
A2	100 180
A3	100 181
1 Pckg.	€ 78,50 € 74,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 77,50 € 70,60



BIS ZU  
**-15%** ab **27,90**

## M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschen-system. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

### Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methacrylatfrei
- Gute Gewebeerträglichkeit
- Ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- Kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbinde-temperatur (ca. 38 °C)
- Rasche Abbindezeit bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- Optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität
- Gute Reparaturfähigkeit
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



## PONTIFORM DIRECT MIX

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen  
000 290 | 1 Pckg. | € 32,90  
€ 29,90  
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 31,90  
€ 27,90

50 ml Kartusche,  
15 Mischkanülen blau:

A2 universal  
000 216 | 1 Pckg. | € 69,50  
€ 63,90

A3 universal  
000 214 | 1 Pckg. | € 69,50  
€ 63,90

ab 2 Pckgn.  
einer Farbe | je Pckg. | € 68,50  
€ 62,90

ab 5 Pckgn.  
einer Farbe | je Pckg. | € 67,50  
€ 60,90

Mischkanülen, 50 Stck.:

4:1/10:1, blau  
000 289 | 1 Pckg. | € 38,50  
€ 36,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,50  
€ 34,60

## M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT PERMA

Dual-härtender Befestigungszement auf Composite Basis. Hoch röntgenopak, fluorisierend und abrasionsresistent. Für die permanente Befestigung von Wurzelstiften, Inlays, Onlays, Veneers, Keramik- und Compositekronen und Brücken, sowie als Stumpfpaufbau verwendbar. Bio-kompatibel, frei von BisGMA und TEGDMA.

8 g Automixspritze, 5 Mischkanülen:  
A2  
074 919 | 1 Pckg. | € 69,50  
€ 59,90  
Semi-transparent  
074 921 | 1 Pckg. | € 69,50  
€ 59,90  
Mischkanülen, 10 Stck.  
074 922 | 1 Pckg. | € 6,95  
€ 6,60



**59,90**

## M+W select SIOPLAST BS

### SIOPLAST BS

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-  
material mit hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,  
12 Mischkanülen grün

153 229 | 1 Pckg. | € 39,90  
€ 34,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90  
€ 33,50

### SIOPLAST BS X-HART

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-  
material mit extrem hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,  
12 Mischkanülen grün

153 230 | 1 Pckg. | € 42,60  
€ 37,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 40,90  
€ 35,90

### SIOPLAST BS SCAN

Schnellabbindendes Biss-  
registrierungsmaterial / scanbar.



2 x 50 ml Kartuschen,  
12 Mischkanülen grün

153 235 | 1 Pckg. | € 41,50  
€ 37,50

### SIOPLAST BS KRISTALL

Schwerfließendes, transparentes Bissregistrat auf  
Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Auch  
geeignet als Kauflächenstempel bei lichterhärtenden  
Compositorestaurationen, als Hilfsmittel zur  
Herstellung provisorischer Veneers sowie als  
Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.  
Schwer fließend, Shore A 70.

2 x 50 ml Kartuschen,  
12 Mischkanülen grün

153 236 | 1 Pckg. | € 41,50  
€ 37,50



BIS ZU  
**-16%** ab **33,50**

## M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabform-  
technik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A 70)  
und Putty Soft-Material (Shore A 60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situations-  
abformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmateri-  
al kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden.  
Das extradünne Korrekturmateri- al eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.



### Dose, 900 ml:

putty Waldbeere

153 207 | 1 Dose | € 29,90  
€ 25,50

putty soft Waldbeere

153 208 | 1 Dose | € 29,90  
€ 25,50

ab 4 Dosen  
einer Variante

| je Dose | € 28,90  
€ 24,50

### Eimer, 10 kg:

putty Waldbeere

153 209 | 1 Eimer | € 113,90  
€ 108,20

### Tube, 150 ml:

mittel Mint

153 210 | 1 Tube | € 14,90  
€ 13,90

dünn Mint

153 211 | 1 Tube | € 14,90  
€ 13,90

extra-dünn Mint

153 212 | 1 Tube | € 14,90  
€ 13,90

ab 4 Tuben  
einer Variante

| je Tube | € 13,90  
€ 12,70

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei,  
60 ml

153 223 | 1 Tube | € 14,20  
€ 13,50

ab 3 Tuben | je Tube | € 13,90  
€ 12,70



**8,10**



## SIOPLAST SILIKON-ADHÄSIV

Haftvermittler für A- und C-Silikone.

10 ml  
200 280 | 1 Fl. | € 9,50  
€ 8,10

BIS ZU  
**-18%** ab **12,70**

## M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomerer Präzisionsabformmaterial  
auf Polyvinylsiloxanbasis, additions-  
vernetzend (A-Silikon), in sehr hoher  
Qualität zum günstigen Preis!

### Sioplast A/A 380 putty -

knetbares Vorabformmaterial,  
Orangengeschmack, lieferbar in  
Dosen und in der Vollkartusche  
für 5:1 Mischgeräte.

**Sioplast AS light -**  
dünnfließend für die Korrektur-  
abformung, Doppelmisch-/  
Sandwichttechnik, Minzgeschmack,  
im Sicherheitskartuschensystem.

**Sioplast AS medium -**  
mittelfließend für Korrektur- und  
Fixationsabformung, Minzgeschmack,  
im Sicherheitskartuschensystem.

**Sioplast AS/A 380 mono -**  
mittelfließend für die Einphasen-  
abformung, Minzgeschmack,  
lieferbar in der Vollkartusche  
für 5:1 Mischgeräte und im  
Sicherheitskartuschensystem.

### Sioplast A

(je 450 ml Basis- und Härterpaste,  
2 Messlöffel):

putty

153 220 | 1 Pckg. | € 65,90  
€ 59,90

putty soft

153 221 | 1 Pckg. | € 65,90  
€ 59,90

ab 3 Pckgn.  
einer Variante

| je Pckg. | € 63,90  
€ 55,90

### Sioplast A 380

(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring):

putty

237 240 | 1 Pckg. | € 129,90  
€ 123,40

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 126,90  
€ 116,90

mono

153 281 | 1 Pckg. | € 145,90  
€ 138,60

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 139,90  
€ 130,90

### Sioplast AS

(2 x 50 ml Kartuschen,  
12 Mischkanülen):

light regular (normalhärtend),

12 Mischkanülen gelb

153 225 | 1 Pckg. | € 32,90  
€ 29,90

light fast (schnellhärtend),

12 Mischkanülen gelb

153 226 | 1 Pckg. | € 32,90  
€ 29,90

medium,

12 Mischkanülen grün

153 227 | 1 Pckg. | € 32,90  
€ 29,90

ab 3 Pckgn.  
einer Variante

| je Pckg. | € 31,90  
€ 28,10

### Sioplast AS mono

6 Mischkanülen grün

153 280 | 1 Pckg. | € 42,60  
€ 38,80

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 40,90  
€ 36,10

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.

237 241 | 1 Pckg. | € 49,90  
€ 47,50

Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck.

237 242 | 1 Pckg. | € 10,50  
€ 9,90

Mischpistole 1:1/1:2

237 222 | 1 Pckg. | € 44,90  
€ 38,10



ab **28,10**



## ANMISCHBECHER CLEAR **NEU**

Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen.

grün, 105 x 67 mm

193 907 | 1 Stck. | € 3,10  
€ 2,60

orange, 85 x 52 mm

193 908 | 1 Stck. | € 2,80  
€ 2,39



BIS ZU  
**-16%**

ab **2,39**



## GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch

022 971 | 1 Stck. | € 4,10  
€ 3,50

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch

022 972 | 1 Stck. | € 4,60  
€ 3,90



ab **3,50**

BIS ZU  
**-15%**



## DISPENSER

Dispenser für Sicherheitskartuschen-System.  
Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

**38,10**

Mischpistole:

4:1/10:1

100 183 | 1 Pckg. | € 44,90  
€ 38,10

Schieber 4:1

000 219 | 1 Pckg. | € 9,90  
€ 8,40



ab **11,-**



## SCHAUMSTOFF-PELLETS

Als Medikamententräger.

Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.

000 521 | 1 Pckg. | € 16,50  
€ 14,00

Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.

000 522 | 1 Pckg. | € 13,50  
€ 11,50

Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.

000 523 | 1 Pckg. | € 12,90  
€ 11,00

keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.

000 542 | 1 Pckg. | € 12,90  
€ 11,00



BIS ZU  
**-20%**

ab **5,<sup>10</sup>**

**M+W select KÄLTESPRAY**

Minzaroma, FCKW-frei, Butan/Propan-Gemisch (brennbar)  
Austrittstemperatur -50 °C.



Dose, 200 ml

000 093 | 1 Dose | € 6,40  
€ 5,80

ab 12 Dosen | je Dose | € 6,10

€ 5,50

ab 24 Dosen | je Dose | € 5,90

€ 5,10

**M+W select RETRAKTIONSFÄDEN**

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und franst nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe	275 cm
000	300 270
00	300 271
0	300 272
1	300 273
2	300 274
1 Pckg.	€ 10,50 € 9,90



Fadenleger:  
rostfrei, Griffdurchmesser 8 mm  
500 205  
1 Stck. | € 10,90  
€ 9,30

**9,<sup>90</sup>**

**M+W select RIM-LOCK**

**PERFORIERT**  
Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

Satz mit 8 Löffeln:  
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK  
022 650 | 1 Satz | € 72,50  
€ 61,50

Form	PERFORIERT
OK S klein, PS 3	022 651
OK M mittel, PS 4	022 652
OK L groß, PS 5	022 653
OK XL extra groß, PS 6	022 654
UK S klein, PI 3	022 655
UK M mittel, PI 4	022 656
UK L groß, PI 5	022 657
UK XL extra groß, PI 6	022 658
partiell links, mittel*	022 680
partiell rechts, mittel**	022 681
je Stck.	€ 10,50 € 8,90

\* (für Quadrant I und III)  
\*\* (für Quadrant II und IV)

**GLATT**  
Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt). Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Satz mit 10 Löffeln:  
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK  
098 650 | 1 Satz | € 89,90  
€ 76,50

Form	GLATT
OK XS extra klein, BS 1	098 651
OK S klein, BS 2	098 652
OK M mittel, BS 2A	098 653
OK L groß, BS 3	098 654
OK XL extra groß, BS 5	098 655
UK XS extra klein, BI 1	098 656
UK S klein, BI 2	098 657
UK M mittel, BI 2A	098 658
UK L groß, BI 3	098 659
UK XL extra groß, BI 5	098 660
partiell links, mittel*	098 661
partiell rechts, mittel**	098 662
je Stck.	€ 10,50 € 8,90

**-15%**

ab **8,<sup>90</sup>**

**PERFORIERT**



**GLATT**



## M+W select MISCHKANÜLEN

Farbe	Mischkanüle 50 Stck.	Mischkanüle NT 50 Stck.
1:1/2:1 gelb	000 287 (1.)	400 285 (7.)
1:1/2:1 grün	000 288 (2.)	400 287 (8.)
1:1/2:1 rosa	000 280 (3.)	400 286 (9.)
1:1/2:1 blau	000 282 (4.)	400 288 (10.)
1:1/2:1 weiß	000 283 (5.)	–
4:1/10:1 blau	000 289 (6.)	–
je Pckg.	€ 38,50 € 36,50	€ 38,50 € 36,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 37,50 € 34,60	€ 37,50 € 34,60

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System 1:1/2:1 bzw. 4:1/10:1 zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien.

Die verkürzte Mischkanüle NT ermöglicht einen bis zu 40% geringeren Materialverwurf gegenüber der Standard Mischkanüle.

ab **34,60**



## M+W select INTRAORAL-TIPS

Gelb für Mischkanülen mit gelbfarbigem Verschluss. Transparent für Mischkanülen mit grün-, weiß- und rosa-farbigem Verschluss.

**100 Stck.:**

gelb  
500 201 | 1 Pckg. | € 24,95  
€ 21,95

transparent  
000 285 | 1 Pckg. | € 24,95  
€ 21,95

ab 2 Pckgn.  
einer Farbe | je Pckg. | € 23,95  
€ 20,95



BIS ZU  
**-16%**

ab **20,95**

## M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprührrohr und Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 – 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallprührrohr

000 951 | 1 Dose | € 13,50  
€ 12,80

ab 5 Dosen | je Dose | € 12,50  
€ 11,80



BIS ZU  
**-13%**

ab **11,80**

## M+W select OCCLUSIONSSPRAY


FCRW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farb-starker Film. Wachs frei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe	75 ml
grün	000 990
rot	000 991
je Dose	€ 9,60 € 9,10
ab 10 Dosen einer Farbe, je Dose	€ 8,99 € 8,50



ab **8,50**

**VERBESSERTE REZEPTUR**

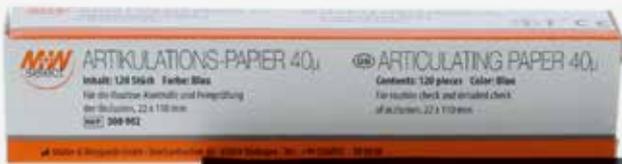

## M+W select ARTIKULATIONSPIAPIER 40µm

Für die Routine-Kontrolle und Feinprüfung der Occlusion, 22 x 110 mm.

10 Heftchenpackungen à 12 Streifen:

blau  
300 902 | 1 Pckg. | € 8,90  
€ 8,40

rot  
300 903 | 1 Pckg. | € 8,90  
€ 8,40

ab 3 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 8,60  
€ 8,00

ab 8,-



## M+W select ARTIKULATIONSPIAPIER 200µm

Für die grobe occlusale Prüfung beim Einpassen von Kronen, Brücken und Prothesen. Einfache Entnahme der Streifen dank der praktischen Spenderbox.

Spenderbox mit 300 Blatt:

blau  
300 900 | 1 Pckg. | € 13,60  
€ 12,90

rot  
300 901 | 1 Pckg. | € 13,60  
€ 12,90

ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 13,30  
€ 12,30

ab 12,30

## M+W select ARTIKULATIONSPIAPIERHALTER

Sehr hochwertig verarbeiteter Artikulationspapierhalter aus rostfreiem Edelstahl. Durch die spezielle Fräsung wird auch die dünnste Artikulationsfolie durchgängig festgehalten, kein Wegrutschen der Folie mehr.

Artikulationspapierhalter

000 900 | 1 Stck. | € 11,90  
€ 11,30



11,30

## M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml  
000 989 | 1 Fl. | € 38,50  
€ 36,40  
ab 3 Fl. | je Fl. | € 37,50  
€ 35,40



ab 35,40

## M+W select ORANGE CLEANER

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikonem, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium.

Kunststoffflasche, 250 ml

000 250 | 1 Fl. | € 8,90  
€ 8,00  
ab 3 Fl. | je Fl. | € 8,60  
€ 7,60



BIS ZU  
-15%

ab 7,60

## M+W select SILANISIERUNGSLIQUID

M+W Silanisierungsliquid ist ein Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocatec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

8 ml  
000 910 | 1 Fl. | € 46,90  
€ 42,20



42,20

## M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, Zul.-Nr. 15999/98/99.  
**Anwendungsbereich:** Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühlumschläge.  
**Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei.  
**Gegenanzeigen:** M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.  
**Hinweis:** M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholfähig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.  
**Einwirkzeiten:** Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500:  
 Konz: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN12791:  
 Konz: 5 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348  
 (hohe Belastung); Konz: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV):  
 Konz: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476; Konz: 30 sec.

Spenderflasche, 1 l  
 000 766 | 1 Fl. | € 9,70  
 € 7,70



7,70 -21%



## M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen. Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft.

Spenderflasche, 500 ml  
 200 745 | 1 Fl. | € 4,40  
 € 3,75

Spenderflasche, 1 l  
 200 746 | 1 Fl. | € 6,95  
 € 5,90

Kanister, 5 l  
 200 748 | 1 Kan. | € 26,90  
 € 22,80



ab 3,75

## M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdeseinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischen Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

750 ml Flasche, mit Schaumprühkopf  
 000 710 | 1 Fl. | € 13,50  
 € 11,50

Kanister, 10 l  
 000 711 | 1 Kan. | € 74,50  
 € 63,30



-15%

ab 11,50



## M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polyester) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.

ab 9,80

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:  
 Plus

200 727 | 1 Fl. | € 11,50  
 € 9,80

Plus lemon  
 200 729 | 1 Fl. | € 11,50  
 € 9,80

Kanister, 10 l:  
 Plus  
 200 728 | 1 Kan. | € 68,30  
 € 57,90

Plus lemon  
 200 730 | 1 Kan. | € 68,30  
 € 57,90

Plus apple  
 200 732 | 1 Kan. | € 68,30  
 € 57,90



## M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mischung von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfrei. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdeseinfektion.

150 Blatt  
 100 763 | 1 Rolle | € 15,90  
 € 13,90  
 ab 6 Rollen | je Rolle | € 14,90  
 € 12,90

Quattro Eimer  
 mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern  
 100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



ab 12,90 BIS ZU -19%



## WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wieder verschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Flowpack, 80 Tücher

100 717 | 1 Pckg. | € 10,50

Gropa, 6 x 80 Tücher

100 718 | 1 Pckg. | € 46,50  
€ 37,20

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und  
Produktinformationen lesen.

**-20%**

80 Tücher  
ab **6,20**



ab **4,-**

BIS ZU  
**-17%**



## DESINFESTIONSTÜCHER PLUS

Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polyester) anwenden.

Dose mit 100 Tüchern:

Plus  
200 735 | 1 Dose | € 5,70  
€ 5,10

Refill mit 100 Tüchern:

Plus  
200 736 | 1 Pckg. | € 4,80  
€ 4,40

Plus lemon  
200 738 | 1 Pckg. | € 4,80  
€ 4,40

Plus apple  
200 740 | 1 Pckg. | € 4,80  
€ 4,40

ab 12 Pckgn.  
einer Sorte | je Pckg. | € 4,40  
€ 4,00



## WET WIPES MAXI

Alkoholfreie, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

**36,50**

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF  
100 766 | 1 Pckg. | € 42,90  
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung  
von getränkten Großformattüchern  
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



## WET WIPES SOFT

Alkoholfreie, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

**36,50**

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF  
100 755 | 1 Pckg. | € 42,90  
€ 36,50

lemon (Limonenduft)  
100 756 | 1 Pckg. | € 42,90  
€ 36,50

green apple (Apfelduft)  
100 757 | 1 Pckg. | € 42,90  
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung  
von getränkten Großformattüchern  
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



## WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, begrenzt viruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformation lesen.

2 Rollen à 75 Blatt

100 758 | 1 Pckg. | € 42,90  
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung  
von getränkten Großformattüchern  
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50

**36,50**





ab **34,50**

BIS ZU  
**-16%**



**M+W select ULTRASUC SUPER**

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Ammoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

5 l  
**000 787** | 1 Kan. | **€ 41,00**  
| **€ 36,90**  
ab 3 Kan. | je Kan. | **€ 39,90**  
| **€ 34,50**



ab **22,60**



**M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER**

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkürstungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw., besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

2,5 l  
**100 716** | 1 Fl. | **€ 26,60**  
| **€ 24,60**  
ab 4 Fl. | je Fl. | **€ 25,60**  
| **€ 22,60**



**26,90**



**M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT**

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

Dosierflasche, 1 l  
**100 725** | 1 Fl. | **€ 31,90**  
| **€ 26,90**



ab **44,50**



**M+W select SEPTOPRINT PLUS**

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

5 l  
**200 725** | 1 Kan. | **€ 52,50**  
| **€ 47,90**  
ab 2 Kan. | je Kan. | **€ 50,90**  
| **€ 44,50**

Dosierpumpe für 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml  
(Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)  
**000 770** | 1 Stck. | **€ 9,70**



ab **12,50**



**M+W select BOHRERBAD PLUS**

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundsteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

2 l  
**200 720** | 1 Fl. | **€ 14,90**  
| **€ 13,50**  
ab 2 Fl. | je Fl. | **€ 13,90**  
| **€ 12,50**

5 l  
**200 722** | 1 Kan. | **€ 32,50**  
| **€ 27,60**

10 l  
**200 721** | 1 Kan. | **€ 59,90**  
| **€ 50,90**



ab **30,10**



**M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS**

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

2 l  
**200 723** | 1 Fl. | **€ 35,50**  
| **€ 30,10**

10 l  
**200 724** | 1 Kan. | **€ 121,90**  
| **€ 110,90**  
ab 2 Kan. | je Kan. | **€ 118,90**  
| **€ 103,90**



ab **41,90**



## M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

5 l  
**200 734** | 1 Kan. | € ~~49,90~~  
 € 44,90  
 ab 2 Kan. | je Kan. | € ~~47,90~~  
 € 41,90



ab **9,30**

## M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml  
**100 732** | 1 Fl. | € ~~10,90~~  
 € 9,90  
 ab 6 Fl. | je Fl. | € ~~9,90~~  
 € 9,30

## M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

500 ml  
**037 712** | 1 Dose | € ~~18,90~~  
 € 16,90  
 ab 6 Dosen | je Dose | € ~~18,30~~  
 € 15,90

Universaladapter (1.):  
 für Intramatic-Anschluss aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C  
**100 704** | 1 Stck. | € ~~7,80~~  
 € 6,80

Adapter Z (2.):  
 Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff

**100 705** | 1 Stck. | € ~~3,60~~  
 € 3,20

Turbinenadapter (3.):  
 für W&H-Turbinen, aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

**100 706** | 1 Stck. | € ~~7,80~~  
 € 6,80

Turbinenadapter (4.):  
 für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss) aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

**100 707** | 1 Stck. | € ~~7,80~~  
 € 6,80



ab **15,90**

BIS ZU **-16%**



## M+W select TRAY CLEANER

Der M+W Tray Cleaner ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen, Gipsen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Auch Abform-Adhäsive werden mit abgelöst. Anwendung 5 – 10%ig, kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Die Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Der Spezialreiniger ist für nicht-rostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.

Dosierflasche, 1 l  
**100 700** | 1 Fl. | € ~~21,50~~  
 € 20,40

Kanister, 5 l  
**100 701** | 1 Kan. | € ~~79,90~~  
 € 75,90



ab **20,40**

## M+W select T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.

250 ml  
**100 703** | 1 Dose | € ~~22,50~~  
 € 19,90  
 ab 6 Dosen | je Dose | € ~~21,90~~  
 € 18,90

BIS ZU **-16%**

ab **18,90**



## M+W select UNIVERSAL ARMHEBELSPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und austauschbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm  
(Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)  
Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.  
Tropfschale ist optional erhältlich –  
bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523 | 1 Stck. | € 51,90  
€ 48,90

Tropfschale  
400 521 | 1 Stck. | € 11,90

Ersatzpumpe NEU  
400 524 | 1 Stck. | € 8,30



48,90

## M+W select SCHUTZMANTEL

Flüssigkeitsabweisender Schutzkittel aus Vlies-Material. Mit Taillengürtel, Bändchen im Nacken und Strickbündchen, Länge: 120 cm. Farbe: blau.

unsteril, 10 Stck.  
400 553 | 1 Pckg. | € 19,50  
€ 16,90

steril, 1 Stck.  
400 554 | 1 Stck. | € 3,50  
€ 3,20

ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,95  
€ 2,70

1+1

Beim Kauf von 1 Packung  
M+W Schutzmantel unsteril  
oder steril bekommen Sie  
1 weitere Packung gratis dazu.



BIS ZU  
-23%

ab 2,70

## M+W select NITRIL ARBEITSHANDSCHUH

Größe	1 Paar
S	400 705
M	400 706
1 Pckg.	€ 3,60 € 3,20
ab 5 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 3,20 € 2,90

Flockgefütterter Nitril Arbeitshandschuh für den Schutz im sterilen Bereich während der Instrumentenaufbereitung. Der lange Schaft schützt Hände und Arme. Paarweise verpackt.

ab 2,90



## M+W select EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

gelb, 12 Stck.  
100 562 | 1 Pckg. | € 23,90  
€ 21,90  
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 22,50  
€ 20,30

ab 20,30



## M+W select HARTPAPIER-BECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. Fassungsvermögen: 180 ml. Farbe: weiß.

1.000 Stck.  
400 500 | 1 Karton | € 53,90  
€ 49,90



49,90



## MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifftabler Polypropylen-Mundspülbecher.  
Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet.  
Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

### PREMIUMQUALITÄT!

ab **25,50**

Farbe	1.000 Stck.	3.000 Stck.
weiß (1.)	700 560	700 540
dunkelblau (2.)	700 561	700 541
cedro (3.)	700 562	700 542
gelb (4.)	700 563	700 543
orange (5.)	700 564	700 544
lila (6.)	700 565	700 545
hellblau (7.)	700 566	700 546
weinrot (8.)	700 567	700 547
schwarz (9.)	700 568	700 548
6 Farben sortiert*	700 569	700 549
1 Karton	€ 29,90 € 26,90	€ 68,90 € 65,50
ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung, je Karton	€ 28,90 € 25,50	€ 66,90 € 62,00



\* orange, gelb, dunkelblau, lila, cedro, hellblau



## CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter von 11 auf 16 mm Ø.

20 Kanülen, 1 Doppeladapter  
 059 528 | 1 Pckg. | € 18,50  
 € 16,50  
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90  
 € 15,50



BIS ZU **-16%** ab **15,50**



## EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Farbe	1.000 Stck.
blau	059 502
grün	059 503
pink	059 504
gelb	059 505
orange	059 509
lime <b>NEU</b>	459 576
iceblau <b>NEU</b>	459 577
1 Karton	€ 36,90 € 32,90
ab 2 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 34,90 € 30,90



100 Stck.:  
 weiß  
 059 500 | 1 Pckg. | € 3,90  
 € 3,50  
 glasklar  
 059 501 | 1 Pckg. | € 3,90  
 € 3,50  
 ab 10 Pckgn. sortiert | je Pckg. | € 3,70  
 € 3,30  
 ab 20 Pckgn. sortiert | je Pckg. | € 3,50  
 € 3,10

BIS ZU **-21%** ab **3,10**



**NEUE FARBEN!**

## M+W select PREMIUM POLYMER HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Für leichteres An- und Ausziehen ist die Innenseite mit einer speziellen Polymerschicht überzogen. Eine Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

Größe	100 Stck.
5-6, extraklein	100 505
6-7, klein	100 506
7-8, mittel	100 507
8-9, groß	100 508
9-10, extragroß	100 509
1 Pckg.	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90



ab 8,90

## M+W select COLORGLOVE

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in vielen frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1,5, EN 455.

Größe	kobaltblau	fuchsia
	100 Stck.	100 Stck.
extraklein	500 560	500 571
klein	500 561	500 572
mittel	500 562	500 573
groß	500 563	-
1 Pckg.	€ 9,90	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90	€ 8,90



ab 8,90

## M+W select PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit extrem gutem Tastgefühl, da nicht mikrogeraut. Die doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen des Handschuhes verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

Größe	100 Stck.
extraklein	100 516
klein	100 517
mittel	100 518
groß	100 519
extragroß	100 520
1 Pckg.	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90



ab 8,90



## M+W select LATEX-HANDSCHUHE LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudertes Latex-Handschuh, AQL 1,5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

Größe	100 Stck.
klein	300 581
mittel	300 582
groß	300 583
1 Pckg.	€ 7,50
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,50



ab 6,50



## M+W select PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Größe	100 Stck.
6-7, klein	000 535
7-8, mittel	000 536
8-9, groß	000 537
1 Pckg.	€ 5,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,90

Unsteriler, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1,5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform.



ab 4,90





## PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die Herstellung dieser Premium Handschuhe erfolgt mit vielen manuellen Arbeitsschritten. Dies gewährt zusätzlich eine höhere Qualität als bei Handschuhen aus rein maschineller Fertigung. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	weiß
	100 Stck.
extraklein	200 524
klein	200 525
mittel	200 526
groß	200 527
1 Pckg.	€ 8,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 7,90



ab **7,90**



## NITRIL HANDSCHUHE

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen in vielen frischen Farben. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455. Auch als Chemikalienschutzhandschuh gem. EN 374 zugelassen.

Größe	natur	saphir	violett	cobalt	magenta
	100 Stck.				
extraklein	600 501	-	-	-	-
klein	600 502	600 507	400 531	600 526	-
mittel	600 503	600 508	400 532	600 527	-
groß	600 504	600 509	400 533	600 528	600 553
1 Pckg.	€ 5,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,90	€ 5,90	€ 5,90	€ 5,90	€ 5,90



ab **4,90**



## COLORMASK

- 3-lagiger Mundschutz Typ IIR
- Glasfaserfreies Filtermedium
- Nickelfreier Nasenbügel
- Filterleistung > 98%
- Hergestellt nach EN 14683
- Hautfreundliche und latexfreie Gummibänder

Farbe	mit Gummibändern 50 Stck.	zum Binden 50 Stck.
weiß	700 570	700 530
grün	700 571	700 534
blau	700 572	700 531
lila	700 573	700 533
pink	700 574	700 532
hellgrün	700 575	700 585
je Pckg.	€ 6,45	€ 6,45
ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 5,95	€ 5,95
ab 20 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 5,45	€ 5,45



Maskenhalter

500 549	1 Stck.	€ 2,50
		€ 2,10
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,95
		€ 1,75

MIT GUMMIBÄNDERN

ZUM BINDEN



ab **5,45**



M+W Dental



## NORMTRAY-EINLAGEN / SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Farbe	NORMTRAY-EINLAGEN	SCHWEBETISCH-AUFLAGEN
	18 x 28 cm, 250 Stck.	28 x 36 cm, 250 Stck.
weiß	098 530	500 535
gelb	098 512	500 540
orange	098 552	500 537
rosa	198 534	500 536
lila	198 533	500 538
hellgrün	300 585	500 541
grün	098 507	500 539
hellblau	098 508	500 543
dunkelblau	300 586	500 542
1 Pckg.	€ 6,40 € 5,95	€ 12,90 € 11,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	-	€ 12,60 € 11,10
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,20 € 5,70	-
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,95 € 5,50	-

ab **5,50**

**BIS ZU -14%**

## M&W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	048 505
blau	048 507
grün	048 509
1 Pckg.	€ 19,50 € 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95

ab **16,95**



## M&W select PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

Farbe	80 Stck.
weiß	075 555
grün	075 560
blau	075 556
gelb	075 561
orange	075 562
lila	075 563
rosa	075 564
1 Pckg.	€ 16,95 € 15,10
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 14,20

ab **14,20**  
**BIS ZU -16%**



## M&W select KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

Farbe	500 Stck.
weiß	700 555
hellblau	700 556
lila	700 557
cedro	700 558
capri dunkelblau	700 559
1 Pckg.	€ 42,90 € 38,50



**38,50**

**M+W select PROFESSIONAL TOWELS**

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stck. in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	085 500
dunkelblau	085 502
orange	085 503
grün	085 504
lila	085 505
rosa	085 506
gelb	085 507
1 Karton	€ 24,90 € 22,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 23,90 € 21,10

ab **21,10**

**M+W select SERVIETTENHALTER**

Farbenfrohe Serviettenhalter mit erhöhtem Tragekomfort für den Patienten durch Verstärkung im Nackenbereich. Länge ca. 48 cm, autoklavierbar bis 121 °C.

Farbe	
hellblau	700 595
gelb	700 594
orange	700 597
grün	700 590
rosa	700 592
lila	700 591
dunkelblau	700 593
limone	700 596
1 Stck.	€ 3,90 € 3,50
ab 5 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,50 € 3,30

ab **3,30**

**M+W select NASSKREPPSERVIETTEN**

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammatur, dadurch hochsaugfähig und nassfest. Farbe: weiß.

1.000 Stck.  
098 513

1 Pckg. | € 33,90  
€ 32,50

ab 6 Pckgn.  
1 Pckg. | € 31,90  
€ 30,50

ab **30,50**

**M+W select PATIENTENTERMINBUCH**

Ringlochbindung, 2 Spalten pro Tag, wochentags 7.00 – 20.30 Uhr, samstags 7.00 – 13.30 Uhr, viertelstündliche Unterteilung, viele Infos (Monatsvorschau, Postgebühren, Urlaubsplaner etc.). Format H 31 x B 33 cm – mit Spalten für 2 Behandler.

Praxisbuch 2025  
002 025  
1 Stck. | € 19,90

ab **19,90**

**M+W select** ZELLSTOFF-TUPFER

4 x 5 cm, passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

2 Rollen à 500 Stck.

400 569 | 1 Pckg. | € 5,25  
€ 4,65

ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 4,95  
€ 4,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,65  
€ 4,00

ab 4,-

BIS ZU  
**-24%**



**M+W select** WATTEROLLENSPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße (B x H x T): 43 x 85 x 95 mm.

weiß

063 513 | 1 Stck. | € 15,50  
€ 13,20

gelb

063 531 | 1 Stck. | € 15,50  
€ 13,20

blau

063 532 | 1 Stck. | € 15,50  
€ 13,20

13,20

**-15%**



**M+W select** WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselreife Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.



Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	500 530
2 / 1,0 cm	500 531
3 / 1,2 cm	500 532
4 / 1,4 cm	500 533
1 Pckg.	€ 6,70 € 6,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,40 € 6,10
ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,10 € 5,90

ab 5,90

**M+W select** MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

Erbse, 500 Stck.

400 574 | 1 Pckg. | € 18,90  
€ 17,90

Haselnuss, 500 Stck.

400 575 | 1 Pckg. | € 21,50  
€ 20,40

Walnuss, 500 Stck.

400 576 | 1 Pckg. | € 28,50  
€ 26,90


Pflaume, 300 Stck.

400 577 | 1 Pckg. | € 28,90  
€ 27,40

Hühnerei, 150 Stck.

400 578 | 1 Pckg. | € 28,50  
€ 26,90

ab 17,90

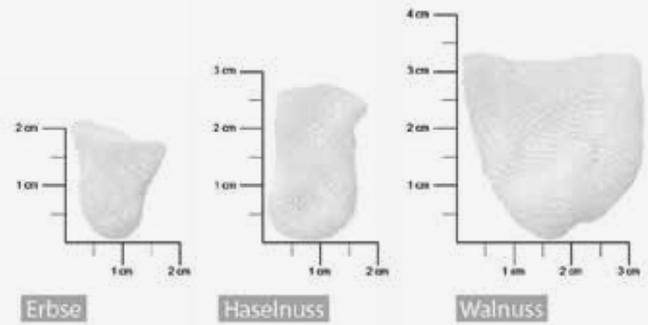

ab 8,20

**M+W select** WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

Größe 1, 3 mm, 2,5 g

400 570 | 1 Pckg. | € 9,70  
€ 9,20

Größe 2, 4 mm, 4 g

400 571 | 1 Pckg. | € 11,30  
€ 10,70

Größe 3, 5,5 mm, 4 g

400 572 | 1 Pckg. | € 8,65  
€ 8,20

Größe 4, 7 mm, 10 g

400 573 | 1 Pckg. | € 9,30  
€ 8,80

## M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinder-Ampullen-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen. Deutsches Erzeugnis.

100 699 | 1 Stck. | € 83,50  
€ 69,90



69,90 -16%

## M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA

Injektionspritze aus rostfreiem Stahl für die intraligamentäre Anästhesie, verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen. Spritze mit abgewinkeltem Vorderteil.

Injektionspritze Intra mit Berstschutz  
300 670 | 1 Stck. | € 97,00  
€ 81,00



81,- -16%

## M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA GUN

Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre Anästhesie. Verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen.

Berstschutz  
300 673 | 1 Stck. | € 5,40

Injektionspritze Intra Gun mit Berstschutz  
300 672 | 1 Stck. | € 99,00  
€ 83,00



83,- -16%

## M+W select NAHTMATERIAL (12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen)

### POLYESTER

Geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

Größe/Form	12 Stck.
DS-16, USP 4/0, grün, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm	500 625
HRT-18, USP 4/0 grün, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 626
HS-17, USP 4/0, grün, 1/2 Kreis, schneidend, 45 cm	500 627
HR-17, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 628
HRT-17, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 629
je Pckg.	€ 21,90 € 19,70

### NYLON

Monofiles Nahtmaterial aus Nylon, nicht resorbierbar.

Größe/Form	12 Stck.
DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm	500 620
DS-19, USP 4/0, blau, 3/8 Kreis, schneidend, 45 cm	500 621
HS-15, USP 4/0, blau, 1/2 Kreis, schneidend, 45 cm	500 622
DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 45 cm	500 623
je Pckg.	€ 21,90 € 19,70




### SEIDE

Geflochtenes Nahtmaterial aus Seide, gewachst, nicht resorbierbar.

Größe/Form	12 Stck.
HR-17, USP 3/0, schwarz, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 630
HS-17, USP 3/0, schwarz, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm	500 631
DS-19, USP 4/0 schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm	500 632
HS-17, USP 4/0, schwarz, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm	500 633
DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm	500 634
DS-16, USP 4/0 schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm	500 635
je Pckg.	€ 21,90 € 19,70

Größe/Form	12 Stck.
DS-19, USP 3/0, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm	500 636
GR-22, USP 4/0, Gerade, Rundkörper, 50 cm	500 637
HR-15, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 638
HR-20, USP 3/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 639
HR-25, USP 2/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 670
HRT-18, USP 3/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm	500 671
HS-23, USP 2/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm	500 674
HS-23, USP 3/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm	500 675
je Pckg.	€ 21,90 € 19,70

19,70

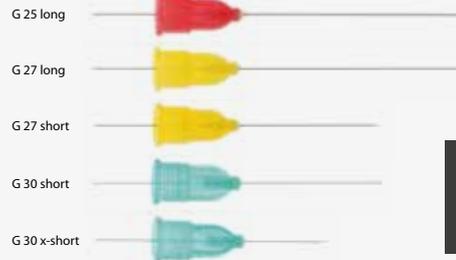

ab 7,80

## M+W select EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zylinderampullen-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

Größe/Farbe	100 Stck.
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	200 580
G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	200 582
G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	200 583
<b>Für die intraligamentäre Anästhesie:</b>	
G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	200 584
G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	200 585
je Pckg.	€ 9,30 € 8,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,75 € 7,80



ab 3,10

BIS ZU -18%

## M+W select INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für Zylinderampullen-Spritzen geeignet).

Größe/Farbe	100 Stck.
25 short, 0,5 x 25 mm, orange	300 595
25 long, 0,5 x 40 mm, orange	300 596
27 short, 0,4 x 25 mm, grau	300 597
27 long, 0,4 x 38 mm, grau	300 598
je Pckg.	€ 3,80 € 3,40
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 3,40 € 3,10



## M+W select PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit geriefelter Spitze, 1a-Qualität.

BIS ZU **-18%** ab **6,<sup>20</sup>**

### Pinzette London College:

15 cm, matt

098 636 | 1 Stck. | € 7,60  
€ 6,95

15 cm, hochglanzpoliert

098 646 | 1 Stck. | € 7,60  
€ 6,95

### Pinzette Meriam:

15 cm, matt

098 628 | 1 Stck. | € 7,60  
€ 6,95

### Pinzette Perry:

13 cm, matt

098 629 | 1 Stck. | € 7,60  
€ 6,95

ab 10 Stck. einer Ausführung

| je Stck. | € 7,30  
€ 6,60

ab 20 Stck. einer Ausführung

| je Stck. | € 6,95  
€ 6,20



London College, matt



Meriam, matt



Perry, matt



## M+W select HALSTED-MOSQUITO KLEMME

Arterienklemme, rostfrei.

13 cm gerade

500 665 | 1 Stck. | € 9,50  
€ 8,10

13 cm gebogen

500 666 | 1 Stck. | € 9,50  
€ 8,10



**8,<sup>10</sup>**

## M+W select ZAHNFLEISCHSCHERE IRIS

Rostfrei.

gerade, 11,5 cm

500 662 | 1 Stck. | € 8,90  
€ 7,50

gebogen, 11,5 cm

500 663 | 1 Stck. | € 8,90  
€ 7,50



**-16%** **7,<sup>50</sup>**

## M+W select ZAHNFLEISCHSCHERE

Zahnfleisch-Schere nach Goldmann-Fox,  
13 cm, gebogen.

300 669 | 1 Stck. | € 14,90  
€ 12,60



**12,<sup>60</sup>**

## M+W select NADELHALTER MATHIEU

Rostfreier Stahl.

14 cm

300 675 | 1 Stck. | € 45,90  
€ 39,00

17 cm

300 676 | 1 Stck. | € 49,50  
€ 42,00



**-15%** ab **39,-**

## M+W select SKALPELLGRIFF **NEU**

Skalpellgriff aus rostfreiem Stahl mit Rundgriff.

600 613 | 1 Stck. | € 16,50  
€ 14,00



**-15%** **14,-**

## M+W select SKALPELLGRIFF Nr. 3

Edelstahl.

200 669 | 1 Stck. | € 6,90  
€ 5,80



**-16%** **5,<sup>80</sup>**

## M+W select ANATOMISCHE/ CHIRURGISCHE PINZETTE

Pinzetten aus rostfreiem Stahl, gerade, 14 cm.

Anatomische  
Pinzette, 14 cm  
300 665

1 Stck. | € 8,25  
€ 6,90

Chirurgische  
Pinzette, 14 cm  
300 666

1 Stck. | € 9,85  
€ 8,30



Anatomische Pinzette

Chirurgische Pinzette

BIS ZU  
**-16%**

ab **6,90**

## M+W select MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

schwarz	181 610
blau	181 611
grün	181 612
rot	181 613
weiß	181 614
mint	181 615
rosa	181 616
flieder	181 617
1 Stck.	€ 5,20 € 4,90
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 4,90 € 4,40

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.



ab **4,40**

## M+W select MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, rostfreier Edelstahl,  
hohl (1.)

081 626 | 1 Stck. | € 5,20  
€ 4,90

ab 20 Stck. | je Stck. | € 4,90  
€ 4,20

8-Kant, rostfrei, massiv (2.)

040 640 | 1 Stck. | € 3,30  
€ 2,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,10  
€ 2,70

Fingerform, rostfrei, hohl (3.)

000 677 | 1 Stck. | € 10,90  
€ 9,50

ab 10 Stck. | je Stck. | € 10,50  
€ 9,10

easyclean (4.)

500 655 | 1 Stck. | € 5,90  
€ 5,10

Universalgriff (5.)

500 660 | 1 Stck. | € 4,30  
€ 3,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 4,10  
€ 3,60



ab **2,70**

BIS ZU  
**-19%**

## M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

Größe / Ø	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4 / 2,0 cm	084 601	084 604
5 / 2,3 cm	084 602	084 605
1 Pckg.	€ 16,90 € 15,90	€ 13,50 € 12,80



ab **12,80**

## M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

Größe	plan, 12 Stck.
4	084 610
5	084 611
1 Pckg.	€ 23,50 € 20,90



**20,90**

## M+W select FÜLLUNGSINSTRUMENTE

### Kugel/Kugel

1,0 mm/1,3 mm	181 600
1,4 mm/1,8 mm	181 601
1,9 mm/2,3 mm	181 602
2,5 mm/3,0 mm	181 603
1,0 mm/1,4 mm	081 608
2,2 mm/3,0 mm	081 609
4,5 mm/3,5 mm	081 610

### birnenförmig

1,0 mm/1,5 mm	081 611
1,5 mm/1,8 mm	081 612
1,9 mm/2,3 mm	081 613

1 Stck. € 10,90  
€ 9,80

### plan/plan

1,0 mm/1,2 mm	181 604
1,4 mm/1,6 mm	181 605
1,7 mm/1,9 mm	181 606

### Kugel/Spatel

1,9 mm/2,5 mm 081 607

### Spatel/Spatel

1,6 mm/1,6 mm	081 601
1,6 mm/2,0 mm	081 603
2,0 mm/2,0 mm	181 607
2,4 mm/2,4 mm	081 602
2,5 mm/2,5 mm	181 608

1 Stck. € 10,90  
€ 9,80

Rostfreier Edelstahl,  
Qualitätsinstrumente.



9,80

## M+W select SCALER

Instrumente zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen sowie zur Glättung der Wurzeloberfläche. Die sichelförmigen Scaler haben je Arbeitsende zwei schneidende Kanten, die am Ende zu einer Spitze auslaufen.

204	500 610
204 S	500 611
204 SD	500 612
H6/H7	500 613
CI 2/3	500 614
Taylor T 2/3	500 615

1 Stck. € 24,90  
€ 22,90  
ab 5 Stck. einer Form, je Stck. € 23,50  
€ 20,90



ab 20,90

## M+W select ZAHNSONDEN SPEZIAL

Mit sehr feinem Arbeitsende und 8-Kantgriff, rostfrei.

Nr. 8, einendig  
100 675 | 1 Stck. | € 4,10  
€ 3,60

Nr. 9, einendig  
100 676 | 1 Stck. | € 4,10  
€ 3,60

Nr. 23, einendig  
100 677 | 1 Stck. | € 4,10  
€ 3,60  
ab 10 Stck. einer Form | je Stck. | € 3,90  
€ 3,40  
ab 20 Stck. einer Form | je Stck. | € 3,69  
€ 3,20



ab 3,20

BIS ZU  
-12%

## M+W select KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsigelgeräte.

Rolle, 5 cm breit, 100 m  
000 752 | 1 Pckg. | € 12,90  
€ 11,90  
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 11,90  
€ 10,90

Rolle, 7,5 cm breit, 100 m  
000 753 | 1 Pckg. | € 16,30  
€ 14,50  
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 15,30  
€ 13,50

Rolle, 10 cm breit, 100 m  
000 754 | 1 Pckg. | € 20,50  
€ 17,50  
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 19,50  
€ 16,90

Rolle, 5 cm breit, 200 m  
000 722 | 1 Pckg. | € 20,50  
€ 17,50

Rolle, 7,5 cm breit, 200 m  
000 723 | 1 Pckg. | € 26,90  
€ 22,80

Rolle, 10 cm breit, 200 m  
000 724 | 1 Pckg. | € 35,50  
€ 30,10

Rolle, 20 cm breit mit Seitenfalte 5 cm, 100 m lang, zum Einschweißen von Norm-Trays oder Kassetten  
000 725 | 1 Pckg. | € 55,90  
€ 47,50



BIS ZU  
-18%

ab 10,90

## M&W select ANMISCHSPATEL

Breite

Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

4,5 mm	500 640
6,0 mm	500 641
7,5 mm	500 642
1 Stck.	€ 9,50
	€ 8,50
ab 10 Stck. einer Form	€ 8,90
	€ 7,90



ab 7,90

## M&W select ANMISCHSPATEL

3/3 mm breit

081 645	1 Stck.	€ 10,90
		€ 9,90
ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,60
		€ 8,90



ab 8,90


## M&W select HEIDEMANNSPATEL

Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

2 mm breit	500 650	1 Stck.	€ 9,50	3 mm breit	500 652	1 Stck.	€ 9,50
			€ 8,50				€ 8,50
2,5 mm breit	500 651	1 Stck.	€ 9,50	ab 10 Stck. einer Form	1 Stck.	€ 8,90	
			€ 8,50			€ 7,90	

ab 7,90

BIS ZU  
-17%

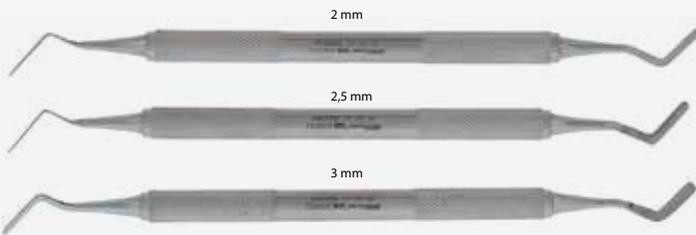


## M&W select HEIDEMANNSPATEL

Rostfreier Edelstahl, 6-Kant-Griff.

Nr. 19, 2,0 mm	081 619	1 Stck.	€ 10,30	Nr. 21, 3,0 mm	081 621	1 Stck.	€ 10,30
			€ 8,90				€ 8,90
Nr. 20, 2,5 mm	081 620	1 Stck.	€ 10,30	ab 10 Stck. einer Form	je Stck.	€ 9,90	
			€ 8,90			€ 8,50	

ab 8,50

BIS ZU  
-17%

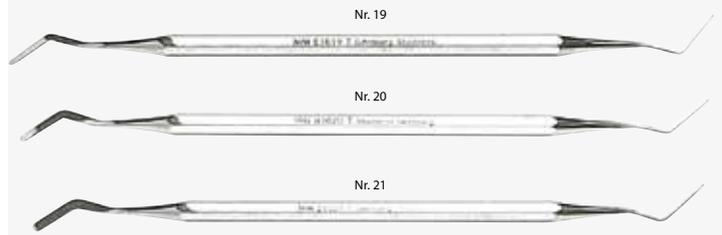


## M&W select PARODONTAL-KÜRETTEN NACH GRACEY

1/2	für den Frontzahnbereich (kurz)	500 600
3/4	für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	500 601
5/6	für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	500 602
7/8	für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	500 603
9/10	für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	500 604
11/12	für die mesiolingualen und mesiobukkalen Bereiche des Seitenzahngebietes	500 605
13/14	für die distalen Flächen aller Molaren	500 606
15/16	für die mesialen Flächen aller Molaren	500 607
1 Stck.		€ 24,90
		€ 21,10

21,10

Küretten nach Gracey sind für subgingivales Scaling und Root Planing der Wurzeloberflächenform in den verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

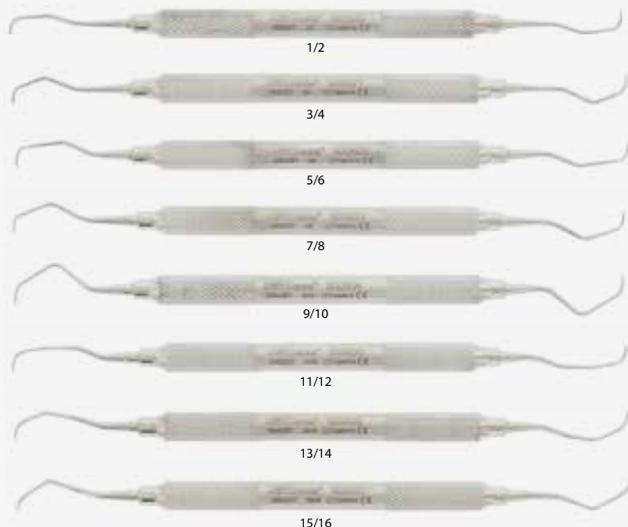

## M&W select PARODONTOMETER

CP 15 (1 bis 15 mm)	300 661	1 Stck.	€ 19,90
			€ 17,90
ab 5 Stck.	je Stck.	€ 19,30	
			€ 16,30

Aus rostfreiem Stahl mit Farbmarkierung.

ab 16,30



## M&W select ZEMENTSPATEL

Rostfrei, doppelendig.

schmal, 5 mm	081 642	1 Stck.	€ 10,60
			€ 9,90
mittel, 6 mm	081 643	1 Stck.	€ 10,60
			€ 9,90
breit, 7 mm	081 644	1 Stck.	€ 10,60
			€ 9,90
ab 5 Stck. einer Form	je Stck.	€ 10,20	
			€ 8,90



ab 8,90

## M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße: 43 µm.

ab **18,50**

<b>Geschmack</b>	<b>300 g</b>
Zitrone	100 887
Minze	100 888
1 Fl.	€ 21,50 € 19,50
ab 4 Flaschen einer Ausführung, je Fl.	€ 20,50 € 18,50



## M+W select PROPHY PERIO

Prophylaxepulver auf Tagatose Basis für sub- und supragingivale Anwendung.  
**Subgingivale Anwendung:** Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung.  
**Supragingivale Anwendung:** Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne. Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm. Darreichungsform in praktischer 120 g Flasche, neutraler Geschmack.



Flasche, 120 g		
100 891	1 Fl.	€ 20,50 € 18,50
ab 4 Fl.	je Fl.	€ 19,50 € 17,50

ab **17,50**

## M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:  
**RDA 250:** bei starken Belägen und Rauigkeiten  
**RDA 170:** bei mittleren Verfärbungen und Belägen  
**RDA 120:** bei geringen Belägen und Verfärbungen  
**RDA 40:** extra fein für die Endpolitur

<b>Körnung</b>	<b>60 ml/100 g</b>
RDA 250 blau	200 860
RDA 170 grün	200 861
RDA 120 rosa	200 862
RDA 40 gelb	200 863
1 Tube	€ 11,20 € 9,90
ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube	€ 10,20 € 9,30



ab **9,30**

BIS ZU **-17%**



ab **8,90**

## M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück. Einfache Unterscheidung durch unterschiedliche Farben.

<b>Farbe</b>	<b>12 Stck.</b>	<b>100 Stck.</b>
Borste natur	000 854	000 857
1 Pckg.	€ 11,90 € 10,10	€ 67,90 € 57,50
	10 Stck.	100 Stck.
Nylon pink, soft	200 875	200 879
Nylon blau, mittel	200 876	200 880
Nylon weiß, hart	200 877	200 881
Nylon weiß, soft	200 878	200 882
1 Pckg.	€ 10,50 € 8,90	€ 71,90 € 60,90



ab **3,10**

## M+W select PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur.

Snap-on Mandrell für Winkelstück, 10 Stck.  
 200 833 | 1 Pckg. | € 12,50 € 10,50

Farbe	Montiert für Winkelstück		Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell
	10 Stck.	100 Stck.	10 Stck.
blau, soft	200 885	200 888	200 891
lila, mittel	200 886	200 889	200 892
gelb, hart	200 887	200 890	200 893
1 Pckg.	€ 4,95 € 4,20	€ 41,50 € 35,50	€ 3,60 € 3,10

## M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissurenversiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen,  
 6 Applikationskanülen  
 200 135 | 1 Pckg. | € 22,90  
 € 20,60



**20,60**



## ZAHNBÜRSTEN



### KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblen Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847 | 1 Stck. | € 1,19  
 € 0,99  
 ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09  
 € 0,89  
 ab 24 Stck. | je Stck. | € 0,99  
 € 0,79

### KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung. (Wechselnde Motive, keine Auswahl möglich)

grün  
 200 845 | 1 Stck. | € 0,49  
 € 0,45  
 pink  
 200 846 | 1 Stck. | € 0,49  
 € 0,45  
 ab 10 Stck. einer Farbe | je Stck. | € 0,45  
 € 0,40

### ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.

Farbe  
 grün 059 810  
 blau 600 800  
 pink 059 812  
 gelb 059 813  
 1 Stck. € 1,09  
 € 0,89  
 ab 12 Stck. einer Farbe, je Stck. € 0,99  
 € 0,79  
 ab 24 Stck. einer Farbe, je Stck. € 0,89  
 € 0,69

ab 0,40  
 BIS ZU -37%



## EINMALZAHNBÜRSTEN ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert. Einzeln verpackt.

Farbe 100 Stck.  
 dunkelblau 400 820  
 grün 400 821  
 Mix\* 400 825  
 1 Pckg. € 14,50  
 € 13,50  
 ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 13,95  
 € 12,90  
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 13,50  
 € 12,30

ab 12,30

\* sortiert in den Farben blau, orange, gelb, grün, rosa



## EINBÜSCHELBRÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

200 849 | 1 Stck. | € 1,20  
 € 1,09  
 ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09  
 € 0,99



ab 0,99



## INTERDENTAL-BÜRSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

### Praxis-Kit:

180 Bürsten, je Größe  
 20 Bürsten mit Schutzkappe (außer bei lila und grau)  
 000 879 | € 83,50  
 1 Pckg. | € 69,90

BIS ZU -21%

ab 3,30



Pckg. mit 8 Bürsten	000 889	000 881	000 882	000 883	000 884	000 885	000 886	000 887	000 888
Farbe	weiß	pink	orange	rot	blau	gelb	grün	lila	grau
Größe	superfein-soft	xxxx-fein	xxx-fein	xx-fein	x-fein	fein	mittel	groß	x-groß
Ø Bürste	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Länge Kopf	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Größe Interdentalraum	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Ø Draht	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Größe nach ISO 16409	0	1	1	2	2	3	4	5	6
mit Schutzkappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
je Pckg.	€ 4,20 € 3,60								
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 3,60 € 3,30								

## M+W select ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschneidevorrichtung, Mintgeschmack. M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

reißfest: gewachst, 25 m

000 875 | 1 Stck. | € 1,99  
€ 1,79

reißfest: ungewachst, 25 m

000 876 | 1 Stck. | € 1,99  
€ 1,79

leicht gewachst, 15 m

000 877 | 1 Stck. | € 1,99  
€ 1,79

ab 10 Stck. einer Sorte | je Stck. | € 1,79  
€ 1,59



BIS ZU  
**-20%**  
ab **1,59**



ab **1,75**

## M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnsparungen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsenen, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, faserst nicht aus.

Dispenser mit 50 Einheiten

000 872 | 1 Rolle | € 2,10  
€ 1,99

ab 10 Rollen | je Rolle | € 1,99  
€ 1,75

ab **24,90**



## M+W select FLEXI-DISC

Flexible Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Gold. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen und können ziehend und schiebend verwendet werden. Die Körnungstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungstärken sind die Scheiben eingefärbt.

Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich:  
Ø 10 mm für schwer zugängliche Bereiche und kleine Flächen  
Ø 14 mm für größere Bereiche

schwarz – sehr grob (mit Diamantbelegung): abtragen  
blau – grob: abtragen  
rosa – mittel: glätten  
gelb – fein: vorpolieren  
weiß – extra fein: polieren

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / extra grob	400 868
14 mm / extra grob	400 869
1 Pckg.	€ 35,90 € 34,10

Mandrells für Winkelstück, 3 Stck.  
400 867 | 1 Pckg. | € 11,50  
€ 10,90

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / grob	400 870
14 mm / grob	400 871
10 mm / mittel	400 872
14 mm / mittel	400 873
10 mm / fein	400 874
14 mm / fein	400 875
10 mm / extra fein	400 876
14 mm / extra fein	400 877
1 Pckg.	€ 26,50 € 24,90

Von extra grob  
bis extra fein

**27,80**

## M+W select GUMCARE

Kosmetische M+W Mundspüllösung für die professionelle Pflege und Reinigung des Mund- und Rachenbereichs. Erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Wirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und zu erhalten. Optimal geeignet für die Spülung vor Beginn der Behandlung.  
Wirkstoff: 0,1% Benzalkoniumchlorid, alkohol- und fluoridfrei, daher auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)  
100 876 | 1 Fl. | € 30,90  
€ 27,80



## M+W select INTERDENTALBÜRSTEN

Set: 1 Interdentalbürstenhalter, je 1 Interdentalbürste zylindrisch rot Ø 2,2 mm, zylindrisch blau Ø 2,8 mm, konisch rot Ø 2,2 – 4 mm, konisch blau Ø 3 – 6 mm

000 870 | 1 Stck. | € 2,30  
€ 1,90

Form	10 Stck.
zylindrisch rot, Ø 2,2 mm (1.)	000 865
zylindrisch blau, Ø 2,8 mm (2.)	000 866
konisch rot, Ø 2,2 – 4 mm (3.)	000 867
konisch blau, Ø 3 – 6 mm (4.)	000 868
1 Pckg.	€ 2,50 € 2,30 € 2,30 € 2,10

ab 10 Stck. einer Form, je Stck.



Interdentalbürstenhalter  
000 869  
1 Stck. | € 1,80  
€ 1,60  
ab 10 Stck.  
je Stck. | € 1,60  
€ 1,40

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume, Nylon. Der praktische Kunststoffhalter erleichtert das Handling der Interdentalbürsten, die Bürsten werden einfach eingeklemmt, nicht autoklavierbar.

ab **1,40**  
BIS ZU  
**-22%**

ab **2,60**

## M+W select INTERDENTALREINIGER

Spiralbürsten mit Drahtgriff zur Reinigung von Zahnzwischenräumen.

Form	10 Stck.
schmal, Ø 2 mm (1.)	005 858
mittel, Ø 4 mm (2.)	005 859
breit, Ø 6 mm (3.)	005 860
1 Pckg.	€ 3,10 € 2,90 € 2,90 € 2,60

ab 10 Stck. einer Form, je Stck.





## HEXAGUM 0,12 %

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidingluconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche, 500 ml	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 880   1 Fl.   € 8,90	100 881   1 Kan.   € 26,90
	€ 7,90
ab 5 Fl.   je Fl.   € 8,60	Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
€ 7,50	100 884   1 Stck.   € 6,90



## HEXAGUM FORTE 0,2 %

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidingluconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche 100 ml	Flasche 500 ml, mit Dosierpumpe
100 882   1 Fl.   € 3,40	100 883   1 Fl.   € 10,90
	€ 3,10
ab 20 Fl.   je Fl.   € 3,10	ab 5 Fl.   je Fl.   € 10,40
€ 2,90	€ 9,20

ab **2,90**



## SOFT STICKS

Für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

**2,10**

32 Stck.	
200 848   1 Pckg.   € 2,49	
	€ 2,10



## ZAHNSPANGENBOX

Stoßsichere Plastikbox. Maße (B x L x H): 7,8 x 7,3 x 3 cm.

Farbe	Ortho Box
weiß	998 015
pink	998 016
blau	998 017
grün	998 018
neongelb-grün	998 019
1 Stck.	€ 1,10
	€ 0,90
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,00
	€ 0,80
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,90
	€ 0,70



ab **0,70** **-36%**



## ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

200 825   1 Stck.   € 1,60
€ 1,25
ab 10 Stck.   je Stck.   € 1,45
€ 1,15
ab 30 Stck.   je Stck.   € 1,10
€ 0,95



ab **0,95** **BIS ZU -41%**



## PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

200 820   1 Stck.   € 1,90
€ 1,60
ab 10 Stck.   je Stck.   € 1,60
€ 1,50



ab **1,50**

## M+W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.  
16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-verschließbarer Kappenkanüle:

10%  
000 892 | 1 Pckg. | € 22,90  
€ 20,90

16%  
000 893 | 1 Pckg. | € 22,90  
€ 20,90

ab 5 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 20,90  
€ 19,50

ab 19,50



## M+W select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaque-reduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxid-gehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahn-schonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahn-fleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze,  
3 Mischkanülen,  
1,5 g Gingiva Protector,  
3 Applikationstips  
000 898 | 1 Pckg. | € 58,90  
€ 49,90

49,90  
-15%



## M+W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,  
2 Mischkanülen,  
1,5 g Gingiva Protector  
mit 2 Applikationskanülen  
000 891 | 1 Pckg. | € 42,90  
€ 36,50



36,50  
-15%

## M+W select SUPERLITE 1300

### Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Lichtleiter
- 1 Schutzschild

100 045 | 1 Stck. | € 345,00  
€ 279,00\*

### Bleaching Lightguide

100 046 | 1 Stck. | € 59,50  
€ 46,50\*

### Technische Daten:

Ø Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: max. 1.300 mW  
Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm  
Gewicht: Ladegerät 560 g,  
Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)  
Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)  
Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm  
Akku: Li-Ion 2200 mAh,  
3,7V (4.000 Belichtungszyklen)  
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

\* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

4 verschiedene Modi

279,-\* -19%



## M+W select ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam und steril.

100 Stck.:

23 mm, Ø 0,3 mm, gelb

059 506 | 1 Pckg. | € 12,20

€ 10,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70

€ 10,20

23 mm, Ø 0,4 mm, grau

059 507 | 1 Pckg. | € 10,20

€ 8,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60

€ 8,50


38 mm, Ø 0,5 mm, orange

059 508 | 1 Pckg. | € 8,40

€ 7,60

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90

€ 7,10

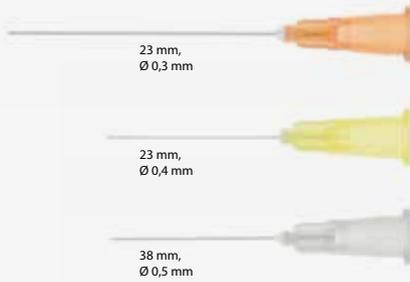

BIS ZU  
**-17%**  
ab **7,10**


## M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

000 616 | 1 Stck. | € 21,90

€ 18,60

**-15%** **18,60**

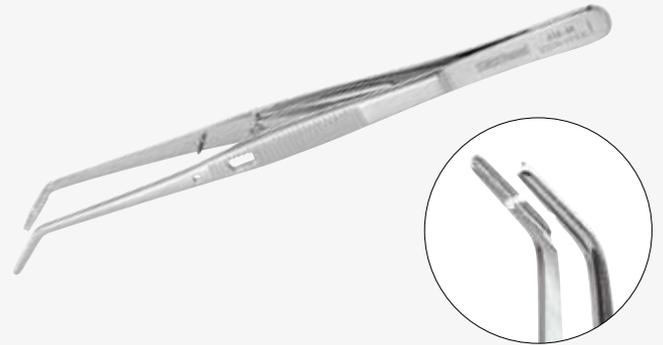

## M+W select PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

5 ml Doppelkammerspritze

100 300 | 1 Stck. | € 31,50

€ 28,50

Mischkanülen, 25 Stck.

100 301 | 1 Pckg. | € 20,90

€ 18,80

Endo-Tips, 25 Stck.

100 302 | 1 Pckg. | € 8,90

€ 7,90

**28,50**

## M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllungen, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wertes von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

Spritze 2 ml, 6 Kanülen

200 140 | 1 Pckg. | € 11,90

€ 10,10

**10,10**



## M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus latexfreiem Silikon für die Politur von Compositefüllungen, Verblendkunststoffen und natürlichen Zähnen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückschaft, max. 20.000 U/Min.

Set:

12 Polierer,

je 3 Stck. je Form

400 895

1 Set | € 16,90

€ 14,20

Form 10 Stck.

Minispitze 400 896

Walze 400 897

Kelch 400 898

Kelch breit 400 899

1 Pckg. € 14,50

€ 12,20



Einstufiges  
Poliersystem

BIS ZU  
**-16%**

ab **12,20**

## M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.

198 634 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,10

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.

198 628 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,10

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.

198 629 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,10



**6,10**

**M+W select WURZELKANALINSTRUMENTE**

**-16%** **6,70**

**7,90**

Hedströmfeile



Wurzelkanal-Feile



Wurzelkanal-Bohrer



Länge	21 mm		25 mm		21 mm		25 mm		21 mm		25 mm	
	ISO	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
ISO 08	700 618	700 628	700 639	700 649	700 660	700 670						
ISO 10	700 619	700 629	700 640	700 650	700 661	700 671						
ISO 15	700 620	700 630	700 641	700 651	700 662	700 672						
ISO 20	700 621	700 632	700 642	700 653	700 663	700 674						
ISO 25	700 622	700 633	700 643	700 654	700 664	700 675						
ISO 30	700 623	700 634	700 644	700 655	700 665	700 676						
ISO 35	700 624	700 635	700 645	700 656	700 666	700 677						
ISO 40	700 625	700 636	700 646	700 657	700 667	700 678						
ISO 45	700 626	700 637	700 647	700 658	700 668	700 679						
ISO 50	700 627	700 638	700 648	700 659	700 669	700 680						
ISO 15-40	-	700 631	-	700 652	-	700 673						
1 Pckg.	€ 7,95 € 6,70											

**-17%**



**M+W select ENDO MESSBLOCK**

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680 | 1 Stck. | € 9,50  
€ 7,90

**5,70**



**M+W select PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR**

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 120 Stck.
15, weiß	100 644	200 670	200 677	45, weiß	100 651
20, gelb	100 645	200 671	200 678	50, gelb	100 652
25, rot	100 646	200 672	200 679	55, rot	100 653
30, blau	100 647	200 673	200 680	60, blau	100 654
35, grün	100 648	200 674	200 681	70, grün	100 655
40, schwarz	100 649	200 675	200 682	80, schwarz	100 656
15-40 sortiert	100 650	200 676	200 683	45-80 sortiert	100 657
je Pckg.	€ 5,70	€ 5,70	€ 5,70	je Pckg.	€ 5,70

**7,60**



**M+W select GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR**

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	100 630	200 684	200 691	45, weiß	100 637
20, gelb	100 631	200 685	200 692	50, gelb	100 638
25, rot	100 632	200 686	200 693	55, rot	100 639
30, blau	100 633	200 687	200 694	60, blau	100 640
35, grün	100 634	200 688	200 695	70, grün	100 641
40, schwarz	100 635	200 689	200 696	80, schwarz	100 642
15-40 sortiert	100 636	200 690	200 697	45-80 sortiert	100 643
je Pckg.	€ 7,60	€ 7,60	€ 7,60	je Pckg.	€ 7,60

## M+W select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.



**Set:**  
1,5 m Schlauch mit Metallklammer,  
Teflonträger für Indikatorstreifen,  
50 Indikatorstreifen  
100 777 | 1 Pckg. | € 89,00  
€ 84,00

Indikatorstreifen, 250 Stck.  
für Helix Test System  
100 799 | 1 Pckg. | € 47,90

Set **84,-**



**75,60**

## M+W select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörpern nach EN-867-5.

250 Teststreifen, 1 Prüfkörper  
200 708 | 1 Pckg. | € 89,00  
€ 75,60



**32,50**

## M+W select INKTEST EASY

Siegelhaftigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßiger Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel  
500 701 | 1 Pckg. | € 35,90  
€ 32,50

**NEU** Flüssigkeit jetzt im Beutel –  
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.

## M+W select SEAL TEST

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Folien-siegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung  
mit 100 Teststreifen  
200 707 | 1 Pckg. | € 36,90  
€ 33,50



**33,50**

## M+W select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen  
200 702 | 1 Pckg. | € 25,90  
€ 23,50



**23,50**

## M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett.  
**Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt:**  
Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

**152,-**

Etikettierer  
200 710 | 1 Stck. | € 179,00  
€ 152,00

Sandwichetiketten,  
4 Rollen à 500 Stck.  
200 711 | 1 Pckg. | € 31,90

Farbwalze  
200 712 | 1 Pckg. | € 16,90



**170,-**

## M+W select WASHTEST

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors.

100 Tests (ohne Prüfleiste)  
200 704 | 1 Pckg. | € 188,90  
€ 170,00

Prüfleiste aus Edelstahl  
200 705 | 1 Stck. | € 59,90  
€ 57,10

**M+W select FG-DIAMANTEN BOX**

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überlegene, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösbare ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computer-gesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

BIS ZU **-16%** ab **9,20**

**Internationale Farbcodierung**


<b>schwarzer Ring</b>	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
<b>grüner Ring</b>	grob	150 µm	C	Vorschleifen
<b>blauer Ring</b>	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
<b>roter Ring</b>	fein	64 µm	F	Glätten
<b>gelber Ring</b>	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
<b>weißer Ring</b>	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

**Maximale Drehzahlen**

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

**Packung mit 5 Stck.**

Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg. € 10,90 € 9,20	€ 13,20 € 11,20	€ 17,50 € 14,80

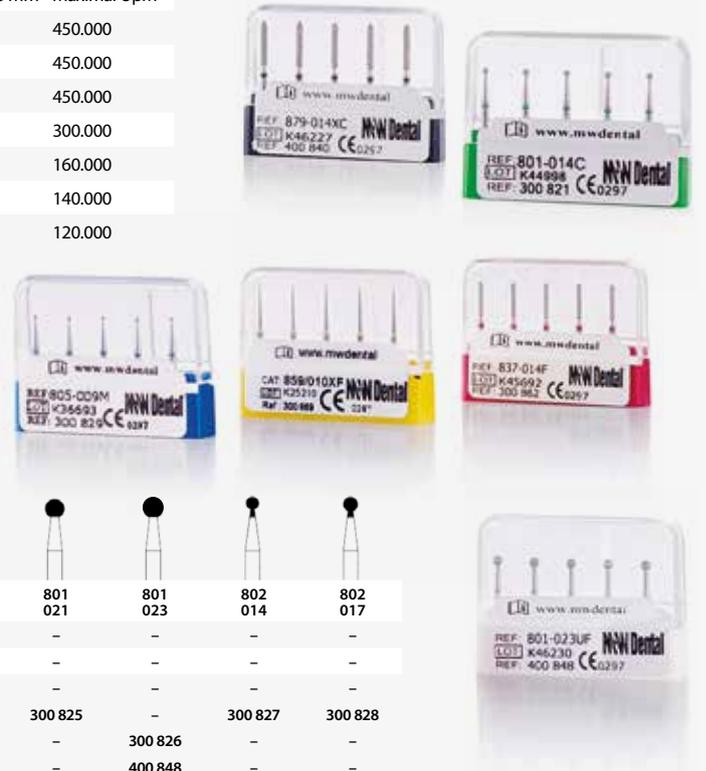

**FG-Schaft, 5 Stck.**

**Kavitätenkugel**

Figur	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
Größe	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
x-grob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

**FG-Schaft, 5 Stck.**

**Kegel umgekehrt, kurz**      **FG-Schaft, 5 Stck.**      **Kegel umgekehrt, lang**

Figur	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014	Figur	807 013	807 015
Größe	-	-	-	-	-	-	Größe	-	-
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833	mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1	Preisgruppe	1	2

**FG-Schaft, 5 Stck.**

**Diabolo**      **FG-Schaft, 5 Stck.**      **Birne**

Figur	813 012	813 014	813 016	Figur	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
Größe	-	-	-	Größe	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 837	300 838	300 839	mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

**FG-Schaft, 5 Stck.**

**Zylinder kurz**      **FG-Schaft, 5 Stck.**      **Zylinder**

Figur	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012	Figur	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
Größe	-	-	-	-	-	-	Größe	-	-	-	-	-
x-grob	-	400 844	-	-	-	-	x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-	Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	300 850	-	-	-	-	grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855	mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	-	-	fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	-	-	-	extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1	Preisgruppe	2	2	2	2	2



# FG-DIAMANTEN BOX

FG-Schaft,  
5 Stck.

Zylinder rund



Zylinder spitz



FG-Schaft,  
5 Stck.

Torpedo




Figur Größe	881 010	881 012	885 010	885 012
x-grob	-	-	-	400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	300 896
mittel	300 892	300 893	300 894	300 897
fein	-	-	-	300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

Figur Größe	878 012	879 010	879 012	879 014	879 016
x-grob	-	-	-	400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	300 886	300 889	-
mittel	300 883	300 884	300 887	300 890	300 891
fein	-	-	300 885	300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft,  
5 Stck.

Konus flach

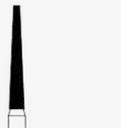

Konus rund



FG-Schaft,  
5 Stck.

Separierer



Figur Größe	848 014	848 016	850 012	850 014
mittel	300 864	300 865	300 866	300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

Figur Größe	859 010	859 012	859 014	859 016	859 018
mittel	300 868	300 870	300 871	300 873	-
extrafein	300 869	-	300 872	-	300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft,  
5 Stck.

Knospe



FG-Schaft,  
5 Stck.

Flamme



FG-Schaft,  
5 Stck.

Rad



Figur Größe	368 016	368 018	368 023	379 023
mittel	300 811	300 813	300 815	-
fein	300 810	-	300 814	-
extrafein	300 812	-	300 816	300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	400 850	-	400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-

Figur Größe	862 012	863 012	863 014
x-grob	-	-	400 842
Preisgruppe	-	-	3
grob	-	-	300 880
mittel	-	300 877	300 881
fein	-	300 876	300 879
extrafein	300 875	300 878	300 882
Preisgruppe	2	2	2
ultrafein	400 849	-	400 847
Preisgruppe	3	-	3

Figur Größe	909 036
mittel	300 898
Preisgruppe	3



# BOHRERSTÄNDER

NEU

6,<sup>20</sup>

Bohrerstände aus Kunststoff zur Aufbewahrung von FG-Instrumenten oder WST-Instrumenten, mit Deckel zum Schutz vor Verschmutzung. Unterteil autoklavierbar bis 135 °C.

für 24 FG-Instrumente  
200 821 | 1 Stck. | € 6,90  
€ 6,20

für 24 WST-Instrumente  
200 822 | 1 Stck. | € 6,90  
€ 6,20

für 48 FG/WST-Instrumente  
200 823 | 1 Stck. | € 6,90  
€ 6,20



für 24 WST-Instrumente



für 24 FG-Instrumente



für 48 FG/WST-Instrumente



# BOHRERSTÄNDER

ab 8,<sup>60</sup>

Für 8 FG-Bohrer und 4 Winkelstückbohrer, 7,6 cm lang, 3,6 cm hoch, farbcodierter Kunststoff, autoklavierbar bis 121 °C, für Thermodesinfektor geeignet.

Farbe

blau	000 617
gelb	000 618
grün	000 619
1 Stck.	€ 10,70 € 9,50
ab 3 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 9,90 € 8,60

BIS ZU  
-20%



**M+W select RÖNTGEN-CHEMIKALIEN**

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Periomat und Velopex-Intra.

**Spar-Set:**  
Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)  
000 411 | 1 Pckg. | € 67,50  
€ 64,50



**64,50**

**M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN**

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt. Einfaches Entfernen der Hülle durch vertikales Öffnen.

Gr. 0, 22 x 35 mm, 100 Stck.  
100 420  
1 Pckg. | € 16,90  
€ 15,20

Gr. 2, 31 x 41 mm, 300 Stck.  
100 421  
1 Pckg. | € 33,50  
€ 30,10

Gr. 3, 27 x 54 mm, 100 Stck.  
100 422  
1 Pckg. | € 16,90  
€ 15,20




**ab 15,20**

**M+W select FILMTASCHEN 3x4**

Filmtaschen 3 x 4 cm, 50 Stck.  
043 405 | 1 Pckg. | € 46,90  
€ 44,50

Beschriftungskarten einzeln, 100 Stck.  
043 406 | 1 Pckg. | € 20,90  
€ 19,80

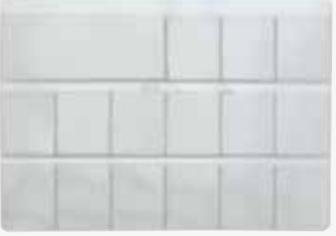

**44,50**

Klare Hartfolie, für max. 15 Filme, inkl. Beschriftungskarte. Zur Platzoptimierung wurde die Fensterstellung hochkant angeordnet.

**M+W select ENDLOSFILMTASCHEN**

Beschriftbare Folie für Filmformate 2 x 3 cm, 3 x 4 cm, 4 x 5 cm.  
200 Stck.  
043 461  
1 Pckg. | € 17,50  
€ 16,50



**16,50**

**M+W select AUGENSCHUTZSCHILD LIGHT**

Schutzschild für optimalen Schutz der Augenpartie gegen Staub, spritzende Flüssigkeiten und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht, daher angenehmer Tragekomfort. Reinigung mit Seifenlösung möglich.

je 1 Gestell dunkelblau, gelb, schwarz, pink, mint, 20 Schutzschilder  
100 079 | 1 Pckg. | € 29,90  
€ 25,40 **-15%**



**25,40**

**M+W select HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG**

Hygieneschutzhüllen für OPG-Aufbissstücke und Anlagensegmente.

500 Stck.:  
45 x 20 mm  
100 418  
1 Pckg. | € 34,90  
€ 31,40

40 x 85 mm  
100 419  
1 Pckg. | € 34,90  
€ 31,40



**31,40**

**M+W select SCHUTZBRILLE LIGHT**

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar. Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.

Bügel weiß/grün  
100 087 | 1 Pckg. | € 12,50  
€ 10,60

Bügel weiß/pink  
100 088 | 1 Pckg. | € 12,50  
€ 10,60



**10,60**

**-15%**

**M+W select SCHUTZSCHILD LIGHT**

Schutzschild für optimalen Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht für einen angenehmen Tragekomfort, einfache Reinigung mit einer Seifenlösung.

1 Gestell, 10 Gesichtsschutzschilder:

transparent  
100 076 | 1 Pckg. | € 27,50  
€ 23,30

pink transparent  
100 077 | 1 Pckg. | € 27,50  
€ 23,30

grün transparent  
100 078 | 1 Pckg. | € 27,50  
€ 23,30



**23,30**

**-15%**

**M+W select WURZELFÜLLER NEU**

Sterile Wurzelfüller mit Metallschaft für das Winkelstück.  
Empfohlene Drehzahl 300 – 600 rpm.

**8,40**

ISO	21 mm	25 mm
25	700 600	700 604
30	700 601	700 605
35	700 602	700 606
40	700 603	700 607
25-40	–	700 608
1 Pckg. à 4 Instrumente	<del>€ 9,90</del> € 8,40	<del>€ 9,90</del> € 8,40



**M+W select NERVNADELN NEU**

Sterile Nervnadeln.

**5,90**

Größe	21 mm
xxxxf	700 610
xxx f	700 611
xx f	700 612
x f	700 613
fein	700 614
mittel	700 615
stark	700 616
1 Pckg. à 10 Instrumente	<del>€ 6,95</del> € 5,90



**M+W select INLAY PINZETTE NEU**

Spezial Pinzette zum Einsetzen von Inlays aller Art, sowie zum Fassen von Einzelkronen und Matrizenbändern. Mit austauschbaren Kunststoffbacken.

16 cm  
600 600 | 1 Stck. | ~~€ 19,90~~  
€ 16,90

**16,90**



**SO BESTELLEN SIE BEI UNS:**

Rufen Sie uns an unter:  
**0 60 42 / 88 00 88**  
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr  
Fr 7.30 – 15.00 Uhr

App:  
**heja+**  
(Apple Store/Play Store)

Online via Web:  
**www.mwdental.de**  
**www.mwdental.at** (Österreich)

Freefax:  
**00 800 / 88 00 80 01**  
(Gültig für Deutschland und Österreich)

**UNSER SERVICE FÜR SIE:**

**Ruck-Zuck-Lieferservice**  
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



**Porto sparen**  
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:

@mwdentalgmbh

@mwdental\_de