

A-dec® 200

a dec®





Das Besondere an A-dec.

Die beste Möglichkeit herauszufinden, was für einen Stuhl und welches Arztelement ein Zahnarzt benötigt, ist nachzufragen. Das haben wir getan. Das Design von A-dec 200 spiegelt wider, wie Zahnarztteams arbeiten, und sorgt für mehr Effizienz in Ihrer Praxis. Jedes Element des A-dec 200 spiegelt Ihre Fähigkeiten und die Qualität Ihrer Arbeit wider.



Mit einer fünfjährigen Garantie.



Auf Beständigkeit ausgelegt.



Klares Licht. Echte Zuverlässigkeit. „Gut genug“ ist einfach nicht gut genug.
A-dec entwickelt und prüft unsere Leuchten, damit sie mindestens 20 Jahre halten.

Die Geräte müssen bereit sein, wenn Sie es auch sind. Deshalb sorgen wir bei A-dec beim Herstellungsprozess unserer Geräte dafür, dass Ärzte von uns Ausstattung von größter Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erhalten. So bauen und testen wir beispielsweise jeden Stuhlzylinder vom Rohmaterial bis zum fertigen Aufbau und statten ihn mit einer Garantielaufzeit von 10 Jahren aus. Wir stellen die Leitungen für unser Arztelement in höchster Qualität selbst her. Unsere Herstellungssysteme werden kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass sie die A-dec-Qualitätsstandards erfüllen. Mit der Lösung A-dec 200 entscheiden Sie sich für ein starkes, robustes System, das für einen dauerhaften Gebrauch über viele Jahre konzipiert wurde.



Auf Leistung ausgelegt.

Das A-dec 200-System ist nicht nur auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, sondern auch auf ein Mitwachsen und Weiterentwicklung im Einklang mit Ihrer Praxis. Spezielle Funktionen wie ein fleckabweisendes Speibecken, das sich zum Patienten hin drehen lässt, ein Teleskoparm für die Assistenteninstrumente für bequemen Zugriff sowie ein Touchpad, von dem aus Stuhl-, Leuchten- und Speibeckenfunktionen gesteuert werden können, tragen zu einem besseren Arbeitsablauf bei. Eine freie Plattform lässt genügend Raum für zukünftige Erweiterungen und Zusatzgeräte. Sie erhalten Spitzenleistung – jetzt sofort und für viele weitere Jahre.



- Leuchtenkopf mit drei Drehachsen für eine A-dec OP-Lampeneinstellung im genau richtigen Winkel für Sie und Ihre Patienten.
- Vier voreingestellte Stuhlpositionen bieten Ihnen zusätzliche Flexibilität bei der Positionierung des Patienten.
- Ausreichend Platz für Zusatzgeräte ermöglicht Ihnen das Hinzufügen neuer Geräte, wenn die Entwicklung Ihrer Praxis dies erforderlich macht.
- Die Armlehnen mit zwei Positionseinstellungen und das angepasste Sitzgelenk sorgen für mehr Komfort für den Patienten.
- Formgerechte Abdeckungen und auf ein Mindestmaß reduzierte Nähte unterstützen eine schnelle und leichte Reinigung.

Arztelement

Sorgen Sie dafür, dass alles, was Sie benötigen, in Reichweite ist. So erhöhen Sie Ihr Arbeitstempo.



A-dec 200



A-dec 300 Continental



A-dec 300 Traditional

Touchpad

Durch den schnellen Zugriff ist die Einstellung des Stuhls noch einfacher. Auch OP-Lampe und Speibecken können schnell eingestellt werden. Durch das optionale Deluxe-Touchpad können außerdem integrierte Geräte wie elektronische Motoren, Kameras und Schaber gesteuert werden.



Standard



Deluxe

Fußschalter

Scheiben-Fußschalter mit Spanbläser – oder neuer A-dec Fußschalter mit Hebel für ein präzises Regulieren der elektrischen und pneumatischen Handstücke.



Scheiben-Fußschalter mit Spanbläser



Fußschalter mit Hebel

OP-Leuchten

OP-Leuchten von A-dec bieten eine Beleuchtung mit Tageslicht für eine genaue Diagnosestellung, weniger Überanstrengung der Augen und einzigartige Ergonomie.



A-dec 200 Halogen



A-dec 300 LED



A-dec 500 LED

Monitorbefestigung

Der Monitor lässt sich zu Beratungs- oder Schulungszwecken einfach über dem Patienten befestigen.



A-dec 200 monitorhalter



A-dec 300 monitorhalter

Speibecken und Zusatzkonsole

Das Porzellan-Speibecken lässt sich in die ideale Position für den Patienten schwenken. Leicht zu befüllende Wasserflasche mit zwei Litern Fassungsvermögen sorgt durch mehrere Behandlungseinheiten hindurch für kontinuierliche Wasserversorgung. Die Zusatzkonsole bietet üppigen Stauraum für Zusatzgeräte wie Amalgamabscheider und Vakuumsysteme.



Speibecken und Zusatzkonsole

Assistenteninstrumente

Die Halterung mit drei Positionen und der Teleskoparm ermöglichen eine angenehme Positionierung der Vakuuminstrumente, sodass der Patient sich problemlos hinsetzen kann.



A-dec (Aluminium) mit Touchpad



Dürr (Polymer) ohne Touchpad

Nahtlose Polsterung

Die glatte, vakuumgeformte Polsterung ohne sichtbare Nähte erleichtert Reinigung und Pflege. Exakte Farbmuster und aktuelle Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem A-dec-Vertragshändler.



sky blue



indigo




sapphire



amethyst



lemongrass

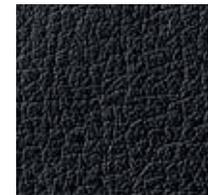

black



paprika



tawny

Technische Daten

A-dec 200 Behandlungsstuhl

Höhenbereich	381 mm bis 737 mm (15 Zoll bis 29 Zoll)
Flexible Rückenlehne	55 mm (2,25 Zoll), nahtlos
Antriebssystem	Hydraulischer Sockel und Schrägsockel
Sicherheits-Abschaltautomatik für Rückenlehne und Sockel	Ja, beendet die Bewegung nach unten, wenn Widerstand festgestellt wird
Kopfstütze	Doppelgelenk und verschiebbar (mit Knopf)
Armstütze	Schwenkbar
Integrierte 300-Watt-Stromversorgung	Ja
Touchpad oder Fußschalter	Optional
Befestigungsmöglichkeiten	Schwebend – Befestigung an 2-Zoll-Säule
Verschiedene Polsterungen	Nahtlos

Arztelemente

	A-dec 200	A-dec 300 Continental	A-dec 300 Traditional
Steuerblock	4 Positionen Standard	3 Positionen Standard, 4 Positionen optional	3 Positionen Standard, 4 Positionen optional
Umstellung auf Links-/Rechtsbetrieb	Ja	Ja	Ja
Schlauchoptionen	Vinyl oder Silikon	Vinyl oder Silikon	Vinyl oder Silikon
Positionen des Handstückhalters	4	4	4
Bremsgriff(e)	Nicht verfügbar	1 Standard, 2. optional	1 Standard, 2. optional
Touchpad-Optionen	Keines, Standard oder Deluxe	Keines, Standard oder Deluxe	Keines, Standard oder Deluxe
Intraorale Lichtquelle mit Vierfachspannung	Optional	Optional	Optional
Fußschalter	Scheibe mit Spanbläser oder Hebel	Scheibe, Scheibe mit Spanbläser oder Hebel	Scheibe, Scheibe mit Spanbläser oder Hebel
Armsystem	Ausbalancierter Flexarm	Ausbalancierter Flexarm mit Luftbremse A-dec 335 – Konsolenhalter	Ausbalancierter Flexarm mit Luftbremse A-dec 334 – Konsolenhalter





Wir schaffen langfristige Kundenbeziehungen.

A-dec hat seinen Hauptsitz in Newberg im US-Bundesstaat Oregon, doch unser Kundenstamm ist global – wir beliefern alle Kontinente außer Antarktika. Schulen und Institutionen in über 85 Ländern verlassen sich auf Geräte von A-dec, die täglicher Beanspruchung über Jahre hinweg standhalten. Mit A-dec erhalten Sie mehr als hochwertige Technik. Sie profitieren von umfassendem Service und Support noch lange nach dem Kauf und der Installation. Händler und Servicetechniker vor Ort stehen Ihnen bei Problemen zur Seite und ermöglichen reibungslose Arbeitsabläufe. Außerdem helfen wir Ihnen mit unserer über 50-jährigen Erfahrung beim Wachstum Ihrer Praxis. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben. Wir sind hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, weil wir bei A-dec nicht nur Geräte bauen. Wir schaffen auch langfristige Kundenbeziehungen.



A-dec Hauptniederlassung

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 innerhalb der USA/Kanadas
Tel: +1.503.538.7478 außerhalb der USA/Kanadas
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 innerhalb Australiens
Tel: +61.(0)2.8332.4000 außerhalb Australiens

A-dec China

Tel: 400.600.5434 innerhalb China
Tel: +86.571.89026088 außerhalb China

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.233285 innerhalb von GB
Tel: +44.(0).24.7635.0901 außerhalb von GB



Die Farben und Produkte in dieser Informationsbrochüre können von den tatsächlichen Farben und Materialien abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Exakte Farbmuster und aktuellste Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem A-dec-Vertragshändler.

Alle Marken in diesem Dokument sind markenrechtlich zugunsten von A-dec, seinen verbundenen Unternehmen und deren gemeinsamen Lieferanten in den USA und anderen Ländern geschützt.

© 2022 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten.
85.0093.03/E-only/4-21(2-22)/Rev E3